




Ново ниво на гласхибридната технология

Перфектно решение при подмяна на стари амалгамени възстановявания

Материалът може да бъде нанесен наведнъж и е лесен за компактизиране и контуриране. Отнема само 3'25" за да завършите възстановяването си!

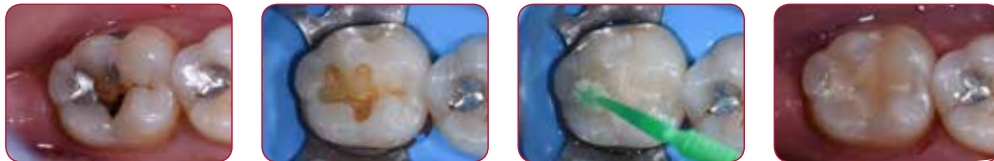

Предоставено от Dr. M Basso, Италия

Лесни дистални възстановявания само в няколко стъпки - без допълнителна излоация

Толерантността към влагата на EQUIA Forte HT позволява лесно възстановяване на дълбоки кавитети, дори когато не може да се постави кофердам. Употребата на секторна матрица допринася за дълготрайността на възстановяването.



Предоставено от Dr. Z Bilge Kütük, Турция

Възстановяване на чувствителни, хипоминарализирани МИХ зъби при млади пациенти

Химичната връзка на материала - еднаква и при нетретирани дентин - предлага устойчиво решение при случаи, в които връзката е компрометирана. Материалът се нанася лесно чрез частично ръчно премахване на кариеса, правейки го лесен за употреба и при хиперчувствителни пациенти.



Предоставено от Dr. P. Rouas, Франция

EQUIA Forte HT от GC

Възстановявания, които могат да преминат през поколенията



Истински едноетапно нанасящ се материал



Толерантен към влагата



Разширени индикации



Доказана дълготрайност

EQUIA Forte HT	
Въвеждаща опаковка	20 капсули (0.40 г) + 20 единични дози EQUIA Forte Coat 0.1 ml
Арт. номер	901554 901555 901556
Цвят	A2 A3 B2
Промо опаковка	100 капсули (0.40 г) + 1 бутилка EQUIA Forte Coat 4 ml
Арт. номер	901557 901558 901559 901560
Цвят	A2 A2-A3 A3 A3-B2
Клинична опаковка	200 капсули (0.40 г) + 1 бутилка EQUIA Forte Coat 4 ml
Арт. номер	901561 901562 901563
Цвят	A2 A3 B2
Опаковка асорт	50 капсули
Арт. номер	901572
Цвят	10 капсули от A2, A3, A3.5, B1, B3
Допълнително капсули	50 капсули
Арт. номер	901564 901565 901566 901567 901568 901569 901570 901571
Цвят	A1 A2 A3 A3.5 B1 B2 B3 C4



Допълнителна опаковка покритие	EQUIA Forte Coat
901573	GC EQUIA Forte Coat FlipCap, 4 ml бутилка
900960	GC EQUIA Forte Coat, 50 единични дози

EQUIA и EQUIA Forte са търговски марки на GC.
ChemFil Rock, Ketac Universal и Riva Self Cure не са търговски марки на GC.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеша" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
www.eeo.gceurope.com



Възстановявания,
които могат да преминат
през поколенията



EQUIA Forte™ HT
от GC

Нанасяща се наведнъж
гласхибридна
възстановителна система


EQUIA Forte HT от GC

Възстановявания, които могат да преминат през поколенията

Дълготрайните дистални възстановявания вече са лесни

През 2007, GC представи EQUIA, първата гласйонмерна система, която може да се използва като дълготрайно възстановяване при подложени на натоварване Клас II кавитети. Тази възстановителна система съчетава **високо вискозен гласйонмерен цимент с уникално защитно покритие**. От разработването ѝ редица клинични случаи **демонстрират** нейната **клинична ефикасност**, показвайки удовлетворителна дълготрайност до над 8 години*.

*Gurgan et al. 8-Year Clinical Evaluation of a Glass Ionomer Restorative System. J Dent Res. 2017; 96 Spec Issue B: #0287CED.

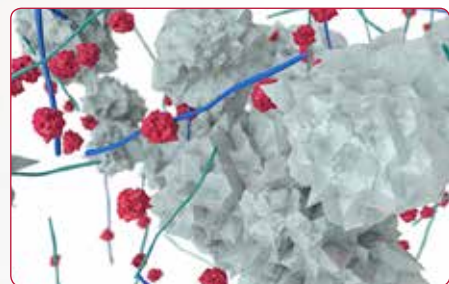

EQUIA Forte HT подобрена гласхбридна технология

- Повърхностно обработено стъкло FAS (Fluoro Alumino Silicate)
- Високо реактивно повърхностно обработено стъкло FAS
- Полиакрилна киселина с високо молекулно число
- Полиакрилна киселина

Отвежда гласхбридите на следващо ниво

При гласхбридите се използва смес от частици на пълнителя с различни размери. Здравината и манипулируемостта на **EQUIA Forte HT** са още по-подобрени чрез разработването на **интелигентен контрол на разпределението и взаимодействието** на стъклените частици. Резултатът? **По-здрав и незалепащ материал, перфектен за нанасяне наведнъж**, дори при Клас II възстановявания, подложени на натоварване*.

*Вижте техническото ръководство за препоръки по отношение на препаратията на кавитета.

Повишена трансlucentност

EQUIA Forte HT се развива още повече, притежавайки вече перфектно **адаптирана трансlucentност** за по-добре изглеждащи дистални възстановявания. **Рефракционният индекс** на матрикса беше адаптиран към този на пълнителите. Като резултат, окончателните възстановявания ще изглеждат **по-естествено и естетично**.




EQUIA Forte Fil
Цвят A2



EQUIA Forte HT Fil
Цвят A2

Здравина

Гласхбридната система предлага здравината на най-иновативните стъкла, заедно с износоустойчивостта на пълнителя. **Уникалната синергия между покритието и възстановителния материал** подобрява трайността и износоустойчивостта.

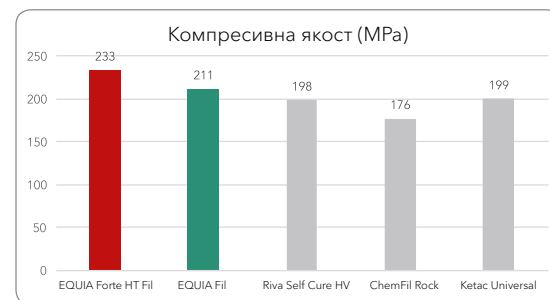

Източник: GC R&D, Япония, 2018. Налични данни.



Основни индикации на EQUIA Forte HT

Процес без усилие

EQUIA Forte HT е създаден да улесни и оптимизира ежедневната Ви ресторативна работа. Тъй като поставянето на кофердам и нанасянето на адхезив са излишни, възстановяването може да бъде завършено бързо. Това е материал, лесен за употреба, без да се компрометира дълготрайността.



Нанеси

Истински материал за едноетапно нанасяне
Удобна капсулна форма

Оформи

Удължено работно време
Лесен за контуриране
Незалепащ

Финирай

Втвърдяване след 2'30"

Покрий

Бляскава повърхност без полиране
Перфектно запечатване и износоустойчивост

Фотополимеризирай

Завършено само за 3'25"

След клинично изследване, проведено в цяла Европа, 98% от потребителите бяха удовлетворени от манипулирането на EQUIA Forte HT**

**Налични данни



EQUIA Forte HT е индициран при подложени на натоварване Клас II кавитети*.

Система, основаваща се на Лекота, Стабилност и Увереност!

Отлична биосъвместимост

EQUIA Forte HT може да се използва при техника на частично екскавиране на кариеса, за да се подготви **минимално инвазивна подготовка** (МИ). Тъй като не се използва ецване и системата разчита на химична адхезия, има намален риск от постоперативна чувствителност, което също го превръща в **надеждно лечебно решение**.



Предоставено от Dr. Z Bilge Kütük, Турция

EQUIA Forte HT -
най-добрият Ви партньор
при дисталните възстановявания.

Доказано дълготрайно

EQUIA Forte HT е надеждна система, основана на **12 годишен клиничен опит с EQUIA**.

Дълготрайността на дисталните EQUIA възстановявания е доказана от множество независими, дългосрочни клинични възстановявания¹⁻⁵. Базирайки се на отличния първоначален опит, се очаква гласхбридните системи EQUIA Forte и EQUIA Forte HT да дадат подобен резултат⁶.

- Gurgan et al. 8-Year Clinical Evaluation of a Glass Ionomer Restorative System. J Dent Res. 2017;96 Spec Issue B: #0287CED.
- Gurgan et al. Clinical performance of a glass ionomer restorative system: a 6-year evaluation. Clin Oral Investig. 2017;21(7):2335-2343. **EQUIA срещу композит**
- Türkün et al. A Prospective Six-Year Clinical Study Evaluating Reinforced Glass Ionomer Cements with Resin Coating on Posterior Teeth: Quo Vadis? Oper Dent. 2016;41(6):587-598. **EQUIA срещу Riva SC**
- Basso et al. 7 Years, Multicentre, Clinical Evaluation on 154 Permanent Restorations Made With a Glassionomer-based Restorative System. J Dent Res. 2016;95 Spec Issue B: #0446.
- Klinke T. et al. Clinical performance during 48 months of two current glass ionomer restorative systems with coatings: a randomized clinical trial in the field. Trials. 2016;17(1):239. doi: 10.1186/s13063-016-1339-8. **EQUIA срещу гласйонмер със стандартно покритие**
- Gurgan et al. 12-month Clinical-performance of a Glass-hybrid-restorative in Non-caries-cervical-lesions of Patients With Bruxism J Dent Res. 2018;97 Spec Issue A: #0235. **EQUIA Forte срещу композит**