

EQUIA Forte™ HT

Bulk fill glas hybride restauratief systeem

Kosteneffectief, duurzaam
restauratief systeem



Kosteneffectief, duurzaam restauratief alternatief

Voortbouwend op het succes van **EQUIA Forte**, is **EQUIA Forte HT** een kostenefficiënt, duurzaam restauratief alternatief met geoptimaliseerde mechanische eigenschappen, een optimale ionenuitwisseling en goede marginale afdichting. Dankzij de glashybridetechnologie, bestaande uit kleinere en zeer reactieve glasdeeltjes en langere polyacrylzuurketens, vertoont EQUIA Forte HT geavanceerde mechanische eigenschappen met geoptimaliseerde viscositeit, zonder kleverig aspect. Om het restauratiesysteem compleet te maken, beschermt de zelfhechtende coating, EQUIA Forte Coat, de restauratie tegen blootstelling aan zuren én helpt het na verloop van tijd een uitstekende slijtvastheid te behouden. Dit maakt **EQUIA Forte HT** tot een veelzijdig en duurzaam restauratief alternatief voor een breed scala aan indicaties, bij alle patiënten.

- Prestaties op lange termijn en kostenefficiëntie
- Uitstekende biocompatibiliteit
- Uw alternatief voor een breed scala aan indicaties




Uitstekende biocompatibiliteit

EQUIA Forte HT vertoont een sterke chemische hechting aan de tand en biedt een uitzonderlijke marginale afdichting. Isolatie is overbodig omdat de hechtsterkte niet wordt aangetast, zelfs niet in aanwezigheid van speeksel. Aangezien er geen etsmiddel wordt gebruikt, is er vrijwel geen postoperatieve gevoeligheid. Door de hydrofiele aard ervan en de thermische uitzettingscoëfficiënt die vergelijkbaar is met dentine, is het een uitstekend biocompatibel materiaal.


Sterk & duurzaam

Glashybridesystemen bieden de sterkte van het nieuwste innovatieve glas in combinatie met de slijtvastheid van een nanogevulde coating.


Dankzij de ionenuitwisselingscapaciteit voorkomen glashybridesystemen demineralisatie en bevorderen ze de remineralisatie van de tandstructuur.

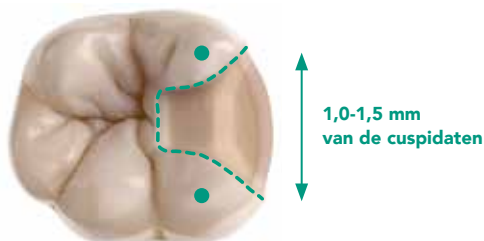

EQUIA Forte HT is geïndiceerd voor spanningsdragende caviteiten van klasse II.

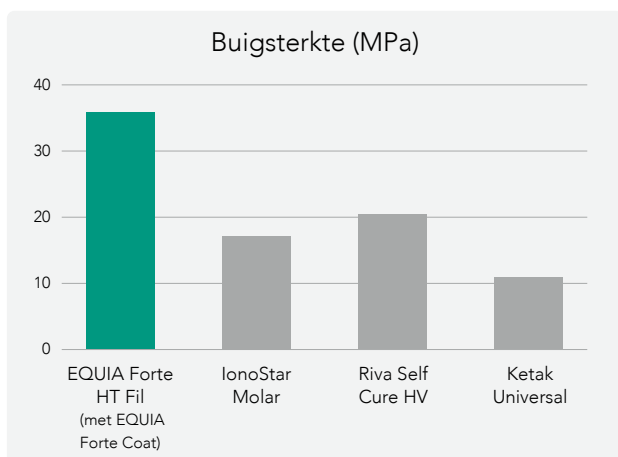

Bron: Prof. Marco Ferrari, Italië.

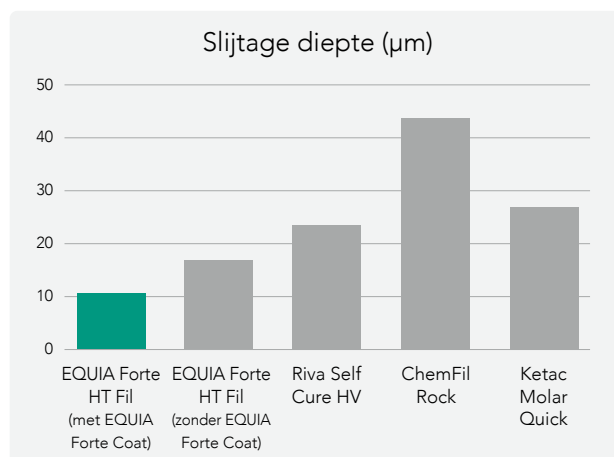

Bron: GC R&D, Japan, 2018

Prestaties en kosten-efficiëntie op lange termijn

EQUIA Forte HT is een betrouwbaar systeem gebaseerd op vijf jaar klinische ervaring met EQUIA Forte. Resultaten van een multicenter gerandomiseerde klinische studie tonen aan dat EQUIA Forte na vijf jaar even goed presteert als composiet, met een algemeen succespercentage van >95%².

Korte sessie, minder interventies nodig in de loop der jaren en vergelijkbare prestaties als composiet... deze kenmerken maken glashybriden tot een kostenefficiënt alternatief volgens verschillende onafhankelijke klinische onderzoeken op lange termijn.

>95%

Totaal succespercentage na 5 jaar.

Meer informatie




¹ Basso M et al. 7 Years, Multicenter, Clinical Evaluation on 154 Permanent Restorations Made with a Glass Ionomer-based Restorative System. J Dent Res Vol 95 (Spec Iss B):0446.

² Miletic I et al. Interim report, publication in preparation.

Milieuvriendelijk

EQUIA Forte HT-capsules zijn speciaal ontworpen omwille van de uitstekende kwaliteit van het product op lange termijn, en tegelijkertijd om het milieu te sparen. Met 25% minder plastic dan bij de concurrentie dragen de **EQUIA Forte HT**-capsules bij aan de vermindering van de CO₂-uitstoot.

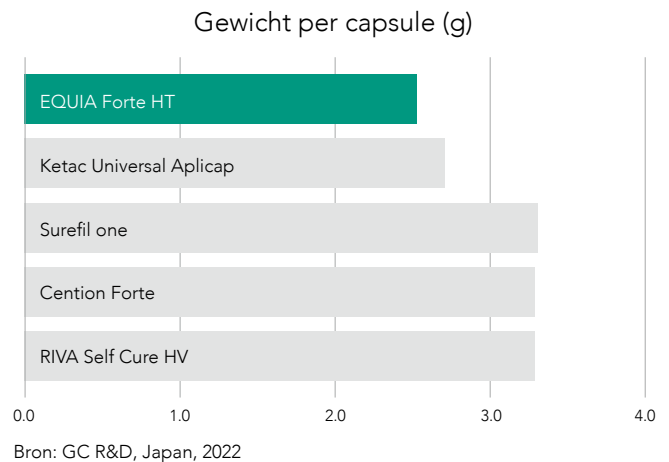

Snelle en eenvoudige bulkplaatsing

EQUIA Forte HT is geschikt voor partiële cariësexcavatie, om minimaal invasieve preparaties te creëren. Aangezien er niet wordt geëts en het systeem steunt op chemische adhesie, is er minder risico op postoperatieve gevoeligheid – waardoor het ook een veilige behandeloplossing is.

0'00"	0'10"	1'30	2'30"	3'00	3'05"	3'25"
Plaats Echte bulkvultechniek Gemakkelijke applicatie met capsules	Vorm Verlengde verwerkingstijd Eenvoudig te contouren Niet kleverig	Afwerking Uitharden in 2'30"	Coating Glanzend oppervlak zonder polijsten met verhoogde slijtvastheid en uitzonderlijke marginale afdichting	Uitharding met licht Afgewerkt resultaat in slechts 3'25"		

EQUIA Forte HT, uw beste applicatie voor restauraties in het posterieure gebied.



Met dank aan dr. Z Bilge Kütük, Turkije




Voornaamste indicaties voor EQUIA Forte HT

Uw alternatief voor een brede waaier aan indicaties!

Vervangen van amalgaam

Met dank aan dr. Victor Cedillo Felix, VS

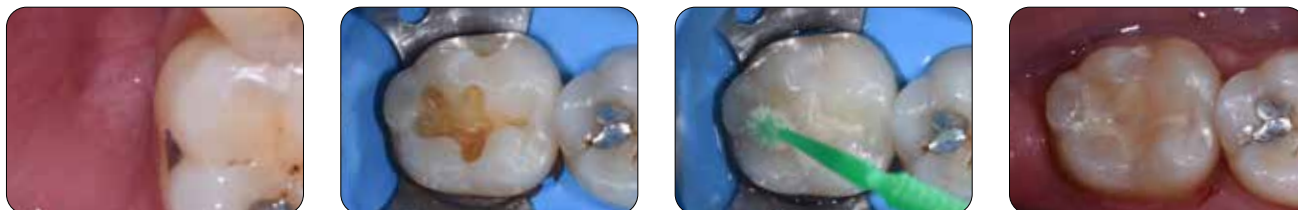

Patiënt met hoog cariësriscico

Met dank aan dr. Zeynep Bilge Kütük, Turkije



Restauratie van door MIH aangetaste tanden

Met dank aan dr. Patrick Rouas, Frankrijk



“Volgens de beschikbare onderzoekresultaten zijn glashybriden een uitstekend alternatief voor amalgaam.”

Prof. dr. Falk Schwendicke, Duitsland

“Met Equia Forte Coat wordt snel een glad oppervlak gecreëerd, waardoor de polijsttijd wordt verkort en patiënten direct na plaatsing kunnen bijten en kauwen.”

Prof. dr. Matteo Basso, Italië

EQUIA Forte™ HT

Bestelinformatie



EQUIA Forte HT Intro Pack

Bevat: 20 capsules + 20 eenheidsdosissen EQUIA Forte Coat (0,1 ml)

901574 A2 901575 A3 901576 B2

EQUIA Forte HT Fil Refill

Bevat: 50 capsules

901584 A1 901585 A2 901586 A3 901587 A3.5
901588 B1 901589 B2 901590 B3 901591 C4

EQUIA Forte HT Promo Pack

Bevat: 200 capsules + 1 flacon EQUIA Forte Coat (4 ml)

901577 A2 901578 A2-A3 901579 A3 901580 A3-B2

EQUIA Forte HT Clinic Pack

Bevat: 200 capsules + 1 flacon EQUIA Forte Coat (4 ml)

901581 A2 901582 A3 901583 B2

901592 **EQUIA Forte HT Assorted pack**

Bevat: 50 capsules: 10 capsules van elke kleur
A2, A3, A3.5, B1, B3

901593 **EQUIA Forte Coat Bottle Refill**

Bevat: Een flacon EQUIA Forte Coat (4 ml)

900959 **EQUIA Forte Coat Unit Dose Refill**

Bevat: 50 eenheidsdosissen EQUIA Forte Coat (0,1 ml)

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

Benelux Sales Department

Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/nl-NL>