

EQUIA Forte™ HT

Szklano-hybrydowy system odtwórczy typu bulk fill

Efektywna kosztowo, długoczasowa
alternatywa do wypełnień



Efektywna kosztowo, długoczasowa alternatywa do wypełnień

Bazując się na sukcesie EQUIA Forte, **EQUIA Forte HT** jest efektywną kosztowo, długoczasową alternatywą do wypełnień o ulepszonych właściwościach mechanicznych, optymalnej wymianie jonowej i doskonałej szczelności brzeżnej. Dzięki technologii szklanej hybrydy, łączącej zastosowanie mniejszych i wysoce reaktywnych cząstek szkła oraz kwasu poliakrylowego o dłuższych łańcuchach, **EQUIA Forte HT** wykazuje udoskonalone właściwości mechaniczne oraz lepszą płynność i brak kleistości. Dopełnieniem systemu odtwórczego jest samoadhezyjna żywica EQUIA Forte Coat, która chroni uzupełnienie przed działaniem kwasów i pomaga utrzymać doskonałą odporność na zużycie w czasie. To sprawia, że **EQUIA Forte HT** jest wszechstronną i trwałą alternatywą dla szerokiego zakresu wskazań u wszystkich pacjentów.

- Długoczasowa wydajność i efektywność kosztowa
- Doskonała biokompatybilność
- Niezawodna alternatywa do szerokiego zakresu wskazań




Doskonała biokompatybilność

EQUIA Forte HT wykazuje silne wiązanie chemiczne z zębem, zapewniając wyjątkową szczelność brzeżną. Izolacja nie jest konieczna, gdyż siła wiązania nie jest zagrożona nawet w obecności śliny. Ponieważ nie stosuje się wytrawiacza, nie występuje praktycznie żadna nadwrażliwość pozabiegowa. Ze względu na hydrofilowy charakter i współczynnik rozszerzalności termicznej zbliżony do zębiny, jest to doskonały materiał biomimetyczny.


Mocny i trwały

Systemy szklano-hybrydowe zapewniają wytrzymałość najnowszych innowacyjnych szkielew w połączeniu z odpornością na zużycie powłoki pokrywającej zawierającej wypełniacz. Unikalna synergia pomiędzy powłoką a materiałem odtwórczym zwiększa trwałość i odporność na zużycie uzupełnień¹.


Dzięki zdolności wymiany jonowej, systemy szklano-hybrydowe zapobiegają demineralizacji i wspomagają remineralizację struktury zęba.

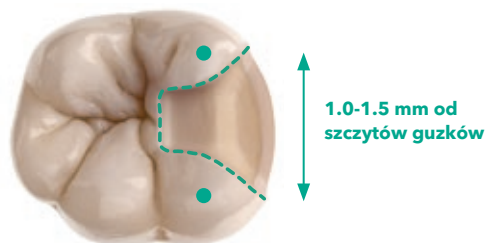

EQUIA Forte HT jest wskazana do wypełnień narażonych na przeciężenia zgryzowe ubytków klasy II.

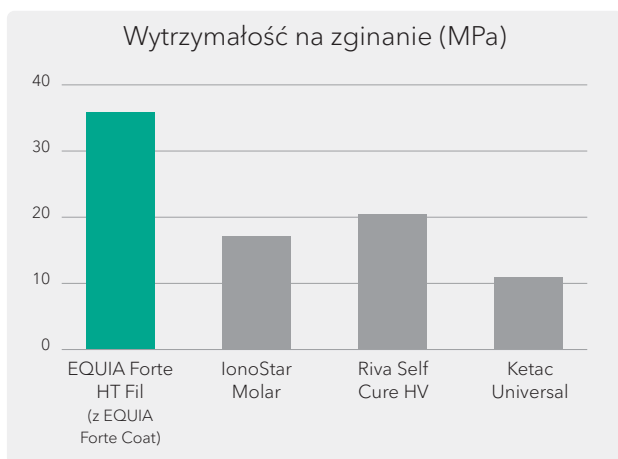

Źródło: Prof. Marco Ferrari, Włochy.

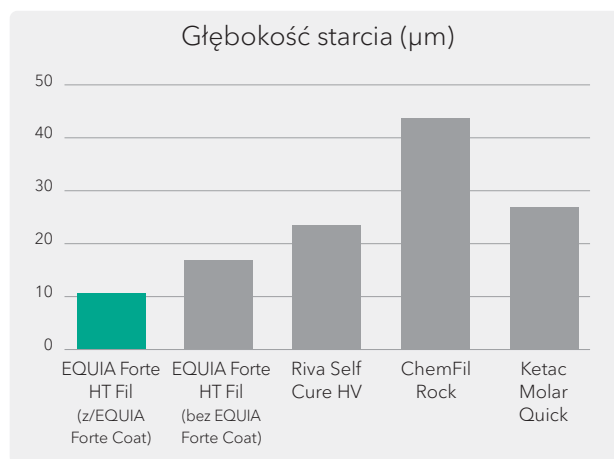

Źródło: GC R&D, Japonia, 2018. Dane dostępne na życzenie.

Długoczasowa wydajność i efektywność kosztowa

EQUIA Forte HT to niezawodny system oparty na 5-letnim doświadczeniu klinicznym z EQUIA Forte. Wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego badania klinicznego pokazują, że po 5 latach EQUIA Forte wykazuje taką samą skuteczność kliniczną jak materiał kompozytowy, a ogólny wskaźnik skuteczności klinicznej wynosi >95%².

Krótką procedurą, mniej interwencji potrzebnych na przestrzeni lat i podobną, jak w przypadku materiałów kompozytowych wydajność, te cechy, zgodnie z wynikami kilku niezależnych, długoterminowych badań klinicznych sprawiają, że szklane hybrydy są efektywną kosztowo alternatywą do wypełnień.

>95%

Wskaźnik skuteczności klinicznej po 5 latach.

Dowiedz się więcej



¹ Basso M et al. 7 Years, Multicenter, Clinical Evaluation on 154 Permanent Restorations Made with a Glass Ionomer-based Restorative System. J Dent Res Vol 95 (Spec Iss B):0446.


² Miletic I et al. Interim report, publication in preparation.

Przyjazny dla środowiska

Kapsułki **EQUIA Forte HT** zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić wyjątkową jakość produktu przy jednoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko. Dzięki zastosowaniu mniejszej o 25% ilości plastiku w porównaniu do kapsułek firm konkurencyjnych, kapsułki **EQUIA Forte HT** przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO₂.



Waga pojedynczej kapsułki (g)

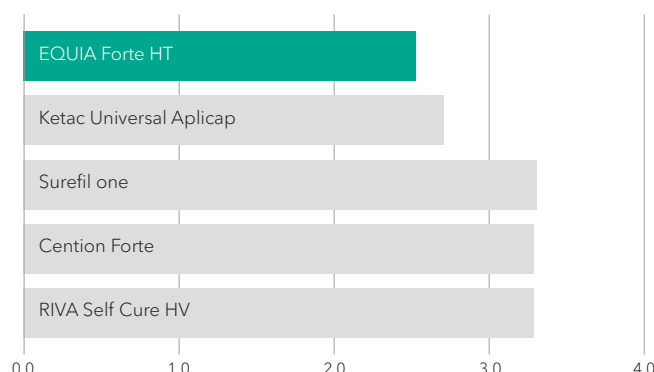

Źródło: GC R&D, Japonia, 2018. Dane dostępne na życzenie.

Szybka i łatwa aplikacja typu bulk

EQUIA Forte HT może być stosowana w technice stopniowego usuwania próchnicy w celu uzyskania minimalnie inwazyjnych preparacji. Ponieważ nie stosuje się wytrawiania, a system opiera się na adhezji chemicznej, istnieje mniejsze ryzyko nadwrażliwości pozabiegowej - co również czyni go bezpiecznym rozwiązaniem terapeutycznym.



Aplikacja
Prawdziwa technika typu bulk-fill
Wygodna forma kapsułek

Kształtowanie
Dłuższy czas pracy
Łatwe konturowanie
Nie klei się

Wykańczanie
Wiązanie ukończone po 2'30''

Powlekanie
Lśniąca powierzchnia bez polerowania o zwiększonej odporności na ścieranie i wyjątkowej szczelności brzeżnej

Utwardzanie światłem
Odbudowa zakończona w ciągu zaledwie 3'25''

EQUIA Forte HT, Twój najlepszy partner przy odbudowie zębów bocznych.



Dzięki uprzejmości Dr Z Bilge Kütük, Turcja




Główne wskazania dla EQUIA Forte HT

Niezawodna alternatywa do szerokiego zakresu wskazań!


Odbudowa po usunięciu amalgamatu

Dzięki uprzejmości Dr Victor Cedillo Felix, USA

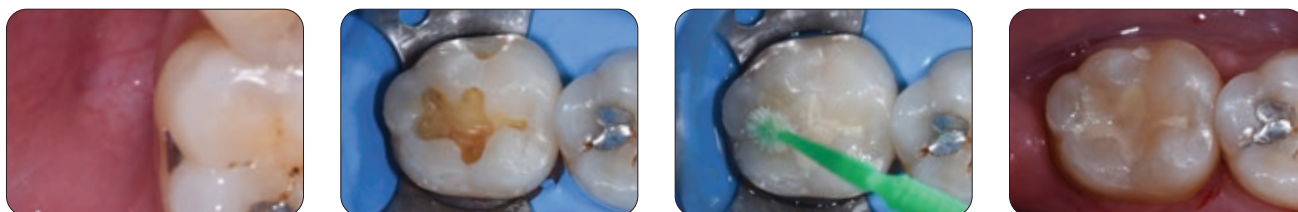

Pacjent z wysokim ryzykiem próchnicy

Dzięki uprzejmości Dr Zeynep Bilge Kütük, Turcja

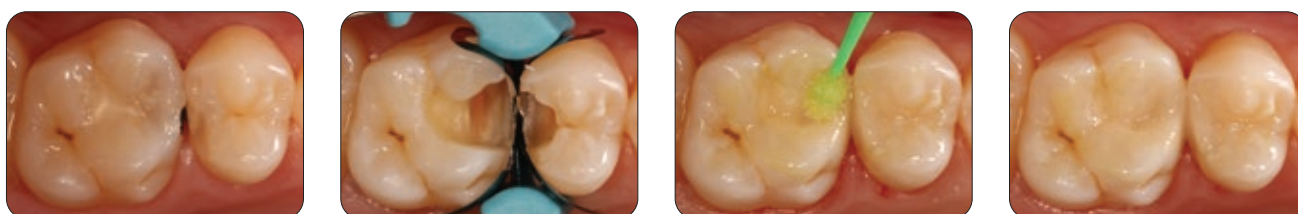

Odbudowa zębów dotkniętych MIH

Dzięki uprzejmości Dr Patrick Rouas, Francja



„W oparciu o istniejące dowody, szklane hybrydy prawdopodobnie są odpowiednią alternatywą do amalgamatu.”

Prof. Dr Falk Schwendicke, Niemcy

„Dzięki EQUIA Forte Coat szybko uzyskuje się gładką powierzchnię, skracając czas polerowania i umożliwiając pacjentom gryzienie i żucie natychmiast po założeniu.”

Prof. Dr Matteo Basso, Włochy

EQUIA Forte™ HT

Informacje dotyczące zamawiania



EQUIA Forte HT Intro Pack

Zawiera: 20 kapsułek + 20 jednostkowych dawek EQUIA Forte Coat (0,1 ml)

901554 A2 901555 A3 901556 B2

EQUIA Forte HT Fil Refill

Zawiera: 50 kapsułek

901564 A1 901565 A2 901566 A3 901567 A3.5
901568 B1 901569 B2 901570 B3 901571 C4

EQUIA Forte HT Promo Pack

Zawiera: 100 kapsułek + 1 butelkę EQUIA Forte Coat (4 ml)

901557 A2 901558 A2-A3 901559 A3 901560 A3-B2

EQUIA Forte HT Clinic Pack

Zawiera: 200 kapsułek + 1 butelkę EQUIA Forte Coat (4 ml)

901561 A2 901562 A3 901563 B2

901572 **EQUIA Forte HT Assorted pack**

Zawiera: 50 kapsułek: po 10 kapsułek z odcieni:
A2, A3, A3.5, B1, B3

901573 **EQUIA Forte Coat Bottle Refill**

Zawiera: jedną butelkę EQUIA Forte Coat (4 ml)

900960 **EQUIA Forte Coat Unit Dose Refill**

Zawiera: 50 jednostkowych dawek EQUIA Forte Coat (0,1 ml)

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark, Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

Przedstawicielstwo w Polsce
ul. W. Tetmajera 65D/2
PL - 31-352 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.312.52.08
info.poland@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/pl-PL>