

EQUIA Forte™ HT

Bulk fillový sklohybridný výplňový systém

Cenovo výhodná, trvácna
alternatíva výplňového systému



Cenovo výhodná, trvácna alternatíva výplňového systému

EQUIA Forte HT, ktorá vychádza z úspechu EQUIA Forte, je cenovo výhodná, trvácna alternatíva výplňového systému so zlepšenými mechanickými vlastnosťami, optimálnou iónovou výmenou a trvalým marginálnym tesnením. Vďaka technológii Sklo Hybrid, pozostávajúcej z menších a vysoko reaktívnych sklenených častíc a dlhších reťazcov kyseliny polyakrylovej, **EQUIA Forte HT** vykazuje pokročilé vlastnosti so zlepšeným zatekaním a nelepivou manipuláciou. Na dokončenie výplňového systému, samoadhezívny živcový ochranný lak EQUIA Forte Coat, chráni výplň pred vystavením kyselinám a pomáha udržiavať vynikajúcu odolnosť proti opotrebovaniu v priebehu času. To robí z **EQUIA Forte HT** všestrannú a trvácnu alternatívu výplňového systému pre široké spektrum indikácií u všetkých pacientov.


- Dlhodobá účinnosť a cenová výhodnosť
- Vynikajúca biokompatibilita
- Vaša alternatíva pre široké spektrum použitia




EQUIA Forte Coat

Nano-plnený samoadhezívny živcový ochranný lak **EQUIA Forte Coat**, ktorý funguje v synergii s EQUIA Forte HT Fill, obsahuje GC technológie s jednotným rozptýlením nanoplňa a vystuženou živcou, ktoré poskytujú vysokú odolnosť proti opotrebovaniu a dokážu v priebehu niekoľkých sekúnd vytvoriť hladký a lesklý povrch.

- Pevnosť a tvrdosť
- Odolnosť proti opotrebovaniu
- Hladký a jemný povrch

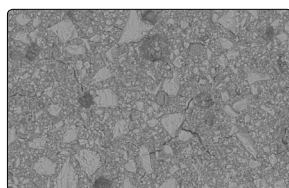

EQUIA Forte HT Fill
bez laku*

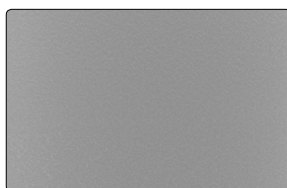

EQUIA Forte HT Fill
s použitím laku*




* Obrázky pod mikroskopom EQUIA Forte HT Fill výplň
Zväčšenie: X1000 Zdroj: GCC R&D Data. Údaje v archíve, GC Corporation, Tokio, 2020

Pevný & trvácny


Sklohybridné systémy ponúkajú pevnosť najnovších inovatívnych skloionomérov v kombinácii s odolnosťou proti opotrebovaniu nano-plneného ochranného laku. Jedinečná synergia medzi ochranným lakom a výplňovým materiálom zlepšuje trvanlivosť a odolnosť výplní proti opotrebovaniu.¹

Vďaka kapacite výmeny iónov, hybridné systémy Sklo hybrid, zabraňujú demineralizácii a podporujú remineralizáciu štruktúry zubov.

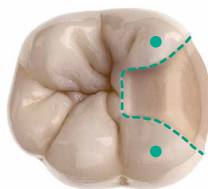


1.0-1.5 mm
od vrcholov hrbolkov

EQUIA Forte HT je indikovaná pre zaťažované kavity II. triedy.

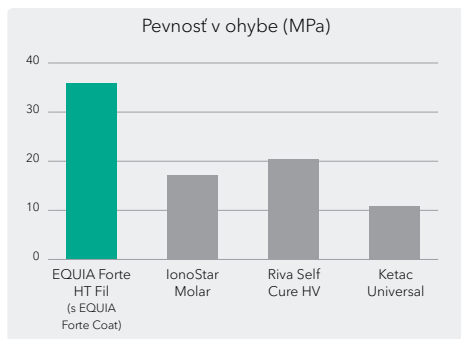

Zdroj: Prof. Marco Ferrari, Taliansko

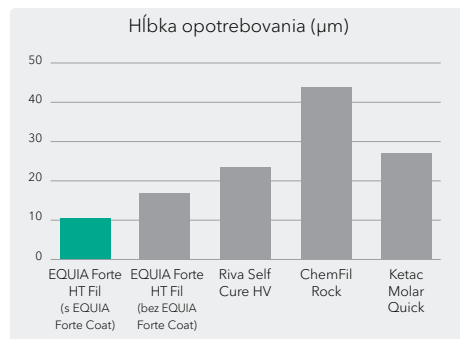

Zdroj: GC R&D, Japonsko, 2018, Údaje v archíve

Dlhodobá účinnosť a cenová výhodnosť

EQUIA Forte HT je spoľahlivý systém založený na 5-ročných klinických skúsenostiach s EQUIA Forte. Výsledky dlhodobých nezávislých klinických štúdií ukazujú, že EQUIA Forte **funguje rovnako dobre ako kompozit, úspešnosť výdrže výplní po 5. rokoch je 94.5%**.

Krátky čas pacienta strávený v kresle, menej potrebných ošetrení v priebehu rokov a podobná výdrž ako živicové kompozity, tieto vlastnosti robia zo systému Sklo Hybrid cenovo výhodnú alternatívu, na základe údajov získaných z niekoľkých dlhodobých nezávislých klinických štúdií.



Úspešnosť výdrže
po 5. rokoch

Zisti viac



¹ Basso M et al. 7 Years, Multicenter, Clinical Evaluation on 154 Permanent Restorations Made with a Glass Ionomer-based Restorative System. J Dent Res Vol 95 (Spec Iss B):0446.

² Miletic I, et al. Five-year Performance of Glass-Hybrid and Nano-Hybrid Restoratives: Multi-Centre Clinical Trial. J Dent Res Vol 102 (Spec Iss C): 0363

Ekologický

GC kapslové obaly prispievajú k zníženiu množstva emisií CO₂ a umožňujú lekárom prispieť k zelenej stomatológii, keďže sú vyrobené s o 25% nižším množstvom plastu ako je to v prípade konkurencie. "Equia Forte HT Fill kapslový obal má menšiu celkovú hmotnosť ako ostatné produkty (...), čo z neho robí najvýhodnejšie balenie." *DA



Zisti viac



**DA DENTAL
ADVISOR™**
Product insights you can trust.

Jednoduchá & rýchla aplikácia

EQUIA Forte HT sa môže použiť pri technike čiastočnej exkavácie zubného kazu na vytvorenie minimálnej invazívnej preparácie. Keďže sa nepoužíva leptanie a systém využíva chemickú adhéziu, existuje menšie riziko postoperatívnej citlivosti - ide teda o bezpečné riešenie ošetrovania zuba.



Aplikácia

Skutočná bulk-fillová technika
Konvenčné kapslové balenie

Vytvarovanie

Dlhší pracovný čas
Jednoduché kontúrovanie
Nelepivý

Dokončenie

Tuhnutie po 2'30"


Nanesenie laku

Lesklý povrch bez leštenia
so zvýšenou odolnosťou
proti opotrebovaniu
a dokonalé priľnutie

Svetelná

polymerizácia laku
Hotové už o 3'25"

EQUIA Forte HT, Váš najlepší partner pre posteriórne výplne

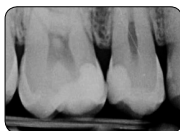

S láskavým dovolením Dr. Zeynep Bilge Kütük, Turecko

Hlavné indikácie pre EQUIA Forte HT


Vynikajúca biokompatibilita

EQUIA Forte HT prejavuje silnú chemickú väzbu k zubu a zabezpečuje výnimočné tesnenie okrajov. Izolácia nie je nutná, pretože pevnosť väzby nie je narušená ani prítomnosťou slín. Keďže sa nepoužíva žiadne leptadlo, citlivosť po zákroku prakticky neexistuje. Vďaka svojim hydrofilným vlastnostiam a koeficientu tepelnej rozťažnosti podobný dentínu, je vynikajúcim biokompatibilným materiálom.

Vaša alternatíva v rôznych situáciách!


Náhrada amalgámu

S láskavým dovolením Dr. Victor Cedillo Felix, USA

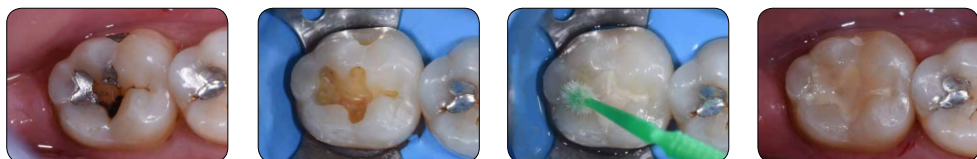

Pacient s vysokým rizikom vzniku zubného kazu

S láskavým dovolením Dr. Zeynep Bilge Kütük, Turecko

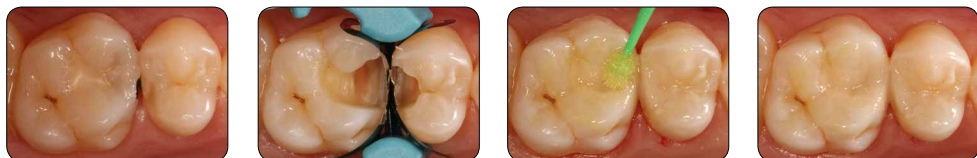

Výplne citlivých hypomineralizovaných zubov s molárovou a rezákovou hypomineralizáciou (MIH)

S láskavým dovolením Dr. Patrick Rouas, Francúzsko



“Na základe existujúcich dôkazov, systém Glass Hybrids je vhodnou náhradou amalgámu.”

Prof. Dr. Falk Schwendicke, Nemecko

“S EQUIA Forte Coat sa rýchlo vytvorí hladký povrch, čo skracuje čas leštenia a umožňuje pacientovi hrýzť a žuť hneď po aplikácii.”

Prof. Dr. Matteo Basso, Taliansko

EQUIA Forte HT

Informácie k objednávaniu



EQUIA Forte HT Intro Pack (Uvádzacie balenie)

Obsahuje: 20 kapslí + 20 unit doses (jednotkové balenie) laku EQUIA Forte Coat (0,1 ml)

10004933 A2 10004808 A3 10004865 B2

EQUIA Forte HT Fil Refill (Náhradné balenie)

Obsahuje: 50 kapslí

10004781 A1 10004859 A2 10004861 A3 10004959 A3.5
10004880 B1 10004923 B2 10004843 B3 10004803 C4

EQUIA Forte HT Promo Pack (Promo balenie)

Obsahuje: 100 kapslí + 1 fľaštičku EQUIA Forte Coat (4 ml)

10004851 A2 10004882 A2-A3 10004845 A3 10004884 A3-B2

EQUIA Forte HT Clinic Pack (Klinické balenie)

Obsahuje: 200 kapslí + 1 fľaštička EQUIA Forte Coat (4 ml)

10004903 A2 10004862 A3 10004890 B2

10004883 EQUIA Forte HT Assorted pack (Sortimentné balenie)

Obsahuje: 50 kapslí z každého odtieňa

A2, A3, A3.5, B1, B3

10004849 EQUIA Forte Coat Bottle Refill (Náhradná fľaštička)

Obsahuje: 1 fľaštičku EQUIA Forte Coat (4 ml)

10003514 EQUIA Forte Coat Unit Dose Refill (Jednotkové balenie)

Obsahuje: 50 unit doses EQUIA Forte Coat (0,1 ml)

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovakia
Raková 1441
SK - 023 51 Raková / Čadca
Tel. +421.911.570.999
Fax. +421.414.000.264
info.slovakia@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sk-SK>

EQUIA Forte HT je ochranná známka spoločnosti GC.

Ketac Universal, Ketac Molar Quick, IonoStar Molar, ChemFil Rock a Riva Self Cure nie sú ochranné známky spoločnosti GC.