

EQUIA Forte™ HT

Steklohibridni restavracijski sistem za bulk fill tehniko

Stroškovno učinkovita,
dolgotrajna restavracijska rešitev



Stroškovno učinkovita, dolgotrajna restavracijska rešitev

Po nadvse uspešni liniji EQUIA Forte podjetje GC predstavlja **EQUIA Forte HT**, stroškovno učinkovito, dolgotrajno alternativo za izdelavo restavracij z izboljšanimi mehanskimi lastnostmi, ki omogoča optimalno izmenjavo ionov in odlično zatesnitev margin. Zahvaljujoč steklohibridni tehnologiji, ki vsebuje manjše in visoko reaktivne steklene delce ter daljše poliakrilne kislinske verige, **EQUIO Forte HT** odlikujejo napredne mehanske značilnosti z izboljšano viskoznostjo, ki omogočajo lažje rokovanje. Restavracijski sistem dopolnjuje samoadhezivni smolnati premaz EQUIA Forte Coat, ki zaščiti restavracijo pred izpostavljenostjo kislinam in pomaga ohranjati odpornost na obrabo. Prav zato je **EQUIA Forte HT** vsestranska in trajna restavracijska rešitev za širok nabor indikacij pri vseh pacientih.


- Dolgoročna obstojnost in stroškovna učinkovitost
- Odlična biokompatibilnost
- Izvrstna rešitev za širok nabor situacij




EQUIA Forte Coat

Skupaj z EQUIO Forte HT Fill uporabimo nano-polnjeni, samoadhezivni smolnati premaz **EQUIA Forte COAT**, ki vsebuje GC-jev disperzijski nanofiler in tehnologije ojačane smole, zaradi česar so restavracije v samo nekaj sekundah izredno odporne na obrabo, na dotik pa gladke in svetleče.

- Moč in trdnost
- Odpornost na obrabo
- Gladka in svetleča površina

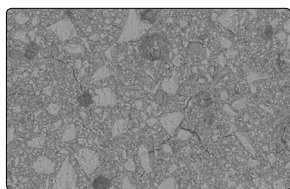

EQUIA Forte HT Fill
brez uporabe Coata*

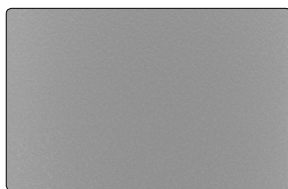

EQUIA Forte HT Fill
s Coatom*




* Fotografije restavracije z EQUIA Forte HT Fill pod mikroskopom
Povečava: X1000 Vir: GCC raziskave in razvoj. Podatki v dokumentaciji, Korporacija GC, Tokio, 2020


Močan in dolgotrajen

Steklohibridni sistemi omogočajo čvrstost najnovejših inovativnih steklastih materialov v kombinaciji z odpornim nano premazom. Unikatna sinergija med premazom in restavracijskim materialom izboljša trajnost restavracij in odpornost na obrabo¹.


Z zmožnostjo izmenjave ionov steklohibridni sistemi preprečujejo demineralizacijo in spodbujajo remineralizacijo zobnih struktur.

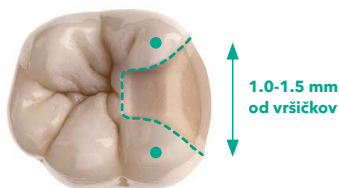

EQUIA Forte HT je indiciran za II razrede pod okluzijsko obremenitvijo.

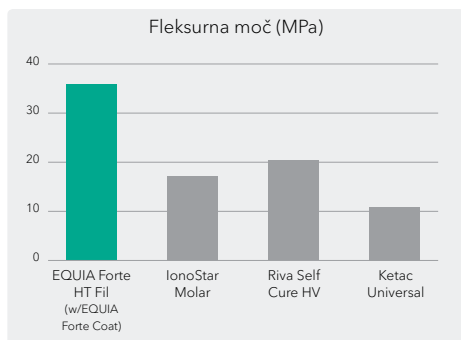

Vir: Prof. Marco Ferrari, Italija.

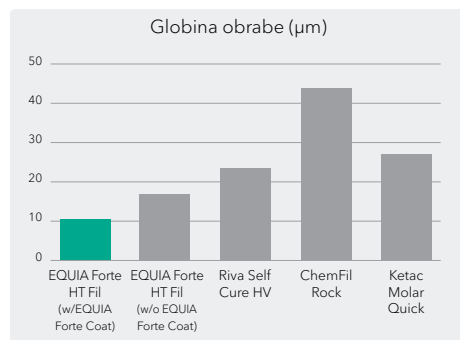

Vir: GC raziskave in razvoj, Japonska, 2018, podatki v dokumentaciji.

Dolgotrajnost in stroškovna učinkovitost

EQUIA Forte HT je zanesljiv sistem, ki temelji na 5 letnih kliničnih izkušenj z EQUIO Forte. Rezultati razpršene randomizirane klinične študije so pokazali, da se po **petih letih EQUIA Forte obnaša enako dobro kot kompoziti, s stopnjo preživelosti 94.5%**².

Zaradi krajšega časa zdravljenja, manj potrebnih intervencij skozi čas in podobne kakovosti kot pri smolnatih kompozitih so steklohibridi stroškovno učinkovita rešitev, kar dokazujejo različne neodvisne dolgotrajne klinične študije.



Stopnja preživelosti po 5 letih

Izvedite več



¹ Basso M et al. 7 Years, Multicenter, Clinical Evaluation on 154 Permanent Restorations Made with a Glass Ionomer-based Restorative System. J Dent Res Vol 95 (Spec Iss B):0446.

² Miletic I, et al. Five-year Performance of Glass-Hybrid and Nano-Hybrid Restoratives: Multi-Centre Clinical Trial. J Dent Res Vol 102 (Spec Iss C): 0363

Okolju prijazen

GC-jeve kapsule vsebujejo 25 % manjšo količino plastike kot konkurenčni materiali, s čimer prispevamo k zmanjševanju ogljičnega odtisa in spodbujamo zobozdravnike k zelenemu zobozdravstvu. Dental Advisor je zapisal, da ima »pakiranje kapsul Equia Forte HT Fil manjšo skupno maso od ostalih izdelkov (...) zaradi česar ima najučinkovitejše pakiranje.«^{DA}



Izvedite več




**DA DENTAL
ADVISOR**
Product insights you can trust.

Hitro in enostavno nanašanje bulka

EQUIA Forte HT lahko uporabite pri tehniki delne ekskavacije kariesa za ustvarjanje minimalno invazivnih preparacij. Ker pri tem ne uporabljamo jedkanja in se sistem zanaša na kemijsko adhezijo, je manjše tveganje za po-operativno občutljivost, kar predstavlja večjo varnost za pacienta.

0'00"	0'10"	1'30	2'30"	3'00	3'05"	3'25"
Nanašanje Bulk-fill tehnika Priročno nanašanje v kapsulah	Oblikovanje Podaljšan delovni čas Enostavno konturiranje Nelepljiv	Dokončanje Strdi se v 2'30"	Coat Sijoča površina brez poliranja s povečano odpornostjo na obrabo in izvrstnim tesnjenjem na marginah	Svetlobno presvetljevanje Končano v le 3'25"		

EQUIA Forte HT, vaš najboljši partner za posterioorne restavracije.

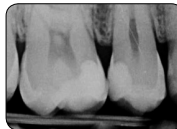

Z dovoljenjem Dr. Zeynep Bilge Kütük, Turčija

Glavne indikacije za EQUIA Forte HT


Izvrstna biokompatibilnost

EQUIA Forte HT se močno kemično veže na zob in omogoča izvrstno tesnjenje na marginah. Izolacija ni potrebna, saj prisotnost sline ne vpliva na moč vezave. Ker uporaba jedkanja ni potrebna, ne prihaja do po-operative občutljivosti. Zaradi hidrofilne narave in koeficienta termalne ekspanzije, ki je zelo podoben kot pri dentinu, je to odličen biokompatibilen material.

Vaša rešitev za širok nabor situacij!


Zamenjava amalgama

Z dovoljenjem Dr. Victor Cedillo Felix, ZDA

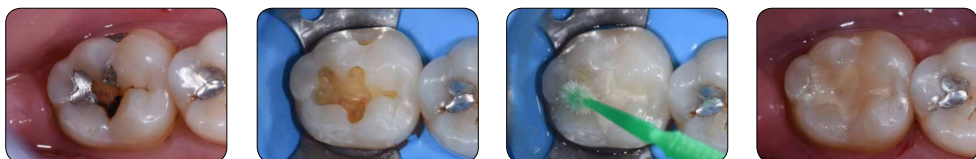

Pacient z visokim tveganjem za karies

Z dovoljenjem Dr. Zeynep Bilge Kütük, Turčija

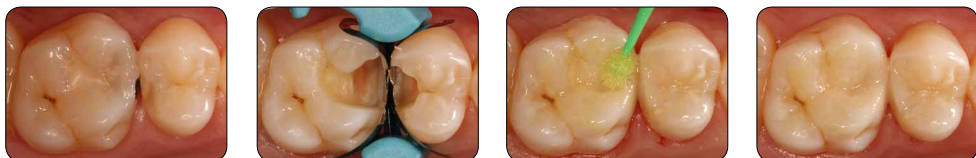

Restavracija zob, prizadetih zaradi hipomineralizacije

Z dovoljenjem Dr. Patrick Rouas, Francija



“Sodeč po trenutnih dokazih so steklohibridi povsem smiselna alternativa za amalgam.”

Prof. Dr. Falk Schwendicke, Nemčija

“Z EQUIA Forte COAT hitro ustvarimo gladko površino, zmanjšamo čas poliranja in pacientu omogočimo, da žveči in grize takoj po posegu.”

Prof. Dr. Matteo Basso, Italija

EQUIA Forte HT

Informacije za naročanje



EQUIA Forte HT Intro Pack

Vsebuje: 20 kapsul + 20 doz EQUIA Forte Coat (0,1 ml)

10004933 A2 10004808 A3 10004865 B2

EQUIA Forte HT Fil Refill

Vsebuje: 50 kapsul

10004781 A1 10004859 A2 10004861 A3 10004959 A3.5
10004880 B1 10004923 B2 10004843 B3 10004803 C4

EQUIA Forte HT Promo Pack

Vsebuje: 100 kapsul + 1 stekleničko EQUIA Forte Coat (4 ml)

10004851 A2 10004882 A2-A3 10004845 A3 10004884 A3-B2

EQUIA Forte HT Clinic Pack

Vsebuje: 200 kapsul + 1 stekleničko EQUIA Forte Coat (4 ml)

10004903 A2 10004862 A3 10004890 B2

10004883 EQUIA Forte HT Assorted pack

Vsebuje: 50 kapsul: 10 kapsul v vsakem odtenku

A2, A3, A3.5, B1, B3

10004849 EQUIA Forte Coat Bottle Refill

Vsebuje: eno stekleničko EQUIA Forte Coat (4 ml)

10003514 EQUIA Forte Coat Unit Dose Refill

Vsebuje: 50 doz EQUIA Forte Coat (0,1 ml)

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sl-SI>

EQUIA Forte HT je izdelek blagovne znamke GC.

Ketac Universal, Ketac Molar Quick, IonoStar Molar, ChemFil Rock, Surefil one, Cention Forte in Riva Self Cure niso izdelki blagovne znamke GC.