

Tilbage til den
essentielle æstetik



Essentia™
fra GC

Åbn døren til
forenkling

Følg din intuition

GC

Kan det være nemmere?

Æstetiske restaureringer er ofte associeret med kompleks lagteknik. Efter flere års udvikling, baseret på de **bedste kliniske æstetiske erfaringer**, introducerer GC nu et paradigmeskift i restorativ tandpleje, med et **innovativt og frækt farvekoncept**. Essentia repræsenterer den rene essens af komposit lagteknik. Med kun 7 farver, har du nu en **perfekt æstetisk løsning til alle dine restaureringer**.

Bryd de traditionelle metoder med Essentia fra GC.



Prof. Marleen Peumans
(Belgien)

De traditionelle farvesystemer består af forskellige farver: A, B, C og D. Det er dog kendt at **emalje og dentin har forskellige karakteristika**, som alle bidrager til tandens endelige farveopfattelse. Ved at bryde med traditionelle monochromatiske farver og i stedet **fokuserer på, at reproducere emaljen og dentinens karakteristika og refleksion**, kan du opnå et meget mere naturligt resultat ved blot to enkle lag.

Det får du med Essentia.

De tre dentinfarver varierer i chroma og opacitet, præcis som naturlig dentin skifter gennem patientens levetid. Dentinen **ansvarer for farveintensiteten** i den lagdelte restaurering.

I kombination med dentinen, vil de **to emaljefarver sørge for translucens** og skabe liv i restaureringen.

Lys
Dentin



Medium
Dentin



Mørk
Dentin



Lys
Emalje



Mørk
Emalje



Universal



Maskerende
Liner



Enhver farve fra Essentia er en unik blanding af håndterbare karakteristika og optiske egenskaber

Dentin: Sikrer farveadaptation i alle situationer

Baseret på en mikro-hybridsammensætning sikrer dentinfarverne den perfekte blanding af **rigtig refleksion og spredning af lys**. På grund af den **bløde viskositet** er håndtering med pensel eller spatel gjort nemt. Du får stressfrit arbejde med 4 min arbejdstid.

Emalje: skaber liv i restaureringerne

Translucensen i emaljefarverne vil give det vitale touch til dine restaureringer. Den nemme polering i få steps og den **uovertrufne langvarige glansretention** vil overraske dig. Viskositeten er gjort en **smule mere kompakt** for at opnå den endelige ydre hårdhed. Her får du mere end 3 min arbejdstid.

Universal: en mono-farve til alle dine små og posteriore restaureringer.

Denne ene farve er designet til, at give et **perfekt match** i alle situationer hvor lagteknik ikke er nødvendig, såsom små og posteriore kaviteter. Håndteringen er gjort en **anelse mere pakbar** for, at lette anvendelsen i posteriore områder. Her får du 2 min arbejdstid.

Maskerende Liner: blokerer misfarvninger

Da dybe kaviteter ofte udviser stærk misfarvning blev Masking Liner designet til at maskere disse ufuldkommenheder **med et tyndt og opakt lag**. Håndteringen er gjort **injicerbar** for, at nå selv de dybeste steder i kaviteten.

LDMDDDLEDEUML



Essentia gør livagtige anteriore restaureringer mulige med kun to farver!



Klinisk case af Dr. Javier Tapia Guadix (Spanien) & Prof. Marleen Peumans (Belgien)

I denne udfordrende anteriore case var **kun to farver nok** (medium Dentin og Lys emalje) til at gengive det **naturlige look til to nabotænder** og give et skønt smil til denne unge voksne patient.



Essentia bringer posteriore restaureringer tilbage til det naturlige uden ekstra indsats.



Klinisk case af Dr. Javier Tapia Guardix (Spanien)

De fleste posteriore cases vil se perfekte ud ved blot at bruge den **meget chromatiske Mørk Dentin** sammen med **Lys Emalje**, det skaber en **meget naturlig opbygning** i den posteriore region.



Essentia tager de mere komplekse cases til et højere niveau

Dine **restorative valg bliver endnu bredere** med de 4 modifiers. De er udviklet til **hurtigt at karakterisere dine restaureringer**: Skab en halo-effekt ved incisalkanten med Opalescent Modifier (venstre) eller karakterisér fisurene i posteriore tænder med RødBrun Modifier (højre).



Klinisk case af Dr. Javier Tapia Guardix (Spanien)

6 muligheder som dækker alle dine kliniske cases

Anterior: tilpas dine lag efter patientens alder

Til **blegede** tænder eller **Juniorrestaureringer** skal emaljen være hvid og opak, og dentinen vil også være til den hvide side. I dette tilfælde er Lys Dentin og Lys Emalje kombineret.

LD LE



I tilfælde af **yngre** patienter, er en kombination af opak og hvid emalje med mere chroma i dentinen ønsket. Her er Medium Dentin lagt med Lys Emalje.

MD LE



I **voksne** tænder bliver emaljen mere translucent med en smule misfarvning, mens dentinen forbliver i medium chroma.

MD DE



I **ældre** tænder er det nødvendigt med translucens og chroma i emalje området. Dentinen bliver også mere mørk og mindre translucent. Den perfekte kombination er Mørk Dentin og Mørk Emalje.

DD DE



Posterior: naturlig to-lagsteknik eller enkel mono-farve restaurering

Posterior / Mono:

I mange tilfælde vil brugen af en enkelt farve allerede give et ret fint æstetisk resultat når Universal bruges.

U



Posterior / Duo:

Posterior dentin forekommer som regel mørkere, mens emaljen beholder en mere hvidlig tint. Mørk Dentin lægges med Lys Emalje.

DD LE



Essentia - æstetisk restaurering med duo-lagteknik og et reduceret farvevalg



Sprøjte refill

- 2 ml sprøjte refill med touch låg: LD; MD; DD; LE; DE; U; OM
- 2 mL sprøjte med 20 dispenserings spidser: ML
- 2.4 ml sprøjte: BM; RBM; WM

Unitip Refill

- Refills med 15 unitips: LD; MD; DD; LE; DE; U

Starter Kit Sprøjter

- 7 sprøjter, 1 af hver farve: LD; MD; DD; LE; DE; U; ML
- 20 Dispenserings Spidser
- Accessories

Starter Kit Unitip

- 30 unitips (5 unitips hver i 6 farver: LD; MD; DD; LE; DE; U)
- 1 sprøjte ML; 20 Dispenserings Spidser
- Accessories

Modifier Kit


- 4 Sprøjter: OM, BM, WM, RBM



Essentia Farver:



Essentia Modifiers:

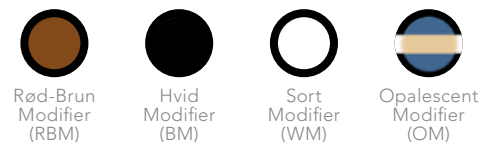

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark
 Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC Nordic Danish Branch
 Scandinavian Trade Building
 Gydevang 34-41
 DK-3450 Allerød
 Tel. +45 51 15 03 82
 info.denmark@gc.dental
<https://europe.gc.dental/da-DK>



Since 1921
 100 years of Quality in Dental