

Kaikki yhdellä värillä



Essentia[®]
Universal shade
GC:Itä

Universaali yhdistelmämuovi

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental


Essentia® Universal shade-GC:ltä

Kaikki yhdellä värillä


Markkinoille tullessaan GC:n Essentia-yhdistelmämuovi uudisti korjaavan hammashoidon käytäntöjä. Essentian ansiosta esteettiset täytteet voidaan tehdä pelkästään seitsemän värin avulla, mikä avasi oven uusille yksinkertaisemmille ratkaisuille. Essentian yleisvärin ansiosta maailma on avoin. **Essentia Universal shade on paras mahdollinen ratkaisu taka-alueen täytteisiin: yksi väri, joka sulautuu ympäristöön, on nyt saatavilla kolmessa eri viskositeetissa.** Valitse pastamainen, ruiskutettava tai erittäin juokseva koostumus **sen mukaan, mikä kuhunkin työhön parhaiten sopii.** Jokainen koostumus sopii niin kervikaalisiin kuin purenassa oleviin täytteisiin ja on **riittävän kestävä kaikkiin kaviteettiluokkiin** ilman rajoituksia.

Patentoidun filleriteknologian ja ultra-hienojen partikkeleiden ansiosta **Essentia HiFlo & Essentia LoFlo -muovien fysikaaliset ominaisuudet ovat vielä paremmat** kuin Essentia Universal -muovilla, joten näitä kaikkia tuotteita voi turvallisesti käyttää **kaikissa indikaatioissa.**

Essentia Universal -väri (pasta) sulautuu erivärisiin hampaisiin.

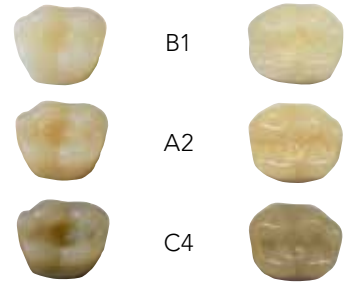

Essentia Universal shaden kolmen eri viskositeettivaihtoehdon taivutuslujuus ja kuluminen (Lähde: GCC tutkimus ja tuotekehitys)

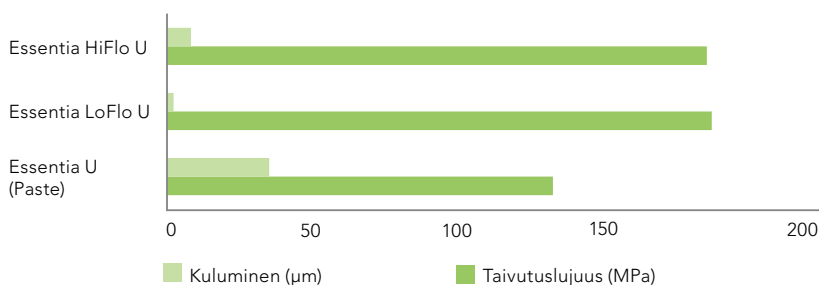

Pienet luokan I kaviteetit preparaitiona



Hampaan korjaus Essentia HiFlo Universal -muovilla



Toimenpiteen jälkeen otettu kuva osoittaa, miten kauniisti täyte sulautuu hampaaseen



Muun kuin karieksen aiheuttama vaurio poistettu ilma-abraasiolla



Hammas korjattu Essentia LoFlo Universal -muovilla




Post-operatiivinen näkymä kiillotuksen jälkeen



Essentia HiFlo on juokseva yhdistelmämuovi **hyvällä kostuttavuudella**, joka adaptoituu täydellisesti preparointeihin ja valuu myös kapeisiin kaviteetteihin. Sen käsittelyominaisuudet ovat loistavat, ja se on erittäin kestävä. Lisäksi sen röntgenopaakisuus on yli 300 %, mikä helpottaa sekundäärikarieksen diagnosointia.



Essentia LoFlo on ruiskutettava, **jäykempi** juokseva yhdistelmämuovi, joka sopii erinomaisesti tiksotrooppista materiaalia vaativiin kohteisiin, kuten kervikaalialueen täytteisiin. Sillä on erinomainen kulutuskestävyys, ja täytteet ovat hyvin pitkäikäisiä myös purupinnoilla.

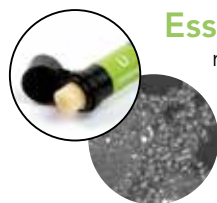

Essentia on pastamainen, pakattava yhdistelmämuovi, joka perustuu yksinkertaistettuun seitsemän värin konseptiin. Universal shade -väri sulautuu erinomaisesti ympäristöön, ja sillä on **pakettava koostumus**: täydellinen yhden värin taka-alueen täytteissä.



Tähän haastavaan juurihoidetun hampaan tapaukseen valittiin suoran tekniikan lähestymistapa



Dentiini korvattiin everX Posterior -kuituvahvisteisella muovilla, ja kiilleosaan käytettiin Essentia Universal -muovia



Kuuden kuukauden seurantäkäynnillä värin havaittiin integroituneen hienosti ympäröivään hammaskudokseen

Essentia® Universal shade-GC:ltä

Kaikki yhdellä värillä



Essentia HiFlo

Universaali, valokovetteinen,
erittäin juokseva yhdistelmämuovi



Essentia LoFlo

Universaali, valokovetteinen,
jäykempi juokseva yhdistelmämuovi



Essentia

Universaali, valokovetteinen,
koostumukseltaan pakattava
yhdistelmämuovi

900739 Essentia HiFlo -ruisku, U (1 x 2 ml)
900741 Essentia LoFlo -ruisku, U (1 x 2 ml)
900970 Essentia-ruisku, U (1 x 2 ml)
900998 Essentia Unitip-kärjet, U (15 x 0,16 ml)

Kokeile myös G-Premio BOND

GC:n universaali sidosaine ei vaadi kompromisseja

012687 G-Premio BOND Kit 5 ml
012694 G-Premio BOND täyttöpakkaus 5 ml
012688 G-Premio BOND 3 pullon pakkaus
009034 G-Premio BOND yksittäisannokset, 50 kpl (0,1 ml)



e s s e n t i a

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33,
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://europe.gc.dental>

GC NORDIC AB

Finnish Branch
Lemminkäisenkatu 46
FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental
<https://europe.gc.dental/fi-FI>

GC