



Jeden odcień,
który pasuje do wszystkiego



Essentia[®]
Universal shade
z GC

Uniwersalny
materiał kompozytowy



„GC”

Essentia® Universal shade z GC


Jeden odcień, który pasuje do wszystkiego

Dzięki **Essentia Universal shade**, GC szeroko otwiera drzwi do uproszczeń. Essentia Universal wykazuje doskonały efekt kameleonu i **bezproblemowo wtapia się w otaczającą strukturę zęba, niezależnie od odcienia ubytku.**


Dostępny w **trzech lepkościach - wszystkie wystarczająco mocne, aby można je było stosować we wszystkich klasach ubytków** - Essentia Universal jest doskonałym rozwiązaniem do odbudowy zębów bocznych.

Dzięki specjalnie opracowanej opatentowanej obróbce wypełniacza i zastosowaniu ultra drobnych cząsteczek, **właściwości fizyczne Essentia HiFlo i Essentia LoFlo są jeszcze wyższe** niż w Essentia Universal (postać pasty), co potwierdza, że wszystkie produkty można bezpiecznie stosować **do wszystkich wskazań.**

Essentia Universal Shade (pasta) wtapia się w zęby o różnych odcieniach...

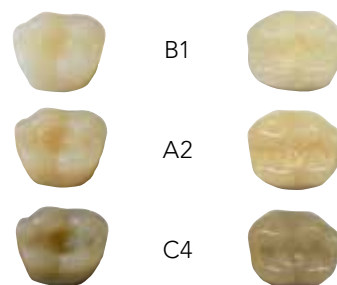

Wytrzymałość na zginanie i ścieralność „3-body wear” trzech lepkości Essentia Universal shade (źródło: dane GCC R&D)

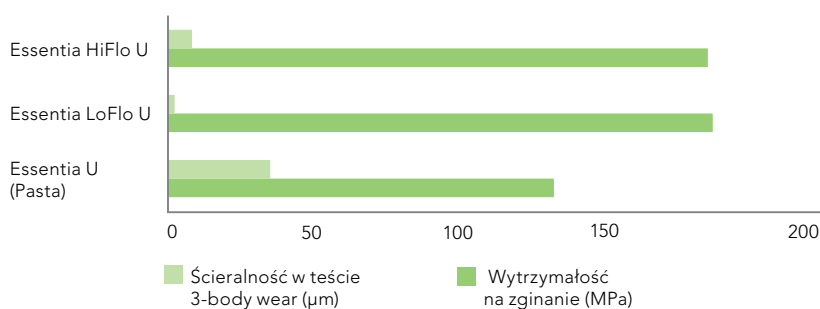

Preparacja małych ubytków klasy I



Odbudowa przy użyciu Essentia HiFlo Universal



Widok pozabiegowy pokazujący doskonałą integrację z naturalnymi zębami



Opracowanie ubytków niepróchnicowego pochodzenia metodą abrazyjnej powietrznej




Odbudowa przy użyciu Essentia LoFlo Universal




Widok po zakończonym zabiegu, po polerowaniu



Essentia HiFlo jest kompozytem płynnym o **wysokiej zwilżalności**, idealnym pod względem łatwej adaptacji do powierzchni opracowanego ubytku i zapływania do wąskich ubytków. Zapewnia nie tylko doskonałe właściwości użytkowe, ale także najwyższą wytrzymałość przy wysokiej nieprzepuszczalności dla promieni rtg wynoszącej ponad 300% Al, co znacznie ułatwia diagnostykę próchnicy wtórnej.

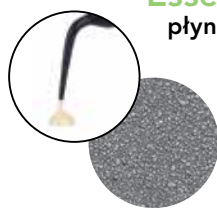

Essentia LoFlo jest dającym się wstrzykiwać kompozytem o **niskiej płynności**, optymalnym, gdy potrzebny jest materiał tiksotropowy - na przykład do wypełnień ubytków przyszyjkowych. Wykazuje minimalną ścieralność, co gwarantuje trwałe odbudowy nawet na powierzchniach żujących.

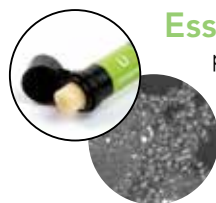

Essentia jest kompozytem o konsystencji pasty i uproszczonej koncepcji 7-odcieniowej. Jego uniwersalny odcień idealnie komponuje się z tkankę zęba a **konsystencja sprawia, że daje się upychać**: idealny do monochromatycznych uzupełnień zębów bocznych.



Odbudowa metodą bezpośrednią została wybrana w tym trudnym przypadku po leczeniu endodontycznym



Odbudowa z everX Posterior jako rdzenia zębiny i Essentia Universal jako warstwy zewnętrznej



Kontrola po sześciu miesiącach wykazująca dobrą integrację koloru z otaczającymi tkankami zęba

Essentia® Universal shade z GC

Jeden odcień, który pasuje do wszystkiego



Essentia HiFlo

Uniwersalny kompozyt
światłoutwardzalny
o **wysokiej płynności**



Essentia LoFlo

Uniwersalny kompozyt
światłoutwardzalny
o **niskiej płynności**



Essentia

Uniwersalny kompozyt
światłoutwardzalny
o **konsystencji umożliwiającej
upychanie**

900740	Essentia HiFlo strzykawka, U (1 x 2 ml) EEP
900742	Essentia LoFlo strzykawka, U (1 x 2 ml) EEP
900977	Essentia strzykawka, U (1 x 2 ml) EEP
900998	Essentia ampułka Unitip, U (15 x 0.16 ml)

Odkryj także G-Premio BOND

Uniwersalny system łączący GC zapewniający zero kompromisów

012689	G-Premio BOND zestaw 5 ml EEP
012695	G-Premio BOND uzupełnienie butelka 5 ml EEP
012690	G-Premio BOND opakowanie 3-butelkowe EEP
009035	G-Premio BOND jednorazowe ampułki, 50 sztuk (0,1 ml) EEP



e s s e n t i a

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE Spółka Akcyjna
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Królowej Jadwigi 325B
PL - 30-234 Kraków
Tel. +48.12.425.14.74
Fax. +48.12.312.52.08
info.poland@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

'GC.'