

GC Essentia® Universal shade

Ena barva za vse



Essentia HiFlo

Univerzalen svetlobno strjujoč kompozit z visoko tekočnostjo



Essentia LoFlo

Univerzalen svetlobno strjujoč kompozit z nizko tekočnostjo



Essentia

Univerzalen svetlobno strjujoč kompozit s stisljivo konsistenco

- 900740 Essentia HiFlo brizga, U (1 x 2 ml) EEP
- 900742 Essentia LoFlo brizga, U (1 x 2 ml) EEP
- 900977 Essentia brizga, U (1 x 2 ml) EEP
- 900998 Essentia unitip, U (15 x 0.16 ml)

Prav tako odkrijte G-Premio BOND

GC univerzalen adhezivni sistem, ki ponuja delo brez kompromisov

- 012689 G-Premio BOND set, 5 ml EEP
- 012695 G-Premio BOND steklenička Refill 5 ml EEP
- 012690 G-Premio BOND 3-stekleničke EEP
- 009035 G-Premio BOND enojne doze, 50 kosov (0.1 ml) EEP



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GCEEO Slovenia
Ulica Talcev 1a
SLO - 3310 Žalec
Tel. +386.3.710.32.70
Fax. +386.3.710.32.71
info.slovenia@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

GC

ZOLFSI 882 12/19



Ena barva za vse



GC
Essentia®
Universal shade

Univerzalni kompozit



GC

GC Essentia® Universal shade

Ena barva za vse

Z **Essentia Universal shade** je GC na široko odprl vrata poenostavitvam. Essentia Universal nudi odličen kameleonski efekt in **osupljivo ujemanje z okoljsko zobno strukturo, glede na barvo kavitete.**

Na voljo v **treh viskoznostih - vse dovolj močne za uporabo v vseh vrstah kavitet** - Essentia Universal je ultimativna rešitev za posteriorne restavracije.

Zahvaljujoč posebni obdelavi polnil in uporabi ultra finih delcev, so **fizikalne lastnosti Essentia HiFlo & LoFlo celo večje** od Essentia Universal (pasta tip), kar potrjuje da se lahko proizvodi varno uporabljajo v **vseh vrstah indikacij.**



Zračna abrazija ne-kariozne lezije



Restavracija z Essentia LoFlo Universal



Post-operativni pogled po poliranju

Essentia HiFlo je tekoči kompozit z **visoko močljivostjo**, odličen za enostavno adaptacijo v preparaciji, da steče v ozke kavitete. Ponuja odlične sposobnosti rokovanja skupaj s superiorno trdnostjo in visoko radioopačnostjo do preko 300%, kar pospeši diagnozo sekundarnega kariesa.




Essentia LoFlo je iztisljiv kompozit z **nizko tekočnostjo**, optimalen kadar je potreben tiksotropen material - na primer za cervikalne lezije. Obljublja minimalno obrabo, kar zagotavlja dolgotrajne restavracije celo na okluzalnih površinah.



Essentia je kompozitni material v obliki paste s poenostavljenim 7 barvnim konceptom. Njegova univerzalna barva kaže odličen učinek barvnega zlivanja in skupaj s **stisljivo konsistenco**: odličen za mono-barvne posteriorne restavracije.



Upogibna trdnost & obraba vseh treh oblik viskoznosti Essentia Universal Shade (Vir : GCC R&D podatki)

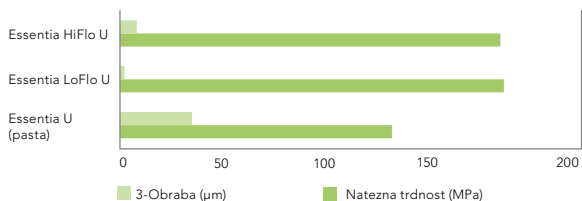

Preparacija majhne kavitete Razreda 1



Uporaba Essentia HiFlo Universal



Post-operativni pogled kaže odlično ujemanje z naravnimi zobmi



Za ta težek post-endodontski klinični primer je bil izbran direkten pristop



Restavracija z everX Posterior kot jedrom in Essentia Universal kot zunanjim obodom



6 mesečna kontrola kaže dobro barvno integracijo z okolnimi zobnimi tkivi