

everX Flow™

Fiberforstærket flowplast til dentinerstatning

Styrken kommer indefra



Since 1921
100 years of Quality in Dental



everX Flow fra GC

Styrken kommer indefra

everX Flow er en fiberforstærket flowplast som **erstatte dentinen og giver tanden styrke**. Ved at applicere everX Flow opnår du samme effekt som stålkonstruktionen i fundamentet under et hus. En stærk base som **hindrer frakturvandring i tanden**.


everX Flows lette applicering, de to farvemuligheder og den unikke styrke, kan hurtigt blive **dit nye "must have"** produkt når **du behøver en stærk kerne eller opbygning**.



Med overlegen **brudstyrke**
opnår du **holdbare** store restaureringer

De fleste plastmaterialer har gode egenskaber når det gælder emaljeerstatning: høj slidstyrke og æstetik. Desværre er disse materialer ikke optimale som dentinerstatning når det kommer til **modstand overfor frakturer**.

everX Flow imødekommer problemet, da den med sit **høje indhold af små fibre**, bundet i resinmatrixen, tilbyder en **uovertruffen brudstyrke** næsten som dentin. Det gør materialet **velegnet til effektivt at forstærke større restaureringer**, i kombination med konventionel plast som emaljelag.

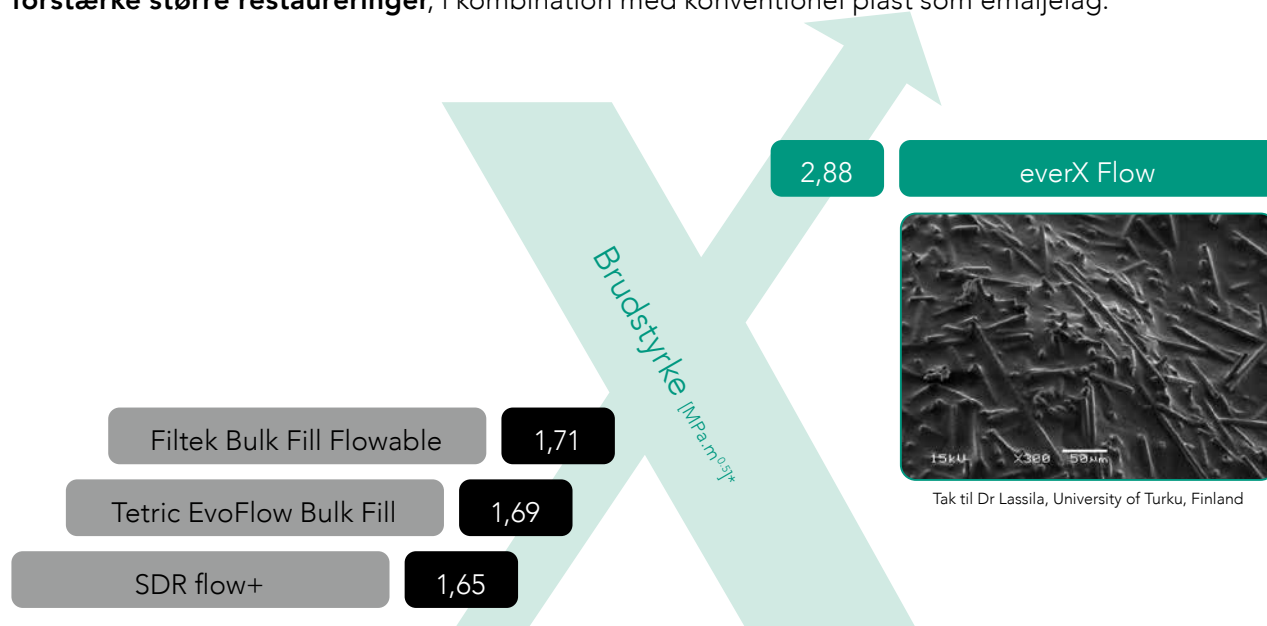


* Kilde: GCC R&D - Data on file.
Test udført efter ASTM E399-90 (1997).

Med perfekt flydeevne får du let applicering og god adaption



Tak til
Dr Javier Tapia Guadix, Espanja

Takket være de tixotropiske egenskaber, flyder everX Flow og vil **nemt adaptere til alle kavitetetsvægge og præparationer og dermed undgå porøsiteter.** Med det kontrollerede flow kan du let placere det i overmundet **uden at det flyder ud.**

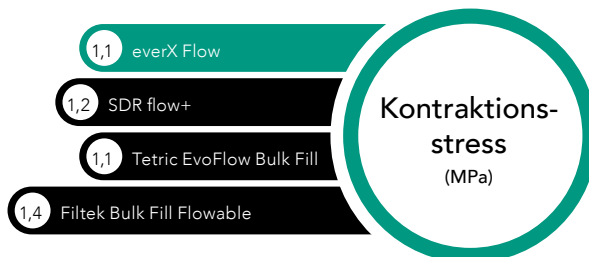

Kilde: GCC R&D - Data on file.

To farver er alt du behøver

Bulk farve
Polymerisationsdybde 5.5 mm

Optimal til **dybe posteriore kaviteter**

Dentin Farve
Polymerisationsdybde 2.0 mm

Optimal til mere **æstetiske fyldninger og til opbygninger**

Optimal til at forstærke store kaviteter og langvarige æstetiske resultater



Præparer kaviteten



Applicering af **everX Flow** (Dentin farve)



Sidste lag **Essentia** (Universal farve)



Post-operative situation

Tak til Georg Benjamin, Germany



Præparer kaviteten



Applicering af **everX Flow** (Bulk farve)



Sidste lag med **G-aenial Universal Injectable** (farve A3)



Post-operative situation

Tak til Dr Lucile Dahan, France

everX Flow fra GC

Styrken kommer indefra



**Bulk
farve**
til dybe
kaviteter

**Dentin
farve**
til æstetiske
fyldninger



Præparer kaviteten



Ved Kl. II kaviteter bygges de manglende vægge med almindelig plast



Færdige resultat med almindelig plast som topdække

everX Flow

10001488	everX Flow, sprøjte 2 ml (3.7g) Bulk
10001489	everX Flow, sprøjte 2 ml (3.7g) Dentin

Lær også om

Fyld kaviteten med everX Flow



G-Premio BOND
Universal bonding



G-ænial Universal Injectable
Injecerbar stærk komposit



Essentia Universal
Universal komposit

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND and G-ænial Universal Injectable er trademarks fra GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ and Tetric EvoFlow Bulk Fill er ikke trademarks fra GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC Nordic Danish Branch

c/o Andersen Partners
Advokatpartnerselskab
Buen 11, 6
DK-6000 Kolding
Tel. +45 51 15 03 82
info.denmark@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/da-DK>