



Čvrst do temelja

GC
everX Flow™

Kratkim vlaknima pojačan
tekući kompozit za
nadomještanje dentina

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC everX Flow

Čvrst do temelja


Otkrijte **everX Flow**, kratkim vlaknima pojačan tekući kompozit, namijenjen za **nadomještanje dentina i pojačanje restauracija**. Prema istim načelima kao i kod željeznih armatura u građevinarstvu, staklena vlakna u kompozitu everX Flow pojačavaju restauracije te **sprječavaju njihovo pucanje**.

Svojom jednostavnom primjenom, s dvije boje i nevjerovatnom čvrstoćom, everX Flow će postati **vaš novi pouzdani proizvod za sve restauracije kojima je potrebna čvrsta osnova**, kao i kod preparacija za nadogradnju.



Izvrсна otpornost na pucanje za dugotrajne velike ispune

Većina kompozita nudi savršena svojstva za nadomještanje cakline: visoku otpornost na trošenje i visoku estetiku. Međutim, ne mogu se mjeriti s dentinom u pogledu otpornosti na lom. everX Flow rješava taj problem i ima svojstvo **izvršne otpornosti na lom gotovo kao dentin**, zahvaljujući **velikoj količini kratkih vlakana** čvrsto vezanih za smolastu matricu. To omogućuje **učinkovito pojačanje velikih restauracija u stražnjem području**, u kombinaciji s konvencionalnim kompozitom kao caklinskim slojem.

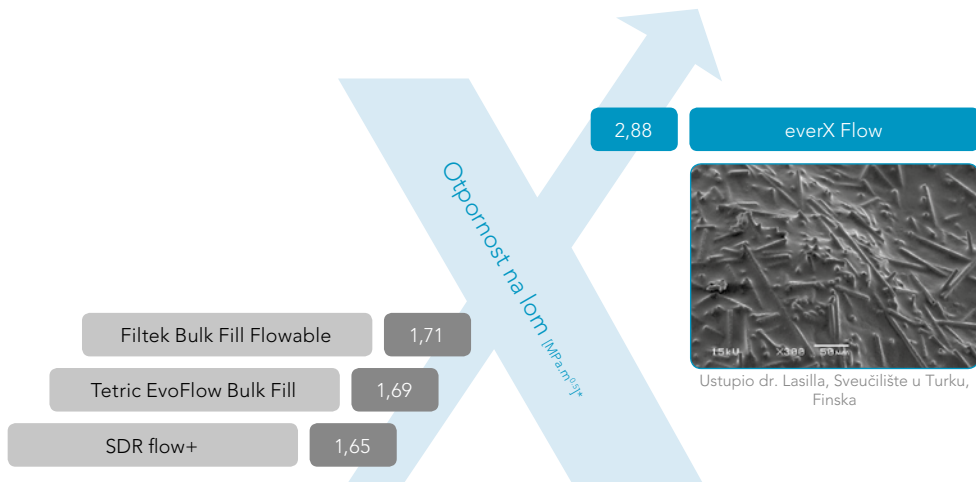

* Izvor: GCC istraživanje i razvoj - Podaci u arhivi.
Testirano sukladno ASTM E399-90 (1997).


Savršena tiksotropnost za lako postavljanje i izvrsnu prilagodbu



Zahvaljujući optimalnoj tiksotropnosti, everX Flow će se lako prilagoditi svakoj preparaciji i pomoći izbjegnuti poroznost. Njegovo kontrolirano tečenje također omogućuje postavljanje na gornjim kutnjacima bez curenja.



Ustupio dr. Javier Tapia Guadix, Španjolska

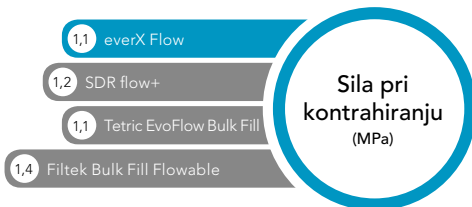

Izvor: GCC istraživanje i razvoj - Podaci u arhivi.

Dvije boje za rješenje svih potreba



Optimalno za **duboke kavitete u stražnjem području**



Optimalno za **visoko estetske rezultate i za nadogradnju**

Optimalno za pojačanje velikih kaviteta i postizanje dugoročno estetskih rezultata



Preparacija kaviteta



Nanošenje kompozita everX Flow (Dentin (dentinska) boja)



Završni sloj **Essentia** kompozita (Universal (univerzalna) boja)



Izgled nakon restauracije

Ustupio: Georg Benjamin, Njemačka



Preparacija kaviteta



Nanošenje kompozita everX Flow ("Bulk" boja)



Završni sloj s **G-aenial Universal Injectable** (A3 boja)



Izgled nakon restauracije

Ustupila dr. Lucile Dahlan, Francuska

GC everX Flow

Čvrst do temelja



Bulk boja
za duboke
kavitete

Dentinska boja
za visoko
estetske
rezultate



Preparacija kaviteta



Kod kaviteta klase II, stijenke koje nedostaju izraditi iz konvencionalnog kompozita



Kavitet ispuniti kompozitom everX Flow



Završni rezultat nakon prekrivanja konvencionalnim kompozitom

everX Flow	
012900	everX Flow, štrcaljka 2 ml (3,7 g) "Bulk" boja EEP
012901	everX Flow, štrcaljka 2 ml (3,7 g) Dentin (dentinska) boja EEP

Otkrijte i



G-Premio BOND

Univerzalno sredstvo za spajanje



G-aenial Universal Injectable

Restaurativni kompozit za uštrcavanje visoke čvrstoće



Essentia Universal

Univerzalni kompozit u pasti

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND i G-aenial Universal Injectable su zaštitni znaci tvrtke GC. Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ i Tetric EvoFlow Bulk Fill nisu zaštitni znaci tvrtke GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gc@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
info.croatia@gc.dental
<https://europe.gc.dental/hr-HR>

GC