

everX Flow™

Rövid-üvegszállal erősített folyékony kompozit a dentin pótlására

Velejéig erős



A GC everX Flow

a velejéig erős


Bemutakozik az **everX Flow**, egy rövid-üvegszállal megerősített folyékony kompozit anyag, mely a **dentin pótlására és a restaurációk megerősítésére** lett kifejlesztve. Az építkezéseken használt vasbeton megerősítés elvét követve, az everX Flow üvegszállal megerősítik a restaurációt és **megakadályozzák a repedések kialakulását**.

Könnyű használatával, két elérhető színével és hihetetlen erősségével, az everX Flow lesz az a termék, **amelyhez mindig fordulhat amikor erős magra van szüksége restaurációjánál**, valamint **csomkfelépítés** során.



Kiemelkedő törési ellenállás a tartós, nagy méretű restaurációkhoz

A legtöbb kompozit tökéletes tulajdonságokkal rendelkezik a zománc pótlásához: magas kopásállóság és esztétikum. Azonban, nem tudnak a dentinnel megegyezőek lenni amikor a törésekkel szembeni ellenállásukat nézzük. Az everX Flow felülkerekedik ezen a problémán, hiszen **kiváló törési ellenállással bír, amely megközelíti a dentinét**, köszönhetően a rezin mátrixban erősen megkötött **magas számú rövid-üvegszállaknak**. Ezáltal az anyag képes **hatékonyan megerősíteni nagyobb méretű poszterior restaurációkat is**, hagyományos, zománc kompozit réteggel kiegészítve.

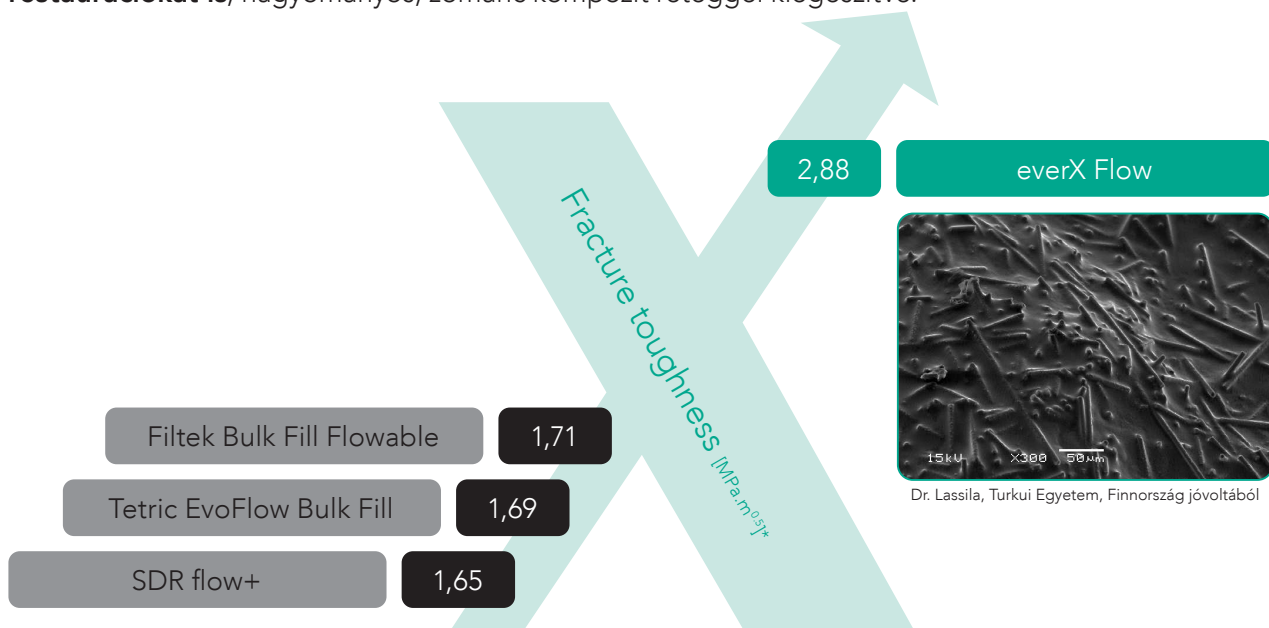


* Forrás: GCC R&D - adatok elérhetők.
A teszt ASTM E399-90 (1997) szerint készült.

Tökéletes tixotrópia a könnyű behelyezésért és a nagyszerű illeszkedésért



Dr. Javier Tapia Guadix, Spanyolország jóvoltából

Köszönhetően az optimális tixotrópiának, az everX Flow könnyedén **adaptálható minden preparációhoz** és segít a **porozítások elkerülésében**. Jól kontrollálható folyékonysága biztosítja, hogy a felső molárisokba is **megfolyás nélkül** behelyezhető legyen.

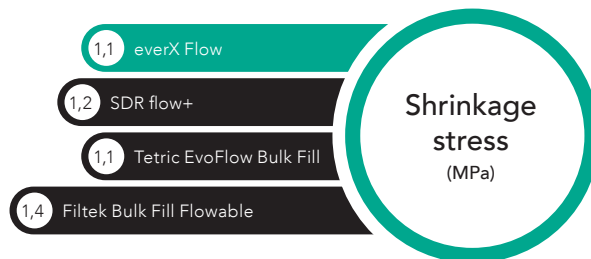

Forrás: GCC R&D - adatok elérhetők.

Két szín, mely kielégít minden igényt

Bulk shade
Átvilágítási mélység 5.5 mm

Optimális **mély üregekhez poszterior régióban**

Dentin shade
Átvilágítási mélység 2.0 mm

Optimális **esztétikusabb végeredmény** eléréséhez valamint **csonkfelépítéshez**

Optimális nagy kavitások megerősítéséhez és hosszú távú esztétikus végeredmény eléréséhez



Kavitás preparáció



everX Flow applikálása (Dentin szín)



Végző réteg Essentia (Universal szín)



Posztoperatív situáció



Kavitás preparáció



everX Flow applikálása (Bulk szín)



Végző réteg G-aenial Universal Injectable (A3 szín)



Posztoperatív situáció

Dr. Georg Benjamin, Németország jóvoltából

Dr. Lucile Dahan, Franciaország jóvoltából

A GC everX Flow

a velejéig erős



Bulk shade
mély kavitások
esetén

Dentin shade
magas
esztétikumú
eredmény



Készítse elő a kavitást



II. osztályú kavitás esetén a hiányzó falakat hagyományos kompozittal építse fel



Töltse fel az üreget everX Flow anyaggal



A végeredmény, hagyományos kompozittal történő fedés után

everX Flow

10001490	everX Flow, fecskendő 2 ml (3.7g) Bulk szín EEP
10001491	everX Flow, fecskendő 2 ml (3.7g) Dentin szín EEP

További termékek



G-Premio BOND
Univerzális bondanyag



G-aenial Universal Injectable
Nagy erősségű, injektálható restauratív anyag



Essentia Universal
Univerzális, paszta állagú kompozit

Az everX Flow, Essentia, G-Premio BOND és G-aenial Universal Injectable a GC védjegyei.
A Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ és Tetric EvoFlow Bulk Fill nem a GC védjegyei.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEE0 Hungary
Fazekas utca 29-31.
HU - 1027 Budapest
Tel. +36.1.224.04.00
info.hungary@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/hu-HU>