

everX Flow™

Trumpomis skaidulomis
sutvirtintas takus kompozitas dentino atstatymui

Tvirtam pagrindui



Since 1921
100 years of Quality in Dental



everX Flow iš GC

Tvirtam pagrindui


Atraskite **everX Flow**, trumpomis skaidulomis sustiprintą takų kompozitą, sukurtą **dentino atstatymui bei restauracijos sutvirtinimui**. Lygiai taip pat kaip ir geležinė armatūra statybose, - everX Flow medžiagoje esantys stiklo pluošto kaišiai sutvirtina restauraciją ir **apsaugo ją nuo lūžių**.

Dėl savo lengvo naudojimo, dviejų atspalvių ir nepaprasto tvirtumo, everX Flow greitai taps Jūsų pačia mėgstamiausia medžiaga, naudojama visoms tvirto pagrindo reikalaujančioms restauracijoms, o taip pat kulties atstatymo darbams.



Ypatingas ilgalaikių didelės apimties restauracijų atsparumas lūžiams

Daugelis kompozitų pasižymi puikiomis emalio audinių atstatymo galimybėmis: dideliu atsparumu nusidėvėjimui ir estetinėmis savybėmis. Tačiau, kuomet kalba eina apie atsparumą lūžiams - jie neišgali prilygti dentinui. EverX Flow įveikia šią kliūtį ir dėka **didelio kiekio** stipriai su derviniu matriksu tarpusavyje **sujungtų trumpų skaidulų** pasižymi **puikiu, dentino audiniams beveik prilygstančiu atsparumu lūžiams**. Tai leidžia, derinant ją su įprastinio kompozito naudojimu emalio sluoksnio atkūrimui, **efektyviai sustiprinti didelės apimties krūminių dantų restauracijas**.

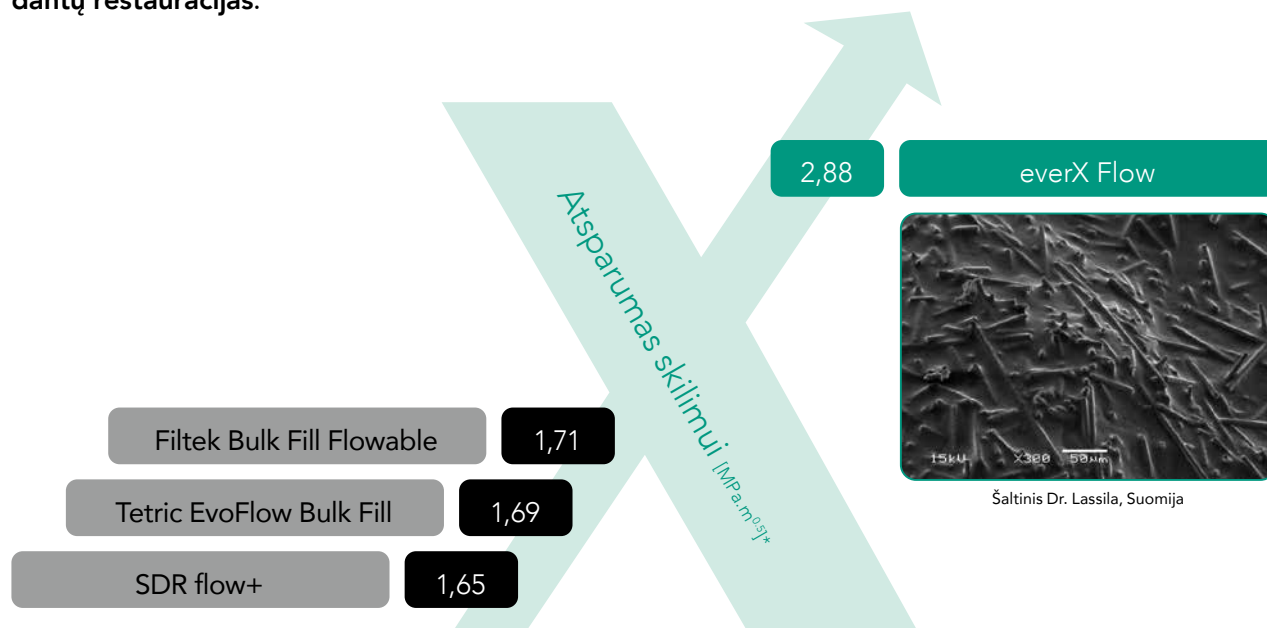


* Šaltinis: GCC R&D - Duomenys apie medžiagą apraše. Testavimas atliktas vadovaujantis ASTM E399-90 (1997).

Puiki tiksotropija lengvam įdėjimui bei puikiai adaptacijai



Pasidalino
Dr Javier Tapia Guadix, Spain

Dėka optimalios tiksotropijos, everX Flow lengvai **pritaiko** prie kiekvienos restauracijos, taip padėdama **išvengti porėtumo**. Kontroluojamas kompozito takumas leidžia atkurti viršutinius krūminius dantis be **jokio medžiagos varvėjimo**.

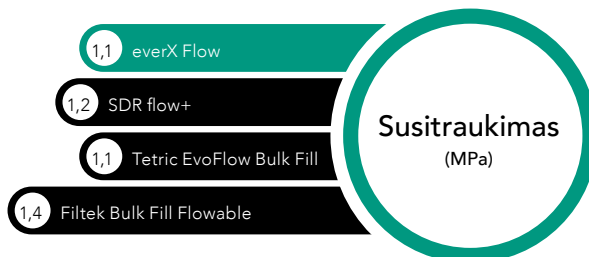

Šaltinis: GCC R&D - Duomenys apraše.

Dvi spalvos patenkinančios visus Jūsų poreikius

Dideliam sluoksniui skirta (Bulk) spalva

Kietinimo gylis
5.5 mm

Tinkamiausias gilių krūminių dantų ertmių restauracijoms

Dentino spalva

Kietinimo gylis
2.0 mm

Sukurta norint išgauti estetiškesnį rezultatą arba kulties formavimui

Tinkamiausias didelių ertmių sutvirtinimui bei ilgalaikių estetinių rezultatų pasiekimui



Ertmės preparavimas



everX Flow aplikacija
(Dentino atspalvis)



Galutinis sluoksnis su Essentia
(Universalus atspalvis)



Rezultatas

Pasidalino
Georg Benjamin,
Vokietija



Ertmės preparavimas



everX Flow aplikacija
(Dideliam sluoksniui skirta spalva)



Galutinis sluoksnis su G-aenial
Universal Injectable (A3 spalva)



Rezultatas

Pasidalino Dr Lucile Dahan,
Prancūzija

everX Flow iš GC

Tvirtam pagrindui



Dideliam
sluoksniui
skirta (Bulk)
spalva gilioms
ertmėms

Dentinas
geresnei
estetikai



Paruoškite ertmę



II klasės ertmės atveju trūkstama
sieną atstatykite tradiciniu kompozitu



Užpildykite ertmę everX Flow



Galutinis vaizdas po restauracijos
padengimo įprastiniu kompozitu

everX Flow

| | |
|----------|--|
| 10001490 | everX Flow, Syringe 2 ml (3.7g) švirkštas Bulk |
| 10001491 | everX Flow, Syringe 2 ml (3.7g) švirkštas Dentinas |

Taip pat susipažinkite su



G-Premio BOND
Universalia jungiamąja medžiaga



G-aenial Universal Injectable
Itin stipria takia restauracine medžiaga



Essentia Universal
Universalia kompozitive plomba

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND ir G-aenial Universal Injectable yra GC kompanijos prekiniai ženklai.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ ir Tetric EvoFlow Bulk Fill nėra GC kompanijos prekiniai ženklai.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC Nordic AB

GC atstovas Lietuvoje
Kęstutis Noreika
Mob.tel.: +370 640 40960
El.paštas: kestutis.noreika@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/lt-LT>