

everX Flow™

Īso šķiedru plūstošais kompozīts dentīna aizvietošanai

Spēcīgs līdz kodolam



Since 1921
100 years of Quality in Dental



everX Flow no GC

Spēcīgs līdz kodolam


Iepazīstiet everX Flow- ar īsām šķiedrām stiprinātu plūstošo kompozītu, kas paredzēts dentīna aizvietošanai un restaurāciju stiprināšanai. everX Flow pievienoto stikla šķiedru princips ir līdzīgs celtniecībā pielietotajām metāla konstrukcijām; stikla šķiedras stiprina restaurāciju un pasargā no plaisāšanas.

everX Flow, pateicoties vieglai aplikācijai, divu krāsu izvēlei un izcilam stiprumam, kļūst par jūsu izvēles kompozītu visās restaurācijās, kad nepieciešams stiprs kodols, kā arī veikt zoba stumbra atjaunošanu.



Izcila lūzumizturība izturīgām plašām restaurācijām

Lielākai daļa kompozītmateriālu ir perfekti piemērotas īpašības emaljas aizvietošanai- augsta nodilumizturība un laba estētika. Tomēr to lūzumizturība nav līdzvērtīga dentīna spējām pretoties plaisāšanai. everX Flow pārvar šo trūkumu un tam, pateicoties lielam daudzumam īso šķiedru, kas cieši savienotas ar sveķu matricu, ir izcila dentīnam līdzīga lūzumizturība. Tādēļ tas apvienojumā ar emaljas aizvietošanai izmantoto standarta kompozītmateriālu, efektīvi stiprina plašas sānu zobu restaurācijas.

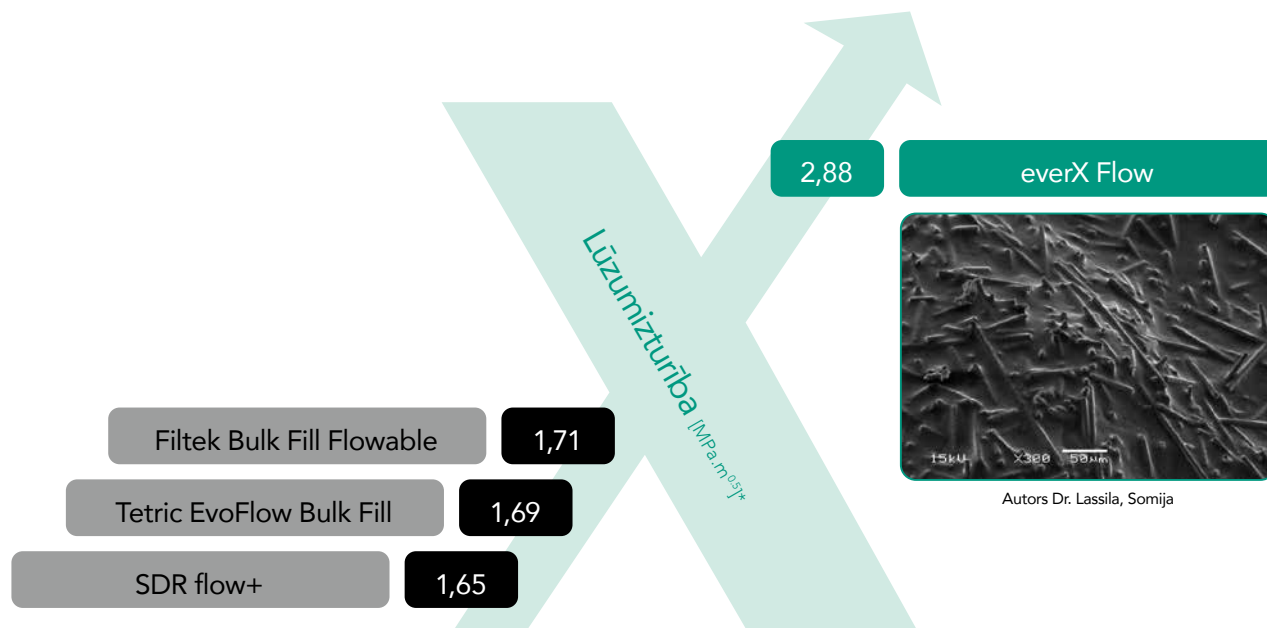


Avots: GCC R&D – dati pieejami pēc pieprasījuma.
Tests veikts pēc ASTM E399-90 (1997).

Perfektas tiksotropās īpašības atvieglo aplikāciju un nodrošina izcilu adaptāciju



Autors
Dr Javier Tapia Guadix, Spānija

everX Flow, pateicoties optimālām tiksotropām spējām palīdz izvairīties no poru veidošanās, tas viegli adaptējas jebkuras formas preparācijai. Tā kontrolētā plūstamība neveido notecējumus un ļauj veiksmīgi to izmantot augšzokļa molāros.

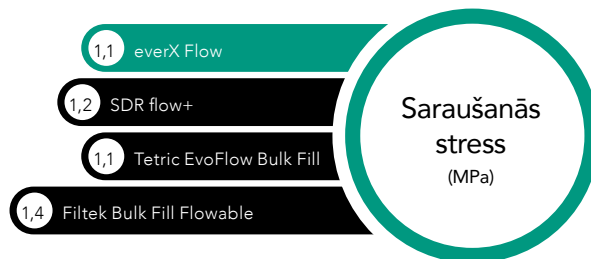

Avots: GCC R&D – dati pieejami pēc pieprasījuma.

Divas krāsas dažādām vajadzībām

Bulk (tilpuma) krāsa
Polimerizācijas dziļums 5.5 mm

Piemērota dziļās sānu zobu kavitātēs

Dentīna krāsa
Polimerizācijas dziļums 2.0 mm

Piemērota estētiskiem klīniskajiem gadījumiem un stumbra atjaunošanai

Optimāli stiprina plašas kavitātes un nodrošina ilgtermiņa estētisko rezultātu



Kavitātes preparācija



everX Flow aplikācija (dentīna krāsa)



Pēdējais slānis ar Essentia (universālā krāsa)



Postoperatīvā situācija

Autors Georg Benjamin, Vācija



Kavitātes preparācija



everX Flow aplikācija (Bulk krāsa)



Pēdējais slānis ar G-aenial Universal Injectable (A3 krāsa)



Postoperatīvā situācija

Autors Dr- Lucile Dahan, Francija

everX Flow no GC

Spēcīgs līdz kodolam



Bulk
(tīlpuma)
krāsa
dziļām
kavitātēm

Dentīna
krāsa
estētiskam
rezultātam



Sagatavojiet kavitāti



II klases kavitātē vispirms ar standarta kompozītmateriālu atjaunojiet trūkstāšo sienu



Gala rezultāts, pēdējā slāņa atjaunošanai izmantojot standarta kompozītmateriālu

everX Flow

10001490	everX Flow, šļirce 2 ml (3.7g) Bulk
10001491	everX Flow, šļirce 2 ml (3.7g) Dentīns

Iepazīstiet arī

Aizpildiet kavitāti ar everX Flow



G-Premio BOND
Universālais adhezīvs



G-aenial Universal Injectable
Augstas izturības injekcijas
konsistences kompozīts



Essentia Universal
Universālais pastaš
konsistences kompozīts

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND un G-aenial Universal Injectable ir GC tirdzniecības zīmes.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ un Tetric EvoFlow Bulk Fill nav GC tirdzniecības zīmes.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC Nordic AB

Latvijas birojs
Kurbada iela 3-3, Rīga
Mob.tālr. +371.29.40.51.19
ieva.jelisejeva@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/lv-LV>