

# everX Flow™

Fiberforsterket flytende kompositt til dentinforsterkning

## Styrken kommer innenfra



Since 1921  
100 years of Quality in Dental



# everX Flow fra GC

## Styrken kommer innenfra


**everX Flow** er en fiberforsterket flytende kompositt som erstatter dentinen og gir tannen styrke. Ved å applisere **everX Flow** oppnår du samme effekt som stålkonstruksjonen i fundamentet under et hus: Et sterkt fundament som hindrer infraksjoner i tannen.

**everX Flows** enkle applisering, de to fargemuligheter og den unike styrke kan raskt bli ditt nye "must have"-produkt når du trenger en sterk konus eller oppbygging.



## Med overlegen bruddstyrke oppnår du holdbare store restaureringer

De fleste komposittmaterialer har gode egenskaper når det gjelder emaljeerstatning: høy slitestyrke og estetikk. Desverre er disse materialer ikke like optimale som dentinerstatning når det kommer til motstand mot frakturer. **everX Flow** tar tak i utfordringen, da den med sitt høye innhold av små fibre, implementert i resinmatrixen, gir en uovertruffen bruddstyrke nesten som dentin. Det gjør materialet velegnet til effektivt å forsterke større restaureringer, i kombinasjon med konvensjonell kompositt som emaljelag.

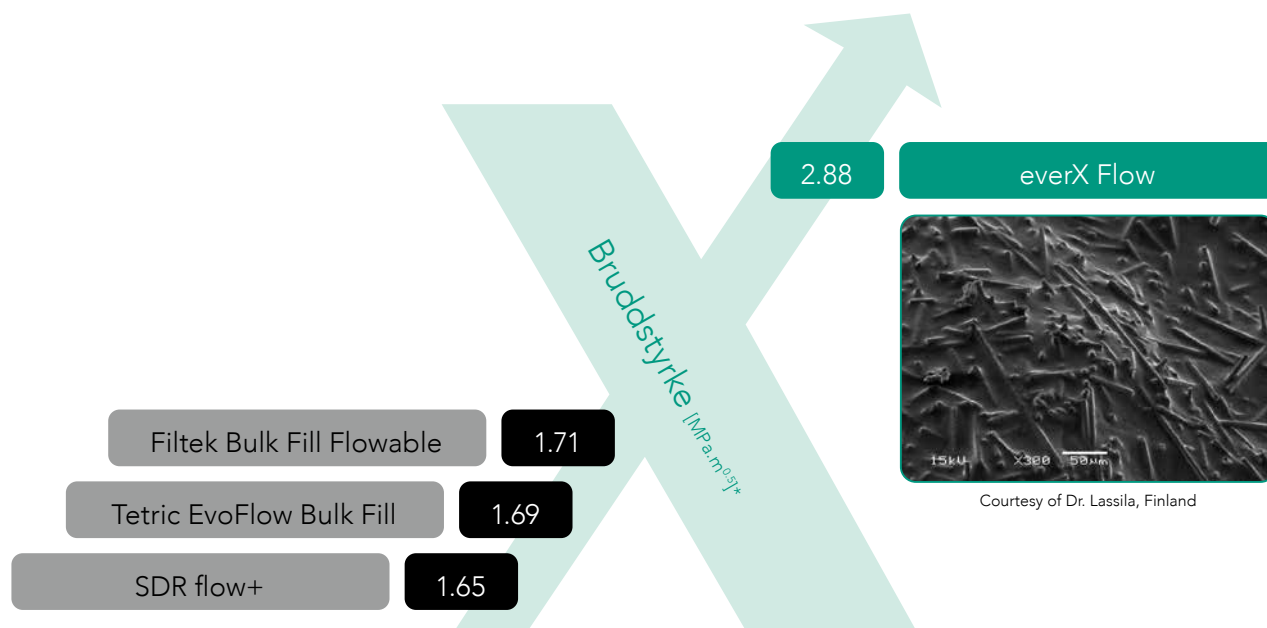


\* Kilde: GCC R&D - Data on file.  
Test utført etter ASTM E399-90 (1997).

# Perfekt flyteevne til enkel applisering og god adaptasjon



Courtesy of Dr Javier Tapia Guadix, Spain

Takket være de tixotropiske egenskaper, flyter everX Flow lett, og vil fint adaptere til alle kaviteitsvegger og preparasjoner **uten å danne porøsiteter**. Med den kontrollerte flow kan du enkelt plassere everX Flow i overkjeven **uten at materialet flyter ut**.

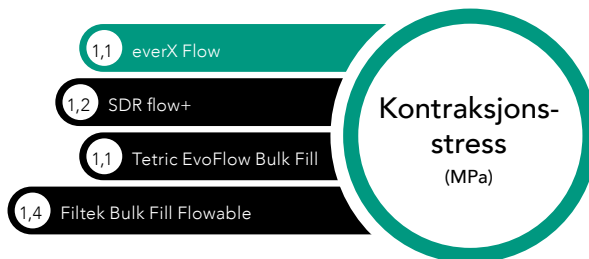

Kilde: GCC R&D - Data on file.

## To farger er alt du trenger

**Bulk farge**  
 Polymerisasjonsdybde 5.5 mm

Optimal til **dype posteriore kaviteter**

**Dentin Farge**  
 Polymerisasjonsdybde 2.0 mm

Optimal til **bedre estetiske fyllinger** og til **oppbygginger**

## Optimal til å forsterke store kaviteter Og til å oppnå langvarige estetiske resultater



Kaviteitspreparering



Applisering av **everX Flow** (Dentin farge)



Siste lag Essentia (Universal farge)



Post-operativ situasjon

Takk til Georg Benjamin, Germany



Kaviteitspreparering



Applisering av **everX Flow** (Bulk farge)



Siste lag med **G-aenial Universal Injectable** (farge A3)



Post-operativ situasjon

Takk til Dr. Lucile Dahhan, France

# everX Flow fra GC

## Styrken kommer innenfra



**Bulk  
farge**  
til dype  
kaviteter

**Dentin  
farge**  
til estetiske  
fyllinger



Preparér kaviteten



Ved Kl. II kaviteter bygges de manglende veggene med konvensjonell kompositt



Fyll kaviteten med **everX Flow**



Ferdig resultat med konvensjonell kompositt som toppdekke

### everX Flow

10001488	everX Flow, sprøyte 2 ml (3.7g) Bulk
10001489	everX Flow, sprøyte 2 ml (3.7g) Dentin

## Orientér deg også om



G-Premio BOND  
Universal bonding



G-aenial Universal Injectable  
Injisertbar sterk kompositt



Essentia Universal  
Universal kompositt

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND og G-aenial Universal Injectable er trademarks fra GC.  
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ and Tetric EvoFlow Bulk Fill er ikke trademarks fra GC.

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax. +32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

### NORDIC AB

Scandinavian Trade Building  
Gydevang 34-41  
DK-3450 Allerød  
Tel. +45.51.15.03.82  
info.denmark@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/no-NO>