

everX Flow™

Fiberförstärkt flytande komposit för dentinersättning

Styrkan kommer inifrån



Since 1921
100 years of Quality in Dental



everX Flow från GC

Styrkan kommer inifrån


everX Flow är en fiberförstärkt flytande komposit som **ersätter dentin och ger styrka åt restaurationer**. Glasfibrerna i everX Flow fungerar på samma sätt som armeringsjärn i en byggnadskonstruktion och stärker restaurationen så den **inte spricker**.

Tack vare enkel applicering, tvåfärgssystem och unik styrka blir everX Flow **en produkt du inte gärna vill vara utan när restaurationen kräver en stark kärna eller vid pelaruppbyggnad**.



Överlägsen brottseghet ger hållbara stora restaurationer

De flesta kompositmaterial som erbjuds uppvisar goda egenskaper med hög slitstyrka och estetik när det gäller emaljersättning. Dessvärre är materialen inte likvärdiga dentin med tanke på förmågan att motstå frakturer. everX Flow klarar den utmaningen eftersom materialets höga innehåll av korta fibrer, inuti resinmatrixen, ger **utmärkt brottseghet nästan likvärdig den hos dentinet**. Det gör att materialet **effektivt klarar att förstärka stora posteriora restaurationer** i kombination med en konventionell komposit som emaljskikt.

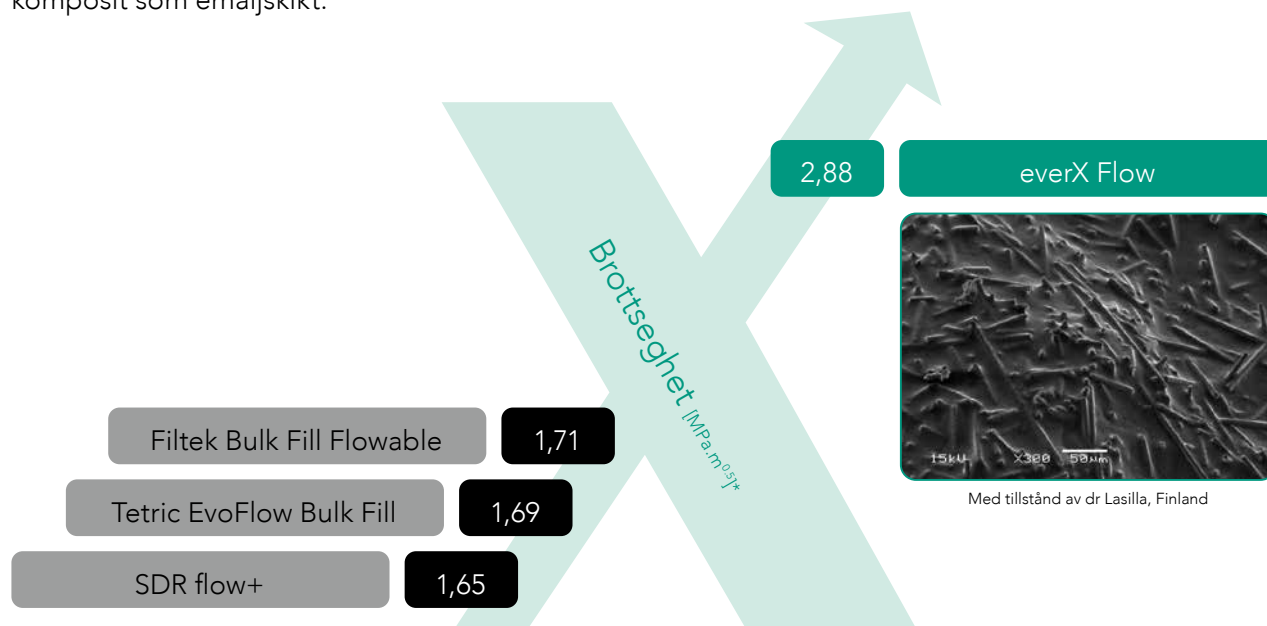


Källa: GCC R&D – Data on file.
Test enligt ASTM E399-90 (1997).

Perfekt tixotrop konsistens ger enkel applicering och god adaptation



Tack vare materialets optimala tixotropa konsistens flyter everX Flow lätt och **anpassar** fint till alla **preparationer** utan att **porositeter** uppstår. Det kontrollerade flödet möjliggör applicering i överkäken **utan att materialet flyter ut**.

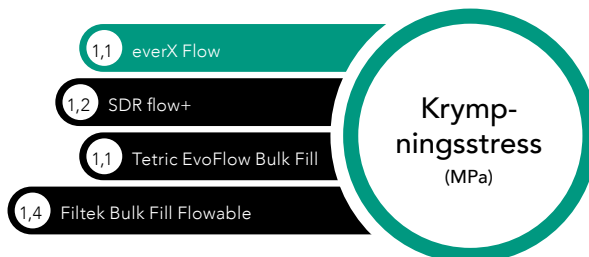

Med tillstånd av Dr Javier Tapia Guadix, Spanien

Källa: GCC R&D – Data on file.

Två färger är allt du behöver

Bulkfärg
Härddjup 5.5 mm

Lämplig för **djupa posteriora kaviteter**

Dentinfärg
Härddjup 2.0 mm

Lämplig vid **högre krav på estetik** och för **perlarupbyggnader**

Optimal till att förstärka stora kaviteter och uppnå långsiktiga estetiska resultat



Kavittetspreparation



Applicering av **everX Flow** (dentinfärg)



Sista skiktet med **Essentia** (universalfärg)



Postoperativ situation

Med tillstånd av Georg Benjamin, Tyskland



Kavittetspreparation



Applicering av **everX Flow** (bulkfärg)



Sista skiktet med **G-aenial Universal Injectable** (A3-färg)



Postoperativ situation

Med tillstånd av dr Lucile Daham, Frankrike

everX Flow från GC

Styrkan kommer inifrån



Bulk-färg
till djupa
kaviteter

Dentin-färg
till estetiska
fyllningar



Preparera kaviteten



Vid klass II-kaviteter byggs avsaknade ytor med konventionell komposit



Fyll kaviteten med everX Flow



Färdigt resultat med konventionell komposit som övre skikt

everX Flow

10001488	everX Flow, spruta 2 ml (3.7g) Bulk
10001489	everX Flow, spruta 2 ml (3.7g) Dentin

Upptäck även



G-Premio BOND
Universalbonding



G-aenial Universal Injectable
Flytande tixotrop komposit



Essentia Universal
Universalkomposit

everX Flow, Essentia, G-Premio BOND och G-aenial Universal Injectable är varumärken som tillhör GC.
Filtek Bulk Fill Flowable, SDR flow+ och Tetric EvoFlow Bulk Fill är varumärken som inte tillhör GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC NORDIC AB

c/o Lundin Revisionbyrå
Erik Dahlbergsgatan 11B
SE-411 26 Göteborg
Tel. +46.768.54.43.50
info.nordic@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/sv-SE>