



40 vuotta tarkkoja  
jäljennöksiä

EXA Advanced™  
GC:ltä

A-silikoni-jäljennösaine



EXA Advanced  
Regular type  
Normal set

138500



EXA Advanced  
Regular type  
Fast set

138100



EXA Advanced  
Injection type  
Normal set

138700



EXA Advanced  
Injection type  
Fast set

138300

**GC**

## EXA-tuotesarjan laatu

Jäykkyys ja joustavuus täydellisessä tasapainossa optimaalisimpien tulosten saavuttamiseksi

Ei repeydy, mikä takaa tarkan jäljennöksen valmistuksen.

Hydrofiilinen, joka tallentaa kaikki tarkkaan jäljennökseen tarvittavat yksityiskohdat



Materiaalin joustavuus, hyvä haju ja maku takaavat parhaan mukavuuden sekä potilaille että lääkäreille

Palautuu täysin muodonmuutoksesta, joka tapahtuu, kun se poistetaan potilaan suusta.

Säilyttää tarkkuuden varastoinnin ja kuljetuksen aikana erinomaisen mittastabiilisuuden ansiosta

Kuva: Tohtori  
David Gestakovskin,  
Kroatia, luvalla

## Lisääntynyt repäisylujuus\*

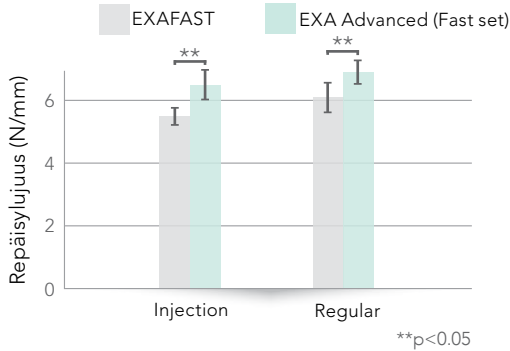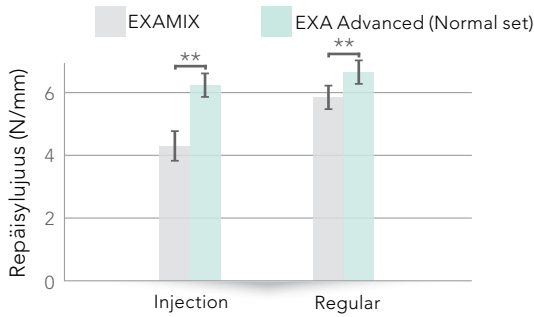

## Työskentely- ja kovettumisajat

	Työskentelyaika 23 °C:ssa	Intraoraalinen kovettumisaika
EXA Advanced Normal set (Injection & Regular)	2'00"	4'00"
EXA Advanced Fast set (Injection & Regular)	1'00"	1'30"

## Tekniikoiden käyttöopas

Tekniikka	Injektio	Regular
Kaksi vaihetta, kaksi materiaalia	● Putty ● Injection Wash-materiaalina EXAFAST- tai EXAFLEX-puttylle	● Putty ● Regular Wash-materiaalina EXAFAST- tai EXAFLEX-puttylle
Yksi vaihe, kaksi materiaalia	● Putty ● Injection Wash-materiaalina EXAFAST-puttylle	● Putty ● Regular Wash-materiaalina EXAFAST-puttylle
	Suositeltu	

\*Verrattuna EXAMIX:iin ja EXAFAST:iin

### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
info.gce@gc.dental  
http://europe.gc.dental

### GC NORDIC AB

Finnish Branch  
Lemminkäisenkatu 46  
FIN-20520 Turku  
Tel. +358.40.900.07.57  
info.finland@gc.dental  
https://europe.gc.dental/fi-FI



Since 1921  
100 years of Quality in Dental