



40 jaar ontwikkeling van nauwkeurige afdrukken

EXA Advanced™
van GC

Afdruk materiaal van A-silicone



EXA Advanced
Regular type
Normal set

138500



EXA Advanced
Regular type
Fast set

138100



EXA Advanced
Injection type
Normal set


138700



EXA Advanced
Injection type
Fast set

138300

GC

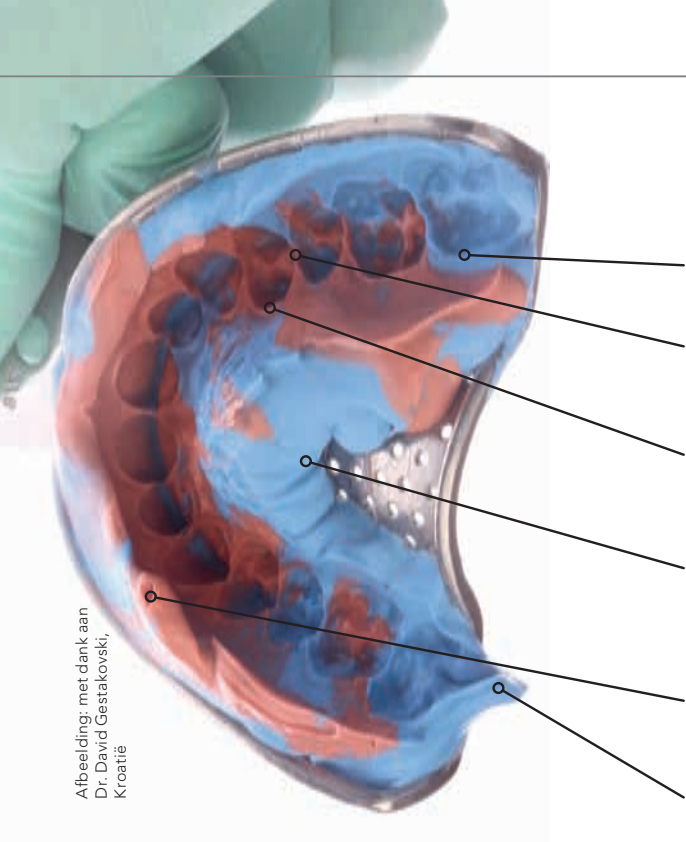

Abbeelding: met dank aan Dr. David Gestakovski, Kroatië

Het merk EXA staat garant voor kwaliteit

Rigiditeit en elasticiteit in perfect evenwicht voor de meest optimale resultaten.

Bestand tegen scheuren voor een nauwkeurige reproductie van de fijnste preparatiemarges.



Hydrofiel om alle details vast te leggen die nodig zijn voor een nauwkeurige reproductie.

Elastisch materiaal met een prettige geur en smaak voor het best mogelijke comfort voor zowel patiënten als behandelaars.

Volledig herstel na deformatie die optreedt bij verwijdering uit de mond van de patiënt.

Behoudt zijn nauwkeurigheid bij dagenlange opslag en transport, dankzij de uitstekende dimensionale stabiliteit.

Verhoogde treksterkte*

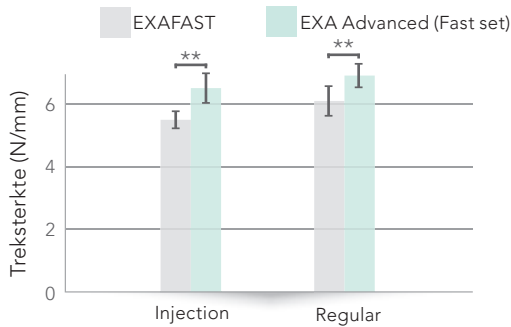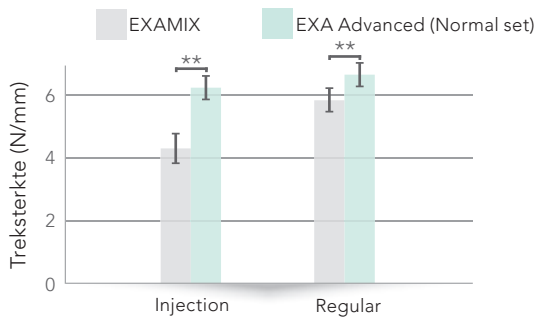

**p<0.05

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
info.gce@gc.dental
http://europe.gc.dental


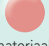





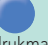

GC EUROPE N.V.

Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
https://europe.gc.dental/nl-NL

Verwerkings- en uithardingstijd

	Verwerkingstijd bij 23 °C	Intra-orale uithardingstijd
EXA Advanced Normal set (Injection & Regular)	2'00"	4'00"
EXA Advanced Fast set (Injection & Regular)	1'00"	1'30"

Techniekgids

Techniek	Injection	Regular
Twee stappen, twee materialen	 Putty  Injection Injecteerbaar afdruk materiaal in combinatie met EXAFAST of EXAFLEX Putty	 Putty  Regular Injecteerbaar afdruk materiaal in combinatie met EXAFAST of EXAFLEX Putty
Eén stap, twee materialen	 Putty  Injection Injecteerbaar afdruk materiaal in combinatie met EXAFAST Putty	 Putty  Regular Injecteerbaar afdruk materiaal in combinatie met EXAFAST Putty
	 Aanbevolen	

*In vergelijking met EXAMIX en EXAFAST



Since 1921
100 years of Quality in Dental