


De ce VPES™ ?

Motivul conceperii materialului EXA'lence a fost dorința de a duce stomatologia la un nou nivel cu ajutorul amprentelor previzibile în mod distinctiv.

O problemă des întâlnită în cazul luării amprentelor o reprezintă imposibilitatea controlului sângerării sau al fluidului crevicular al dinților pregătiți.

În cazul materialelor VPS tradiționale este adăugat un surfactant care are rolul de a determina materialul care în mod natural este hidrofob să se comporte ca un material hidrofilic. În realitate, surfactantul are tendința de a se dizolva atunci când intră în contact cu umiditatea, fapt ce poate determina un flux deficitar, spațieri sau bule de aer.


Hidrofilitatea și capacitatea de umectare intrinsecă a materialului de amprentă EXA'lence vă oferă posibilitatea să redați cele mai fine detalii ale suprafeței dintelui, chiar și în mediul umed.

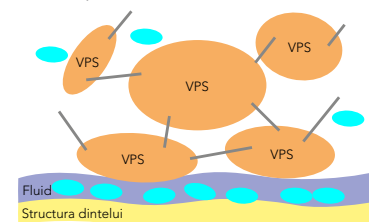

Agentii activi de suprafață sunt eliberați de pe suprafață în timpul realizării prizei

Consecință clinică: în timpul prizei intra-orale siliconul-A hidrofilic este îndepărtat de pe suprafețele umede


În cazul noului material VPES™ de la GC, hidrofilitatea apare în timp ce materialul face priză, fapt ce îi permite să redea toate detaliile fine.

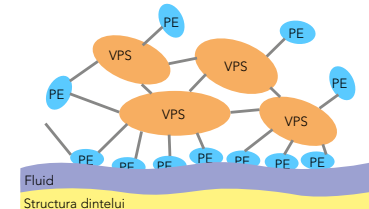

Noua formulă chimică evită difuzarea componentului hidrofilic complet integrat

Consecință clinică: în timpul prizei intra-orale EXA'lence este atras de suprafața umedă și intră în contact direct cu suprafața dintelui

Studiu independent ce arată faptul că EXA'lence oferă cele mai bune rezultate în mediul umed¹. EXA'lence pătrunde adânc în șanțul gingival, chiar și în mediul umed.

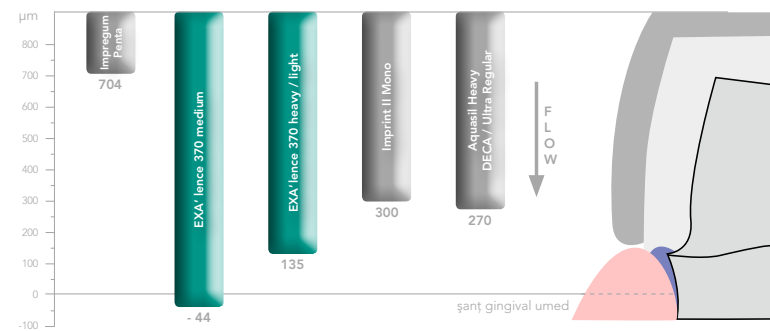

¹477 Wetting behaviour of Polyvinylsiloxane-Polyethers in Semi Clinical Model (CCIB). B. WÖST-MANN¹, M. ZENGINEL¹, P. REHMANN², and M. BALKENHOL¹, ¹Justus-Liebig-University, Giessen, Germany, ²Justus-Liebig-University Giessen, Giessen, Germany

Ambalare

GC EXA'lence 48 ml Cartuș

Rezervă: 2x 48 ml Cartuș și 6 Vârfuri de mixare, cu priză rapidă sau normală
Disponibil în următoarele vâscozități: Extra Light Body, Light Body, Medium Body (Monofazic), Heavy Body și Heavy Body Rigid

GC EXA'lence Putty

Pachet Standard: 500 g (278 ml) bază + 500 g (278 ml) catalizator + accesorii
Pachet Clinic: 5x 500 g (278 ml) bază + 5x 500 g (278 ml) catalizator + accesorii

GC EXA'lence, Technic Kit Monophase 370 ml

1x 370 ml Cartuș Medium Body (Monofazic), 10x Vârfuri de mixare dinamice, 1x Inel de fixare tip baionetă, 1x Flacon adeziv pentru lingură

GC EXA'lence, Technic Kit Wash Heavy 370 ml

1x 370 ml Cartuș Heavy Body Fast (cu priză rapidă), 10x Vârfuri de mixare dinamice, 1x Inel de fixare tip baionetă, 1x 48 ml Cartuș Light Body Fast (cu priză rapidă), 1x 48 ml Cartuș Extra Light Body Fast (cu priză rapidă), 12x Vârfuri de mixare, 1x Cutie Impression Separation Wafers, 12x Vârfuri intra-orale, 1x Adeziv pentru lingură

GC Europe are disponibile câteva Kituri Tehnice EXA'lence care combină materialele de care aveți nevoie pentru tehnica dumneavoastră preferată de luare a amprentei. Intrebați reprezentantul GC pentru mai multe detalii.

Produse adiacente

Mixer Dinamic

EXA'lence este perfect compatibil cu o gamă largă de aparate de mixare, ceea ce îl face o investiție eficientă pentru un cabinet stomatologic eliminând nevoia de achiziționare a echipamentelor adiționale.

GC Universal Dispenser II

Aplicator universal pentru toate materialele de amprentă și de captușire în cartușe de la GC.

GC Trays

Pentru a vă asigura că restaurarea se adaptează perfect de la prima încercare, este extrem de important să alegeți lingura potrivită. Indiferent dacă aveți nevoie de o lingură edentată, dentată sau pentru ocluzie închisă, vă oferim exact lingura care se potrivește cerințelor dumneavoastră. GC dispune de cea mai variată gamă de linguri standard disponibile în Europa.

GC Impression Separation Wafer

Pentru a îmbunătăți tehnica de luare a amprentei, am conceput sistemul Impression Separation Wafer, o tehnică simplă de creare a unei linguri „individuale” utilizând o lingură standard.



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EXA'lence 370

Kit Standard: 1x 370 ml Cartuș + 10 Vârfuri de mixare dinamice + 1 Inel de fixare tip baionetă, cu priză rapidă sau normală, cu vâscozitate Heavy Body și Medium Body
Rezervă: 2x 370 ml Cartuș cu priză rapidă sau normală, cu vâscozitate Heavy Body și Medium Body
Pachet Clinic: 6x 370 ml Cartuș cu priză rapidă sau normală, cu vâscozitate Heavy Body și Medium Body

GC EXA'lence, Technic Kit Wash Putty

1x Pachet Standard Putty (Chitos), 1x 48 ml Cartuș Light Body Regular, 1x 48 ml Cartuș Extra Light Body Regular, 12x Vârfuri de mixare, 12x Vârfuri intra-orale, 1x Cutie Impression Separation Wafers, 1x Adeziv pentru lingură

GC EXA'lence, Technic Kit 1-step Heavy 370 ml

1x 370 ml Cartuș Heavy Body Regular, 1x 48 ml Cartuș Light Body Regular, 1x 48 ml Cartuș Extra Light Body Regular, 10x Vârfuri de mixare dinamice, 1x Inel de fixare tip baionetă, 12x Vârfuri de mixare, 12x Vârfuri intra-orale, 1x Adeziv pentru lingură

GC Tray Adhesive

Interiorul tuturor lingurilor, perforate sau nu, trebuie căpușit întotdeauna cu GC Tray Adhesive pentru a ajuta la prevenirea „retracției” și distorsionării atunci când lingura este îndepărtată din cavitatea orală. Utilizarea unui adeziv pentru lingură ajută deasemenea ca polimerizarea directă și contracția termică să aibă loc înspre pereții lingurii și nu înspre centrul acesteia.

GC Exabite II

Oferiți tehnicianului dumneavoastră nu numai amprente superioare utilizând EXA'lence, ci și o înregistrare de înaltă calitate a ocluziei pacientului. Exabite II este un material consacrat de înregistrare a ocluziei de la GC care a fost conceput special pentru înregistrarea ocluziei. Exabite II este un material de amprentă vinil polisiloxanic cu o îmbunătățire semnificativă a manipulării și a acurateții, care se dozează ușor și face priză foarte rapid.

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, se ct. 1
RO - Bucuresti
Tel. +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

EXA'lence™ de la GC

Materialul de amprentă
al generației următoare

Performanță
de mare precizie
și rezultate excepționale.
Pentru amprente
perfecte în orice
condiții - de fiecare
dată.



z L L F RO 3 63 06/11

Pentru mai multe informații și detalii statistice vă rugăm accesați următorul website:
<http://iadr.confex.com/iadr/2010barce/webprogramcd/Paper136438.html>

Materialul de amprentă al generației următoare


Datorită experienței bogate în domeniul chimiei și în crearea de soluții destinate stomatologiei, GC a combinat cele mai bune calități din două materiale excepționale pentru a crea materialul de amprentă al generației următoare: material de amprentă **Silicon Vinil Polieteric (VPES™)**.

EXA'lence reprezintă soluția GC Europe pentru o **reproducere exactă și detaliată**. În cavitatea orală, mediul poate fi **imprevizibil și umed** dar cu EXA'lence puteți fi siguri că veți obține o amprentă fidelă de fiecare dată.

EXA'lence vă oferă:

- Compoziție hidrofilică intrinsecă
- Vâscozitate superioară în șanțuri
- Elasticitate superioară fără deformare
- Rezistență ridicată la fracturare
- Gust mentolat plăcut

O istorie a materialelor de amprentă elastomerice disponibile în stomatologie:

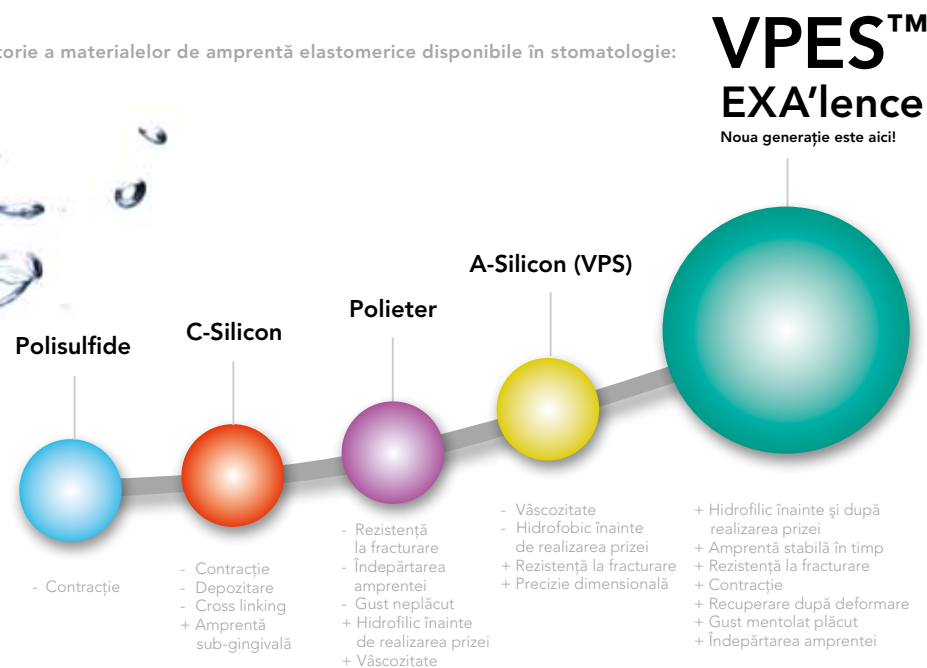

Un material, mai multe opțiuni

