


Почему VPES™ ?

Основная цель разработки материалов линейки EXA'lence - обеспечить получение точных слепков и предсказуемых надежных результатов, что позволит вывести область стоматологии на новый уровень.

Широко распространенной проблемой, с которой сталкиваются стоматологи при изготовлении слепков, является невозможность полностью контролировать кровотечение и течение десневой жидкости при препарировании зубов.

При работе с традиционными VPS материалами их поверхность обрабатывают поверхностно активными веществами (ПАВ), чтобы заставить гидрофобный материал приобрести гидрофильные свойства. К сожалению, практика показывает, что ПАВ вымываются с поверхности при контакте с влагой, что приводит к плохой текучести слепочного материала, а также образованию разрывов и пузырьков.


Высокая гидрофильность и смачиваемость EXA'lence позволят Вам снять слепок, воспроизводящий мельчайшие детали поверхности зубов, даже во влажной среде.

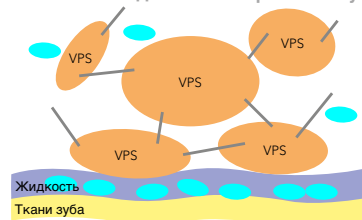

В процессе отверждения материала с его поверхности выделяются ПАВ

Клинические последствия: в процессе отверждения в полости рта гидрофильный А-силикон отталкивается от влажных поверхностей


У нового VPES™ материала компании GC гидрофильность проявляется в процессе отверждения, что позволяет ему отснять мельчайшие детали.

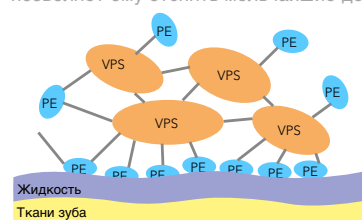

Новая химическая формула препятствует диффузии гидрофильного компонента, входящего в состав материала

Клинические последствия: в процессе отверждения в полости рта EXA'lence притягивается влажными поверхностями и вступает в максимально тесный контакт с поверхностью зубов

Независимое исследование, демонстрирующее, что EXA'lence обеспечивает наилучшие результаты при работе во влажной среде*. EXA'lence проникает глубоко в десневые бороздки даже в условиях влажности.

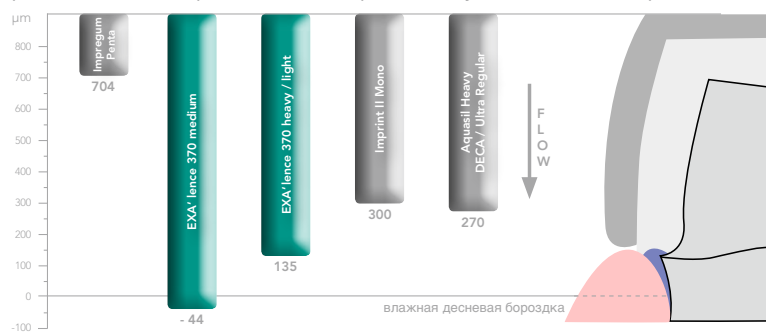

*1477 Wetting behaviour of Polyvinylsiloxane-Polyethers in Semi Clinical Model (CCIB), B. WÖST-MANN¹, M. ZENGINEL¹, P. REHMANN², and M. BALKENHOL¹, ¹Justus-Liebig-University, Giessen, Germany, ²Justus-Liebig-University Giessen, Giessen, Germany

Более подробную информацию и статистические детали Вы можете найти на сайте: <http://iadr.confex.com/iadr/2010barce/webprogramcd/Paper136438.html>

Упаковки

GC EXA'lence Картридж 48 мл
Отдельно: 2x 48 мл картриджа, быстрое или обычное отверждение, и 6 наконечников для смешивания
Имеются следующие версии вязкости: Extra Light Body, Light Body, Medium Body (Monophase), Heavy Body и Heavy Body Rigid

GC EXA'lence Putty
Стандартная упаковка: 500 г (278 мл) базы + 500 г (278 мл) катализатора + аксессуары
Упаковка для клиники: 5x 500 г (278 мл) базы + 5x 500 г (278 мл) катализатора + аксессуары

GC EXA'lence, Набор Technic Kit Monophase 370 мл
1x 370 мл картридж Medium Body (Монофаза), 10x Наконечников для смешивания Dynamic Mixing Tips, 1x штифтовое блокирующее кольцо, 1x флакон адгезива для ложек

GC EXA'lence, Набор Technic Kit Wash Heavy 370 мл
1x 370 мл картридж Heavy Body Fast (быстрое отверждение), 10x Наконечников для смешивания Dynamic Mixing Tips, 1x штифтовое блокирующее кольцо, 1x 48 мл картридж Light Body Fast (быстрое отверждение), 1x 48 мл картридж Extra Light Body Fast (быстрое отверждение), 12x Наконечников для смешивания, 1x упаковка изолирующих прокладок Impression Separation Wafers, 12x интра-оральных насадок, 1x флакон адгезива для ложек

GC Europe предлагает Вам несколько вариантов наборов EXA'lence Technic Kit, в каждый из которых входят все необходимые материалы для Вашей любимой техники снятия слепков. Более подробную информацию Вы можете получить от представителя компании GC в Вашем регионе.

Сопутствующие продукты

Миксер Dynamic Mixer
EXA'lence совместим с широким спектром смесителей, что позволяет любой клинике легко перейти на использование этого материала, не закупая дополнительного оборудования.

Диспенсер GC Universal Dispenser II
Универсальный диспенсер для всех слепочных и переработанных материалов компании GC, выпускаемых в картриджах.

Слепочные ложки GC Trays
Чрезвычайно важно выбрать правильную слепочную ложку - от этого зависит точность слепка и, в результате, посадка реставрации. У нас есть широкий выбор слепочных ложек, подходящих под любые Ваши требования: для снятия слепков при полной/частичной дентии, полной/частичной адентии, прикусные слепочные ложки - фактически, компания GC предлагает самый широкий ассортимент слепочных ложек во всей Европе.

Изолирующие прокладки GC Impression Separation Wafer
Для того чтобы снятие слепков стало еще проще, мы разработали систему изолирующих прокладок Impression Separation Wafer, которые позволяют легко создать индивидуализированную слепочную ложку из стандартной слепочной ложки.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Russia
129626 г. Москва
Кулаков переулок, д. 13,
офис 316
Тел. /926/ 007-21-31
info@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

Официальный импортер и дистрибьютор продукции компании ДЖИ СИ в России:
ООО Крафтвэй Медикал
129626, Москва
3-я Мытищинская ул. 16
Тел. /495/ 232-69-33, 287-67-67
Факс. /495/ 737-78-88
DENTAL@kraftway.ru
www.kraftwaydental.ru

EXA'lence™ от GC

Слепочный материал
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ



Высочайшая
точность
и великолепные
результаты.
Идеальные
слепки при любых
условиях - СНОВА
и СНОВА.



z L L F RU 3 63 06/11

Слепочный материал НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Благодаря огромному опыту в разработке стоматологических материалов и обширным познаниям в области химии сотрудникам компании GC удалось выделить наилучшие свойства двух высококачественных материалов и объединить их в слепочном материале нового поколения: **винил полиэфир силиконе (Vinil Polyether Silicone (VPES™))**.


EXA'lence - это разработанное компанией GC Europe решение для **детального и точного воспроизведения** рельефа при изготовлении стоматологических слепков. При работе в полости рта ситуация может быть **непредсказуемой, и попадание влаги** исключать нельзя, но на EXA'lence Вы всегда можете положиться - каждый слепок будет точным.

EXA'lence предлагает Вам:

- Гидрофильную структуру материала
- Высокую текучесть для заполнения малейших деталей рельефа
- Великолепную эластичность без деформации
- Высокую прочность на разрыв
- Приятный мятный вкус

История развития эластомерных слепочных материалов в сфере стоматологии:

VPES™
EXA'lence
Появилось новое поколение материалов!

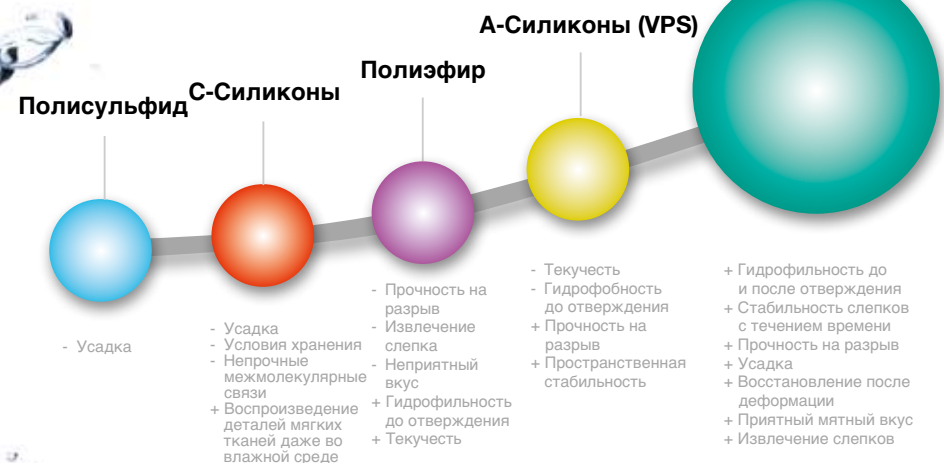

Один материал, множество ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПОКАЗАНИЕ

Полный съемный протез

1 ЭТАП - 1 МАТЕРИАЛ

Монофазный материал используется для снятия слепка под давлением и создания устойчивой основы слепка. Тот же материал наносится на поверхность отпрепарированных зубов для точного воспроизведения всех деталей.

ПОКАЗАНИЯ

Вкладки, виниры, накладки, полукоронки, изготовление слепков без подготовительного этапа, слепки на этапах изготовления ортопедической конструкции с опорой на имплантатах, имплантаты, коронки и мостовидные протезы

Набор Technic Kit Monophase 370

1 ЭТАП - 2 МАТЕРИАЛА

Материалы версии Heavy Body обеспечивают устойчивую базу слепка в слепочной ложке. Материалы версии Light Body или Extra Light (корректирующие материалы) наносятся на поверхность проснимаемых зубов для воспроизведения мельчайших деталей.

Набор Technic Kit One Step Heavy 370

ПОКАЗАНИЯ

Коронки, мостовидные протезы, первичные коронки

2 ЭТАПА - 2 МАТЕРИАЛА

С помощью материалов версии Putty или Heavy Body снимается предварительный слепок, формирующий устойчивую базу для дальнейшей работы. После обрезки излишков слепочного материала (не требуется, если при работе использовались Separation Wafers компании GC), снимается детальный слепок, используя материал версии Extra Light Body или Light Body.

Набор Technic Kit Wash Heavy 370 (Быстрое отверждение)

Набор Technic Kit Wash Putty (Стандартное отверждение)

