

GC okos megoldások

minden ragasztási kihíváshoz

Egyesítsük erőinket!



Hogyan válasszuk ki az optimális ragasztócementet?

Manapság szélesebb a választék, mint valaha, ha az indirekt helyreállítások tervezéséről és kivitelezéséről van szó. Attól a pillanattól kezdve, hogy a páciens belép a rendelő ajtaján, számos dolgot kell számításba venni a kezelési terv megalkotása előtt.

Fogorvosként bizonyára Ön is tudja, hogy nincs két egyforma páciens, ezért nagyon fontos a holisztikus szemlélet a kezelés során, valamint akkor, amikor az indirekt helyreállításról, a preparáció típusáról kell dönteni, arról, hogy mi illik a leginkább a páciens klinikai helyzetéhez.

Ennek a folyamatnak az egyik fontos része a megfelelő ragasztócement kiválasztása



A végső döntés meghozatala előtt a következő kulcskérdéseket kell feltennie:
Melyik az a ragasztócement, amelyik

segít megvédeni
a fog
szerkezetét?

segít
megvédeni a
fogpótlást?

Az optimális ragasztócement kiválasztása a garancia a gyönyörű mosolyra és a páciens hosszú távú elégedettségére



Fedezze fel a Mesteri 5 megoldást bármely ragasztási kihíváshoz

Több, mint 100 éves tapasztalattal és az egyik legátfogóbb termékportfólióval mi, a GC-nél hiszünk abban, hogy mi vagyunk az ideális partner az Ön számára, akik elvezetjük Önt a legmegfelelőbb ragasztási megoldáshoz.

Mert végezetül is, a hatékony ragasztás csapatmunka kérdése.

A GC mindegyik ragasztási megoldása különböző klinikai helyzetekre lett megalkotva, így egyedi jellemzőket kínálnak, legyen szó fizikai tulajdonságokról, munkaidőről, felhasználási protokollról vagy költségekről...

- G-CEM ONE
- G-CEM Kapszula

Egyesítsük erőinket!

Töltse le a **GC Luting Guide**-ot



- FREEGENOL
TEMPORARY PACK

Univerzális
önragasztó
rezin cement

Adhezív
rezin cement

- G-CEM LinkForce (kettős kötésű)
- G-CEM Veneer (fényre keményedő)

Rezinnel
megerősített
üvegionomer
(RMGI) cement

- GC Fuji PLUS
- GC FujiCEM 2
- GC FujiCEM Evolve

Cink-oxid
cement

Hagyományos
üvegionomer (GI)
cement

- GC Fuji I
- GC Fuji TEMP LT

MESTERI
5
**GC RAGASZTÁSI
MEGOLDÁSOK**

A klinikai szituációtól függően az első kérdés, amit felteszünk magunknak: CEMENTEZZEK vagy BONDOZZAK?

Mikor használjunk cementet?

Ragasztást általában akkor használunk, ha a preparáció lehetővé teszi a mechanikus retenciót.

Az alábbi klinikai aspektusok segítenek kiválasztani az optimális CEMENTEZÉSI eljárást:

Retentív előkészítés



Válasszon **GI** vagy **RMGI** cementet, mely ötvözi a könnyű és gyors használatot a fog védelmével.

Nem lehetséges az izoláció




Válasszon **GI** vagy **RMGI** cementet, mely nedvességgel szembeni toleranciát és a foghoz való kiváló adhéziót nyújt.

Mérsékelt esztétikum szükséges



Válasszon **GI** vagy **RMGI** cementet, amennyiben a klinikai szituáció vagy a választott felület (cirkon, fém és fémkerámia) nem igényel nagyon magas esztétikumot.

Speciális igényű páciens

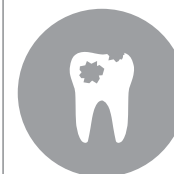

Válasszon **GI** vagy **RMGI** cementet a magas karieszrizikójú és idős pácienseknél.

Lehetőségek

Hagyományos üvegeionomer (GI) cement | GC megoldás: **GC Fuji I**
Rezinnel megerősített üvegeionomer (RMGI) cement | GC megoldás: **GC Fuji PLUS, GC FujiCEM 2** és **GC FujiCEM Evolve**.

Forrás: Dr. Lucile Dahan, Franciaország (1) és Prof. Jean-François Lasserre, Franciaország (2, 3 és 4)

„A legtöbbször a preparáció szélei szubgingiválisak, így a nedvesség teljes kontrollálása nehéznek bizonyul!”

DR. LUCILE DAHAN, FRANCIAORSZÁG

Mikor bondozzunk?

Bondozáshoz általában akkor folyamodunk, amikor extra adhézió szükséges, vagy amikor az esztétikum rendkívül fontos.

Nem retentív előkészítés



Válasszon **adhezív rezin cementet**, vagy **univerzális önragasztó cementet fog primerrel** ha a preparáció nem retentív.

Az **önragasztó cementet** (egyszerű használat) önmagában a közepesen retentív preparáció esetén javasoljuk.

Lehetséges az izoláció



Válasszon **önragasztó** vagy **adhezív rezin cementet**, amikor biztosítható a száraz munkafelület.

Magas esztétikum szükséges



Válasszon **önragasztó** vagy **adhezív rezin cementet** a nagyon esztétikus eredményért.

Extra adhézió szükséges



Válasszon **adhezív rezin cementet** vagy **univerzális önragasztó cementet fog primerrel vagy adhezívvel** a héjak és a hibrid kerámiák bondozásához (pl. CERASMART270).

Lehetőségek

Önragasztó rezin cement | GC megoldása: **G-CEM ONE** és **G-CEM kapszula**

Univerzális önragasztó rezin cement fog primerrel | GC megoldása: **G-CEM ONE** a **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primerrel** vagy **G-CEM ONE** a **G-Premio BOND-dal**

Adhezív rezin cement | GC megoldása: **G-CEM LinkForce (kettős kötésű)** és **G-CEM Veneer (fényre keményedő)**

Forrás: Prof. Jean-François Lasserre, Franciaország (1, 2 és 3)

Fedezze fel az összes ragasztási megoldást!

Az egyik legátfogóbb ragasztási portfólióval mi, a GC munkatársai reméljük, hogy hozzásegíthetjük páciense mosolyához.



Megoldásaink a végleges ragasztásra

Üvegionomer alapú cementek	Kompozit-rezin alapú cementek
GC Fuji™ I  Hagyományos üvegionomer (GI) cement • Költséghatékony • Rezinmentes cement 7. oldal	G-CEM ONE™ és G-CEM™ CAPSULE  (Univerzális) Önrasztó rezin cement • Hatékony önkötő mód • Egyszerű felhasználás 10. oldal
GC Fuji PLUS®  Rezinnel megerősített üvegionomer (RMGI) cement • Hosszú távú klinikai siker • Gondtalan felhasználás 8. oldal	G-CEM LinkForce™ (dual-kötésű)  Adhezív rezin cement • Magas adhézio • Magas esztétikum 11. oldal
GC FujiCEM™ 2 GC FujiCEM™ Evolve  Rezinnel megerősített üvegionomer (RMGI) cement • Egyszerű • Sokoldalú • Magas kötőerő a zirkonhoz 9. oldal	G-CEM® Veneer (fényre keményedő)  Adhezív rezin cement 2mm-nél vékonyabb restaurációk ragasztásához • Magas esztétikum • Könnyű behelyezés 12. oldal

Megoldásaink a ideiglenes ragasztásra

Cink-oxid cement	Hagyományos üvegionomer cement
FREEGENOL TEMPORARY PACK   13. oldal	GC Fuji TEMP LT®   13. oldal

GC Fuji I


Hagyományos üvegeionomer cement



Költséghatékony megoldás



Rezinmentes cement a metakrilátra (rezinre) allergiás páciensek számára

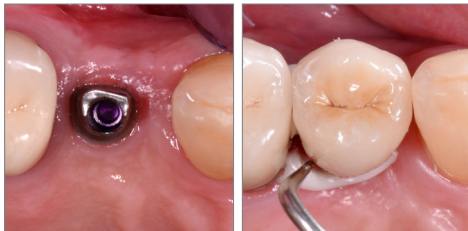

Jó megoldás az implantátum felépítmények ragasztására. A felesleg könnyen eltávolítható, csökkenti a periimplantitisz kockázatát.

Forrás: Dr. Emmanuel d'Incau, Franciaország

A biokompatibilis, rezinmentes megoldás 25 év nagyszerű klinikai sikerrel.

A GC Fuji I, a GC legelső ragasztó üvegeionomer cementje világszerte széles körben használt anyag.

Fedezze fel, miért számít még mindig jó választásnak a GC Fuji I.

Főbb klinikai előnyei

- **Kémiai adhézió** a fog szerkezetéhez, mely biztosítja a **kiváló széli zárást**
- **Nedvességtűrő** megoldás olyankor, amikor a száraz terület kialakítása nem megoldható
- **Gyors és egyszerű** megoldás a fog savazása és bondozása nélkül
- **Rezinmentes cement** a metakrilátra (rezinre) allergiás páciensek számára
- **Nincs posztoperatív érzékenység:** pulpabarát megoldás

Gyakorlati előnyei

- **Költséghatékony és egyszerűen használható** megoldás a fémalapú helyreállításokhoz
- Árfekvés: € € € € €

Színválaszték

- por/folyadék: világos sárga
- kapszula: világos sárga

Klinikai alkalmazások

	Fém / Fémkerámia	Cirkónium-dioxid /Alumínium-oxid
inlay / onlay	•	N.A.
korona / híd	•	•
csap / inlay-csap	•	-

„A GC Fuji I tökéletes a fix elemek végleges rögzítésére az implantációs felépítményekre. A felesleg eltávolítása egyszerű és könnyen ellenőrizhető, így csökken a periimplantitisz kockázata.”

DR. EMMANUEL D'INCAU, FRANCIAORSZÁG

GC Fuji PLUS

Rezinnel megerősített üvegeionomer cement



Hosszan tartó
klinikai siker



Tökéletes egyensúly
a fog védelme és az
adhézió között



A felesleg egyszerű
eltávolítása



Kiszámítható és
gondtalan megoldás

Hatékony több, mint 20 éve – a kiszámítható és gondtalan megoldás.

A GC Fuji PLUS az egyik legismertebb anyag, mely kategóriájának vezetőjeként ismert, az üvegeionomer cementek fogvédelmét és a rezin cementek erejét és esztétikumát ötvözi.

Főbb klinikai előnyei

- **Kémiai adhézió** a fog szerkezetéhez, mely biztosítja a **kiváló széli zárást**
- **Nedvességtűrő megoldás** olyankor, amikor a száraz terület kialakítása nem megoldható
- **Gyors és egyszerű** megoldás a fog savazása és bondozása nélkül
- Gumyszerű konzisztencia a **felesleg egyszerű eltávolíthatósága** érdekében
- **Nincs posztoperatív érzékenység**: pulpabarát megoldás

Gyakorlati előnyei

- **Bizonyított és kiszámítható** teljesítmény a legtöbb rutin esetben
- Különböző színekben elérhető
- Meghosszabbított munkaidővel is elérhető (EWT) a nagy fesztávú hidakhoz
- Árfekvés: €€€€€

Színválaszték

- por/folyadék:
A3, sárga, transzlucens
- kapszula: A3, sárga

Klinikai alkalmazások

	Fém / Fémkerámia	Földpát/ leucit kerámia* (pl. GC Initial LRF)	Lítium- diszilikát (pl. GC Initial LiSi Press, LiSi Block)	Cirkónium- dioxid/ Alumínium-oxid	Kompozit / Üvegszállal megerősített rezin
inlay / onlay	●	● (inlay)	●	N.A.	●
korona / híd	●	-	●	●	●
csap / inlay-csap	●	N.A.	N.A.	●	●

„Rendelőnk közel két évtizede használja a GC Fuji PLUS-t. Nem emlékszem egyetlen hibára sem, pedig több, mint 5000 koronát és hidat ragasztottunk vele.”

DR. HAN HEESSEN, HOLLANDIA


* Földpát és leucit megerősítésű kerámia

GC FujiCEM 2 / GC FujiCEM Evolve

Rezinnel megerősített üvegeionomer cement

Az egyszerűség innováció!

Az első rezinnel megerősített üvegeionomer cement paszta-paszta formátumban. Ez a könnyen felhasználható és sokoldalú ragasztócement tökéletes partner a legtöbb rutin cementezési munka esetén.

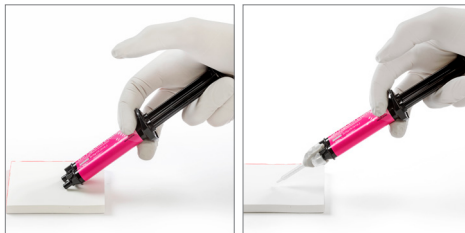

Kézi keverés

Automix



Könnyű kiadagolás

Könnyen eltávolítható a felesleg, GC FujiCEM Evolve

Forrás: Dr J. Tapia Guadix

Főbb klinikai előnyei

- **Kémiai adhézió** a fog szerkezetéhez, mely biztosítja a kiváló **széli zárást**
- **Nedvességtűrés:** elengedhetetlen, amikor a száraz környezet nem biztosítható
- **Gyors és egyszerű:** nincs szükség savazásra és bondozásra
- Gumyszerű konzisztencia a **felesleg egyszerű eltávolíthatósága** érdekében
- **Nincs posztoperatív érzékenység:** pulpabarát megoldás
- Erős kötés a restaurátmhoz, főként a cirkóniumhoz a GC FujiCEM Evolve esetében

Gyakorlati előnyök

- Kézi keverés és automix: a választás az Öné!
- Árfekvés: € € € € €

Színválaszték

- GC FujiCEM 2: világossárga
- GC FujiCEM Evolve: univerzális

Klinikai alkalmazások

	Fém / Fémkerámia	Földpát/ leucit kerámia* (pl. GC Initial LRF)	Lítium- diszilikát (pl. GC Initial LiSi Press, LiSi Block)	Cirkónium- dioxid/ Alumínium-oxid	Kompozit / Üvegszállal megerősített rezin
inlay / onlay	•	• (inlay)	•	N.A.	•
korona / híd	•	-	•	•	•
csap / inlay-csap	•	N.A.	N.A.	•	•

„A GC FujiCEM Evolve egy rendkívül felhasználóbarát ragasztó, ami egyesíti a könnyű felhasználást, a nedvesség tűrést és a sokoldalúságot. Cirkónium és fémkerámia restaurációk ragasztásához egyaránt ideális, különösképpen iuxta és subgingivális szélek esetén. Ráadásul, a felesleges cement eltávolítása rendkívül egyszerű és biztonságos, és az izolálás sem szükséges. Egy okos anyag, amely leegyszerűsíti és felgyorsítja a cementálás folyamatát.”

PROF ROBERTO SORRENTINO, OLASZORSZÁG

* Földpát és leucit megerősítésű kerámiák

G-CEM ONE

Univerzális önragasztó rezin cement



Flexibilis: az opcionális fog primer használata optimális kötést biztosít a retentív és nem retentív indikációkban



Könnyű felesleg eltávolítás, opcionális részpolimerizáció

Hosszan tartó esztétikai eredmény

Olyan megoldást keres, amely leegyszerűsíti a mindennapi rögzítési eljárásokat, és még ennél is többet?

Válassza a G-CEM ONE-t, egy kettős kötész rendelkező univerzális önragasztó rezin cementet, amely nagy tapadási szilárdsággal rendelkezik a mindennapi eljárásokhoz, és amely az opcionális primer vagy az adhezív alkalmazásával kihívást jelentő és nem retentív helyzetekben is használható.

Főbb klinikai előnyei

- **Megbízható:** hatékony kémiai polimerizáció még opak és vastag réteg esetén is
- **Rugalmas:** megnövelt fog adhézió az Adhesive Enhancing Primer (AEP) Touch Cure technológiának vagy a G-Premio BOND univerzális adhezívnek köszönhetően
- **Esztétikus:** kiváló kopásállóság a hosszú távú láthatatlan szélekért

Gyakorlati előnyök

- **Univerzális:** megbízható teljesítmény minden típusú restauráció esetén, beleértve a nem retentív eseteket is (Adhesive Enhancing Primer vagy G-Premio Bond használatával)
- **Nem technika érzékeny:** nedvességtűrő, ideális viszkozitás, könnyű felesleg eltávolítás
- **Egyszerű:** sztandardizált protocol, nagyon egyszerű alkalmazás
- **Árfekvés:** €€€€€

Színválaszték

- A2, transzlucens, AO3, fehér opak

Klinikai alkalmazások

	Fém / Fémkerámia	Földpát/ leucit kerámia* (pl. GC Initial LRF)	Lítium-diszilikát (pl. GC Initial LiSi Press, LiSi Block)	Cirkónium- dioxid/ Alumínium- oxid	Kompozit / Üvegszállal megerősített rezin	Hibrid kerámia (CERASMART270)
inlay / onlay	●	●	●	●	●	●
korona / híd	●	●	●	●	●	●
héj	N.A.	●	●	●	●	●
csap/ inlay-csap	●	N.A.	N.A.	●	●	N.A.

„A G-CEM ONE feleslegét rendkívül könnyű eltávolítani, és a rendszert könnyű használni.


Szeretjük azt a rugalmasságot is, hogy eldöntsük, szükség van-e a primerre vagy sem, és az a biztonságot is, hogy minden esetben megköt, még a önkötő módban is. Nagyszerű termék! ”

DR MELIKE AND DR DAVID BERGFORT, NÉMETORSZÁG


* Földpát, leucit megerősítésű kerámiák

G-CEM LinkForce


Dual kötésű adhezív rezin cement

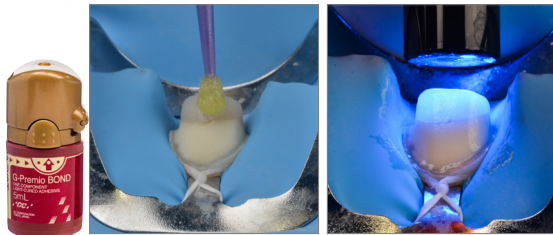


A G-Premio BOND egyszerű applikációja előzetes savazással vagy anélkül

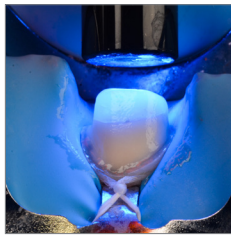

Vékony réteg (3µm) polimerizálása az optimális adhézió érdekében

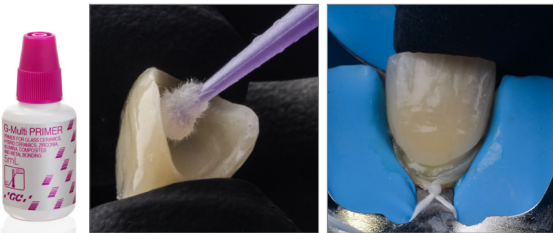

Egy univerzális primer a stabil adhézióhoz bármely felületen

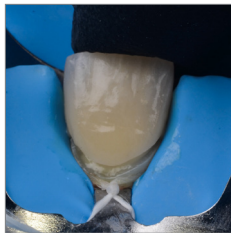

Könnyű applikálás és tökéletes adaptáció a nagyon kis rétegvastagságnak köszönhetően

Erő és esztétikum egy rendszerben, minden indikációhoz, minden anyaghoz

A G-CEM LinkForce olyan univerzális adhezív, mely ideális minden esetben, amikor további retenció szükséges, és nélkülözhetetlen minden CAD/CAM kerámia, és hibrid kerámia, például a CERASMART270 esetében.

Főbb klinikai előnyei

- Minden helyzetben biztosítja az adhéziót **egyetlen rendszerben, három fő alkotórészének** köszönhetően:
 - G-Premio BOND kompromisszumok nélküli bondozás MINDEN felületen
 - G-Multi Primer stabil adhézió MINDEN helyreállításánál
 - G-CEM LinkForce erős kötés MINDEN indikációnál
- Optimális fénypolimerizálás héjak indikációjához
- **Hatékony önkötő mód**, hasznos az opak és a vastag helyreállítások ragasztásakor

Gyakorlati előnyei

- G-Premio BOND Dual-Cure Activator opcionális használata gyökércsap ragasztáshoz
- Univerzális, esztétikus és erős teljes megoldás minden adhezív ragasztási kihíváshoz
- **Négy esztétikus szín** közül választhat, amikhez illeszkedő **try-in pasztákat** is kínálunk
- Árfekvés: € € € € €

Színválaszték

- A2, transzlucens, fehéritett, opak

Klinikai alkalmazások

	Fém / Fémkerámia	Földpát/ leucit kerámia* (pl. GC Initial LRF)	Lítium- diszilikát (pl. GC Initial LiSi Press, LiSi Block)	Cirkónium- dioxid/ Alumínium- oxid	Kompozit / Üvegszállal megerősített rezin	Hibrid kerámia (CERASMART270)
inlay / onlay	●	●	●	N.A.	●	●
korona / híd	●	●	●	●	●	●
héj	N.A.	●	●	N.A.	●	●
csap / inlay-csap	●	N.A.	N.A.	●	●	N.A.

„Mindig a G-CEM LinkForce az elsődleges választásom, bármilyen indikációról legyen is szó. Napról napra meg tud lepni.”

DR. CASTI, OLASZORSZÁG


* Földpát és leucit megerősítésű kerámiák

G-CEM Veneer


Fényre keményedő adhezív rezin cement



Könnyű adagolás

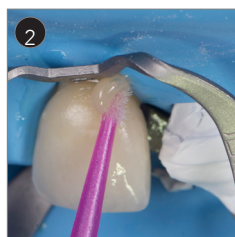

Tixotróp konzisztencia:
felesleg könnyű eltávolítása

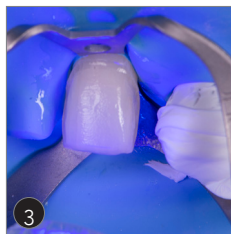

Fényre keményedő kompozit: Hosszan tartó esztétikum



Forrás: Dr Javier Tapia Guadix, Spanyolország (1),
Dr Olivier Etienne, Franciaország (2, 3, 4)

Solkodalú rezin cement a 2mm-nél vékonyabb restaurációk könnyű ragasztásához

G-CEM Veneer: egy fényre keményedő rezin cement esztétikus ragasztásokhoz, mely könnyen behelyezhető a Full-coverage Silane Coating (FSC) technológiának köszönhetően.

Főbb klinikai előnyei

- **Tixotróp konzisztenciával** a héjak könnyű felhelyezéséért és a főleg eltávolításáért
- Kimagasló tulajdonságokkal rendelkezik a **magas töltőanyag tartamának** köszönhetően 69% (w/w): magas a kopásállósága és nagy a hajlítási szilárdága a hosszú távú esztétikum érdekében
- Jó alternatívája a melegített kompozitoknak, vékony, indirekt helyreállításoknál kisebb hibakockázattal

Gyakorlati előnyök

- Könnyen használható az univerzális rendszereinkkel G-Premio BOND vagy G-Multi PRIMER
- 4 színárnyalat, mely az összes esetet fedi, G-CEM Try-in pasztákkal
- Ergonómikus fecskendő
- Árfekvés: €€€€€

Színválaszték

- A2, transzlucens, fehérített, opak

Klinikai alkalmazások

	Üvegkerámia* (pl. GC Initial LRF, GC Initial LiSi Press)	Hibrid kerámia (pl. CERASMART270)	Kompozit (pl. GRADIA PLUS)
Héj	●	●	●
inlay / onlay	● (< 2.0 mm rétegvastagság)	● < 2.0 mm rétegvastagság)	● < 2.0 mm rétegvastagság)

“Számomra, a G-CEM Veneer kit különösképpen a modern ragasztási kihívásokhoz ideális, a minimálinvazív kerámia restaurációk esetében. Remek folyékonyságot mutat, ugyanakkor megtartja a magas viszkozitást, a megfelelő széli záródás biztosítása érdekében, polimerizálás előtt.”

PROF JEAN-FRANCOIS LASSERRE, FRANCIAORSZÁG

* Földpát, leucit megerősítésű kerámiák és lítium-diszilikát

GC ideiglenes cementek...

FREEGENOL TEMPORARY PACK

Cink-oxid cement



Főbb tulajdonságai

- Ideiglenes megoldás minden célra
- Szabályozható konzisztencia és kötési idő
- Felesleg könnyű eltávolítása
- Eugenol-mentes, kerülje a rezin cementtel való érintkezést

GC Fuji TEMP LT

Hagyományos üvegonomer cement Paste-pak patronban



Főbb tulajdonságai

- Biztos retenció és könnyű eltávolítás
- A kis rétegvastagságnak (6µm) köszönhetően egyszerű felhelyezés
- A felesleg egyszerű eltávolítása a gumiszerű konzisztenciának köszönhetően
- Radiopacitás
- Implant felépítmények ideális ragasztása

Fedezze fel a GC primerjeit is...

Akár specializált, akár univerzális primert keres, a GC tudja, mi a megoldás.

Univerzális megoldás G-Multi PRIMER

Egy univerzális primer
MINDEN indirekt
helyreállításához.



Specializált megoldások CERAMIC PRIMER II

Esztétikus indirekt helyreállításokra
specializálódott primer. Kompatibilis
az üvegkerámia, hibrid kerámia,
cirkónium-dioxid, alumínium-oxid és
kompozit helyreállításokkal.



METAL PRIMER Z


Az összes **fém és**
fémkerámia helyreállítás
hőse.



GC ragasztási navigációs táblázat.
Találja meg a megfelelő cemente(ke)t,
hogy legyőzze az összes ragasztási kihívást!

GC ragasztási navigációs táblázat. Találja meg a megfelelő cemente(ke)t, hogyan legyőzze az összes ragasztási kihívást!		Üvegionomer			Rezin			
		Önkötő			Dual kötészű			Fényre kötő
		Hagyományos	Műgyantával megerősített		Önragasztó	Univerzális	Adhezív	Adhezív
		GC Fuji I	GC Fuji PLUS	GC FujiCEM Evolve	G-CEM ONE	G-CEM ONE + AEP vagy G-Premio BOND	G-CEM Link Force	G-CEM Veneer
Korona és híd	Fém	●						
	Cirkónium		●	●				
	Lítium-diszilikát (pl. Initial LiSi Press)				●	●	●	—
	Kompozit (pl. GC GRADIA PLUS)							
	Földpát és Leucit rmegeősítésű kerámia (pl. Initial LRF)	—		—				
	Hibrid kerámia (pl. CERASMART270)		—	—	—			
Inlay és onlay	Fém	●						—
	Cirkónium		●	●				
	Lítium-diszilikát (pl. Initial LiSi Press)				●	●	●	
	Kompozit (pl. GC GRADIA PLUS)	—						● *1
	Földpát és Leucit rmegeősítésű kerámia (pl. Initial LRF)		inlay	inlay				
	Hybrid ceramics (e.g. CERASMART270)		—	—	—			
Héj	Lítium-diszilikát (pl. Initial LiSi Press)							
	Kompozit (pl. GC GRADIA PLUS)							
	Földpát és Leucit rmegeősítésű kerámia (pl. Initial LRF)	—	—	—	—	●	● *1	
	Hibrid Kerámia (pl. CERASMART270)							
Csap és inlay csap	Fém	●						
	Cirkónium		●	●	●	●	●	—
	Üvegcsállal megerősített	—						

Tudjon meg többet a GC ragasztócementjeiről

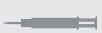	Hagyományos üvegionomer		Rezinnel megerősített üvegionomer				Önragasztó rezin		Adhezív rezin	
	GC Fuji I 	GC Fuji I 	GC Fuji PLUS 	GC Fuji PLUS EWT*2 	GC Fuji PLUS 	GC FujiCEM 2 / GC FujiCEM Evolve 	G-CEM 	G-CEM ONE 	G-CEM LinkForce 	G-CEM Veneer 
Színek	világossárga	világossárga	sárga, transzlucens, A3	A3	sárga, A3	világossárga	A2, transzlucens, AO3, BO1	A2, transzlucens, AO3 és fehér opak	A2, transzlucens, opak, fehérített	A2, transzlucens, opak, fehérített
Keverési idő	20 mp	10 mp	20 mp	20 mp	10 mp	20 mp**	10 mp	N.A.	N.A.	N.A.
Munkaidő	2 perc	2 perc 15	2 perc 30	3 perc 30	2 perc	2 perc 15	2 perc 30	2 perc 40 2 perc 10 (AEP-vel)	3 perc	N.A.
Végso finírozás megkezdési ideje	4 perc 30	4 perc 30	4 perc 30	5 perc 45	4 perc 15	4 perc 30	4 perc	4 perc	4 perc	N.A.

Megjegyzés: *1 Vékony rétegvastagságú (≤ 2mm) indirekt helyreállításokhoz, ami lehetővé teszi a fénypolimerizálást. *2: EWT: Kiterjesztett munkaidő: tökéletes a hidak ragasztásához


** kézi keverés esetén

Egyesítsük erőinket! Fedezze fel a GC ragasztási megoldásait, győzzön le minden ragasztási kihívást!

GC FujiCEM 2, GC FujiCEM Evolve és GC Fuji PLUS

Rezin-módosított üvegiomer cement

Kategóriájának vezetőjeként ismert. Ideális, gondtalan megoldás a rutin eljárásokhoz, különösen fém és fémkerámia ragasztásakor fémhez és cirkónium-dioxidhoz. Ezek az Ön nélkülözhetetlen anyagai, főként mikor a nedvességtől való elzárás problémássá válik.

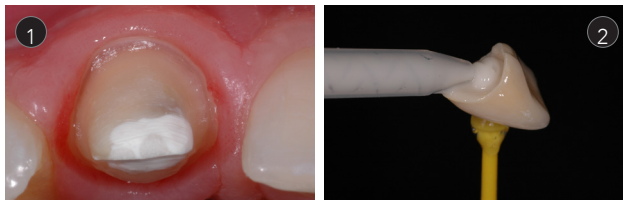

- 1 | Tökéletes megoldás a szubgingivális széleknél.
- 2 | Könnyű adagolás
- 3 | A felesleg könnyű eltávolítása
- 4 | A fog teljes védelme



Forrás: Prof. Jean-François Lasserre (1), Dr. Frédéric Raux (2 és 4) és Dr. Emmanuel d'Incau (3), Franciaország

G-CEM ONE

Univerzális kettős kötésű önragasztó rezin cement

Egyszerű megoldás minden rögzítési indikációra, kiszámítható eredménnyel. Az opcionális Touch Cure primerrel vagy az univerzális G-Premio BOND adhezívvel ellátva még a nem retentív indikációk is megvalósíthatóak. A kiváló önkötő képessége még vastag vagy átlátszatlan restaurációk esetén is tökéletes eredményt biztosít.



- 1 | Használható retentív preparáció esetén magában és nem retentív preparáció esetén G-CEM ONE AEP vagy G-Premio BOND anyaggal
- 2 | Nem technik érzékeny és nedvességtűrő
- 3 | Könnyű alkalmazás és fölösleg eltávolítása
- 4 | Esztétikus eredmény



Forrás: Dr Kazunori Otani, Japán


G-CEM LinkForce és G-CEM Veneer

Adhezív rezin cement

Amikor kompromisszumok nélküli adhézóra van szükség, ez az anyag A megoldás. Ez az univerzális adhezív lehetővé teszi, hogy a standardizált módon dolgozzon, és erős kötést biztosít minden anyaghoz.



- 1 | A G-Premio BOND egyszerű applikációja
- 2 | Az optimális adhéziónak érdekében a vékony bondréteg polimerizációja
- 3 | Univerzális Primer a stabil adhéziónak, minden anyaghoz
- 4 | Könnyű applikáció, tökéletes adaptáció

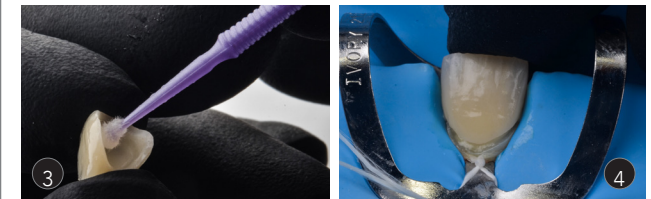

Forrás: Dr. Antonio Saiz-Pardo, Spanyolország

GC Fuji I	
	10000504 Intro csomag: 1x világossárga por (35 g) és 1x folyadék (20 ml) EEP
	10000505 világossárga por utántöltő (35 g) EEP
	10000506 folyadék utántöltő (20 ml) EEP
	10000503 világossárga kapszula (50 db) EEP
GC Fuji PLUS	
	10000510 Intro csomag: Full Set A3 (15 g por A3, 7 ml folyadék, 6.5 mL Conditioner)
	10000521 EWT utántöltő (meghosszabított munkaidejű) A3 por (15 g) EEP
	10000511 sárga por utántöltő (15 g) EEP
	10000512 A3 por utántöltő (15 g) EEP
	10000513 transzlucens por utántöltő (15g) EEP
	10000514 folyadék utántöltő (7 ml) EEP
	10000508 kapszula sárga (50 db) EEP
	10000509 kapszula A3 (50 db)
GC FujiCEM 2	
	10003461 Automix csomag: 2x Paste Pak patron (13.3 g), 44x keverőcsőr EEP
	10003458 2x Paste Pak patron utántöltő (13.3 g / 7.2 ml)
	10003464 keverőcsőr SL (20 db)
	10003465 keverőcsőr endo SL (10 db)
70000002 GC Paste Pak adagoló	
GC FujiCEM Evolve	
	10004927 Single csomag: 1x fecskendő (9.2 g / 5.0 ml), 15x GC Push and Click Tip Regular EEP
	10004871 Triple Pack Handmix: 3x fecskendő (9.2 g / 5.0 ml), 1x Mixing Pad #22 EEP
	10004930 Triple Pack Automix: 3x fecskendő (9.2 g / 5.0 mL), 45x GC Push and Click Tip Regular EEP
	10004917 GC Push and Click Tip Regular (15 db)
10004929 GC Push and Click Tip Endo (15 db)	
G-CEM	
	10000516 50 kapszula vegyes 20 db A2, 20 db transzlucens, 5 db A03, 5 db BO1
	10000515 A2 kapszula utántöltő (50 db)
	10000518 A03 kapszula utántöltő (50 db)
	10000519 transzlucens kapszula utántöltő (50 db)
10000520 BO1 kapszula utántöltő (50 db)	
10000891 GC kapszula meghosszabító csőr (50 db)	
G-CEM ONE	
	10006929 System készlet: 1x fecskendő A2 (4.6 g / 2.7 ml), 1x fecskendő TR (4.6 g / 2.7 ml) 1x Adhesive Enhancing Primer (4 ml), 1x G-Multi PRIMER (5 ml), tartozékok
	10006927 Starter készlet A2: 1x fecskendő (4.6 g), 1x Adhesive Enhancing Primer (2 ml), tartozékok
	10006928 Starter készlet transzlucens: 1x fecskendő (4.6 g), 1x Adhesive Enhancing Primer (2 ml), tartozékok
	10037118 Universal Starter készlet A2: 1x G-CEM ONE fecskendő (4,6g), 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, 1x G-Premio BOND 5ml
	10037119 Universal Starter készlet transzlucens: 1x G-CEM ONE fecskendő (4,6g), 8x GC Automix Tips Regular, 2x GC Automix Endo tips, 1x G-Premio BOND 5ml
	10037120 Universal System készlet: 1x G-CEM ONE fecskendő A2 (4,6g), 1x G-CEM ONE fecskendő TR (4,6g), 15x GC Automix Tips Regular, 5x GC Automix endo tips, 1x G-Premio BOND 5ml, 1x G-Multi PRIMER 5ml
	10006930 A2 dupla utántöltő, 2x fecskendő (4.6 g / 2.7 ml)
	10006931 transzlucens dupla utántöltő, 2x fecskendő (4.6 g / 2.7 ml)
10006932 A03 utántöltő, 1x fecskendő (4.6 g / 2.7 ml)	
10006933 opak utántöltő, 1x fecskendő (4.6 g / 2.7 ml)	
10006934 Value utántöltő A2, 8x fecskendő (4.6 g / 2.7 ml)	
10006935 Value transzlucens, 8x fecskendő (4.6 g / 2.7 ml)	
10006834 G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (4 ml) utántöltő	

G-CEM LinkForce	
	10001338 System készlet: 1x fecskendő A2 (8.7 g / 5 ml), 1x fecskendő Transzlucens (8.7 g / 5 ml), G-Premio BOND (5 ml), G-Premio BOND DCA (3 ml), G-Multi PRIMER (5 ml), G-CEM Try-in Pastes (A2, Transzlucens) (1.2 ml / 1.5 g), GC sav, tartozékok
	10001339 Starter Kit A2: 1x fecskendő A2 (8.7 g / 5 ml), G-Premio BOND (5 ml), G-Multi PRIMER (5 ml), tartozékok
	10001340 Starter Kit Translucent (TR): 1x fecskendő Transzlucens (8.7 g / 5 ml), G-Premio BOND (5 ml), G-Multi PRIMER (5 ml), tartozékok
	10001341 A2 utántöltő - 1x (8.7 g / 5 ml)
	10001342 transzlucens TR - 1x (8.7 g / 5 ml)
	10001343 opak utántöltő - 1x (8.7 g / 5 ml)
	10001344 fehéritett utántöltő - 1x (8.7 g / 5 ml)
	10001484 GC G-CEM Try-In Paste A2 (1.5 g / 1.2 ml)
10001485 GC G-CEM Try-In Paste transzlucens (1.5 g / 1.2 ml)	
10001486 GC G-CEM Try-In Paste opak (1.5 g / 1.2 ml)	
10001487 GC G-CEM Try-In Paste fehéritett (1.5 g / 1.2 ml)	
10001462 G-Premio BOND (5 ml) utántöltő EEP	
10001349 G-Premio BOND DCA (3 ml)	
10003335 GC Automix Tip Regular (10 db)	
10003289 GC Automix Tip for Endo (10 db)	
G-CEM Veneer	
	10001382 Készlet: 1x fecskendő A2 (1.7 g / 1 ml), 1x fecskendő TR (1.7 g / 1 ml), 1x G-CEM Try-in Paste Refill A2 (1.5 g / 2 ml), 1x G-CEM Try-in Paste Refill TR (1.5 g / 2 ml), G-Premio BOND (5 ml), G-Multi PRIMER (5 ml), tartozékok
	10001387 A2 utántöltő (1.7 g / 1 ml) EEP
	10001388 transzlucens utántöltő (1.7 g / 1 ml) EEP
	10001389 opak utántöltő (1.7 g / 1 ml) EEP
	10001390 fehéritett utántöltő (1.7 g / 1 ml) EEP
	10001484 GC G-CEM Try-In Paste A2 (1.5 g / 1.2 ml)
	10001485 GC G-CEM Try-In Paste transzlucens (1.5 g / 1.2 ml)
	10001486 GC G-CEM Try-In Paste opak (1.5 g / 1.2 ml)
10001487 GC G-CEM Try-In Paste fehéritett (1.5 g / 1.2 ml)	
10001462 G-Premio BOND (5 ml) utántöltő EEP	
Temporary Cements	
	10000675 FREEGENOL TEMPORARY PACK 1-1 csomag tubus EEP (55 g Base, 20 g Accelerator, 2.5 ml Cleaner)
	10000856 GC Fuji TEMP LT 2x (13.3 g / 7.2 mL) Paste Pak patron 2x (13.3 g / 7.2 mL)
Primers	
	10001350 G-Multi PRIMER (5 ml) folyadék
	10001203 GC CERAMIC PRIMER II (3 ml) folyadék EEP
	10001204 GC CERAMIC PRIMER II egyadagos kiszerezés (10 db)
	10001265 GC METAL PRIMER Z (5 ml) folyadék

GC EUROPE N.V. | Head Office

Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/en>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Hungary
Fazekas utca 29-31.
1027 Budapest
Tel. +36 1 224 04 00
info.hungary@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/hu-HU>