

# FujiCEM Evolve

Ciment ionomer de sticlă inovator, îmbunătățit cu rășină, pentru o performanță de încredere și confort agreabil

## Un pas înainte



# GC FujiCEM™ Evolve

## Un pas înainte

Ionomerii de sticlă reprezintă moștenirea companiei GC, cu o calitate dovedită prin studii independente realizate în întreaga lume. Faceți un pas înainte optând pentru o aplicare simplă, o sensibilitate mai redusă la tehnica utilizată și o toleranță ridicată la umiditate cu FujiCEM Evolve.



Indicat pentru:



### Mixare manuală sau automixare



- Orificiile cartușului sunt distanțate: pastele nu se contaminatează reciproc, mixarea manuală este posibilă

- Vârf de mixare "Push & Click" ușor de atașat
- Poate fi dozat direct în restaurare sau în canalul radicular (cu vârful endo)



### Ionomerul de sticlă îmbunătățit cu rășină în care puteți avea încredere

- Sensibilitate redusă la tehnica utilizată comparativ cu cimenturile rășinice
- Nu necesită pre-tratament: aplicare într-o singură etapă
- Timp de lucru prelungit, timp scurt de realizare a prizei
- Tolerant la umiditate: nu necesită utilizarea digii
- Risc scăzut de sensibilitate post-operatorie
- Sigilare și adaptare marginală excelente



Prin amabilitatea Dr. J. Tapia Guadix, Spania

### Vâscozitate optimă

- Dozare controlată pentru o procedură simplă
- Grosime redusă a filmului & adaptare precisă
- Opțiune de pre-polimerizare pentru îndepărtarea simplă a excesului



Prin amabilitatea Dr. J. Tapia Guadix, Spania

## Capacitate ridicată de umectare la zirconia




Cimentul de cimentare pe bază de rășină compozită nu penetrează microporozitățile din zirconia.



Acidul poliacrilic îmbunătățește capacitatea de umectare pentru a penetra microporozitățile de pe suprafața dintelui și a restaurării și a crea o integrare puternică.


## Adeziune optimizată la zirconia

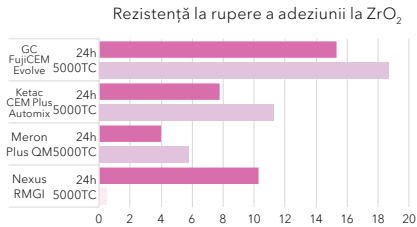

Sursa: Date GC R&D, Japonia, 2018.. Date la cerere.

## Tehnologia lanțurilor monomerice lungi

- Lanțuri monomerice super-lungi pentru rezistența și stabilitatea cimentului.

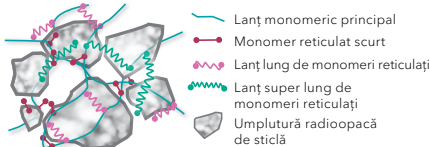

- Umplutură radioopacă de sticlă pentru vizibilitate excelentă pe radiografii (> 250% Al)

*“Acest produs este preferatul meu pentru cimentare în momentul de față. Îmi place ușurința curățării și a manipulării și încrederea pe care mi-o dă toleranța la umiditate. Adeziunea rezistentă la bacterii oferă o încredere sporită. Bifează într-adevăr toate cerințele.”* – Dr. Jacques Smith, Africa de Sud

*“În cabinetul meu, materialul de elecție pentru cimentarea restaurărilor PFM, metalice și din oxid de zirconiu este GC FujiCEM Evolve. Sensibilitate post-operatorie extrem de scăzută și manipulare simplă.”* – Dr. Sven Baumgartner, Germania

*“Cu GC FujiCEM Evolve mă bucur de confort atunci când vine vorba de cimentare. Cimentarea de zi cu zi a lucrărilor metalice sau pe bază de Zirconia este mult mai puțin stresantă datorită acestui produs. Timpul de priză adițional, opțiunea de pre-polimerizare și lipsa sensibilității post-operatorii adaugă mai multă valoare muncii mele.”* – Dr. Mislav Perić, Croația

# GC FujiCEM™ Evolve

## Un pas înainte

Cimentarea unei coroane monolitice tetragonale din zirconia cu GC FujiCEM Evolve




Situație inițială



Dozare cu automixare



Poziționarea restaurării

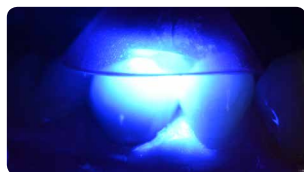

Consistența elastică se atinge după doar 3 s de pre-polimerizare



Exces ușor de îndepărtat imediat



Rezultat final

Prin amabilitatea Prof. R. Sorrentino, Italia



### FujiCEM Evolve GC seringă (9.2 g / 5.0 ml)

- 10004927 GC FujiCEM Evolve Single Pack: Seringă (1), Vârfuri (15) EEP
- 10004871 GC FujiCEM Evolve Triple pack Handmix: Seringă (3), Hârtie de amestec (1) EEP
- 10004930 GC FujiCEM Evolve Triple pack Automix: Seringă (3), Vârfuri (45) EEP
- 10004917 GC Push and Click Vârfuri (15)
- 10004929 GC Push and Click Vârfuri Endo (15)



Descoperiți etapele pas-cu-pas pentru toate procedurile de cimentare pe **GC Luting Guide**



GC FujiCEM Evolve este marcă înregistrată a GC.  
Ketac CEM Plus Luting, Meron Plus QM și Riva Cem nu sunt mărci înregistrate a GC.

#### GC EUROPE N.V.

##### Head Office

Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

#### GC EUROPE N.V.

Reprezentanță în România  
Str. Carol Davila 21A,  
etaj 2, ap.17, sector 5  
RO - 050451 București  
Tel: +40.31.425.75.27  
info.romania@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/ro-RO>