

GC FujiCEM Evolve

Korak napred

Cementiranje monolitne tetragonalne cirkon krune sa GC FujiCEM Evolve



Početa situacija



Požiranje samomešnjem



Postavljanje restauracije



Gumasta konzistencija postiže se nakon samo 3 sekunde brzog stvrdnjavanja (tack cure)



Lako odstranjivanje viška u jednom potezu



Završni rezultat

Ustupio prof. R. Sorrentino, Italija



GC FujiCEM Evolve špric (9.2 g / 5.0 ml)	
012951	GC FujiCEM Evolve Starter Kit: špric (1), nastavci Regular (15) EEP
012952	GC FujiCEM Evolve Triple pack Handmix: špricevi (3), posuda za mešanje (1) EEP
012953	GC FujiCEM Evolve Triple pack Automix: špricevi (3), nastavci Regular (45) EEP
012954	GC "Push and Click" nastavak Regular (15)
012955	GC "Push and Click" nastavak Endo (15)



Potražite korak po korak postupak za sva cementiranja u **GC Luting Guide**

FujiCEM je zaštitni znak kompanije GC.
Ketac CEM Plus Automix, Meron Plus QM i Riva Cem nisu zaštitni znaci kompanije GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax.+32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC EUROPE N.V.
Stanoja Gavaša 29
1st floor, ap.4
RS-11000 Beograd
Mob. +381.63.78.82.777
info.serbia@gc.dental
https://europe.gc.dental/sr-RS

ZOLFRS02 110 - 01/23



Korak napred

GC
FujiCEM Evolve

Rešenje za cementiranje cirkona od lidera u glasonomer tehnologiji



Since 1921
100 years of Quality in Dental

GC FujiCEM Evolve

Korak napred

Glasjonomeri su GC zaostavština, pouzdanog kvaliteta, kao što pokazuju nezavisne studije širom sveta. Praveći korak napred, GC FujiCEM Evolve je dizajniran da bude vaš omiljeni partner prilikom cementiranja cirkonskih restauracija.



Indikovano za:

Akrilatnom ojačani glasjonomer kome možete da verujete

- Manje osetljiv na tehniku od kompozitnih cemenata
- Nije potrebna prethodna obrada: nanošenje u jednom koraku
- Dugo vreme rada, brzo vreme stvrdnjavanja
- Tolerancija na vlagu: nije potreban koferdam
- Manji rizik postoperativne osetljivosti
- Izvrsno pečaćenje i iвичno prilagđavanje



Ustupio dr. J. Tapia Guadix, Španija

Ručno mešanje ili samomešanje



- Otvori su razdvojeni: paste se međusobno ne kontaminiraju, mogućnost ručnog mešanja

- "Push & Click" nastavak za mešanje, jednostavan za postavljanje
- Može da se nanese direktno na restauraciju ili u kanal korena (pomoću endodontskog nastavka)




Optimalna viskoznost

- Kontrolisano istiskivanje za jednostavan postupak
- Tanak sloj i precizno prilagđavanje
- Opcija brzog stvrdnjavanja (tack-cure) za lakše odstranjivanje viška




Ustupio dr. J. Tapia Guadix, Španija

Visoka sposobnost vlaženja cirkona

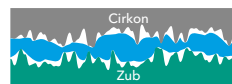


Kompozitni cementi ne mogu prodrati u mikroporoznosti cirkona.

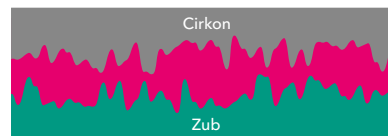

Poliakrilna kiselina poboljšava vlaženje za prodiranje u mikroporoznosti površine zuba i restauracije, za stvaranje snažnog međusobnog povezivanja.

Optimalna adhezija za cirkonijum-oksidnu keramiku


Shear Bond Strength to ZrO₂ (MPa)

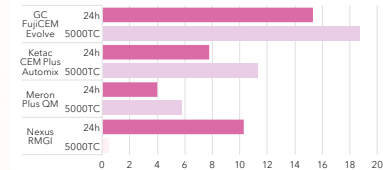

Izvor: G. Joshi et al. J Dent Res, 2020;99(Spec Iss A):1316.

Tehnologija monomera dugog lanca

- Super dugi lanci monomera za čvrstinu i stabilnost cementa.

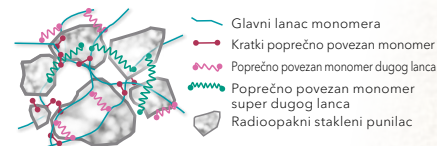

- Radioopakno stakleni punilac za izvrsnu rendgensku vidljivost (> 250% Al)

"Ovo je sada moj cilj za cementiranje. Volim lako čišćenje i rukovanje kao i pouzdanost u toleranciji vlage." - Dr. Jacques Smith, Južna Afrika

"U mojoj ordinaciji materijal izbora za cementiranje restauracija od cirkonijum-oksidne keramike, metala i metalo-keramike je GC FujiCEM Evolve. Veoma retka post-operativna osetljivost i veoma laka manipulacija." - Dr. Sven Baumgartner, Nemačka

"Sa GC FujiCEM Evolve uživam u zoni udobnog cementiranja. Svakodnevno cementiranje radova na osnovi od metala i cirkona sa ovim proizvodom je mnogo manje stresno. Dodatno vreme vezivanja, "tack-cure" opcija i bez post-operativne osetljivosti daju dodatnu vrednost mom radu." - Dr. Mislav Perić, Hrvatska