



Umenie  
vytvárať  
krásny  
úsmev.

GC uľahčuje estetické  
riešenia



Vitajte v **G-aelérii GC**



Umenie

za vytvorením

krásneho úsmevu

použitím **G-ænia** od **GC**

V GC sa zameriavame na individualitu. Chápeme, že žiaden pacient, ani žiadna z výplňových prác nie je rovnaká u jedného, ako u ktoréhokoľvek iného pacienta. Taktiež chápeme, že neexistujú dvaja stomatológovia s rovnakými preferenciami, pokiaľ ide o techniku nanášania alebo aj voľbu ideálneho kompozitného materiálu. Za účelom splnenia takto rozdielných individuálnych požiadaviek predstavuje GC škálu kompozitov umožňujúcich rôzne možnosti zaobchádzania od tuhých kompozitov až po tekuté „flow“ kompozity aplikovateľné injekčne. Každý z kompozitov GC prináša estetické vlastnosti, ktoré pomáhajú stomatológom vytvoriť neviditeľné výplne s jednoduchosťou a efektivitou. Každý z týchto kompozitov ponúka vynikajúce fyzikálne vlastnosti a udržanie lesku, čím zabezpečuje odolnosť a dlhotrvajúcu estetiku. Každý z produktov predstavuje inováciu a kvalitu, ktoré sú podstatou filozofie produktov GC.

## Estetické riešenie s GC pre každý prípad s presnou manipuláciou ktorú preferujete.

### G-ænial Anterior

Materiál strednej konzistencie, ktorý sa nelepi a nesteká, čo je ideálnym riešením pre kontúrovanie estetickej výplne z voľnej ruky. GC Anterior má prirodzenú vitalitu a výnimočné možnosti zladenia odtieňov, čím vytvára vynikajúci estetický dojem.



### G-ænial Posterior

Kompozit tuhšej konzistencie, ktorý vďaka správnej stupni viskozity prináša komfortnejšiu adaptáciu na dno a steny kavity. G-ænial Posterior sa ľahko modeluje a umožňuje dosiahnuť optimálny odtieň pri výplňach v disálnom úseku.



### G-ænial Universal Flo

G-ænial Universal Flo je kompozit s nízkou viskozitou a aj keď sa aplikuje striekačkou správa sa ako tradičný tuhý kompozit. Ide o kompozit svetovej kvality s výnimočnou pevnosťou, leskom a prispôsobivosťou, ktorý je použiteľný pri všetkých typoch výplní.



### G-ænial Flo

G-ænial Flo je tekutý kompozit a dovoľuje jednoduché a plynulé nanášanie. Výhodou tohto materiálu je vysoká zmáčavosť, čo umožňuje ľahké prispôbenie sa stenám kavity a zároveň zabraňuje tvorbe bublín.





UMENIE  
VYTVÁRANIA  
NEVIDITEĽNEJ  
ESTETIKY.

# G-ænial Anterior od GC

Odkedy som začal pracovať s G-ænial Anterior moje estetické výsledky predných výplní sa výrazne zlepšili. Pripadá mi veľmi ľahké s ním pracovať a má fantastický chameleón efekt.

Dr. J. Van Rensburg, Anglicko

G-ænial Anterior je nádherný materiál, ideálne farebne zladený s ľahkou manipuláciou. To mi umožňuje urobiť perfektné anteriórne výplne.

Dr. U. Krueger Janson, Nemecko

Veľmi sa mi páči „handling“ (spracovanie), materiál zostáva presne na svojom mieste, kde ste ho aplikovali. Dlhšia pracovná doba materiálu mi dáva viac pohodlia.

Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko

# G-ænial Anterior: Estetika sa stáva jednoduchou

Kompozit G-ænial Anterior je správnou voľbou v prípade, že hľadáte kompozit, ktorý splní Vaše očakávania ohľadne estetiky u všetkých Vašich pacientov. G-ænial Anterior je tolerantný, ľahko modelovateľný kompozit, ktorý predstavuje výplňový materiál výbornej kvality a vysokého lesku, čím sa stáva vhodnou voľbou pre každodenné použitie.

G-ænial Anterior Vám taktiež umožní pracovať dlhšie, sústrediť sa na tvarovanie, plnenie, modelovanie a následné jednoduché dosiahnutie ideálneho anatomického tvaru a estetického efektu.



Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko


- **Estetický a radioopákný:** Kombinácia krásy a sledovateľnosti
- **Prispôsobivý aplikáciám:** Od jednoduchej techniky jedného odtieňa k technike multi-shade (viacerých odtieňov)
- **Systém odtieňov v súlade s vekom:** Výber odtieňa skloviny podľa veku pacienta
- **Nenáročná manipulácia:** Hladká, nelepivá konzistencia umožňuje manipuláciu dokonca štetcom





# Tajomstvo vytvárania neviditeľných výplní.

G-ænial Anterior predstavuje unikátny materiál umožňujúci vytvorenie výplne, ktorá plynule splýva so zubom - vo väčšine prípadov je výplň vyhotovená z jedného odtieňa. Výsledkom moderného výskumu je dostupnosť širokej škály veľkostí a typov výplní, ktoré ponúkajú vylepšenú schopnosť rozptylu svetla a imitujú tak prirodzený odraz svetla. Výsledkom je výnimočný, prirodzený odtieň vyhovujúci požiadavkám dokonalej estetiky frontálneho úseku.

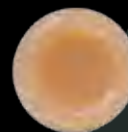

Počiatočná situácia: kavita v kompozitnom bloku, odtieň A3



Kavita plnená materiálom od konkurencie - kompozit s nízkym rozptylom svetla, odtieň A2



Kavita plnená materiálom G-ænial - kompozit s vysokým rozptylom svetla, odtieň A2

## Od jedno-odtieňovej estetiky k mnohým estetickým kombináciám.



Jeden odtieň  
Dr. G. Aboudharam, Francúzsko



Viacero odtieňov  
Prof. M. Peumans, Belgicko



UMENIE  
VYTVÁRAŤ  
DLHOTRVAJÚCU  
ESTETIKU  
VÝPLNÍ.

# G-ænial Posterior od GC

Páči sa mi konzistencia G-ænial Posterior, pretože materiál vždy zostane na svojom mieste, najmä pri budovaní hrbolkov alebo okrajov. Okrem toho, táto kompozitná živica sa nelepí a je ľahko tvarovateľná.

Prof. I. Miletić, Chorvátsko

Kombinácia opacity a balení mi umožňuje vytvárať prirodzený vzhľad distálnych výplní. Nezaznamenal som žiadny druh citlivosti, a to aj v prípadoch veľkých posteriórnych výplní.

Dr. M. Menky, Rakúsko

Páči sa mi použitie G-ænial Posterior svojím výborným farebným zladením a excelentnými tixotropnými vlastnosťami. Zistil som, že s unitipsami sa veľmi ľahko manipuluje.

Dr. H. F. Ousni, Libanon

# G-ænial Posterior: Pevnejšia krása

G-ænial Posterior predstavuje kondenzovateľnejšiu výplň, ktorá prináša pevnejšiu konzistenciu a lepšiu kontrolu pri kontúrovaní anatomických tvarov výplní v distálnom úseku. Výplňový materiál si udržiava vlhkosť a tekutosť aj v čase manipulácie s ním, čím je zabezpečená presnosť plnenia aj hlbokkej kavity.

G-ænial Posterior prináša teplejšie odtiene, ktoré sú zvlášť vyhovujúce pre potreby estetiky v distálnom úseku.

- **Systém prispôsobený odtieňu:** 4 štandardné odtiene a 2 vonkajšie odtiene umožňujúce zachytiť zmeny na sklovine vplyvom veku
- **Adekvátna rádioopacita 252% Al:** Uľahčuje sledovanie
- **Nelepivá viskozita:** Lepšia kontrola v kontúrovaní a budovaní anatomických tvarov
- **Výplne väčšieho objemu:** Prvotriedna pevnosť a životnosť




Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko



# Tajomstvo vytvorenia dlhotrvajúcej krásy.

Unikátne zloženie G-ænial Posterior bolo vyvinuté s cieľom získať pevnosť a nízku kontrakciu. Ak výplň v distálnom úseku nesplní očakávania, je to zväčša v dôsledku praskliny, alebo straty tesnosti na okrajoch výplne. G-ænial Posterior sa vyznačuje vysokou odolnosťou voči lomu a redukovanou polymerizačnou kontrakciou, čím napomáha obmedzeniu rizika zlyhania výplne z dlhodobého hľadiska.

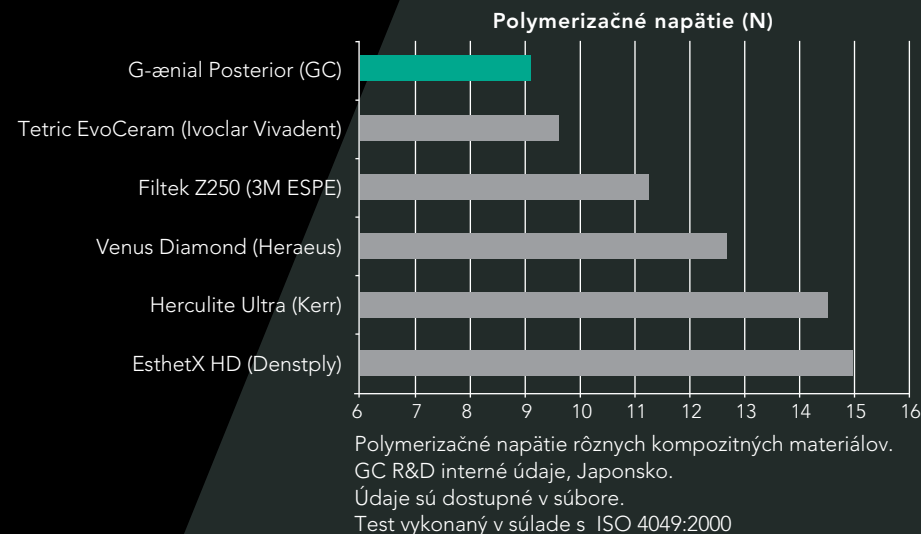

Od jedno-odtieňovej pevnosti  
k mnohým dlhotrvácnym estetickým kombináciám.



Mono shade (Jeden odtieň)  
Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko



Multi shade (Viacero odtieňov)  
Dr. J. Smithson, Anglicko

**UMENIE  
VYTVORENIA  
ESTETIKY  
INJEKČNÝMI  
MATERIÁLMI.**





# G-ænial Universal Flo od GC

Reálny flow materiál pre každú indikáciu - veľmi dobré mechanické vlastnosti, jednoduché použitie, veľmi pekné farby a vrstviace techniky.

Dr. Z. Mach, Česká Republika

G-ænial Universal Flo je konečný materiál pre vytváranie najlepších farebných efektov. Vo viac ako 90% mojich cervikálnych prípadov používam odtieň AO3.

Dr. U. Krueger Janson, Nemecko


Aj keď je flow konzistencia, G-ænial Universal Flo je indikovaný pre výplne II. triedy. Preukázal tesniace schopnosti porovnateľné s kompozitnými živicami s nízkym polymerizačným napätím.

Prof. C. Goracci, Taliansko

# G-ænial Universal Flo: Kontrolované flow, maximálna pevnosť

Ako stomatológovi sa Vám môže zdať ťažké nájsť materiál, ktorý sa dokáže dokonale prispôbiť hlavne v hlbokých, úzkych kavitách a zároveň disponovať dostatočnou pevnosťou dokonca aj pri použití na oklúzných povrchoch. Vďaka svojej konzistencii a možnosti aplikácie striekačkou, poskytuje G-ænial Universal Flo odpoveď v mnohých komplikovaných prípadoch, keď nechcete robiť kompromis medzi dokonalým nanesením, estetikou a pevnosťou.

- **Pevná univerzálna výplň:** Injekčný kompozit pre všetky indikácie
- **Kontrolované flow:** Vynikajúce prispôsobenie kombinované so stabilitou pre ľahké modelovanie anatomických tvarov
- **Samoleštenie:** Rýchle ukončenie práce a zachovanie ideálneho lesku
- **Prvotriedne estetické vlastnosti:** 15 odtieňov v 3 opacitách zladené so všetkými ostatnými výplňovými kompozitmi od GC

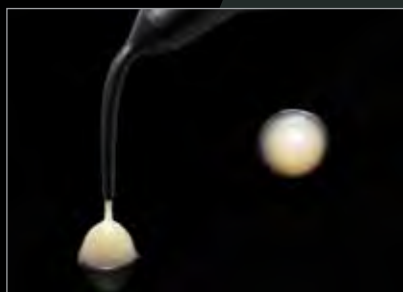


Prof. I. Miletić, Chorvátsko





# Tajomstvo výplní z tekutých (injekčných) materiálov.

G-ænial Universal Flo je produktom nových techník výroby a revolučnej úpravy matrixu silanom, ktorá priniesla pevnejšiu adhéziu sklenených častíc k živicovému základu. Týmto postupom bola dosiahnutá lepšia koncentrácia plniva, čím došlo k zvýšeniu pevnosti, odolnosti voči opotrebovaniu ako aj k uľahčeniu finálneho leštenia a vylepšeniu estetickej stránky výplne. Výsledkom je tekutý výplňový materiál rovnako pevný ako akýkoľvek iný tuhý kompozit používaný na výplne v distálnom úseku, avšak materiál s významnou prednosťou: ideálny pre indikácie, kde sa vyžaduje nízka viskozita materiálu, t.j. kavity I a II triedy a krčkové výplne.

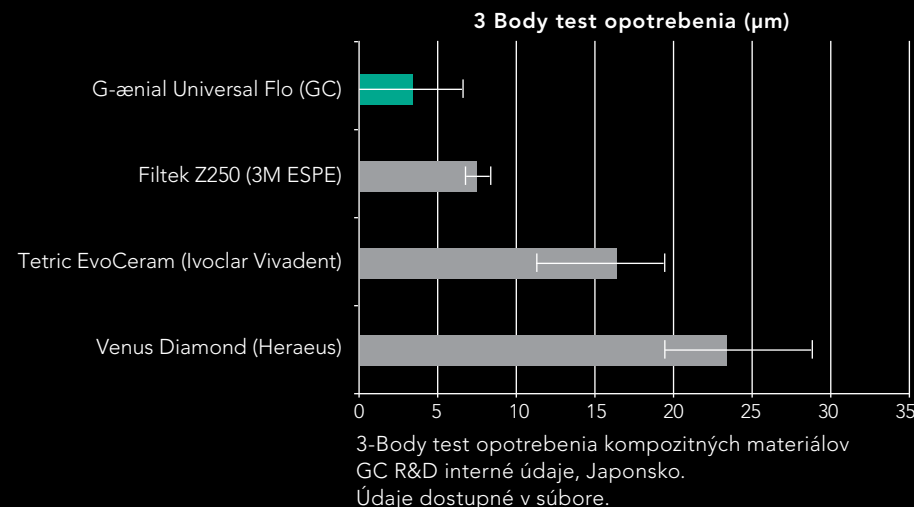

## Od najmenších výplní kavit V triedy k najrozsiahlejším výplniam kavit II triedy.



Dr. U. Krueger Janson, Nemecko



Dr. J. Sabbagh, Belgicko



**UMENIE  
VYTVORENIA  
ZÁKLADU  
PRE DOKONALÉ  
ESTETICKÉ  
RIEŠENIE.**

# G-ænial Flo od GC

Páči sa mi najmä pre lining (podloženie) posteriórnych výplní. Pomocou vnútorných opákných odtieňov vytváram veľkú vložku na pokrytie tmavých základov, vzniknutých napríklad po odstránení amalgámu.

Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko

G-ænial Flo je dobrý doplnok k sérii. Vďaka svojej dobrej konzistencii a tekutosti ho môžem použiť na dno kavity, pred začatím konvenčného vrstvenie.

Dr. H. F. Ousni, Libanon


G-ænial Flo umožňuje presnú modeláciu okrajov najmä v ťažko prístupných miestach a pri použití kovovej matrice.

Dr. M. Menky, Rakúsko

# G-ænial Flo: Tekutý partner

G-ænial Flo je jednoducho použiteľný, rádioopákny kompozit určený na lining (podkladanie), ktorý poskytuje optimálny základ pre akýkoľvek typ výplne s materiálom G-ænial. G-ænial Flo je materiálom prvej voľby pre tunelové preparácie, kavity minimálnej intervencie a pre pečatenie fisúr.

- **Tekutost a zmáčavosť:** Vynikajúca adaptabilita a aplikácia
- **Rádiopacita:** Umožňuje jednoduché sledovanie na rtg snímkoch
- **Správny odtieň pre správne miesto:** 8 odtieňov vrátane 2 opákných odtieňov na prekrytie diskolorácii
- **Inteligentný striekačkový dizajn:** Jednoduchá a presná aplikácia vďaka ergonomickému dizajnu

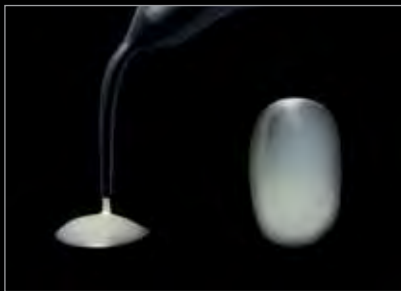

Dr. R. Venelinov, Bulharsko



# Tajomstvo vytvárania dokonale podložených kavít.

Záujmom každého stomatóloga pri aplikácii prvej vrstvy kompozitu je zmáčavosť materiálu a jeho prispôsobenie stenám kavity. Dobre vyvážené zloženie G-ænial Flo mu dovoľuje jednoduché umiestnenie. Materiál sa vyznačuje vynikajúcou zmáčavosťou, výborne sa prispôsobuje stenám kavity a zabraňuje zachyteniu vzduchu pod kompozitnou výplňou.



Výplň bez použitia podložky: riziko zachytenia vzduchu pod výplňou



Výplň s použitím podložky: dokonalá adaptácia

## Od vytvorenia dokonalých podložiek k výplni úzkej tunelovej preparácie.



Dr. R. Venelinov, Bulharsko



Dr. J. Sabbagh, Belgicko



**UMJENIE  
VYTVORENIA  
TRVALÝCH  
VÄZIEB**

# G-ænial Bond od GC

Celkovo dobrý produkt. Ideálny pre techniky selektívneho leptania. Žiadna post-operačná citlivosť je kľúčom k úspechu pri práci s pacientmi.

Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko

Tento bond mi šetrí čas. Neleptám dentín, ale leptám sklovinu iba na niekoľko sekúnd. Mám rada jeho viskozitu a veľmi dobre zmáča zubné tkanivá.

Prof. I. Miletić, Chorvátsko

Páči sa mi, že G-ænial Bond môže byť použitý v oboch technikách: pri selektívnom leptaní aj pri samoleptacej technike bez pooperačnej sensitivity.

Dr. H. Nasr, Libanon

# G-ænial Bond: 1 materiál - 2 voľby pre dokonalé bondovanie

G-ænial Bond Vám ponúka vysokú a bezpečnú adhéziu k sklovine a dentínu, bez ohľadu na zvolenú techniku.

Materiál G-ænial Bond ako samoleptacie adhezívum so zlepšenou schopnosťou vytvoriť pevnú väzbu, Vám pri 10 sekundovom selektívnom naleptaní skloviny umožní pracovať jednoducho a dosiahnuť zníženú pooperačnú senzitivitu.



Povrch po aplikácii G-ænial Bondu dovoľuje ľahšie nanosenie kompozitu

Dr. J. Tapia Guadix, Španielsko

- **Voľba medzi samoleptaním a selektívnym leptaním skloviny:** Vyberte si najlepšiu možnosť v závislosti od situácie
- **Výnimočná, trvalá, pevná väzba na sklovinu aj na dentín:** Kombinácie chemickej a mechanickej adhézie bez obsahu HEMA
- **Skvelá marginálna integrita a klinická spoľahlivosť:** Dokázané v nezávislých testoch
- **Žiadna pooperačná senzitivita:** Žiadna závislosť na technike alebo použitom kompozite






# Tajomstvo výberu optimálnej techniky bondovania

Leptanie dentínu má za následok široko otvorené dentínové tubuly, čo môže viesť k pooperačnej senzitivite, rovnako aj nechránené kolagenové vlákna sú vplyvom času náchylné na degradáciu. Vzhľadom na to, že G-ænial Bond nevyžaduje leptanie, jeho samoleptanie zároveň ponúka dosiahnutie vysokej adhézie na dentín, rozhranie väzieb na dentín vo Vašich prácach bude teda ešte trvácnejšie ako pri použití systému bondovania s total etch.

Pre použitie na sklovinu a dosiahnutie optimálnej pevnosti väzby vo výplniach krčkov a distálnych úsekoch si môžete zvoliť techniku samoleptania. 10 sekundovým leptaním zlepšíte adhéziu aj na rozsiahlejšie povrchy skloviny, čo je potrebné hlavne vo frontálnych úsekoch.

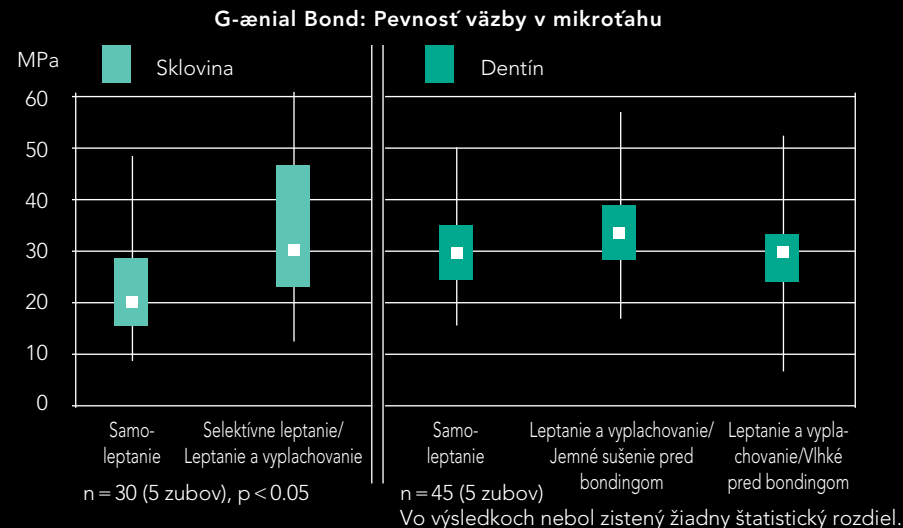

Pevnosť väzby v mikrořahu na sklovinu a dentín s leptaním alebo bez.  
Prevzaté z výřažky prof. B. Van Meerbeek, Univerzita Leuven, Belgicko, December 2009

## Od rýchleho bondovania samoleptaním k vylepšenému bondovaniu selektívnym leptaním



Predoperačné hodnotenie

Voliteľné selektívne leptanie:  
Leptajte 10 sekúnd iba sklovinu, opláchnite a osušte



Aplikujte G-ænial Bond a počkajte 10 sekúnd.



Sušte 5 sekúnd prúdom vzduchu s MAXIMÁLNYM tlakom



Vytvrdzujte svetlom 10 sekúnd



Pokračujte v dobudovaní kompozitnej výplne


# Tajomstvo umenia výberu odtieňov

G-ærial ponúka flexibilitu umožňujúcu vytvoriť neviditeľné estetické výplne z jedného odtieňa, alebo esteticky dokonalé umelecké diela z viacerých odtieňov. Za účelom dosiahnutia takéhoto výsledku ponúka G-ærial tri zreteľne diferencované skupiny odtieňov:

- **Štandardné odtiene:** pre výplne z jedného odtieňa
- **Vonkajšie odtiene:** nahradzujúce sklovinu a aplikovateľné na povrch štandardných odtieňov v esteticky náročných prípadoch
- **Vnútorne odtiene:** opákne a aplikovateľné pod štandardné odtiene v esteticky náročných prípadoch

## Pokrokový odtieňový koncept so štandardných a špeciálnych odtieňov.

### Štandardné odtiene

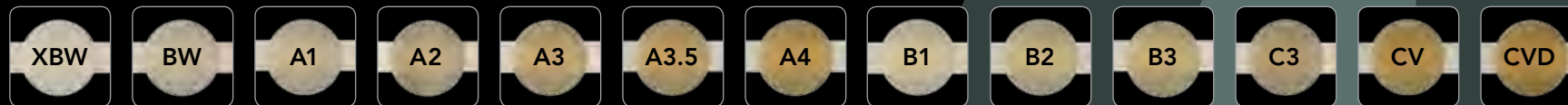

### Vonkajšie odtiene



### Vnútorne odtiene






Jedno-odtieňová technika  
- výplň s použitím jedného  
Štandardného odtieňa



Dvoj-odtieňová technika - výplň s použitím  
dvoch odtieňov Štandardného a Vonkajšieho

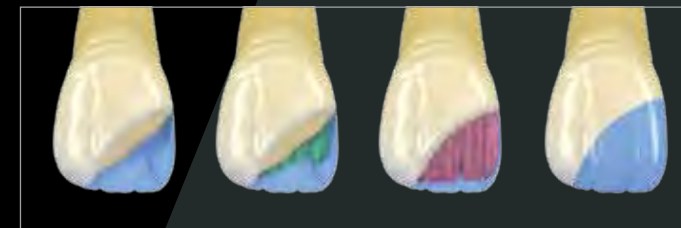

Multi-odtieňová technika - výplň s použitím viacerých  
odtieňov Štandardného, Vonkajšieho a Vnútrného

■ Štandardné odtiene   ■ Vnútrné odtiene   ■ Vonkajšie odtiene

Ak sa chcete dozvedieť viac o možnostiach vrstvenia G-ænial, súbor  
na stiahnutie s návodom na použitie nájdete na [www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)



# Objavte a užívajte si prácu s rodinou G-æniel




## G-æniel Anterior

Jemná krása  
Dostupný v striekačkách 2,7 ml (4,7 g)  
alebo aplikačnej forme Unitip 0,16 ml  
Štandardné: XBW, BW, A1, A2, A3,  
A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV, CVD  
Vnútorne: AO2, AO3, AO4  
Vonkajšie: JE, AE, SE, IE, TE, CVE



## G-æniel Posterior

Pevná estetika  
Dostupný v striekačkách 2,7 ml (5,5 g)  
alebo aplikačnej forme Unitip 0,16 ml  
Štandardné: P-A1, P-A2, P-A3, P-A3.5  
Vonkajšie: P-JE, P-IE

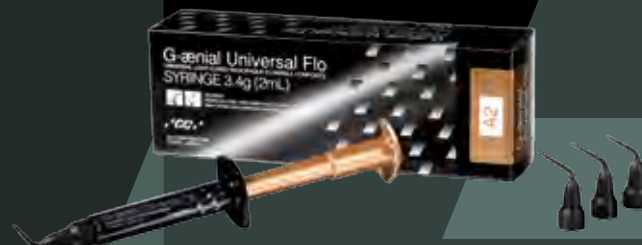

## G-æniel Universal Flo

Nízka viskozita  
Dostupný v striekačkách 2 ml (3,4 g)  
Štandardné: A1, A2, A3, A3.5, A4,  
BW, B1, B2, B3, C3, CV  
Vnútorne: AO2, AO3  
Vonkajšie: AE, JE



## G-æniel Flo

Tekutý partner  
Dostupný v striekačkách 2 ml (3,8 g)  
Štandardné: A1, A2, A3, A3.5, A4, CV  
Vnútorne: AO2, AO3



## G-æniel Bond

Spojovací prvok  
Dostupný v 5 ml  
fľaštičkách

# Veda za dokonalým úsmevom od GC

	G-ænial Anterior	G-ænial Posterior	G-ænial Universal Flo	G-ænial Flo
Kľúčové slová	Jednoduchý, výborná estetika, vynikajúca manipulácia	Vynikajúca manipulácia Marginálna integrita Rádiopacita	Univerzálny Nízka flow, vysoká odolnosť Vysoký lesk	Vysoká flow Vynikajúce prispôsobenie Rádiopacita
Zloženie	Mikro HDR Hybrid		Jemný Hybrid Tekutý	
Hlavná indikácia	Anterior	Posterior	Univerzálny	Podložka
<b>Estetika</b>				
Odtiene	22 odtieňov: 13 štandardných, 3 vnútorné, 6 vonkajších	6 odtieňov: 4 štandardné, 2 vonkajšie	15 odtieňov: 11 štandardných, 2 vnútorné, 2 vonkajšie	8 odtieňov: 5 odtieňov A, 2 vnútorné, 1 krčkový
<b>Aplikácia</b>				
Viskozita	Vysoká / plastický	Pevná / modelovateľný	Stredná / nelepivý	Nízka / tekutý
Pracovná doba (s)	240 s	120 s	70 s	70 s
<b>Fyzikálne vlastnosti</b>				
Rádiopacita Al%	142 %	252 %	181 %	230 %
Kontrakcia (%)	2,42 %	2,28 %	3,95 %	4,38 %
Modul elasticity (GPa)	6,4 GPa	8,2 GPa	7,9 GPa	7,4 GPa
Odolnosť voči ohybu (MPa)	107 MPa	118 MPa	167 MPa	135 MPa
Odolnosť voči lomu (MPa)	1,6 MPa	1,5 MPa	1,6 MPa	1,4 MPa
Odolnosť voči opotrebovaniu (3-Body test)	37 µm	44 µm	3 µm	16 µm
Hĺbka polymerizácie (mm)	1,5-3,5 mm	2-3 mm	1,5-2 mm	1,5-2 mm
Obsah plniva (hm%)	76 %	81 %	69 %	69 %
<b>Balenia</b>				
Striekačka obj/hmotnosť	2,7 ml / 4,7 g	2,7 ml / 5,5 g	2 ml / 3,4 g	2 ml / 3,8 g
Unitip obj/hmotnosť	0,16 ml / 0,28 g	0,16 ml / 0,33 g	Nie je	Nie je
Doba skladovania	3 roky	3 roky	3 roky	3 roky

# Príbuzné výrobky



## Leštenie

### Dia Polisher Paste

Diamantová leštiaca pasta, s ktorou dosiahnete žiadaný estetický výsledok všetkých výplní.

### Epitex & GC New Metal Strips

Celuloidové a kovové pásky pre aproximálne kontúrovanie, finalizáciu a leštenie všetkých výplní.

## Sklené vlákna

### everStick®PERIO

Sklené vlákna pre patientsky priateľské dlahovanie.

### everStick®C&B

Pre minimálne invazívne kompozitné mostíky vystužené sklenenými vláknami.

## Primery

### Composite Primer, Ceramic Primer a Metal Primer

Adhezíva na bondovanie kompozitu na kompozit, keramiku a kov.

## Gingiválne kompozity

### GC Gradia Gum

Svetlom tuhúci ďasnový kompozit, poskytujúci odtiene imitujúce farbu prirodzenej gingívy.





# Kompozitná G-aeléria - GC



**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
<http://www.gceurope.com>

**GC EUROPE N.V.**  
GC EE O - Slovakia  
Raková 1441  
SK - 023 51 Raková / Čadca  
Tel. +421.911.570.999  
Fax. +421.414.000.264  
slovakia@eeo.gceurope.com  
<http://www.eeo.gceurope.com>

**GC**