

Za ubrizgavanje... ali zaista univerzalan  
za sve indikacije kaviteta - i više!



Kaviteti klase I, II, III, IV i V

Povezivanje zuba i minimalno-invazivni kaviteti

**Sada je indikovan i za indirektnu tehniku  
u ordinacijama!**



#### G-aenial Universal Flo

1 x 3,4 g (2 ml), 20 nastavaka za doziranje III plastični,  
1 poklopac za zaštitu od svjetla

Raspoloživ u 15 boja i tri razine translucencije:  
Standardne boje: BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV

Unutrašnje boje: AO2, AO3

Vanjske boje: JE, AE

Nastavci za doziranje III plastični, nadopuna (30 komada)  
Nastavci za doziranje III igličasti, nadopuna (30 komada)



Umjetnost  
stvaranja estetike  
ubrizgavanjem.



GC  
G-aenial®  
Universal Flo

Restaurativni kompozit visoke  
čvrstoće za ubrizgavanje

**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
[info@gceurope.com](mailto:info@gceurope.com)  
[www.gceurope.com](http://www.gceurope.com)

**GC EUROPE N.V.**  
GC EEO - Bosnia and Herzegovina  
Carice Milice 11  
BIH - 78000 Banja Luka  
Tel. +387.51.47.07.36  
Fax. +387.51.47.07.36  
[bosniahertzegovina@eo.gceurope.com](mailto:bosniahertzegovina@eo.gceurope.com)  
[www.eo.gceurope.com](http://www.eo.gceurope.com)

# GC G-ænial® Universal Flo


Kliničari vole raditi s materijalima za ubrizgavanje, ali oni često imaju određena ograničenja. Zato je GC za vas razvio G-ænial Universal Flo, restaurativni kompozit dovoljno čvrst za korištenje na okluzalnim površinama te dovoljno raznolik da odgovara svim kliničkim situacijama - od najmanjih ispuna klase V do najvećih kavita klase II. Zahvaljujući svojoj viskoznosti pogodnoj za ubrizgavanje, **G-ænial Universal Flo je rješenje za mnoge teške slučajeve, kada ne želite kompromis između savršenog postavljanja, estetike ili čvrstoće.**

## Za ubrizgavanje...ali nevjerljivu čvrstoću zahvaljujući GC najnovijoj tehnologiji punila

Ultra fine čestice stroncij stakla u kompozitu G-ænial Universal Flo izabrane su s visokom translucencijom, kako bi garantovale **visok nivo estetike**. Visoka otpornost na kiselinu i **radioopacitet** pružaju trajnost i lako praćenje. Pored toga, GC je razvio vlastiti koncept terapije silanizacijom, koji omogućava homogenu disperziju punila i čvršću adheziju između staklenih čestica i akrilatne matrice - za izvrsnu čvrstoću i otpornost na trošenje! Ovaj jedinstveni sastav, u kombinaciji s visokim udjelom punila, osiguraće **postojane ispune s dugotrajnim sjajem**.


Izvor: Dental Materials Research Foundation, Univerzitet ACTA, Amsterdam. Podaci u arhivi.

Čvrstoća pri savijanju (MPa)

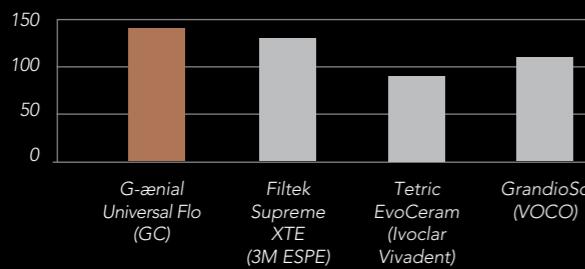

Jedinstvena tehnologija punila: Čestice stroncij stakla veličine 200 nm homogeno raspršene u matrici\*


## Za ubrizgavanje... ali iznenađujuće trajnosti s vrhunskom otpornošću na trošenje od 3 µm\*

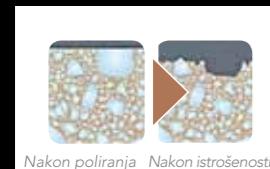

Kompozitni materijali s makro punilima vjerovatnije će se brže trošiti, zbog ispadanja punila i hidrolitičkog raspadanja. To može negativno uticati na zadržavanje sjaja i trajnost.



G-ænial Universal Flo sadrži ultra fina punila, koja se pojedinačno silaniziraju i homogeno raspršuju unutar matrice. Zahvaljujući jedinstvenoj GC tehnologiji, **otpornost na trošenje materijala je višestruko povećana** te se sjaj zadržava kroz vrijeme.

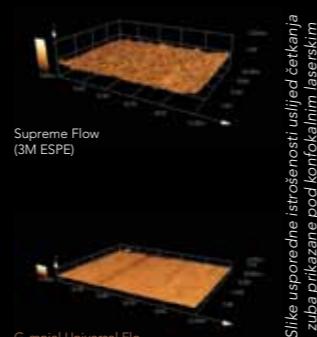

\*Izvor: GC Odjel za istraživanje i razvoj. Podaci u arhivi.

## Za ubrizgavanje... ali istinski estetski

od najmanjih kavita klase V do najvećih klase II

Sledeća prednost kompozita G-ænial Universal Flo je njegovo uspješno spajanje **savršenog prilagođavanja** s izvrsnom **stabilnošću**, što omogućava laku nadogradnju anatomske oblike.

Njegova jedinstvena **sposobnost samopoliranja**, zajedno s izvrsnim prilagođavanjem boje i zadržavanjem sjaja, osiguravaju nevidljive i trajne ispune za vaše pacijente, a vama nude **lako rukovanje** koje tražite.

**Širok raspon boja u tri razine translucencije** obećava neograničene mogućnosti za vaše najizazovnije slučajeve!



## Za ubrizgavanje... ali uistinu lako doziranje olakšano jedinstvenim ergonomskim dizajnom štrcaljke



**Veća količina proizvoda po štrcaljki**  
3,4 g dovoljno je za svakodnevnu upotrebu

### Lako nanošenje

Zahvaljujući dugoj, tankoj i teksturiranoj mlaznici, proizvod se ne lijepi



### Raspoložive dvije vrste nastavaka za doziranje

Plastični ili iglični, kako vama odgovara

**Ergonomsko rješenje**  
Udobna drška, zaobljen rub i glatka konzistencija istisnutog materijala zahvaljujući tankom promjeru štrcaljke



**Hvatište u obliku pravougaonika**  
Sprječava kotrljanje štrcaljke

**Prednost ekonomičnosti**  
Preostala količina paste u štrcaljki je manja od 0,1 ml