

עם הקומפוזיט הנוזלי החדש
G-ænial של GC
 אפשר שוב לחייך.

G-ænial Flo & Universal Flo



מרקם
 של קומפוזיט נוזלי,
ביצועים
 כמו חומר שחזור



גלה את המגוון של G-ænial Flowable



G-ænial Universal Flo

3.4 x 1 גר' (2 מ"ל), 10 טיפים להזרקה

ניתן להשיג ב- 15 גוונים: A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, AO2, AO3, BW, CV, JE, AE

G-ænial Flo

3.8 x 1 גר' (2 מ"ל), 10 טיפים להזרקה,

ניתן להשיג ב- 8 גוונים: A1, A2, A3, A3.5, A4, AO2, AO3, CV

GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Researchpark Haasrode-Leuven 1240
 Interleuvenlaan 33
 B-3001 Leuven
 Tel. +32.16.74.10.00
 Fax. +32.16.40.48.32
 info@gceurope.com
 http://www.gceurope.com

GC Israel
 4 Koifman st.
 Tel Aviv
 Israel 68012
 Tel. +972.3.79.79.630
 Fax. +972.3.51.61.982
 info@gcisrael.com
 http://www.gcisrael.com



ZOLFEN 8 67 11/10

קומפוזיט נוזלי שאין לו מתחרה

G-ænial Universal Flo



Syringe



קיבועים



חלל עששת

Minimum Intervention



שחזורים ישירים I CLASS, II, III, IV-V



Dr. J. Tipler Guadix, Spain



Dr. M. Miyazaki, Japan

G-ænial Flo



Syringe



חומר מצע

שחזור פגמים קטנים

איטום חריצים

סגירת UNDERCUTS

הכנה שמרנית



Dr. J. Sabbagh, Belgium



G-aenial Flo

התאמה מושלמת ורמת אטימות גבוהה

- G-aenial Flo הינו קומפוזיט נוזלי רדיופאקי קל לשימוש, עם כל התכונות הנחוצות להשגת תוצאות קליניות מיטביות:
- כחומר מצע או לסגירת UNDERCUTS
- בהכנת "TUNNEL"
- לשחזור פגמים קטנים
- כחומר לאיטום חריצים

G-aenial Flo מספק פתרון חכם ונוח לבעיות של קומפוזיטים נוזליים ומסורתיים:

יכולת הרטבה

אחת הדאגות של כל רופא שיניים כאשר הוא מניח את השכבה הראשונה של הקומפוזיט היא יכולת ההרטבה של החומר והתאמתו לדפנות חלל השן. G-aenial Flo מאפשר הנחת חומר קלה. החומר מצטיין ברמת הרטבה גבוהה, המאפשרת התאמה מושלמת לדפנות חלל השן, ומונעת לכידת בועות אוויר.



G-aenial Flo




שחזור ללא חומר מצע: סכנה ללכידת בועות אוויר



שחזור עם חומר מצע: התאמה מושלמת

רדיופאקיות:


הרדיואפאקיות של G-aenial Flo היא 230% AI בערך, כלומר גבוה יותר מאמייל, מה שמאפשר מעקב קל באמצעות רנטגן.

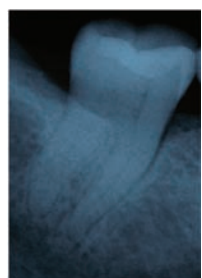


Dr. J. Tapia Guadix, Spain

אמינות

תכונות פיזיות מאוזנות היטב המותאמות באופן מושלם להתוויות המוצר. G-aenial Flo מיוצר ב- 8 גוונים, כולל שני גוונים אטומים. G-aenial Flo משתלב מצוין יחד עם G-aenial Anterior ו-Posterior.

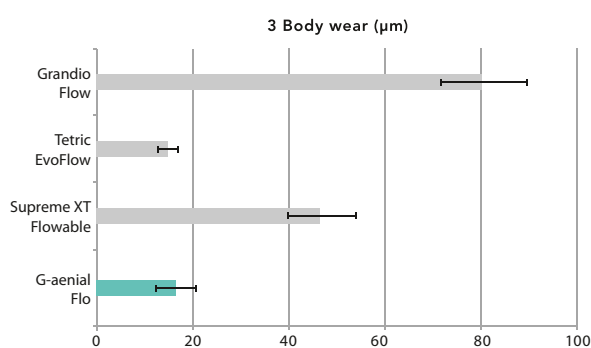

נתונים פנימיים של מחלקת המחקר והפיתוח של GC ופרטי בדיקות זמינים לפי דרישה. הבדיקה נערכה בהתאם לתקן ISO 4049:2000.

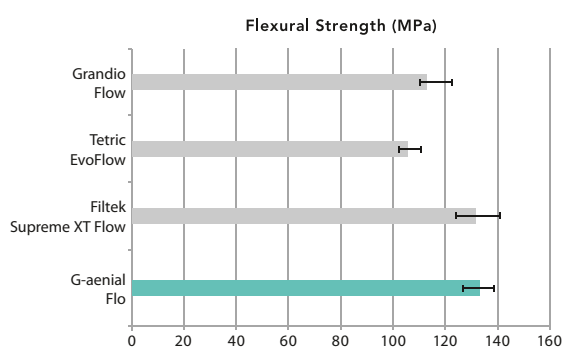

נתונים פנימיים של מחלקת המחקר והפיתוח של GC ופרטי בדיקות זמינים לפי דרישה. הבדיקה נערכה בהתאם לתקן ISO 4049:2000.

G-aenial Universal Flo


חזק ואסתטיקה

G-aenial Universal Flo מציע את השילוב הבלעדי בין צמיגות נוזלית, והנחת חומר קלה ונוחה, לבין מאפיינים פיזיים יוצאים מן הכלל, לשחזורים בטוחים ועמידים.


ניתן להשתמש ב-G-aenial Universal Flo: כחומר שחזור ישיר עבור חללי עששת I, II, III, IV ו-V. עבור מילוי חללי עששת בשיטת Minimum Intervention עבור קיבוע שיניים ניידות

G-aenial Universal Flo מציע פתרונות חכמים ונוחים מעבר לכל יכולת של קומפוזיטים נוזליים אחרים הנמצאים בשוק: סטטיות:

אחת הדאגות העיקריות של רופא שיניים בעת שימוש בקומפוזיט נוזלי היא הסטטיות והיציבות של החומר. G-aenial Universal Flo מפגין את התכונות הפיזיות של קומפוזיט רגיל, עם היציבות של קומפוזיט נוזלי. תכונה זו מתאפשרת הודות למבנה מיוחד, לכמות ולפיזור של חומרי המילוי.

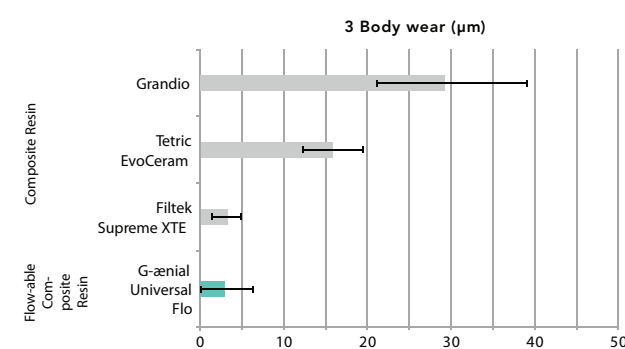

נתונים פנימיים של מחלקת המחקר והפיתוח של GC ופרטי בדיקות זמינים לפי דרישה. הבדיקה נערכה בהתאם לתקן ISO 4049:2000.

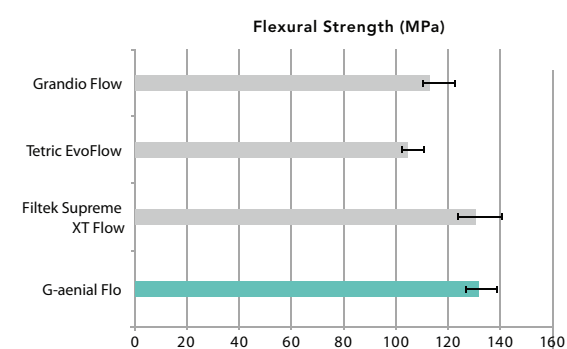

יכולת ליטוש

G-aenial Universal Flo נהנה מרמת שקיפות גבוהה ומשמירה טובה על שקיפות. הקלות והמהירות שבהן מושגת השקיפות מרשימות למדי. למעשה, G-aenial Universal Flo עשוי כמעט להיחשב כחומר עם יכולת שיוף עצמית.



רמת השקיפות של קומפוזיט לא מלוטש. הדגימה שמשמאל היא G-aenial Universal Flo

קומפוזיט נוזלי של G-aenial - הדור הבא

מחפשים קומפוזיט נוזלי לביצוע טיפול מיטבי, שחזורים עמידים ואסתטיקה אידיאלית? G-aenial Flo ו-Universal Flo הם התשובה.


מאז הופעתו ב- 1995, השימוש בקומפוזיט נוזלי גדל בקצב מהיר. משתמשים למדו מייד להעריך את התכונות החיוביות של החומר בהם הזרקה קלה והתאמתו המצוינת לחלל - מאפיינים שנובעים בעיקר מהכמות המופחתת של חומר מילוי בחומרי שחזור אלה.

למרבה הצער, מהר מאוד התברר שהכמות המופחתת של חומרי המילוי גרמה גם להחלשת המאפיינים הפיזיים והמכניים של החומר, מה שהגביל את מספר ההתוויות שהחומר יכול לשמש עבורן.



G-aenial Universal Flo

GC חיפשה פתרון, ויצרה את G-aenial Flo ואת G-aenial Universal Flo - שני חומרים עם טכנולוגיית חומר מילוי ייחודית. בשונה מכל קומפוזיט נוזלי אחר, יש להם אחוז גבוה יותר של חומר מילוי ופיזור אחיד.

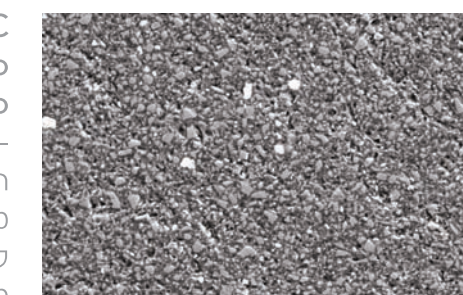

G-aenial Flo

GC R&D Internal Data

המאפיינים הפיזיים תואמים לאלה של קומפוזיטים אחרים, מה שיוצר פוטנציאל לשימוש רחב יותר מזה של קומפוזיט נוזלי רגיל.

הזרקה חסכונית וארגונומית

- שני המוצרים מגיעים במזרק בעל עיצוב מיוחד, המספק:
- פתרון ארגונומי: המוצר מוזרק בצורה חלקה, והמזרק גדול מספיק כדי לאפשר אחיזה נוחה.
- שימוש קל: החומר אינו נדבק לטיפ ואינו מתקשה בתוכו.
- פתרון חסכוני: שארית החומר בגמר שימוש המזרק: פחות מ- 2%.

