

Za ubrizgavanje... ali doista univerzalan

za sve indikacije kaviteta - i više!



Kaviteti klase I, II, III, IV i V

Povezivanje zubi i minimalno-invazivni kaviteti

Sada je indiciran i za indirektnu tehniku u ordinacijama!



G-aenial Universal Flo

1 x 3,4 g (2 ml), 20 nastavaka za doziranje III plastični,
1 poklopac za zaštitu od svjetla

Raspoloživ u 15 boja i tri razine translucencije:
Standardne boje: BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV
Unutarnje boje: AO2, AO3
Vanjske boje: JE, AE

Nastavci za doziranje III plastični, nadopuna (30 komada)
Nastavci za doziranje III igličasti, nadopuna (30 komada)

Standardne boje



Unutarnje boje



Vanjske boje



GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Croatia
Siget 19b
HR - 10020 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
croatia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC

z O.L.F. HR 8 75 09/15

GC

Umjetnost stvaranja estetike ubrizgavanjem.



GC
G-aenial®
Universal Flo



Restaurativni kompozit visoke
čvrstoće za ubrizgavanje

GC G-ænial® Universal Flo

Kliničari vole raditi s materijalima za ubrizgavanje, no oni često imaju određena ograničenja. Zato je GC za vas razvio G-ænial Universal Flo, restaurativni kompozit dovoljno čvrst za korištenje na okluzijskim površinama te dovoljno raznolik da odgovara svim kliničkim situacijama - od najmanjih ispuna klase V do najvećih kaviteta klase II. Zahvaljujući svojoj viskoznosti pogodnoj za ubrizgavanje, **G-ænial Universal Flo je rješenje za mnoge teške slučajeve, kada ne želite kompromis između savršenog postavljanja, estetike ili čvrstoće.**


Za ubrizgavanje...ali nevjerojatne čvrstoće zahvaljujući GC najnovijoj tehnologiji punila

Ultra fine čestice stroncij stakla u kompozitu G-ænial Universal Flo izabrane su s visokom translucencijom, kako bi jamčile **visoku razinu estetike**. Visoka otpornost na kiselinu i **radioopacitet** pružaju trajnost i lako praćenje. Pored toga, GC je razvio vlastiti koncept terapije silanizacijom, koji omogućuje homogenu disperziju punila i čvršću adheziju između staklenih čestica i akrilatne matrice - za izvrsnu čvrstoću i otpornost na trošenje! Ovaj jedinstveni sastav, u kombinaciji s visokim udjelom punila, osigurat će **postojane ispune s dugotrajnim sjajem**.

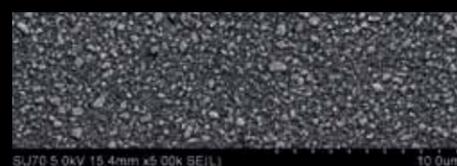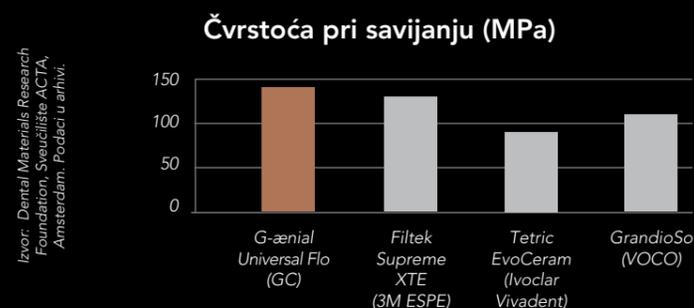

Jedinstvena tehnologija punila: Čestice stroncij stakla veličine 200 nm homogeno raspršene u matrici*


Za ubrizgavanje... ali iznenađujuće trajnosti s vrhunskom otpornošću na trošenje od 3 µm*

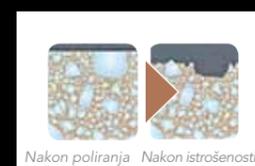

Kompozitni materijali s makro punilima vjerojatnije će se brže trošiti, zbog ispadanja punila i hidrolitičkog raspadanja. To može negativno utjecati na zadržavanje sjaja i trajnost.



G-ænial Universal Flo sadrži ultra fina punila, koja se pojedinačno silaniziraju i homogeno raspršuju unutar matrice. Zahvaljujući jedinstvenoj GC tehnologiji, **otpornost na trošenje materijala je višestruko povećana** te se sjaj zadržava kroz vrijeme.

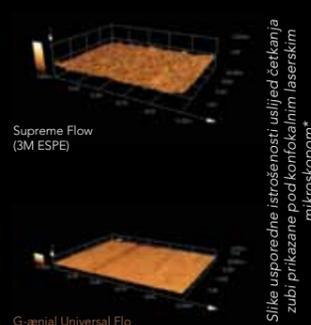

*Izvor: GC Odjel za istraživanje i razvoj. Podaci u arhivi.

Za ubrizgavanje... ali istinski estetski od najmanjih kaviteta klase V do najvećih klase II

Sljedeća prednost kompozita G-ænial Universal Flo je njegovo uspješno spajanje **savršene prilagodbe** s izvrsnom **stabilnošću**, što omogućuje laku nadogradnju anatomskih oblika.

Njegova jedinstvena **spособnost samopoliranja**, zajedno s izvrsnom prilagodbom boje i zadržavanjem sjaja, osiguravaju nevidljive i trajne ispune za vaše pacijente, a vama nude **lako rukovanje** koje tražite.

Širok raspon boja u tri razine translucencije obećava neograničene mogućnosti za vaše najizazovnije slučajeve!



Dr. U. Krueger-Janson, Njemačka



Dr. G. Politano, Italija



Za ubrizgavanje... ali uistinu lako doziranje olakšano jedinstvenim ergonomskim dizajnom štrcaljke



Veća količina proizvoda po štrcaljki
3,4 g dovoljno je za svakodnevnu uporabu

Ergonomsko rješenje
Udobna drška, zaobljen rub i glatka konzistencija istisnutog materijala zahvaljujući tankom promjeru štrcaljke

Lako nanošenje
Zahvaljujući dugoj, tankoj i teksturiranoj mlaznici, proizvod se ne lijepi

Raspoložive dvije vrste nastavaka za doziranje
Plastični ili iglični, kako vama odgovara

Prednost ekonomičnosti
Preostala količina paste u štrcaljki je manja od 0,1 ml



Hvatište u obliku pravokutnika
Sprječava kotrljanje štrcaljke