

# Течен... сепак вистински универзален

за сите индикации на кавитети - и уште повеќе!



Кавитети Класа I, II, III, IV, V

Сплинтирање и МИ кавитети

Сега исто така индицирани за индиректна техника во ординација!



## G-aenial Universal Flo

1 шприц x3.4 g (2 ml), 20 Продолжетоци за истиснување III пластични,  
1 штитник за светлина

Достален во 15 бои и три нивоа на транспарентност:  
Стандардни бои: BW, A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C3, CV  
Внатрешни бои: AO2, AO3  
Надворешни бои: JE, AE


Продолжетоци за истиснување III пластични, поединечно пакување  
(30 парчиња)

Продолжетоци за истиснување III игли, поединечно пакување (30 парчиња)

### Стандардни бои



### Внатрешни бои

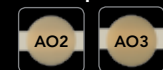

### Надворешни бои



**GC EUROPE N.V.**  
Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B - 3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info@gceurope.com  
www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
GC EEO  
Siget 19b  
HR - 10020 Zagreb  
Tel. +385.1.46.78.474  
Fax. +385.1.46.78.473  
info@eoo.gceurope.com  
www.eoo.gceurope.com

Овластен дистрибутер  
за Македонија:  
ДЕНТОМЕД-М  
Ул. "Бојмија" бр. 2/2  
Пошт. фак. 182  
1000 Скопје  
Тел./Факс: 02/24.62.739  
Тел. 02/24.64.781  
dentomed@t-home.mk

z O L F MK 8 7 5 0 7 / 1 5

# Уметност во создавањето на инјектирачка естетика.

## G-aenial® Universal Flo од GC


Многу силен инјектирачки  
рестауративен композит

# G-ænial® Universal Flo од GC

Како клиничари, со задоволство работите со материјали кои се инјектираат, но често овие материјали имаат одредени ограничувања. Затоа GC го создаде за вас G-ænial Universal Flo, реставративен композит кој е доволно јак да се користи на оклузалните површини, а сепак и доволно сестран да може да одговара на сите клинички ситуации - од најмалите Класа V реставрации до најголемите кавитети Класа II. Благодарение на неговата вискозност и лесно вбризување, **G-ænial Universal Flo** го дава одговорот на многу тешки случаи каде што не сакате да правите компромис помеѓу совршено поставување, естетика или јачина.

## Инјектирачки... сепак неверојатно цврст благодарение на најновата технологија на полнежи од GC

Ултра-фините честички на Стронциум во составот на G-ænial Universal Flo имаат висока транспарентност што гарантира **високо ниво на естетика**. Неговата висока отпорност на киселини и рентгеноконтрастност обезбедуваат издржливост и лесно понатамошно следење. Дополнително GC разви сопствен третман за силанизација кој доведува до хомогена дисперзија на полнежите и поцврста адхезија помеѓу стаклените честички и композитната матрица - за извонредна јачина и отпорност на абразија! Оваа уникатна комбинација, дополнета со висока концентрација на полнежи ќе обезбеди **издржлива реставрација со долготраен ефект на полирање**.

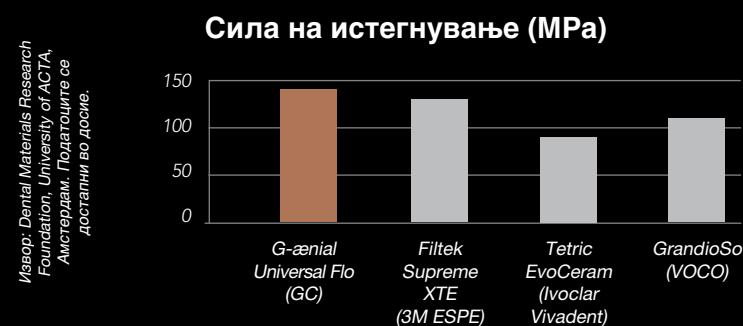

Единствена технологија на полнежи: 200 nm стаклени честички на Стронциум хомогено дисперзирани во матрицот. SEM слика (x2000)\*

## Течен... сепак изненадувачки долготраен одлика на врвот на класата со отпорност на истрошување (3-body) од 3 µm\*




По полирање По абразија

Композитните материјали кои содржат макро-полнежи многу поверојатно е да покажат повисок степен на абразија поради испуштање на полнежите и хидролитичкото разградување. Ова може да има негативно влијание на нивната долготрајност и задржување на сјајот.



По полирање По абразија

G-ænial Universal Flo содржи ултра-фини полнежи кои се индивидуално силанизирани и хомогено дисперзирани во композитната матрица. Благодарение на оваа единствена технологија на GC, **отпорноста на материјалот на абразија е мултиплицирана** и во текот на времето сјајот потполно се задржува.

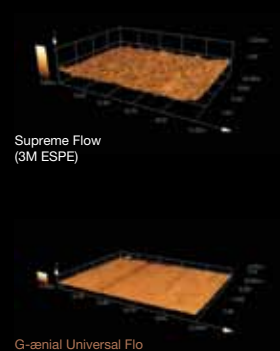

Слики од конфокален ласерски микроскоп на компаративна абразија од четкање на зобите

\*Извор: GC центар за истражување и развој. Податоците се достапни во досие.

## Течен... сепак навистина естетски од најмалите Класа V до најголемите Класа II реставрации

Друга предност на G-ænial Universal Flo е дека успешно ги соединува **совршената адаптација** со големата **стабилност**, што овозможува лесно надоградување на анатомските форми.

Неговата единствена **способност за само-полирање**, заедно со одличната адаптација на бои и задржување на сјајот, обезбедуваат невидлива и долготрајна реставрација за вашите пациенти, а вам ви го нудат **најлесниот начин на работа** кој го барате.

**Широкиот избор на бои со три нивоа на транспарентност** ветува неограничени можности за вашите најпредизвикувачки случаи!



Dr U. Krueger-Janson, Германија



Dr G. Politano, Италија



## Течен... сепак оригинално спакуван поддржано од уникатниот ергономски дизајн на шприцот



**Голема количина од материјалот во еден шприц**  
3.4 g за да ги покрие сите ваши секојдневни случаи!

**Ергономско решение**  
Комфорно се држи во рака, со лаквиден обод и лесно истиснување благодарение на тенкиот дијаметар на шприцот

**Лесно нанесување**  
Благодарение на долгиот тенок продолжеток со текстура, сигурни сте дека производот нема да се залепи за него

**Достапни се два типа на продолжетоци за истиснување**  
Пластични или игли, соодветно на вашите барања



**Обод со правоаголен облик**  
За да се спречи извртување на шприцот

**Економска предност**  
Количеството на материјал кое останува во шприцот е помало од 0,1 ml