



Създаден,
за да приеме
всичките Ви предизвикателства.
Създаден, за да остане



G-CEM
LinkForce™
от GC

Двойнополимеризиращ
адхезивен цимент
за ВСИЧКИ индикации,
към ВСИЧКИ субструктури

GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

G-CEM LinkForce от GC



Търсите ли стандартно решение за циментиране?

Различни видове възстановявания... Различни типове субстрати... Става все по-объркващо!

От инлеи/онлеи, овърлеи, фасети и надграждания до CAD/CAM конструкции, изборът между различни видове възстановявания се разширява все повече. Като се прибавят и новите субструктури като циркон, литиев дисиликат и хибридните керамики не е изненада, че овладяването на всички процедури за циментиране при различните индикации вече е истинско предизвикателство.

Има ли едно решение, което да се адаптира към всички ситуации?

Представете си универсално решение, което предлага предвидими резултати и позволява да работите по стандартен начин. Ако това е, което сте търсили, спрете до тук. GC разработи универсален композитен цимент, който Ви осигурява здраво свързване към всички субстрати – при всички индикации, без компромиси.

G-CEM LinkForce от GC - универсално и мощно решение за всички Ваши адхезивни предизвикателства при циментиране


Една система три основни елемента:

това е всичко необходимо, за да създадете здрава адхезия във всички ситуации.



Отличната способност на G-CEM LinkForce да самополимеризира осигурява адхезия през цялото време

Знаехте ли, че в зависимост от материала на конструкцията, само малък процент от светлината се пропуска през Вашето възстановяване? Тъй като е трудно да се доверите само на светлинна активация, G-CEM LinkForce беше създаден за перфектна адхезия, дори в режим на самополимеризация.

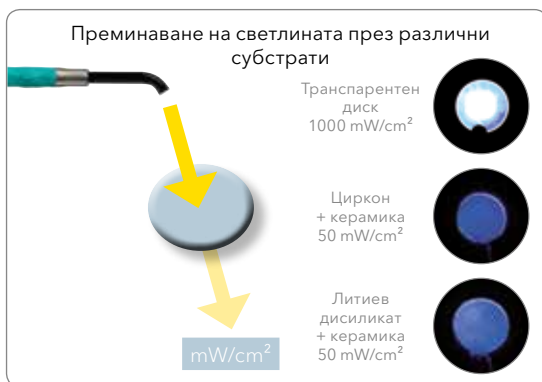



Представяне, на което можете да се доверите на

G-Premio BOND

Безкомпромисно свързване към ВСИЧКИ препарации

Свързване към всички препарации

Дори когато препаратията включва композитно пълче или метална надстройка, трите функционални мономера, съдържащи се в G-Premio BOND ще Ви осигурят надеждна адхезия.

Три подхода за ецване

G-Premio BOND може да бъде използван с всички методи за ецване (самоецване, селективно ецване и тотално ецване) на практика без постоперативна чувствителност.

Лесно нанасяне на бонда

Благодарение на вискозитета си и способността си да омокрят, обстойното нанасяне на G-Premio BOND е леснопостижимо.

Ясна процедура по подсушаване и 3µm дебелина на слоя

С пет секундно подсушаване под максимално налягане на въздушната струя се постига минимална дебелина на слоя от 3 µm, което гарантира перфектна адаптация на конструкциите.

SEM снимка на CERASMART възстановяване (A) циментирано върху дентин (D) чрез G-Premio BOND (C) и G-CEM LinkForce (B)
Източник: GC R&D, Japan

Избор между фотополимеризиране или самополимеризиране

Фотополимеризирането на бонда осигурява незабавен контрол на полимеризацията и намалява броя на стъпките при процедурата.

Двойнополимеризиране (при смесване с G-Premio BOND DCA) позволява надеждна полимеризация на свързващия слой, например при циментиране на шифт.



G-Multi PRIMER

Осигурява стабилна връзка към ВСИЧКИ възстановявания

Един праймер за всички субстрати

G-Multi PRIMER използва три различни химични агента позволяващи перфектно свързване при всички ситуации.

При добавянето на силан към праймера, а не към бонда, се осигурява стабилност на връзката.



Всяка стъпка от процедурата за циментиране

G-CEM LinkForce

Осигурява здрава връзка при ВСИЧКИ индикации



Правилният цвят за всеки случай

След избора сред четири различни цвята, ще оцените лесното автосмесително дозиране директно във възстановяването или с ендо накрайник в кореновия канал.



Поставяне и осигуряване на перфектна адаптация

Оптималната способност за омокряне и вискозитет осигуряват добро разстилане на цимента. Неговата дебелина от 4 μm гарантира адаптация на конструкцията върху надстройката.



Удобно отстраняване на излишъка

Възможността за еднократно полимеризиране на излишъка за 1-2 секунди прави отстраняването му лесно.




Ефикасна полимеризация в режим на самополимеризиране и фотополимеризиране

Благодарение на перфектното съотношение между инициатори, полимеризацията е сигурна дори, когато светлината не може да премине през възстановяването.




Голяма полируемост и износоустойчивост

Използването на ултра фини хомогенно разпределени пълнители с висока концентрация осигурява изключителна износоустойчивост, дори когато границите са върху оклузалната повърхност.

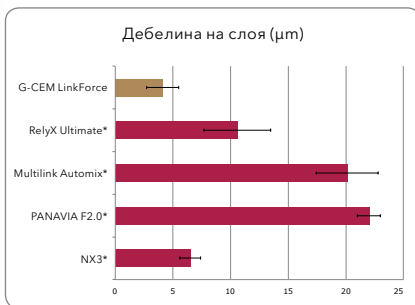


Източник: GC R&D, Japan, 2015

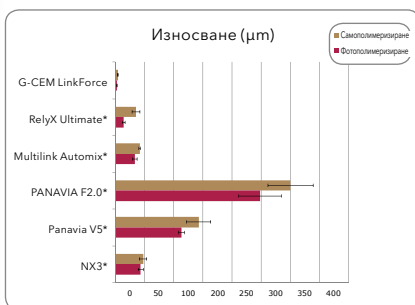

Източник: GC R&D, Japan, 2015

* Не е търговска марка на GC Europe

Здравина на връзката при опън на G-CEM LinkForce (MPa) към различни субстрати преди и след термоциклиране (5000 цикъла)

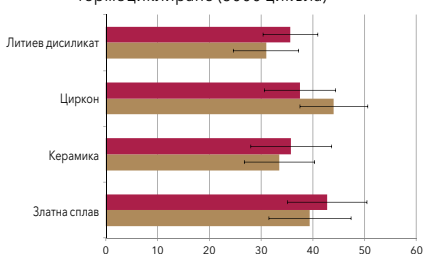

GC използва дългогодишния си опит в сферата на праймерите при разработването на G-Multi PRIMER. Той предлага не само здраво свързване към всички субстрати (дори благородни сплави), но и стабилност на връзката във времето.

Кои са важните характеристики, които търсите, когато...



Желаете да овладеете всички Ваши предизвикателства, свързани с корони и мостове?

- **Стандартизиран протокол** за най-честите Ви случаи.
- **Ефикасно свързване** не само към естествени зъби, но и към пънчета от композит и метал.
- **Възможност за ецване или не**, практически без постоперативна чувствителност.
- **Универсален праймер**, който се свързва към всички повърхности, от керамика до метали.



Търсите перфектен партньор за фасети?

- **Лесно позициониране** и отстраняване на излишъка.
- **Ефикасно фотополимеризиране** на бонда и цимента.
- **Разцветка, пасваща на всички ситуации**, от оцветени до избелени препарации.
- Комплект от съответстващи **пробни пасти**, за да потвърдите избора на цвят.
- **Флуоресценция**, допринасяща за окончателния естетичен резултат.



Искате оптимално решение при циментирането на щифтове?

- **Възможност за ецване на дентина** в дълбоки канали.
- **Перфектна полимеризация** на бонда, когато е смесен с двойно полимеризиращ активатор в тъмните канали.
- Лесно течлив за **перфектно поставяне на щифта**.
- Отличен **самополимеризиращ** режим за дълготрайна здравина на връзката.



Стремите ли се към верен подход за инлеи, онлеи и овърлеи?

- **Здраво задържане**, дори при неретентивни препарации.
- **Ефикасно полимеризиране**, дори под опакерни възстановявания.
- Маргинална стабилност и **износоустойчивост** на оклузалните граници.
- Материал, напълно подходящ за **CAD/CAM възстановявания**, включително за хибридна керамика като CERASMART™270.

Може да се доверите на
G-CEM LinkForce

при всички ситуации, за всяка индикации
и всеки вид субстрат

G-CEM LinkForce

Здрав и универсален цимент
в ръцете Ви!

Четири основни цвята и съответните им Пробни пасти, покриващи естетичните Ви изисквания



Translucent

(чист трансlucent)
Перфектен за много
тънки възстановявания,
за да се запази
оригиналният цвят



A2

(A2 трансlucent)
Стандартен за
циментиране на
повечето Ваши
протетични конструкции



Opaker

(универсален опакер)
Използва се, когато
е необходимо
маскиране на
оцветени субстрати



Bleach

(избелен опакер)
Адаптиран за много
бели възстановявания
за повишаване на
опакитета и яркостта

Налични опаковки

Комплект

- G-CEM LinkForce A2, G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Premio BOND DCA, G-Multi PRIMER, G-CEM Try-in Paste (A2 & Translucent), GC Etchant, Акcesoари

Стартов комплект

- G-CEM LinkForce A2, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER, Акcesoари
- G-CEM LinkForce Translucent, G-Premio BOND, G-Multi PRIMER, Акcesoари

Допълнително

- Шприца 8.7 g (5 ml) (Translucent / A2 / Opaque / Bleach)
- Try-In Paste 1.5 g (1.2 ml) (Translucent / A2 / Opaque / Bleach)
- G-Premio BOND, 5 ml
- G-Premio BOND DCA, 3 ml
- G-Multi PRIMER, 5 ml



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ан. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
<https://europe.gc.dental/bg-BG>

