

Onlay & overlay - от А до Я

Интелигентни решения от GC за вашите частични индиректни възстановявания





Интелигентни решения за частични индиректни

1. ПРЕПАРАЦИЯ

2. ИЗБОР НА МАТЕРИАЛ

1. Препарация от А до Я

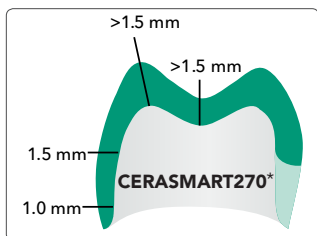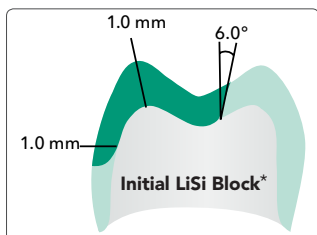

Интелигентни съвети за вашата препарация:

- ✓ Иmediатно дентиново запечатване с **G2-BOND Universal** или **G-Premio BOND** ще предпази дентина от замърсяване, ще елиминира постоперативната чувствителност и ще увеличи здравината на връзката
- ✓ Запълнете подмолите с **everX Flow**, за да запазите и подсилите останалата зъбна структура
- ✓ Направете повдигане на дълбоките граници с **G-ænial Universal Injectable**, когато е необходимо
- ✓ Бързо и ефикасно направете временно конструкция с **Tempsmart DC** или **Revotek LC**

* За пълни указания за подготовка, моля, проверете инструкциите за употреба на съответните материали.

2. Избор на материал от А до Я

Използвайте **Initial LiSi Block**, напълно кристализираният блок от литиев дисиликат за:

Използвайте **CERASMART270**, хибриден керамичен блок за:



- ✓ Възстановяване на зъби с нарушена структура (пукнатини, големи дефекти, липсващи няколко туберкула)
- ✓ Керамични антагонисти
- ✓ Възрастни пациенти



- ✓ Възстановяване на зъби с ненарушена структура (по-малки дефекти)
- ✓ Пациенти с бруксизъм
- ✓ По-млади пациенти



Оувърлей от Initial LiSi Block на зъб 36


С любезното съдействие на д-р Пиер Димитров, България

ВЪЗСТАНОВЯВАНИЯ

3. ФИНИРАНЕ И ОЦВЕТЯВАНЕ

4. ЦИМЕНТИРАНЕ

3. Финиране и оцветяване от А до Я

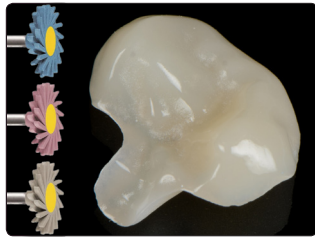

Initial LiSi Block

Бързо, лесно и естетично:

Полиране

- ✓ Стандартни полиращи гуми

ИЛИ

Характеризиране

Initial LiSi Block

- ✓ Добавете цвят и флуоресценция с Initial IQ Lustre Pastes ONE

CERASMART270

- ✓ Оцветяване и покриване с OPTIGLAZE color




CERASMART270

4. Циментиране от А до Я

Имайки слаба ретенция и видими граници, индиректните частични задни възстановявания изискват циментиращ материал с висока якост на свързване, устойчивост на износване и стабилност на цвета.

Универсалното решение за циментиране **G-CEM ONE** е вашият първи избор за циментиране при тези показания. Използвайте го **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** или **G-Premio BOND**, когато е необходима допълнителна адхезия. Когато препаратията (например за овърлей) осигурява достатъчно ретенция/устойчивост, тази стъпка може да се пропусне напълно.

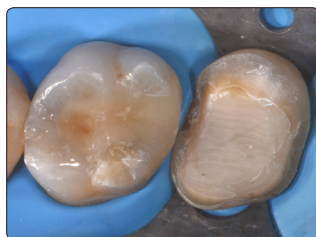

Initial LiSi Block на зъб 37, циментиран с G-CEM ONE и G-CEM ONE AEP
С любезното съдействие на д-р Рикардо Темпеста, Италия



Onlay & overlay - от А до Я



СКАНИРАЙТЕ ЗА ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ СЪПКА ПО СЪПКА

1. ПРЕПАРАЦИЯ



G-Premio BOND

Еднокомпонентен светлиннополимеризиращ универсален адхезив



G2-BOND Universal

Светлинно полимеризиращ универсален адхезив с две бутилки



everX Flow

Подсилен с къси влакна течлив композит за заместване на дентин

G-aenial Universal Injectable

Възстановителен композит с висока якост

2. ИЗБОР НА МАТЕРИАЛ



Initial LiSi Block

CAD/CAM блок от литиев дисиликат за бързи решения



CERASMART 270

Стресабсорбиращ хибриден керамичен CAD/CAM блок

3. ФИНИРАНЕ И ОЦВЕТЯВАНЕ



Initial IQ Lustre Pastes ONE

Триизмерна керамика с възможност за рисуване



OPTIGLAZE color

Светлинно полимеризиращо защитно покритие с нанопълнеж

4. ЦИМЕНТИРАНЕ



G-CEM ONE System

Система от самоадхезивен композитен цимент



G-CEM ONE Universal System

Система от самоадхезивен композитен цимент

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/bg-BG>