



Απλά το ONE

Αξιόπιστη

Γενικής χρήσης

Αισθητική

Τεχνικά μη
ευαίσθητη

Απλή

G-CEM ONE™

Αυτοσυγκολλούμενη
ρητινώδης κονία



Since 1921
100 years of Quality in Dental

Το ONE... που απλοποιεί τις διαδικασίες!

Το G-CEM ONE είναι μια πραγματικά γενικής χρήσης, μη τεχνικά ευαίσθητη κονία με υψηλή αντοχή συγκόλλησης και εξαιρετική ικανότητα αυτοπολυμερισμού. Απλοποιεί όλες τις διαδικασίες συγκόλλησης και σας παρέχει πιο προβλέψιμα αποτελέσματα και σιγουριά. Το G-CEM ONE μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια ευρεία γκάμα ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένων δύσκολων κλινικών περιστατικών χάρη στο **GC Touch Cure**.

One GC Touch Cure

Ο χημικός ενεργοποιητής στο **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** θα επιταχύνει τον χημικό πολυμερισμό της κονίας από την επιφάνεια του δοντιού για να διασφαλιστεί η σταθερή εφαρμογή.




Αξιοπιστία

Βέλτιστη αντοχή συγκολλητικού δεσμού για παρασκευές με συγκράτηση και χωρίς συγκράτηση¹ χάρη στη μοναδική δυνατότητα **GC Touch Cure** του προαιρετικού **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer**.

Τεχνικά μη ευαίσθητο

Εξαιρετική δυνατότητα αυτο-πολυμερισμού για την ασφάλεια σας
Εύκολη απομάκρυνση περίσσειας και εύκολος καθαρισμός
Ανοχή στην υγρασία¹
Βελτιστοποιημένη ροή της πάστας
Σχεδόν καμία μετεγχειρητική ευαισθησία³

ONE βελτιστοποιημένη ικανότητα αυτοπολυμερισμού

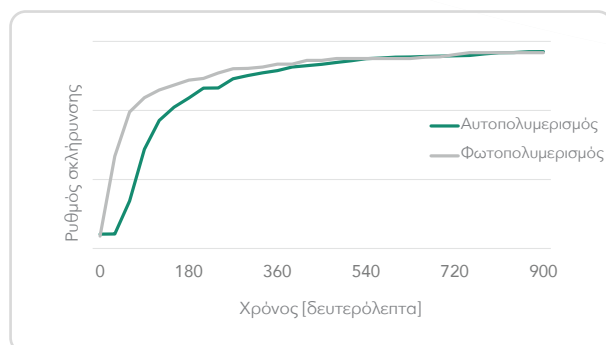

Πηγή:
Prof. Miyazaki, Nihon University, Japan

¹ Με G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

² Με G-Multi PRIMER

³ Field survey results. Using G-CEM ONE only. Data on File.



Το ONE... που απλοποιεί τις διαδικασίες!

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer (προαιρετικό)

Για όλες τις συγκολλούμενες επιεμφυτευματικές κατασκευές και όλες τις κοιλότητες

- MDP: δεσμός με δομή των δοντιών, ζirkόνιο και μη πολύτιμο μέταλλο
- 4-MET: δεσμός με δομή των δοντιών
- MDTP: δεσμός με πολύτιμο μέταλλο
- Επιταχυντής ⇒ Ισχυρή συγκόλληση στο με τις συγκολλούμενες επιεμφυτευματικές κατασκευές και με τις κοιλότητες μέσω της ιδιότητας **GC Touch Cure**.



Χωρίς φωτοπολυμερισμό, απλώς με στέγνωμα.

Περιμένετε
10 δευτερόλεπτα

Ισχυρός αέρας
5 δευτ.

Γενικής χρήσης

Άριστη αντοχή συγκολλητικού δεσμού στο δόντι και σε όλα τα υποστρώματα, οδοντίνη, ζirkόνιο, μέταλλο, όλων των ειδών τα κεραμικά²

Αισθητικό αποτέλεσμα

Αόρατο, με υψηλή αντοχή στη φθορά όριο, για αισθητικά αποτελέσματα

Απλή

Ανάγκη για μειωμένο απόθεμα.
Βελτιστοποίηση της ροής εργασίας

ONE απόδοση ανεξάρτητα από την ημιδιαφάνεια



Μέταλλο

Ευγενική παραχώρηση του
Δρα Kazunori Otani, Ιαπωνία




Διπυριτικό λίθιο


Ευγενική παραχώρηση του
Δρα Akimasa Tsujimoto, Japan

ONE... το προϊόν που εμπιστεύεστε!

Κονία ONE για κορυφαία αντοχή δεσμού σε όλα τα υποστρώματα

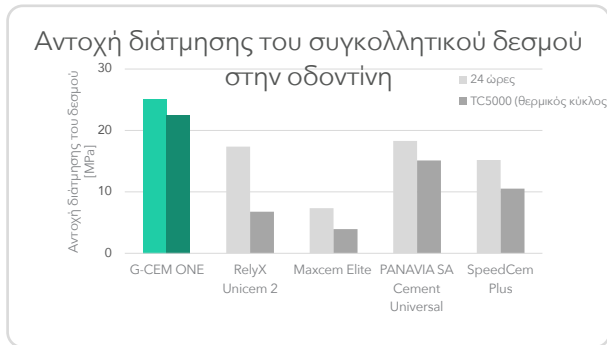


Πηγή: GC R&D, Δεδομένα στο αρχείο.

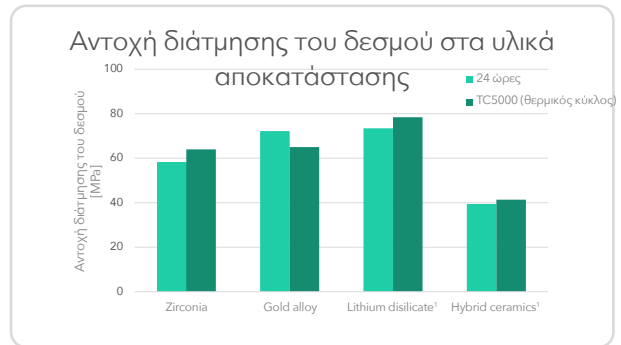


Πηγή: GC R&D, Δεδομένα στο αρχείο.
1 Με G-Multi PRIMER

ONE Primer για δύσκολες κλινικές περιπτώσεις

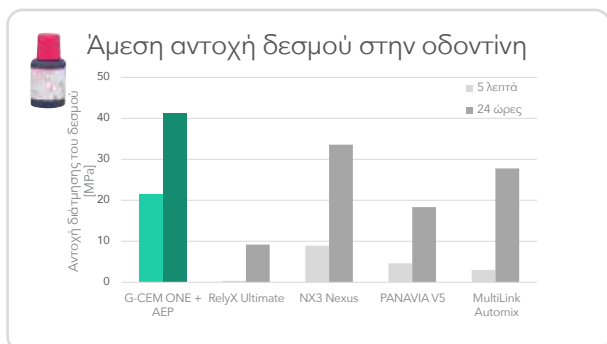

Πηγή: GC R&D, Δεδομένα στο αρχείο.

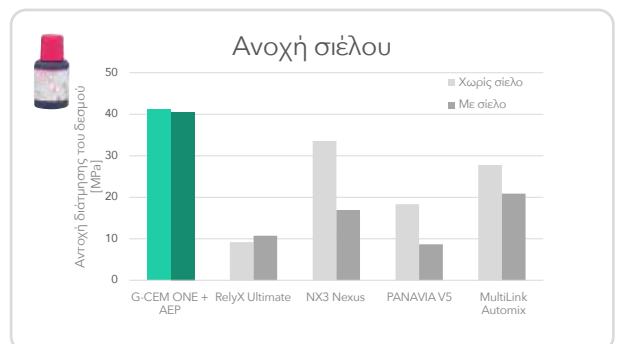


Πηγή: GC R&D, Δεδομένα στο αρχείο.

Άμεση αντοχή δεσμού για την αποφυγή της πρώιμης αποκόλλησης σε παρασκευές άνευ συγκράτησης και στεφάνες με κατεργασία μέσω CAD/CAM, για την άνεση των ασθενών σας.

Το Adhesive Enhancing Primer διασφαλίζει υψηλή αντοχή συγκόλλησης, ακόμη και εάν υπάρχει μόλυνση από σιέλο.

Ένα αόρατο περιθώριο για αισθητικό αποτέλεσμα

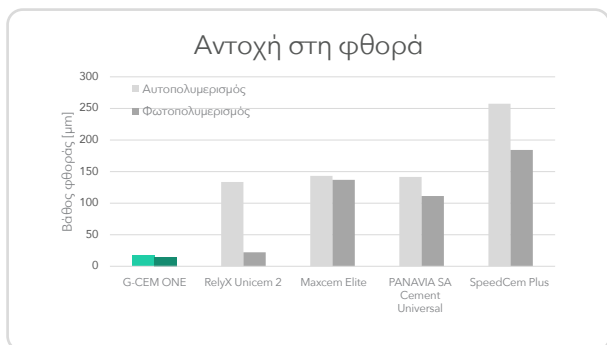

Πηγή: GC R&D, Δεδομένα στο αρχείο.



Πριν από την κατεργασία



Μετά από 6 μήνες

Ευγενική παραχώρηση του Δρα Masayuki Okawa, Ιαπωνία

Το μικρό πάχος της μεμβράνης (5 μm) και η υψηλή αντοχή στη φθορά διατηρούν αόρατο το όριο της κονίας.



Με Προαιρετικό G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

ONE... ο κλινικός συνεργάτης σας!

Βελτιστοποιημένη
ροή υλικού



Εύκολη αφαίρεση της περίσσειας υλικού με πολυμερισμό
1 δευτερολέπτου



Ευγενική παραχώρηση
του Δρα Κазυσιόι Οτάνι,
Ιαπωνία

One για όλα τα υποστρώματα

Οπίσθια στεφάνη (Ζirkόνιο)



Παρασκευασμένο δόντι, καθαρισμένο και
στεγνό.



Συγκόλληση αποκατάστασης.



Τελικό αποτέλεσμα.

Ευγενική παραχώρηση του
Δρα Κазυσιόι Οτάνι, Ιαπωνία



Πρόσθια στεφάνη (Διπυριτικό λίθιο)



Παρασκευασμένο δόντι, καθαρισμένο και
στεγνό.



Εφαρμογή G-CEM ONE Adhesive Enhancing
Primer.



Τελικό αποτέλεσμα.

Ευγενική παραχώρηση του
Δρα Κазυσιόι Οτάνι, Ιαπωνία



Οπίσθιο επένθετο (Διπυριτικό λίθιο)



Αρχική κατάσταση.



Συγκόλληση αποκατάστασης με χρήση
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer.



Τελικό αποτέλεσμα.

Ευγενική παραχώρηση του
Δρα Riccardo Tempesi, Ιταλία



Με Προαιρετικό G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Συσκευασία

Κωδ. προϊόντος

10006918
10006919
10006920
10006921
10006922
10006923
10006924
10006925
10006926
10006833

Περιγραφή

G-CEM ONE Starter Kit A2
G-CEM ONE Starter Kit Translucent
G-CEM ONE System Kit
G-CEM ONE Twin Refill A2
G-CEM ONE Twin Refill Translucent
G-CEM ONE Single Refill AO3
G-CEM ONE Single Refill White Opaque
G-CEM ONE Value Refill A2
G-CEM ONE Value Refill Translucent
G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer



G-CEM ONE System Kit




G-CEM ONE Starter Kit



G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Εύρος απόχρωσης

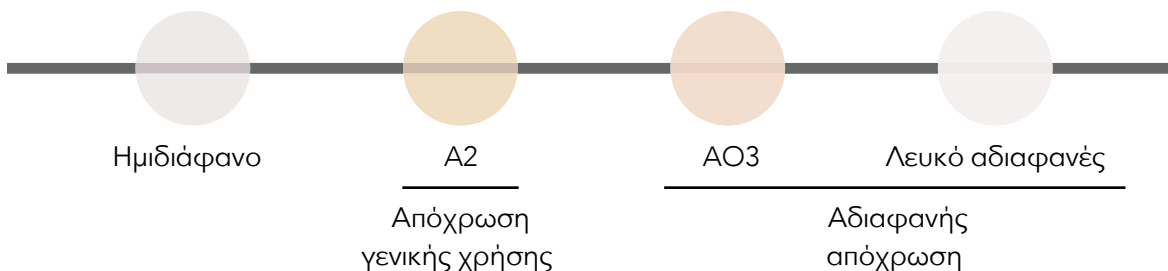

Σχετικά προϊόντα



G-Multi PRIMER
Primer γενικής χρήσης



D-Light® Pro
Διπλού μήκους κύματος LED συσκευή φωτοπολυμερισμού



FREEGENOL
Κονία για συγκόλληση προσωρινών

G-Multi PRIMER, D-Light® Pro and FREEGENOL αποτελούν εμπορικά σήματα της GC.

RelyX Unicem, RelyX Ultime, Maxcem Elite, PANAVIA SA Cement Universal, PANAVIA V5, SpeedCem Plus, NX3 Nexus and Multilink Automix δεν αποτελούν εμπορικά σήματα της GC.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://europe.gc.dental>

