



Paprasciausiai VIENAS

Patikimas

Universalus

Estetiškas

Nereikalaujantis
tikslios darbo
technikos

Paprastai
naudojamas

G-CEM ONE™

Dervinis savaiminės
adhezijos cementas



GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

Medžiaga ONE... neapsakomai paprasta!

G-CEM ONE iš tikrųjų **universalus** cementas, **nereikalaujantis labai tikslios darbo technikos**, **pašižymintis tvirtos jungties sukūrimu** bei savaiminio kietėjimo galimybėmis. Tai palengvina visas cementavimo procedūras ir suteikia labiau **nusakomus rezultatus** bei sielos ramybę. Dėka **GC Touch Cure** G-CEM ONE medžiaga gali būti naudojama **plačiu indikacijų spektru**, įskaitant sudėtingas kliniškes situacijas.

Vienas GC Touch Cure

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer medžiagoje esantis cheminis iniciatorius pagreitins cheminį cemento kietėjimą paviršiniame danties bei medžiagos sluoksnyje, taip užtikrindamas stabilų jungtį.



↑ Kietėjimas vos susilietus

G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

- Cheminis iniciatorius

Patikimas

Dėka unikalių **GC Touch Cure** savybių, **pasirinktinai** naudojant **G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer** išgaunama optimaliai stipri jungtis visoms tiek retencinėms, tiek neretencinėms¹ restauracijoms.

Nereikalaujantis tikslios darbo technikos

Optimizuoto savaiminio kietėjimo galimybė


Lengvas pertekliaus šalinimas bei valymas

Drėgmės bei seilių toleravimas¹

Tinkamiausias pastos takumas

Beveik jokie pooperacinio jautrumo³

Viena optimizuota savaiminio kietėjimo galimybė

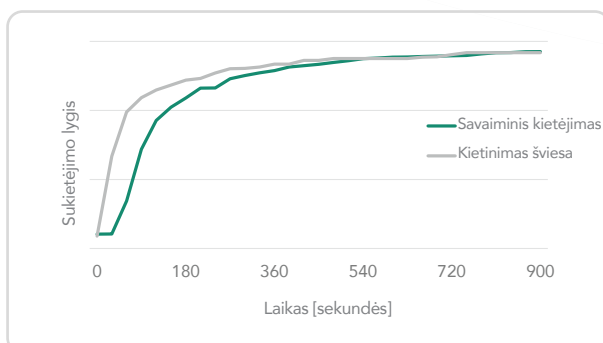

Šaltinis: Prof. Miyazaki,
Nihon University, Japonija

¹ Su G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

² Su G-Multi PRIMER

³ Tyrimų rezultatai naudojant tik G-CEM ONE. Duomenys faile.



Medžiaga ONE... neapsakomai paprasta!

Pasirinktinai naudojamas G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Įvairių medžiagų atraminiams dantims bei ertmėms

- MDP: sukibimui su danties audiniais, cirkonio ir netauriųjų metalų paviršiais
- 4-MET: jungčiai su danties audiniais
- MDTP: jungčiai su tauriaisiais metalais
- Akseleratorius ⇒ dėl **GC Touch Cure** savybių susidaranti stipri jungtis su danties atramomis bei ertmėmis.



Nereikalingas kietinimas šviesa, tiesiog padžiovinkite.

Palaukite
10 sekundžių

5 sekundes
pūskite stipria srove

Universalus

Puikus jungties stiprumas su dantimi ir visais substratais:

Emaliu, Dentinu, Cirkoniu, Metalu, Stiklo² ir Hibridinėmis keramikomis².

Estetiškas

Nepastebimi estetiškos restauracijos krašteliai

Paprastai naudojamas

Mažesni gamybos ištekliai
bei greitas optimizuotas darbas

Vienas veiksmas nepriklausomai
nuo restauracijos skaidrumo



Metalas

Šaltinis: Dr. Kazunori Otani,
Japonija




Ličio disilikatas


Šaltinis: Dr. Akimasa Tsujimoto,
Japonija

Medžiaga ONE... Ja galite pasikliauti!

Vienas cementas puikiai jungčiais su visais substratais

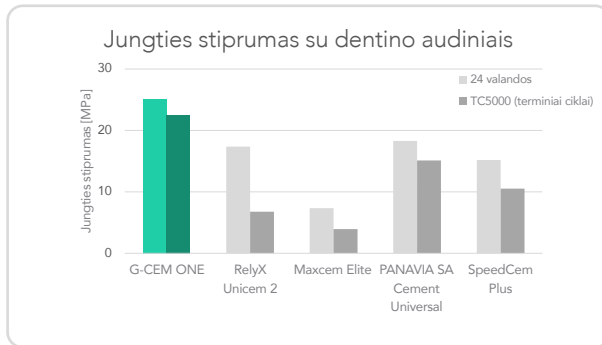


Šaltinis: GC R&D, Duomenys apraše.

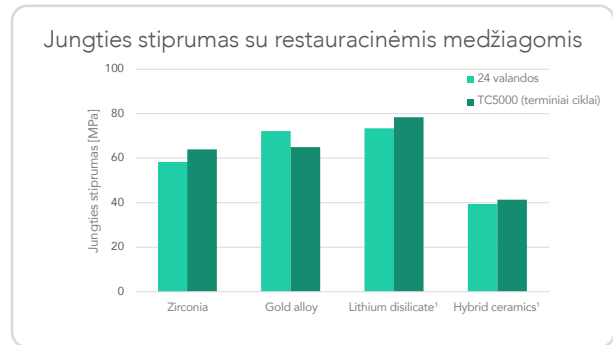


Šaltinis: GC R&D, Duomenys apraše.
¹ Su G-Multi PRIMER

Viena išsamoji medžiaga įvairiems klinikiniais atvejais

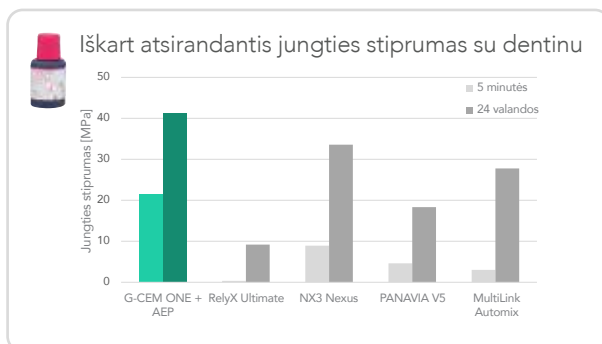

Šaltinis: GC R&D, Duomenys apraše.

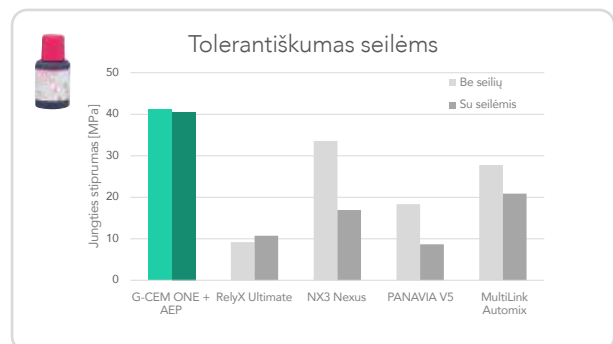


Šaltinis: GC R&D, Duomenys apraše.

Iškart susidaranti jungtis, apsaugodama nuo retencinių elementų neturinčių restauracijų bei CAD/CAM būdu frezuotų vainikėlių pradinio atsicementavimo, užtikrina didesnę Jūsų pacientų komfortą.

Adhesive Enhancing Primer'is užtikrina stiprią jungtį net ir resatauracijos užteršimo seilėmis atveju.

Nepastebimi krašteliai estetiškai restauracijai

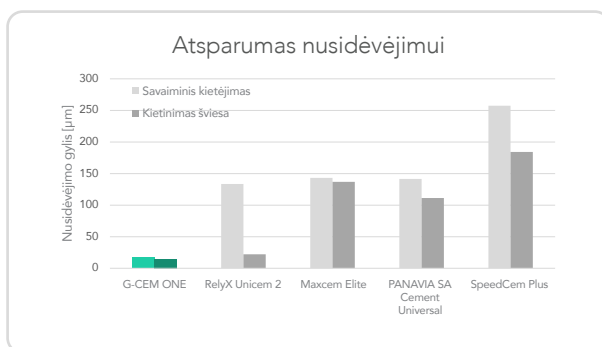

Šaltinis: GC R&D, Duomenys apraše.



Prieš gydymą



Po 6 mėnesių

Šaltinis Dr. Masayuki Okawa, Japonija

Plonas sluoksnis (5 µm) bei didelis atsparumas nusidėvimui cemento linijai leidžia išlikti nepastebimai.



Su Pasirinktina naudojamu G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Cementas ONE... Jūsų klinikinis partneris!

Viena optimali srovė

Vienas lengvas pertekliaus pašalinimas naudojant taškinį 1 sekundės kietinimą



Šaltinis Dr. Kazunori Otani, Japonija

Vienas visiems klinikiams atvejams

Krūminio danties vainikėlis (cirkonis)



Nuvalytas ir nusausintas paruoštas dantis.



Pricementuota restauracija.



Galutinis rezultatas.

Šaltinis Dr. Kazunori Otani, Japonija



Priekinio danties vainikėlis (Ličio disilikatas)



Nuvalytas ir nusausintas paruoštas dantis.



G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer Primer'io aplikavimas.



Galutinis rezultatas.

Šaltinis Dr. Kazunori Otani, Japonija



Krūminio danties užklotas (Ličio disilikatas)



Pradinė situacija.



Po G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer'io aplikacijos pricementuota restauracija.



Galutinis rezultatas.

Šaltinis Dr. Riccardo Tempesta, Italija



Su Pasirinktina naudojamam G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Pakuotės

SKU

SKU	Aprašymas
10006918	G-CEM ONE pradinis rinkinys A2
10006919	G-CEM ONE pradinis rinkinys Translucent
10006920	G-CEM ONE Sisteminis rinkinys
10006921	G-CEM ONE papildymas dviem vienetais A2
10006922	G-CEM ONE papildymas dviem vienetais Translucent
10006923	G-CEM ONE papildymas vienu vienetu AO3
10006924	G-CEM ONE papildymas vienu vienetu White Opaque
10006925	G-CEM ONE ekoniminės pakuotės papildymas A2
10006926	G-CEM ONE ekoniminės pakuotės papildymas Translucent
10006833	G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer



G-CEM ONE pradinis rinkinys




G-CEM ONE Sisteminis rinkinys



G-CEM ONE Adhesive Enhancing Primer

Spalvų diapozonas

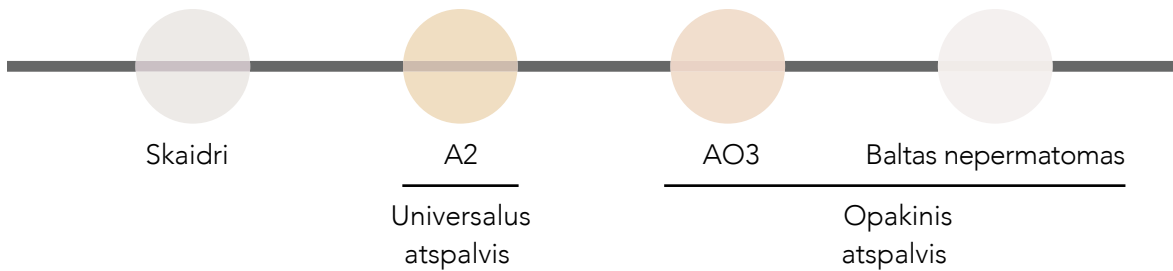

Susiję produktai



G-Multi PRIMER
Universalus praimeris



D-Light® Pro
Dvigubo bangos
ilgio LED kietinimo
lempa



FREEGENOL
Laikinas cementas

G-Multi PRIMER, D-Light® PRO ir FREEGENOL yra registruoti GC prekiniai ženklai.

RelyX Unicem, RelyX Ulitimate, Maxcem Elite, PANAVIA SA Cement Universal, PANAVIA V5, SpeedCem Plus, NX3 Nexus ir Multilink nėra GC registruoti prekiniai ženklai.

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
<http://europe.gc.dental>

GC Nordic AB

Atstovas Lietuvoje
Žilvinas Žičkus
Tel. +370.6524.9729
zilvinas.zickus@gc.dental
<https://europe.gc.dental/lt-LT>

