


# GC Gradia® Direct LoFlo

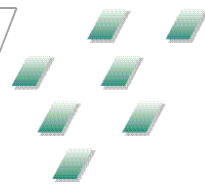

Tekući kompozit visoke viskoznosti s hibridnim mikropunilom HDR tehnologije.

Gradia® Direct LoFlo, je **prvi tekući** materijal za ispune koji se smatra **pravim materijalom za ispune**, ne samo za klasu V ili kao premaz, već i za ispune klase I, klase II i klase III.

Uvođenjem nove HDR tehnologije, radiokontrasta visoke gustoće (High-Density Radiopaque), GC predstavlja novi tekući materijal za ispune s nenadmašnim fizikalnim svojstvima.

stabilnost - pouzdanost - ljepota




**GC**




### Visoka otpornost na trošenje i mala kontrakcija za vašu sigurnost

Gradia® Direct LoFlo postiže izvrsnu stabilnost zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji radiokontrasta visoke gustoće (HDR). **Otpornost na trošenje i pucanje** lako prati moderne kompozite za stražnje ispune i pored toga nudi do **55% manju kontrakciju** od vodećih tekućih kompozita na tržištu.

#### % kontrakcije volumena pri polimerizaciji

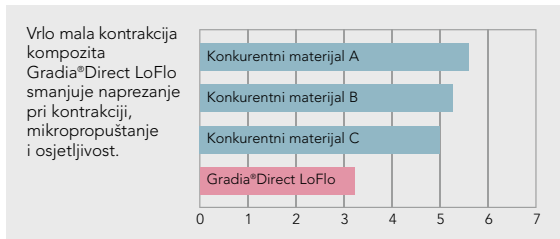


#### Trošenje

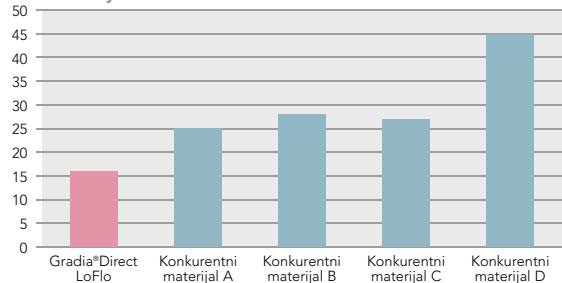

### Pouzdanost

HDR predpolimerizirano punilo s tehnologijom nanosilikatnog punila značajno povećava **trajnost, mogućnost poliranja i rendgensku vidljivost**. Uključenje fluoroaluminij-silikatnog stakla dodatno pruža zaštitu od sekundarnog karijesa.

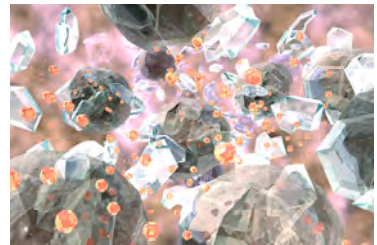

### Lijepo rukovanje

**Sposobnost ovlaživanja** kompozita Gradia®Direct LoFlo omogućuje savršenu **prilagodbu**, lako se prilagođava bez propadanja dok se lako pomiče pomoću bilo kojeg instrumenta ili četke po vašem izboru. Zbog jedinstvenog sastava sličnog kompozitu Gradia®Direct, 7 raspoloživih boja kompozita Gradia®Direct LoFlo nevidljivo se spaja u okolnu strukturu zuba.



Slika prof. Myasakija

### Pakiranje

Štrcaljke od 2 x 1,3 g, 4 metalna igličasta vrha i 2 poklopca za zaštitu od svjetla.

Raspoloživo u 7 boja: A1, A2, A3, A3.5, A03 (dentinski opaker), CV (cervikalna boja) i BW (bijela za bijeljenje).

### Pribor

Vrhovi za doziranje, metalnog igličastog ili plastičnog tipa, 20 komada.



**GC EUROPE N.V.**  
 Head Office  
 Interleuvenlaan 13  
 B - 3001 Leuven  
 Tel. +32.16.39.80.50  
 Fax. +32.16.40.02.14  
 info@gceurope.com  
 www.gceurope.com

**GC EUROPE N.V.**  
 GC EEO - Croatia  
 Čazmanska 8  
 HR - 10000 Zagreb  
 Tel. +385.1.46.77.251  
 Fax. +385.1.46.78.473  
 croatia@eoo.gceurope.com  
 www.eoo.gceurope.com

