

Gradia® Direct LoFlo a GC-től.

Magas viszkozitású,
folyékony, mikrotöltésű
hibrid kompozit
HDR technológiával.



A Gradia® Direct LoFlo az **első folyékony igazi helyreállító anyag**, mely nem csak az V. osztályú kavitásoknál illetve linerként alkalmazható, hanem I., II. és III. osztályú kavitások helyreállításakor is.

A GC bemutatja az új HDR (nagy sűrűségű, radiopak) technológiát alkalmazó, új folyékony helyreállító anyagot felülmúlhatatlan fizikai tulajdonságokkal.

stabilitás - megbízhatóság - szépség

GC




Nagyfokú kopásállóság és alacsony zsugorodás az Ön biztonságáért


A Gradia® Direct LoFlo az egyedi Nagy Sűrűségű Radiopak Technológiának (HDR) köszönhetően kiváló stabilitást tudhat magáénak.

Kopásállósága és törési szilárdsága könnyedén tartja a lépést a modern poszterior kompozitokkal, és mindezekon túlmenően **55%-al kisebb zsugorodást** nyújt, mint a piacvezető folyékony kompozit.

Polimerizációs zsugorodás mértéke %-ban

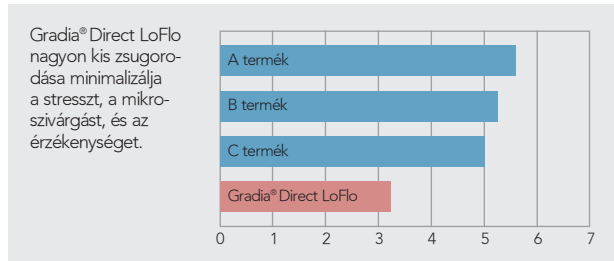


Kopás (µm)

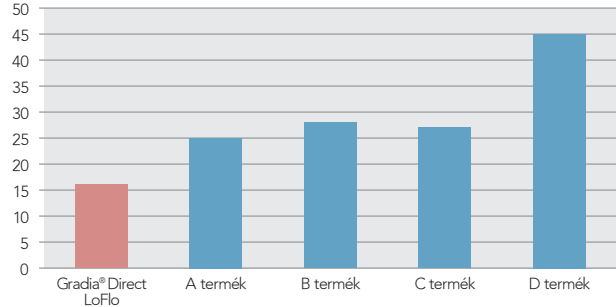

Megbízhatóság

A HDR előpolimerizált töltőanyag nano-szilikát töltőanyag technológiával jelentősen megnöveli a **tartósságot, polírozhatóságot és a radiopacitást**. Fluoro-alumínium-szilikátúveggel való keverése extra védelmet nyújt a másodlagos szuvasodással szemben.

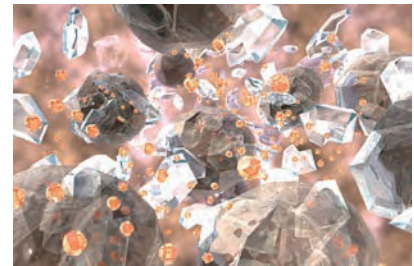

Csodálatos kezelhetőség

A Gradia® Direct LoFlo **nedvesíthetősége** tökéletes **alkalmazhatóságot** biztosít, ugyanakkor – bármilyen kéziműszert vagy ecsetet is használjon – könnyedén és megfolyás nélkül adaptálható. Egyedi, a Gradia® Direct-hez hasonló összetételének köszönhetően a 7 színárnyalatban kapható Gradia® Direct LoFlo észrevehetetlenül beleolvad a környező fogszerkezetbe.



A fényképen Prof. Myasaki munkája látható

Kiszerezés:

2 x 1.3 g fecskendő, 4 db fém adagoló kanül és 2 db fényvédő sapka.

7 színárnyalatban kapható: A1, A2, A3, A3.5, A03 (Opak Dentin), CV (Cervikális), and BW (Fehérett Fehér).

Tartozékok

Adagoló kanül 20 db, fém vagy műanyag változatban.



GC EUROPE N.V.
 Head Office
 Interleuvenlaan 13
 B – 3001 Leuven
 Tel. +32.16.39.80.50
 Fax. +32.16.40.02.14
 info@gceurope.com
 www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO – Hungary
 H-1119 Budapest
 Etele út 65.
 Tel.: +36.1.205.36.02
 Fax: +36.1.205.36.03
 hungary@eoo.gceurope.com
 www.eoo.gceurope.com

