



Gradia[®] Direct LoFlo di GC.

Composito fluido
ibrido microriempito
ad elevata viscosità con
tecnologia HDR.



GRADIA[®] DIRECT LoFlo
è il **primo composito
fluido** a essere considera-
to come **un vero e proprio
materiale da ricostruzio-
ne**, non solo per la classe V
o come liner, ma anche per le
ricostruzioni di classe I, II e III.

Con l'introduzione della nuova
tecnologia HDR (High-Density
Radiopaque), GC presenta un
nuovo composito fluido per restauri
dalle proprietà fisiche insuperabili.

stabilità – affidabilità – bellezza


GC




Elevata resistenza all'usura e ridotta contrazione per la vostra sicurezza

Gradia® Direct LoFlo raggiunge un'eccellente stabilità grazie all'esclusiva Tecnologia HDR (high density radiopaque). **La resistenza all'usura e alla frattura sostengono** facilmente il confronto con i moderni compositi posteriori; inoltre, **la contrazione è inferiore del 55%** rispetto al prodotto fluido più diffuso sul mercato.

% Contrazione volumetrica da polimerizzazione

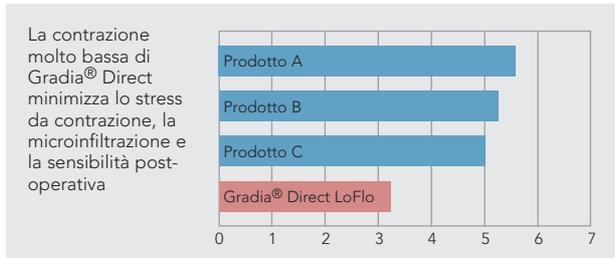

Abrasione (µm)

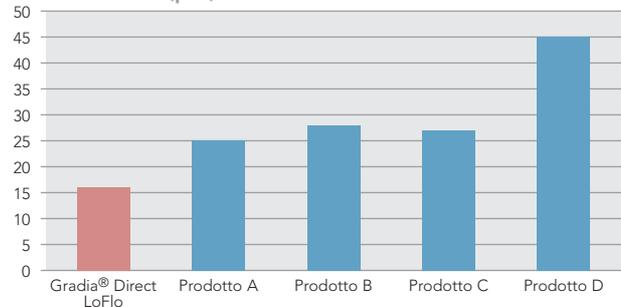

Affidabilità

Il filler prepolimerizzato HDR con tecnologia di riempimento alla nano-silice aumenta in misura **considerevole durata, lucidabilità e radiopacità**. L'aggiunta di vetro fluoro alluminio silicato conferisce inoltre protezione contro la carie secondaria.



Estrema facilità d'uso

La bagnabilità di Gradia® Direct LoFlo consente la perfetta **adattabilità** e un facile modellamento, senza colare, con qualsiasi tipo di strumento o pennellino decise di usare. Grazie alla sua esclusiva composizione, simile a quella di Gradia® Direct, le 7 tonalità disponibili di Gradia® Direct LoFlo si integrano in modo invisibile con la struttura circostante del dente.



Autore : Prof. Myasaki

Confezione

2 x siringhe da 1,3 g, 4 puntali applicatori ad ago e 2 coperchi anti luce.

Disponibile in 7 tonalità: A1, A2, A3, A3.5, A03 (Opaque Dentin), CV (Cervical Shade) e BW (Bleach White).

Accessori

Puntali applicatori, del tipo ad ago in metallo o in plastica, 20 pz.



GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC ITALIA S.r.l.

Via Calabria 1
I - 20098 San Giuliano Milanese
Tel. +39.02.98.28.20.68
Fax. +39.02.98.28.21.00
info@italy.gceurope.com
www.italy.gceurope.com

