



Gradia[®] Direct LoFlo van GC.

Hoog viskeus flowable
Microhybride

Composiet met
HDR technologie.



Gradia[®] Direct LoFlo is het **1ste flowable** composiet dat alle kenmerken heeft van een **echt restauratiemateriaal**; niet alleen voor Klasse V of als liner, maar ook voor Klasse I, Klasse II en Klasse III restauraties.

Met de introductie van HDR (High Density Radiopaque) technologie, biedt GC een nieuw type flowable composiet met ongeëvenaarde fysische eigenschappen.

Stabiliteit - betrouwbaarheid - esthetiek

GC




Een hoge weerstand tegen slijtage en een lage krimp voor blijvend succes.


Gradia® Direct LoFlo bereikt een hoge stabiliteit dankzij de unieke High Density Radiopaque (HDR) technologie.

De **weerstand tegen slijtage en de breukvastheid** is vergelijkbaar met moderne posterieure composieten en daar bovenop heeft het materiaal **55% minder krimp** dan de huidige populaire flowable composieten.

Polymerisatie krimp in volume %

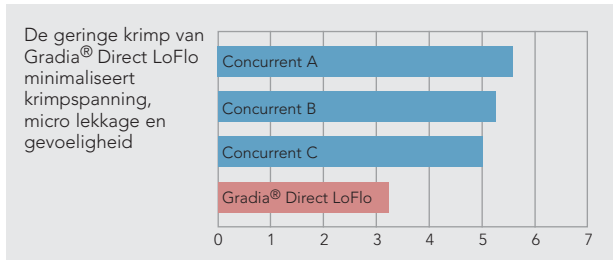

slijtage (µm)

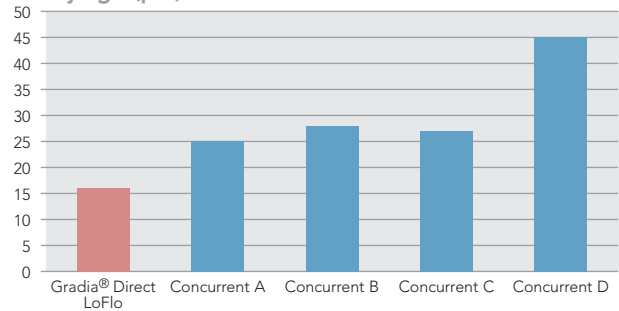

Betrouwbaarheid

De geprepolymeriseerde HDR-filler met Nano-Silica technologie bevordert in sterke mate de **duurzaamheid, polijstbaarheid en radiopaciteit**. De incorporatie van fluor-aluminium-silicaatglas biedt extra bescherming tegen secundaire cariës.



Makkelijk te manipuleren

De vloeikarakteristiek van Gradia® Direct LoFlo maakt dat het materiaal zich prettig laat aanbrengen zonder dat het uitzakt. Tevens laat het zich goed manipuleren met ieder gewenst type instrument of penseel. Dankzij de unieke samenstelling welke verwant is aan Gradia® Direct hebben de 7 kleuren van Gradia® Direct LoFlo hetzelfde kameleon effect, d.w.z. de restauratie verdwijnt volledig onzichtbaar in de omliggende tandstructuur.



foto van Prof Myasaki

Verpakkingen

2 x 1,3 g spuitjes, 4 metalen spuittips en 2 licht-afschermkapjes.

Leverbaar in 7 kleuren: A1, A2, A3, A3.5, AO3 (Opaak dentine), CV (Cervicale kleur) en BW (Bleach wit).

Accessoires

Spuittips, van metaal of plastic, 20 stuks.



GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

Benelux Office
Edisonbaan 12
NL - 3439 MN Nieuwegein
Tel. +31.30.630.85.00
Fax. +31.30.605.59.86
info@benelux.gceurope.com
www.benelux.gceurope.com

