



Gradia[®] Direct LoFlo från GC.

Högviskös flytande
mikrofylld
hybridkomposit med
HDR-teknologi.



GRADIA[®] DIRECT LoFlo är det **första flytande kompositet** som är ett **äkta fyllningsmaterial**. Inte bara för klass V eller som liner, utan även för fyllningar i klass I, II, III och reparationer.

GRADIA[®] DIRECT LoFlo innehåller en pre-polymeriserad, röntgenkontrasterande högdensitetsfyller (HDR-teknologi) med överträffade mekaniska egenskaper.

stabilit – pålitligt – vackert


GC




Hög abrasionsresistens och liten krympning ger säkerhet

Gradia® Direct LoFlo uppvisar utmärkt stabilitet tack vare HDR-teknologin. Abrasionsresistensen och hållfastheten kan lätt mäta sig med de moderna kompositerna för posterior användning. Kontraktionen är dessutom upp till 55 % lägre i jämförelse med de ledande flytande kompositerna på marknaden.

Polymerisationskrympning, volym %

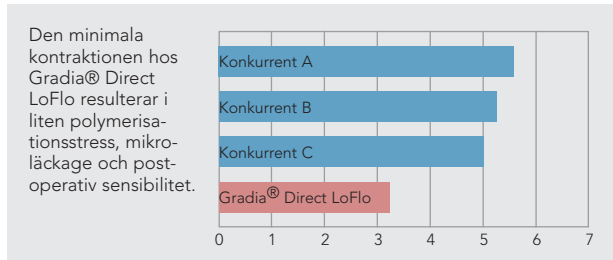

Nötningsresistens (µm)

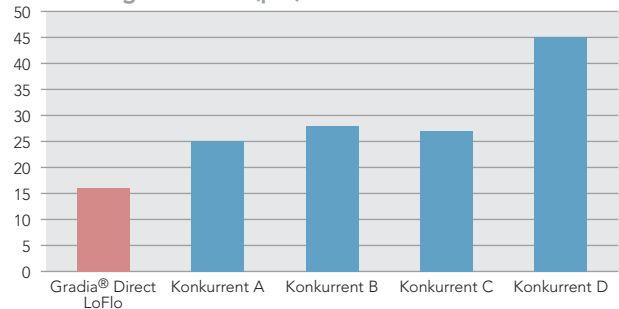

Pålitligt

HDR-teknologin med nanosilikat ökar dessutom hållbarheten, ger perfekt putsbarhet och gör LoFlo röntgenkontrasterande. Fluor-aluminium-silikatglaslet ger dessutom ett ökat skydd mot sekundärkaries.



Lätthanterligt

Vätbarheten hos Gradia® Direct LoFlo gör att materialet uppvisar perfekt adaptation mot tanden, utan att det, som hos flertalet flytande komposit, sjunker ihop. Du kan därför välja om du vill arbeta med instrument eller pensel. Tack vare sammansättningen, som liknar den i Gradia® Direct, uppvisar Gradia® Direct LoFlo en svårslagen kameleonteffekt, d.v.s. färgmatchningen mot naturlig tandsubstans blir perfekt. Produkten finns i sju färger.



Foto av Prof. Myasaki

Förpackningar

Två sprutor om vardera 1,3 g, fyra sprutspetsar av metall samt ljusskydd.

Finns i färgerna: A1, A2, A3, A3.5, A03 (Opaque Dentin), CV (Cervical Shade) och BW (Bleach White).

Tillbehör

Sprutspetsar av metall- eller plast, 20 st.



GC EUROPE N.V.

Head Office
Interleuvenlaan 13
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.39.80.50
Fax. +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

Scandinavian Office
Kungsposten 4 A
S - 427 50 Billdal
Tel. +46 31 939553
Fax. +46 31 914246
info@scandinavia.gceurope.com
www.scandinavia.gceurope.com

