

Balení



Sada GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Zircon (vrstvení na zirkon)

Obsah:
7 x Light Reflective Liners 3 g (1-6, BL), Liner Thinner na ředění, 5 x IQ/L-O-Z Body 50 g (A, B, C, D, BL), modelovací tekutina, technický manuál



Sada GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Metal (vrstvení na kov)

Obsah:
5 x MC/pastový opaker 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 x IQ/L-O-M Body 50 g (A, B, C, D), modelovací tekutina, skleněná podložka, štěteček, technický manuál



Sada GC Initial IQ - One Body, Press-over-Zircon (lisování na zirkon)

Obsah:
4 x modifikátor konstrukce Power Framer Modifier (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x ingoty Effect Press (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x bělený), 10 x korekční prášky (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x vybělený), modelovací tekutina, Ring-Base Systém Medium (200 g) + silikonový kroužek, 10 x jednosměrné plunžry pro 2 g pelety



Sada GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal (lisování na kov)

Obsah:
Fluo krystaly, IQ/Effect ingoty: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/Effect ingoty vybělené: AO-M, BO-M, BOO-M, IQ/korekční prášek: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/korekční prášek bělený: AOM, BO-M, BOO-M, LF/modelovací tekutina, Ring Base Systém Medium, silikonový kroužek, jednosměrné plunžry pro 2 g pelety



Sada past GC Initial IQ - Lustre Pastes Set NF

Obsah:
1 x Neutral (4 g), 1 x Value (4 g), 4 x Body odstíny (4 x 4 g), 8 x odstíny se sklovinným efektem (8 x 4 g), ředící tekutina (8 ml), obnovující tekutina (8 ml), 1 míšící nádobka, 2 štětečky, obrázkový návod k použití

Pro další informace o této široké rodině dentálních materiálů kontaktujte ještě dnes svého zástupcem GC.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Czech R. & Slovakia
V Olšínách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
czech@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC

Vytvořte si vlastní svět
s **Initial** od **GC**,

komplexním keramickým systémem pro každou indikaci.



Vítejte v produktové rodině
Initial „One Body“



Initial IQ -
„One Body“ od GC.

Vrstvení na zirkon
Vrstvení na kov
Lisování na zirkon
Lisování na kov

Trvale vysoká kvalita,
reprodukovatelné estetické
vlastnosti a úspora práce.

GC

GC Initial IQ - One Body

Vrstvení na kov a vrstvení na zirkon
Lisování na kov a lisování na zirkon

Díky novému konceptu Initial IQ - One Body vám nyní společnost GC může nabídnout kompaktní keramické systémy pro rychlou a snadnou reprodukci standardních odstínů Vita®. Nové postupy umožňují zubním laborantům soustředit se na tvar a funkčnost a na závěr vytvořit vitální a přirozený vzhled pomocí Initial IQ Lustre Pastes NF, nově vyvinutých trojrozměrných keramických barev. S GC Initial IQ - One Body budete znovu a znovu dosahovat konzistentně kvalitních a estetických výsledků, a to s menším množstvím materiálu.

Koncept „One Body“ představuje jednoduchý a ekonomický postup, kdy se kontura vytváří pomocí jediného tělového odstínu.

- Kompatibilní s běžnými porcelánovými slitinami i technologiemi na bázi zirkonu.
- K dispozici jako systém k vrstvení nebo k lisování.
- Postup použití se lze rychle a snadno naučit.
- Konzistence a předvídatelnost kvality práce bez ohledu na použitou techniku nebo materiál.

Krok 1: Příprava podle konstrukce

Zirkon

Vrstvení na zirkon



Konstrukce z oxidu zirkoničitého.

Lisování na zirkon



Na zirkonovou konstrukci naneste vrstvu GC Initial IQ Light Reflective Liner.



Naneste tenkou wash vrstvu modifikátoru konstrukce Power Frame Modifiers.

Kov

Vrstvení na kov



Lité nebo kovové konstrukce vyrobené pomocí CAD/CAM.


Lisování na kov



Plochým štětečkem naneste tenkou opákní (wash) vrstvu za použití jednoho z běžných pastových opákrů GC Initial MC Paste Opaque.

Před vypálením naneste na vrstvu opakeru Fluo krystaly.

CTE

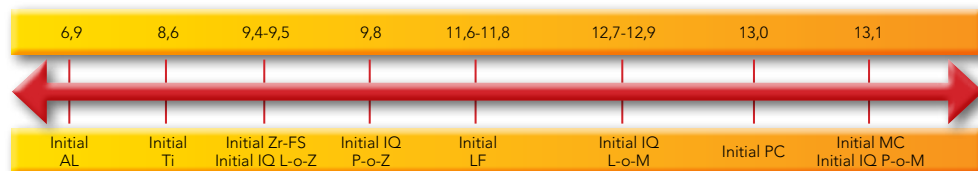

Více informací naleznete v technických manuálech GC Initial.
Fotografie dodal: ZTM Michael Brusch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Německo
*Vita® je registrovanou obchodní známkou Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, Německo.

Krok 2: Dostavba podle vybrané techniky

Vrstvení

- Snadná dostavba těla náhrady pomocí jediného prášku.
- Snadná a ekonomická alternativa pro estetické keramické korunky a můstky.
- Nemíjí potřeba investovat do speciálního zařízení.

Vrstvení na zirkon



Nanesení tělového prášku na celou konturu.



Výsledek po prvním vypálení.

Vrstvení na kov



Lisování

- Jednoduchá vosková modelace celé kontury.
- Široká paleta systémů prefabrikovaných voskových fazet/předtvarů dostupných na trhu šetří váš čas při dostavbě těla náhrady.
- Pouze naneste vosk na okraj a přitlačte pro dokonalou adaptaci okrajů.
- Unikátní předmíchané ingoty umožňují opakovatelnost odstínů, a snižují tak počet oprav.

Lisování na zirkon



Po vypálení opákní vrstvy proveďte úplnou voskovou modelaci pomocí prefabrikovaného voskovacího systému. Síla 0,8 mm umožňuje dosažení přijatelného estetického konečného výsledku.



Výsledek po vylisování.

Lisování na kov



Krok 3: Dokončení s GC Lustre Pastes NF

Initial IQ Lustre Pastes NF jsou trojrozměrné keramické barvy/pasty, vyvinuté k dodání barevné hloubky a přirozené translucence systémům určeným k lisování a vrstvení. Nyní můžete své lisované a vrstvené korunky a můstky skutečně oživit pomocí sad Lustre Pastes NF, které se optimálně přizpůsobí keramice s „nízkým“ i „vysokým“ CTE. Pasty Lustre Pastes NF, které jsou k dostání v kelímčích k okamžitému použití, jsou vyrobeny na bázi jemných keramických částic a mohou se nanášet v silnějších vrstvách - pro nepřekonatelnou životnost a přirozený lesk vašich dostaveb.

