

Pakiranje



GC Initial IQ - One Body sustav slojevanja na cirkonij

Sadržaj:
7 x premaz za odbijanje svjetla 3 g (1-6, BL), razrjeđivač premaza, 5 x IQ/L-O-Z Body boja 50 g (A, B, C, D), tekućina za modeliranje, tehnički priručnik



GC Initial IQ - One Body sustav slojevanja na metal

Sadržaj:
5 x opaker MC/Paste Opaque 3 g (A2, A3, B2, C2, D2), 4 x IQ/L-O-M Body boja 50 g (A, B, C, D), tekućina za modeliranje, staklena posuda za miješanje, kist, tehnički priručnik



GC Initial IQ - One Body sustav prešanja na cirkonij

Sadržaj:
4 x modifikator (Power Frame Modifier) (PFM-1, PFM-2, PFM-3, PFM-4), 10 x prešani izdjeljci (Effect Press Ingots) (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x za bijeljenje), 10 x korekturni prašci (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D2 + 3 x za bijeljenje), tekućina za modeliranje, sustav kivete srednje veličine (200 g) + silikonski prsten, 10 x jednokratni klipovi za prešanje za palete od 2 g



GC Initial IQ - One Body sustav prešanja na metal

Sadržaj:
Fluo kristali, IQ/izdjeljci za efekt: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/izdjeljci za efekt bijeljenja: AO-M, BO-M, BOO-M, IQ/ korekturni prašak: A1-M, A2-M, B1-M, B2-M, C1-M, C2-M, D2-M, IQ/korekturni prašak za bijeljenje: AOM, BO-M, BOO-M, LF/tekućina za modeliranje, sustav kivete srednje veličine, silikonski prsten, jednokratni klipovi za prešanje za palete od 2 g



GC Initial IQ - Lustre Pastes Set NF

Sadržaj:
1x Neutral (4 g), 1 x Value (4 g), 4 x Body boje (4 x 4 g), 8 x caklinske boje za efekt (8 x 4 g), tekućina za razrjeđivanje (8 ml), tekućina za osvježavanje (Refresh) (8 ml), 1 posuda za miješanje, 2 kista, slikovne upute za uporabu

Za više informacija o ovoj skupini dentalnih materijala, obratite se svojem GC predstavniku.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Croatia
Miramarska 36
HR - 10000 Zagreb
Tel. +385.1.61.54.597
Fax. +385.1.61.54.597
croatia@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC

Oblikuj svoj svijet
keramikom **GC Initial,**

univerzalni keramički sustav za svaku indikaciju.



Dobrodošli u Initial
„One Body“ obitelj



GC Initial IQ -
„One Body“ sustav.

Slojevanje na cirkonij
Slojevanje na metal
Prešanje na cirkonij
Prešanje na metal

Postojano visoka kvaliteta,
ponovljiva estetika i
ekonomični rad.

GC

GC Initial IQ - One Body sustav

Slojevanje na metal i slojevanje na cirkonij
Prešanje na metal i prešanje na cirkonij

Razvojem Initial IQ One Body koncepta, GC danas može ponuditi kompaktne keramičke sustave za brzu i jednostavnu reprodukciju standardnih Vita® boja. Uslijed takvog pristupa tehničari se mogu koncentrirati na oblik i funkciju te postići živost i prirodni izgled primjenom sjajnih pasti Initial IQ Lustre Pastes NF, novo razvijenih 3-dimenzionalnih keramičkih boja, u završnoj fazi postupka. GC Initial IQ - One Body pristup koji predstavlja postojanu kvalitetu i uvijek iznova estetske rezultate uz manje materijala.

Koncept One Body je jednostavni i ekonomični postupak pri kojem se oblik izrađuje jednom osnovnom bojom.

- Kompatibilnost sa standardnim keramičkim legurama kao i sa svim tehnologijama na bazi cirkonija.
- Raspoloživ kao sustav slojevanja ili prešanja.
- Brza i jednostavna primjena.
- Postojanost i predvidljivost u kvaliteti rada bez obzira na tehniku ili materijal.

Korak 1: Priprema zavisno o osnovi

Cirkonij

Slojevanje na cirkonij



Osnova iz cirkonij-dioksida.

Prešanje na cirkonij



Nanijeti sloj GC Initial IQ Light Reflective Liner, premaza koji odbija svjetlo, za maskiranje osnove iz cirkonija.



Nanijeti tanki korekturni sloj modifikatora (Power Frame Modifiers).

Metal

Slojevanje na metal



Metalne osnove izrađene tehnikom lijevanja ili CAD/CAM tehnologijom.


Prešanje na metal



Plosnatim kistom nanijeti tanki sloj opakera (wash) uz uobičajene GC Initial MC Paste opakere. Prije pečenja na površinu opakera nanijeti fluo kristale.



Koeficijent toplinske ekspanzije

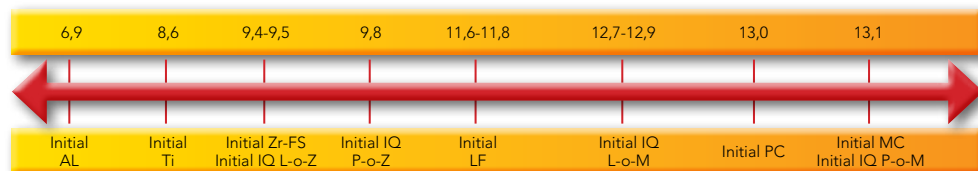

Detaljnije informacije potražiti u GC Initial tehničkim priručnicima.
Slika: ZTM Michael Brusch - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Njemačka.
* Vita® je registrirani zaštitni znak tvornice Vita® - Zahnfabrik Bad Säckingen, Njemačka.

Korak 2: Nadogradnja zavisno o odabranoj tehnici

Slojevanje

- Laka nadogradnja osnove pomoću samo jednog praška.
- Brza i ekonomična alternativa za estetske keramičke krunice i mostove.
- Bez potrebnog ulaganja u posebnu opremu.

Slojevanje na cirkonij



Nanošenje osnovnog praška za potpuno oblikovanje

Slojevanje na metal



Rezultat nakon jednog pečenja



Prešanje

- Jednostavno potpuno navoštavanje.
- Zahvaljujući širokoj paleti prefabriciranih voštanih ljuski na tržištu, nadogradnjom osnove štedi se vrijeme.
- Navoštati rub i prešati, za postizanje savršene rubne prilagodbe.
- Jedinstveni prefabricirani izdjeljci nude ponovljivost boja, što znači manje popravaka.

Prešanje na cirkonij



Nakon opakerskog pečenja izvodi se potpuno navoštavanje pomoću prefabriciranog voštanog sustava. 0.8 mm debljine za postizanje prihvatljivog estetskog završnog rezultata.

Prešanje na metal



Rezultat nakon prešanja



Korak 3: Završna obrada sjajnim pastama GC Lustre Pastes NF

Initial IQ Lustre Pastes NF su 3-dimenzionalne keramičke boje razvijene za postizanje dubine boje i prirodne translucencije za Initial sustave prešanja i slojevanja. Prešane ili slojevane krunice i mostovi sada se mogu oživjeti Lustre Pastes NF sustavima, optimalnim prilagodavanjem na keramike niskog i visokog koeficijenta toplinske ekspanzije. Raspoložive u posudama spremnima za uporabu, paste na bazi finih keramičkih čestica mogu se nanijeti u debljim slojevima i vašim će ispunima pružiti nenadmašnu živost i prirodni sjaj.

