

Kiszerezés



GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Zircon készlet

Tartalma:
7 x fényviszaverő liner
3 g (1-6, BL), liner hígító
folyadék, 5 x IQ/L-O-Z Test
50 g (A, B, C, D, BL),
modelláló folyadék,
technikai útmutató



GC Initial IQ - One Body, Layering-over-Metal készlet

Tartalma:
5 x MC/ opak paszta 3 g
(A2, A3, B2, C2, D2),
4 x IQ/L-O-M Test 50 g
(A, B, C, D), modelláló
folyadék, üveglap, ecset,
technikai útmutató



GC Initial IQ - One Body, Press-over-Zircon készlet

Tartalma:
4 x vázmodifikáló (PFM-1,
PFM-2, PFM-3, PFM-4),
10 x effekt présellet
(A1, A2, B1, B2, C1, C2,
D2 + 3 x fehérített),
10 x korrekciós por (A1,
A2, B1, B2, C1, C2, D2 +
3 x fehérített), modelláló
folyadék, közepes (M)
gyűrűrendszer (200 g) +
szilikongyűrű, 10 x dugattyú
2g-os pelletekhez



GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal készlet

Tartalma:
Fluo kristályok, IQ/effekt
présellet: A1-M, A2-M,
B1-M, B2-M, C1-M, C2-M,
D2-M, IQ/effekt
présellet fehérített:
AO-M, BO-M, BOO-M,
IQ/ korrekciós por: A1-M,
A2-M, B1-M, B2-M, C1-M,
C2-M, D2-M, IQ/ korrekciós
por fehérített: AOM,
BOM, BOO-M, LF/ mo-
delláló folyadék, közepes
(M) gyűrűrendszer,
szilikongyűrű, dugattyú
2g-os pelletekhez



GC Initial IQ - Lazúrpor készlet NF

Tartalma:
1x neutrális (4 g),
1 x világosság (4 g),
4 x testszín (4 x 4 g),
8 x zománc effekt szín
(8 x 4 g), hígító folyadék
(8 ml), frissítő folyadék
(8 ml), 1 keverő tálka,
2 ecset, képes útmutató

Ha további információra lenne szüksége ezzel a korszerű fogászati termékcsaláddal kapcsolatban, keresse fel a legközelebbi GC képviselőt.

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Hungary
Árok u. 10/B
H - 2040 Budaörs
Tel. +36.23.805.805
Fax. +36.23.805.806
hungary@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com

GC

Alkossa meg világát a GC Initial-lel,

a mindent átfogó kerámiarendszer az összes létező alkalmazáshoz



Ismerje meg az Initial „One Body” Termékcsaládot!

Initial IQ -
„One Body” a GC-től

Layering-over-Zircon
Layering-over-Metal
Press-over-Zircon
Press-over-Metal

Következésképpen jó
minőségű, reprodukálható
esztétikumú és gazdaságos
munka



GC

GC Initial IQ - One Body

Layering-over-Metal és Layering-over-Zircon
Press-over-Metal és Press-over-Zircon

Az Initial IQ - One Body koncepció kifejlesztése révén a GC kompakt kerámia rendszereket kínálja a standard Vita® színek gyors és egyszerű reprodukálásáért. Ez a megközelítés lehetővé teszi a fogtechnikus számára, hogy a formára és funkcióra koncentrálhasson, valamint vitalitást és természetes megjelenést kölcsönözzön végső lépésként az Initial IQ Lazúrpaszta, az újonnan kifejlesztett három dimenziós kerámia festék alkalmazásával. A GC Initial IQ - One Body megközelítés a következetes minőségre és esztétikai eredményekre törekszik újra és újra egyre kevesebb anyag felhasználásával.

A 'One - Body' koncepció egy egyszerű és gazdaságos folyamatot jelent, mely során a teljes formát egyetlen színnel alkotják meg.

- Alkalmazható standard porcelán ötvözetekkel és az összes cirkon-alapú technológiával is,
- Elérhető rétegzéses és préseléses rendszerként is,
- Gyorsan és egyszerűen elsajátítható technika,
- Következetesebbé és kiszámíthatóbbá teszi a munka minőségét technikától és anyagtól függetlenül.

1. lépés: A váz előkészítése

Cirkon

Layering-over-Zircon



Cirkónium-dioxid váz

Press-over-Zircon



Applikáljon egy réteg GC Initial IQ fényviszaverő linert, hogy eltakarja a cirkon vázat



Applikáljon egy vékony réteg vázmodifikátort (Power Frame Modifier)

Fém

Layering-over-Metal



Öntött vagy CAD/CAM technológiával készített fémvázak


Press-over-Metal



Applikáljon egy vékony opaker réteget a normál GC Initial MC opaker pasztából egy lapos ecsettel. Égetés előtt applikáljon Fluo kristályt az opaker felszínére



HTE

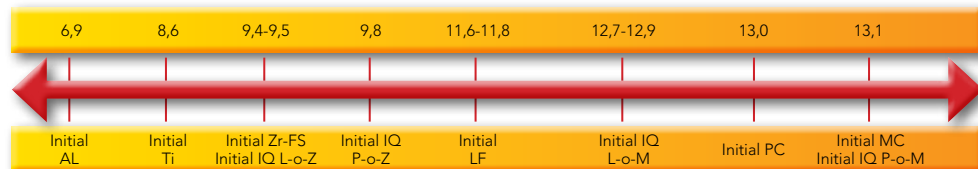

További információt a GC Initial technikai útmutatóban talál.
Képek: ZTM Michael Brüschen - M.B. Dentaltechnik GmbH, Düsseldorf, Németország
*A Vita® a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Németország bejegyzett védjegye.

2. lépés: Felépítés a kiválasztott technika alapján

Rétegzés

- Egyszerű felépítés egyetlen porral
- Gyors és gazdaságos alternatíva az esztétikus kerámia koronákhoz és hidakhoz
- Nem szükséges beruházni speciális berendezésekre

Layering-over-Zircon



A teljes forma kialakítása egy test porral

Layering-over-Metal



Eredmény egyetlen égetés után



Préselés

- A teljes forma egyszerű felviszolása
- A piacon széles választékban megtalálható előgyártott viasz rágófelületeknek köszönhetően a felépítéskor időt takaríthat meg
- Csak mintázza meg a széleket és préselje, hogy tökéletes széli adaptációt kapjon
- Az egyedülálló előkevert pelletek a színeket reprodukálhatóvá teszik, így kevesebb az újbóli munka

Press-over-Zircon



Az opak égetése után teljes felviszolás történik egy előgyártott viasz rendszer segítségével. A 0,8 mm-es rétegvastagság megfelelő esztétikumú eredményt ad

Press-over-Metal



A préselés utáni eredmény



3. lépés: Finírozás GC Lazúrpasztával

Az Initial IQ Lazúrpaszta egy három dimenziós kerámia festék rendszer, melyet színnyelvesség és élethű transzklucencia megalkotására terveztek az Initial Press-over és Layering-over rendszerekhez. Így már ténylegesen életre tudja kelteni a préselt vagy rétegzett koronákat és hidakat a Lazúrpaszta készlettel, mind a magas, mind az alacsony hőágulási együtthatójú kerámiák esetében. A lazúrpaszta használatra kész tégelyekben érhető el, alapjául finom kerámia részecskék szolgálnak. Az anyag vastagabb rétegben is applikálható, hogy páratlan vitalitást és természetes fényt adjon a helyreállításainak.

