

# Umění nabarvit keramiku



*initial*<sup>TM</sup>  
Painting Solutions

Lustre Pastes ONE  
Spectrum Stains

*GC*

# Dobarvujte estetické náhrady s Initial™ od GC

GC nabízí uživatelům Initial nejmodernější a vysoce estetická řešení pro keramiku, kterou lze dobarvovat. V závislosti na konkrétním případě a požadovaných vlastnostech poskytnou dvě produktové řady, Initial Lustre Pastes ONE a Initial Spectrum Stains, očekávaný výsledek. Jsou vhodné pro celou řadu CTE, takže můžete pracovat s kompletní keramickou řadou GC Initial a téměř se všemi typy jiné keramiky.



**Initial Lustre Pastes ONE**, jedinečné trojrozměrné dobarvovací pasty na keramiku od GC, dodávají vaší práci fluorescenci, hloubku a autenticitu... a to pouhým dobarvením. K dosažení nepřekonatelné životnosti a přirozeného lesku všech vašich dostaveb už není potřeba složité vrstvení nebo vypalovací cykly navíc.

**Initial Lustre Pastes GUM** Dásňové odstíny jsou založeny na promyšleném výběru růžově zbarvených keramických částic bez obsahu fluorescence, které dokonale napodobují vzhled přírodní dásně. Reálného přechodu od okraje koruny k dásni tak lze velmi snadno dosáhnout.

**Initial Spectrum Stains** poskytují dvourozměrné dobarvovací efekty a lze jich použít jak k vnitřnímu, tak vnějšímu barvení. Díky nim dosáhnete velmi vytříbeného konečného výsledku s lesklým povrchem, přičemž textura zůstane zachována.

Oba produkty se vzájemně doplňují. V některých případech se používají oba: například Spectrum Stains lze přidat k Lustre Pastes ONE nebo jednotlivým keramickým práškům.

Lustre Pastes Rodina & Spectrum Stains,  
jsou kompatibilní s celou řadou keramiky Initial

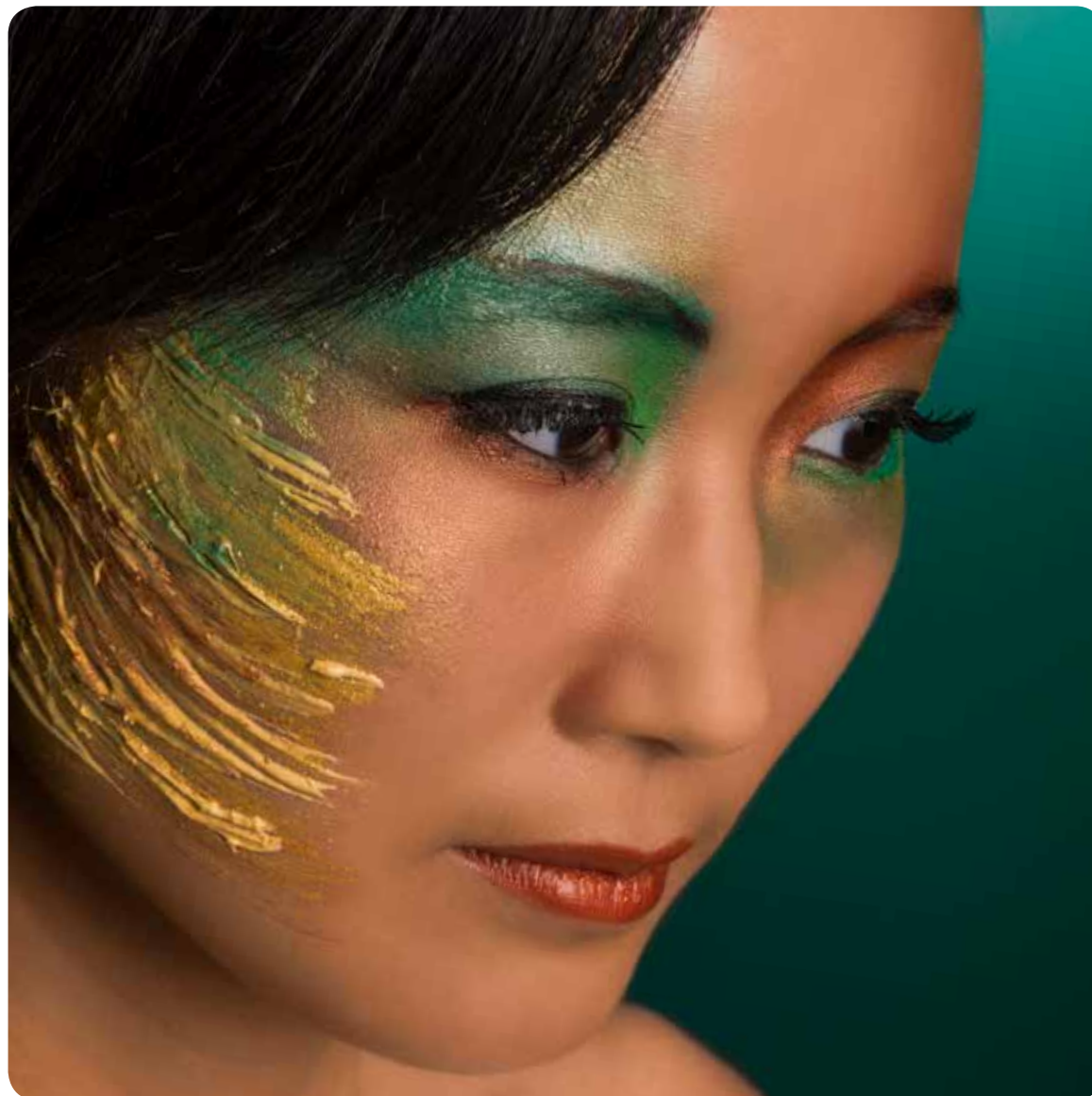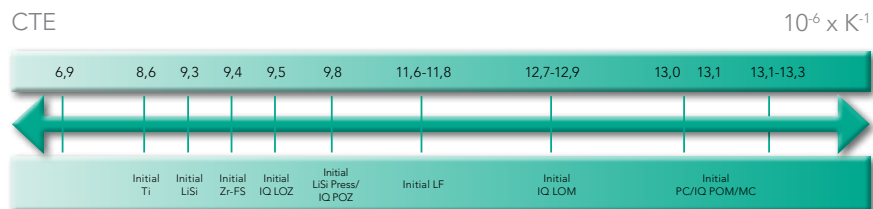


## Lustre Pastes ONE V odstíny

S odstíny „Body A-D“ lze požadovaných V odstínů docílit velmi snadno během okamžiku. Za pomoci dalších dostupných odstínů můžete náhrady dále individualizovat, a dosáhnout tak dokonale přizpůsobeného konečného výsledku.



Optimální úroveň fluorescence.  
Zajišťuje vzhled přirozených zubů za všech světelných podmínek.

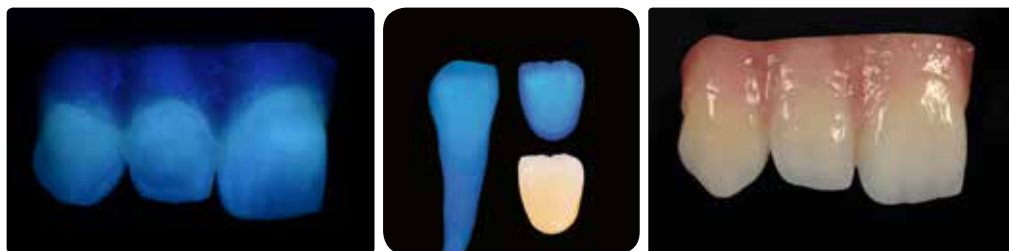

## Lustre Pastes NF - dásňové odstíny

5 jedinečných dásňových odstínů Lustre Pastes umožňuje individuální přizpůsobení dásní tak, aby ladily s přírodními odstíny v přirozené harmonii. Můžete použít 4 libovolně míchatelné odstíny Gum Modifiers, které umožňují neomezenou kreativitu a bezproblémové reprodukování i nejjemnějších dásňových odstínů.



## Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains jsou práškové dobarvovače dostupné v různých 20 barvách, které zvyšují estetiku vašich náhrad.

Bez ohledu na způsob aplikace bude dosaženo velmi jemného konečného výsledku při zachování povrchu textury a zajištění optimální úrovně lesku.



# Krásná hloubka s Initial Lustre Pastes ONE

## Dokonalé dokončení vašich náhrad

K dosažení nepřekonatelné živosti a přirozeného lesku všech vašich dostaveb již nepotřebujete složité vrstvení nebo vypalovací cykly navíc.

S pastami Initial Lustre Pastes ONE můžete dosáhnout hloubky barev a reálně působícího efektu translucence... pouhým barvením.

Initial Lustre Pastes ONE jsou založeny na speciální směsi jemných keramických částic. Kroky k dokončení vaší práce zůstávají stejné bez ohledu na techniku použitou k vytvoření základu.

Použitím ředící tekutiny zachováte optimální konzistenci až do konce.

Požadovaný V odstín vytvoříte nanesením Lustre Pastes ONE „Body A-D“. Tento postup zahrnuje vše potřebné k okamžitému vytvoření V odstínů.

Pro lepší charakterizaci jednoduše použijte další dostupné barvy k vytvoření vysoce estetických výsledků.



Výchozí stav



Nanášení LP ONE Neutral Fluo



Nanášení odstínů Body



Konečná náhrada vykazující barvu a lesk

## Snadné úpravy

S pastami Initial Lustre Pastes ONE můžete své práce snadno upravovat.

Změnit barvu, jas, šedou světelnost nebo přidat povrchový lesk nikdy nebylo tak snadné!



Jas




Barva



Šedá hloubka

## Díky nabarvení keramiky můžete ztvárnit i ty nejjemnější detaily

Lustre Pastes ONE se zlepšenou fluorescencí jsou speciálně vyvinuty pro podporu fluorescence monolitických náhrad a zajistí vzhled přirozených zubů za všech světelných okolností.

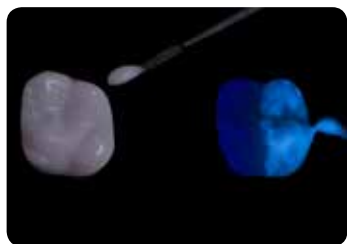

Lustre Sklovinný efekt - opál  
Vysoce opalescentní základní pasta pro použití v oblasti incize zubu.




# Dodejte svým monolitickým dostavbám charakter...

Jedinečná konzistence zajišťuje stejnorodé úpravy i vzhled. Požadované textury / hladkosti vrstvy Lustre Pastes ONE lze docílit jemnou vibrací nebo kondenzací dostavby. Není potřeba žádného složitého vrstvení nebo vypalovacích cyklů navíc; je to rychlé, snadné a bezpečné. Pasty jsou připravené k použití a mají jemné tixotropní vlastnosti pro snadné a přesné nanášení.



Plně anatomické konstrukce z lithium disilikátu jako LiSi Press lze individualizovat pomocí Lustre Pastes ONE.

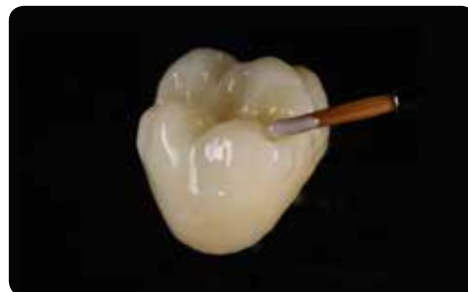

Hledáte způsob, jak dodat život svým zirkonovým monolitickým náhradám zhotoveným pomocí CAD/CAM, jako např. Initial Zirconia Disk? Lustre Pastes ONE nabízejí řešení pro všechny druhy náhrad.



...nebo je využijte pro hloubkové efekty uvnitř vrstvení.



Cut back



Nanášení Lustré Pastes ONE (+vypalování)



Nanášení opálových / incizních hmot (+vypalování)



Konečný výsledek

Dosáhněte těch nejlepších estetických výsledků díky pastám Initial Lustré Pastes ONE s technikou cut-back u lisovaných nebo vrstvených prací. Po nabarvení pomocí Lustré Pastes ONE dokončíte náhradu příslušnými fazetovacími keramickými materiály GC Initial: CL-F pro vysokou translucenci a opálové a sklovinné hmoty pro incizní efekty.



# Dobarvěte své červené a bílé estetické náhrady...

Dvě sady, jeden přístup.



Výchozí stav



Nanášení různých dásňových odstínů Initial Lustre Pastes ONE Gum Shades



Charakterizace pomocí V odstínů




Konečný výsledek





## ...s přirozeně vypadajícími přechody, a to i na zirkoniových konstrukcích.

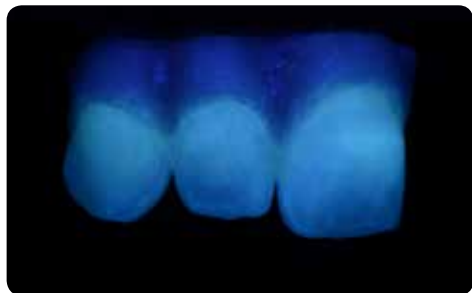

Luster Pastes ONE zajišťují optimální úroveň fluorescence a vzhled přirozených zubů za všech světelných podmínek a používají se jako dobarvací a individualizační vrstva v kombinaci s Initial SQIN - technologie mikrovrstvení.

Vzhledem k narůstající oblibě zirkonových náhrad a dostaveb zhotovených pomocí CAD/CAM nabízí GC řešení k zachování stejných estetických standardů. S Lustre Pastes ONE budou vaše monolitické dostavby vypadat přirozeně a plně života. Jejich unikátní složení umožňuje větší interakci se základním keramickým materiálem a opticky působí jako vrstvená keramika. Díky tomu se zvyšuje trojrozměrný efekt vaší náhrady. V jednoduchosti se skrývá krása!



# Rozšiřte své možnosti dobarvení o Initial Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains obsahují pigmenty, které jsou sintrované uvnitř skelné matrice, nabízejí stabilitu a umožňují reprodukovatelné a stejné výsledky. S Initial Spectrum Stains můžete vytvářet nekonečné kombinace. Používejte je jak k vnějšímu, tak vnitřnímu barvení. Lze je také přidat ke keramickým hmotám nebo k Initial Lustre Pastes ONE a dosáhnout ještě většího počtu možností!

## Dvě konzistence


Initial Spectrum Stains lze nanášet v konzistenci preferované uživatelem jako pastu nebo tekutější. Bez ohledu na použitou konzistenci budou konečné výsledky stejné: zabarvení a lesk s velmi jemným rozlišením, zachovávající povrchovou texturu náhrady. Jsou 2D protějškem past Initial Lustre Pastes ONE.



Korunka s jemnou texturou připravená ke glazování



Glazování s tekutou nebo pastovou konzistencí

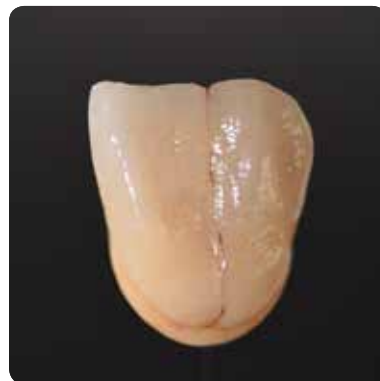

Po vypálení: dobarvená a glazovaná se zachováním jemné textury



Vnitřní dobarvení...



...nebo vnější



# 2D a 3D řešení dobarvení keramiky... od GC

## GC Initial Lustre Pastes Set ONE - V odstíny

- 4 odstíny Body a 1 neutrální k nejsnazšímu dosažení náhrady ve V odstínu.
- 9 efektů, pomocí kterých můžete projevit své umělecké vlohy a domalovat bílé skvrny, dekalifikace, tenké linky a prasklinky.

### Složení sady:

1 x neutrální (4 g)  
 1 x Neutral Fluo (4 g)  
 1 x Value (4 g)  
 4 x odstín Body (4 x 4 g)  
 8 x odstín se sklovinným efektem (8 x 4 g)  
 1 x ředící tekutina (8 ml)  
 1 x obnovující tekutina (8 ml)  
 1 míchací nádobka  
 2 štětce  
 Tabulka barev  
 Technický manuál



## GC Initial Lustre Pastes Set NF - odstíny dásní

- 5 past v barvě dásní připravených k použití, s ideálními tixotropními vlastnostmi pro snadné a přesné nanášení.
- 4 mísitelné modifikátory dásní umožňující neomezenou kreativitu při kopírování přirozené harmonie dásní.

### Složení sady:

5 x odstín pro dásně (5 x 4 g)  
 4 x modifikátor barvy pro LP NF (4 x 3 g)  
 Ředící tekutina (8 ml)  
 Obnovující tekutina (8 ml)  
 1 míchací nádobka  
 2 štětce  
 Tabulka barev  
 Technický manuál



## GC Initial Spectrum Stains

- 16 práškových barev zvýrazňujících estetiku náhrady.
- Dvě konzistence s vylepšeným konečným výsledkem, zachovávající texturu a poskytující optimální úroveň lesku.

### Složení sady:

16 x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16 x 3 g)  
 1 x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10 g)  
 1 x Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml)  
 1 x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 ml)  
 1 x Initial Spectrum Stains Shade Guide  
 Colour Chart  
 Technical Manual

### Available as refill:

GC Initial Spectrum Glaze Powder  
 GL-FLUO (10 g)  
 GC Initial Spectrum Stains  
 SPS-17 - SPS-20 (3 g)



## GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<https://europe.gc.dental>

## GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic  
V Olšínách 82  
CZ - 100 00 Prague 10  
Tel. +420.274.771.965  
Fax. +420.274.771.965  
info.czech@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/cs-CZ>

The logo for GC, featuring the letters 'GC' in a bold, italicized, sans-serif font with a white outline and a slight shadow effect.

**Since 1921**  
100 years of Quality in Dental