

A kerámia festés művészete



*initial*TM
Festési megoldások

Lustre Paste ONE
Spectrum Stains

GC

Fessen esztétikumot a GC Initial™ segítségével


A GC a legmodernebb, és magas esztétikájú festhető kerámia megoldásokat kínálja az Initial termékek használóinak. Az eset, és a megkívánt hatás függvényében a két termékcsoport, az Initial Lustre Pastes ONE és az Initial Spectrum Stains, az elvárt eredményt fogja nyújtani. Széles hőtágulási együttható (CTE) tartományának köszönhetően használhatóak a teljes GC Initial kerámia rendszerrel, valamint szinte minden más kerámiával egyaránt.

Az Initial Lustre Pastes ONE, a GC-től, az egyedülálló, 3D-festhető kerámia, mely fluoreszcenciát, mélységet, és eredetiséget kölcsönöz minden munkájának... csupán festéssel. A továbbiakban már nem lesz szüksége összetett rétegzésre vagy extra égetésekre ahhoz, hogy elérje a felülmúlhatatlan vitalitást és a természetes fényt az összes restaurációhoz.

Az Initial Lustre Pastes GUM Shades a nem fluoreszkáló, rózsaszínű kerámia részecskék átgondolt választékán alapulnak, hogy tökéletesen utánozzák a természetes íny megjelenését. Az élethű korona szél gingiva átmenet könnyen megvalósítható.

Az Initial Spectrum Stains 2D-s effektet biztosít és belső valamint külső festésre egyaránt használható. Rendkívül kifinomult végeredményt nyújt, továbbá fényes felületet biztosít, egyúttal megőrzi a textúrát.

Lustre Pastes ONE és a Spectrum Stains kiegészíti egymást. Némely esetben mindkettő használható; például, a Spectrum Stains hozzáadható a Lustre Pastes ONE lazúrpasztához, vagy a kerámia porhoz.

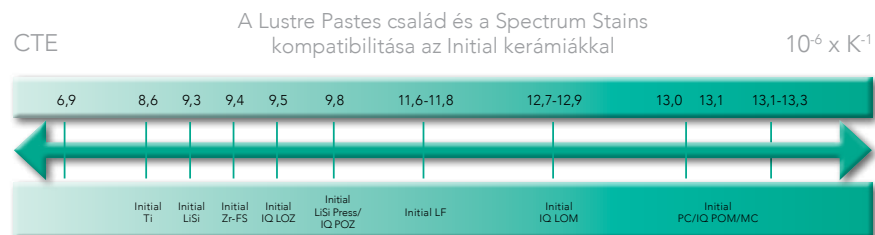

Lustre Pastes ONE V-színek

A "Test A-D" színekkel a kívánt V-szín könnyen és gyorsan elérhető. A további színekkel még tovább karakterizálhatja a restaurációt a tökéletesen illeszkedő végeredményért.



Optimális fluoreszcencia szint.

Biztosítja a természetes megjelenést minden fénykörnyezetben.



Lustre Pastes NF íny színek

Az 5 egyedi íny színű Lustre Paszte lehetővé teszi az adaptációt, hogy illeszkedjen a természetes gingivához árnyalatok természetes harmóniájához. Használhatja a 4 keverhető GUM módifikálót, amelyek korlátlanul lehetővé teszik a kreativitást és a legkényesebb íny eset reprodukálását.



Spectrum Stains

Az Initial Spectrum Stains por alapú festékek, melyek 20 színben érhetőek el, ezzel tökéletesítve az restaurációk esztétikáját.

A felvitel módjától függetlenül nagyon finom lesz a végeredmény, ezáltal megtartva a felszín textúráját, optimális fény szintet biztosítva.



Gyönyörű megjelenés Initial Lustre Pastes ONE

A restaurációk tökéletes befejezése

A továbbiakban már nem lesz szüksége összetett rétegzésre vagy extra égetésekre ahhoz, hogy elérje a felülmúlhatatlan vitalitást és a természetes fényt az összes restaurációhoz.

Az Initial Lustre Pastes ONE segítségével színmélységet és élethű áttetszőséget érhet el..... csupán festéssel.

Az Initial Lustre Pastes ONE finom kerámiaszemcsék különleges keverékén alapul. A munka befejezéséhez vezető lépések ugyanazok maradnak, függetlenül az alap elkészítéséhez használt technikától.

A hígító folyadék használatával az anyag optimális konzisztenciája megmarad a munka befejezéséig.

A kívánt V-szín elérhető a megfelelő Lustre Pastes ONE lazúrpaszta alkalmazásával, színválaszték: "Body A-D". Ez az eljárás mindent biztosít ami a V-szín létrehozásához szükséges, rövid idő alatt.

Még hatékonyabb karakterizációhoz egyszerűen használja a többi elérhető szint, így lesz magas esztétikájú a végeredmény.



Alap



Neutrális LP applikálása



Body Színek applikálása



A végső restauráció
színe és fénye

Könnyű módosítás

Initial Lustre Pastes ONE használatával könnyen változtathat a munkáján.

A világosság, a fényesség és a szín megváltoztatása vagy a felületi csillogás megnövelése még soha nem volt ennyire egyszerű!



Világosság




Szín



Szürketartalom

A kerámia festékek lehetővé teszik a legkifinomultabb érzések valós ábrázolását.

A Lustre Pastes ONE, a megnövelt fluoreszciával, kifejezetten arra tervezve, hogy a monolitikus restaurációknak természetes megjelenést kölcsönözzön minden fény körülményben.

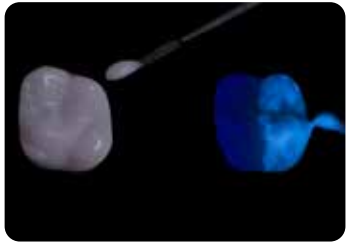


Lustre Enamel Effect – Opal
Megnövelt opaleszcíájú bázis paszta incízális használatra.



Adjon karaktert monolitikus restaurációjának ...

Az egyedülálló konzisztencia biztosítja a változtatások és a megjelenés homogenitását. A Lustre Paste ONE réteg megkívánt felületi textúrája/simasága a restauráció gyengéd vibrációval, tömörítéssel érhető el. Nincs szükség összetett rétegzésre vagy extra égetésekre, ez gyors, könnyű és biztonságos. A lazúrpaszták használatra készek, egy egész finom tixotróp tulajdonsággal, a könnyű és precíz applikációért.

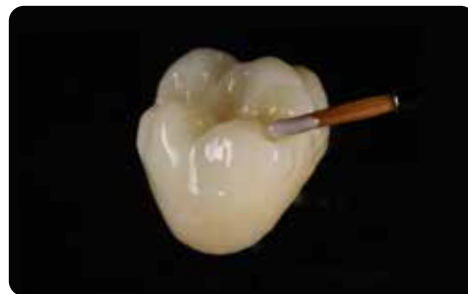

Teljes anatómikus vázmunkák lítium diszilikátból, mint például a LiSi Press-ből, individualizálhatóak Lustre Pastes ONE segítségével.

Keresi hogy miként tehetné vitálisabbá a monolitikus CAD/CAM technológiával (például Initial Zirconia Disk) készült munkáit? A Lustre Pastes ONE lazúrpaszták megoldást nyújtanak minden esetben.



... vagy helyezze el a rétegek közt a mélységi hatásért



Visszakaparásos technika



Lustré Pastes ONE lazúrpasztta felvitele (+égetés)



Opal/Incisal massa felvitele (+égetés)



Végeredmény

Érje el a legkiválóbb esztétikai eredményt az Initial Lustre Pastes ONE lazúrpasztákkal, visszakaparásos technikával készült, préselt vagy rétegzett munkák esetén is. A Lustre Pastes ONE lazúrpasztákkal történő festést követő utolsó simításként használjon GC Initial kerámiát: CL-F a magas transzrucenciáért vagy Opal és Enamel masszát az incizális effektékért.



Fessen vörös és fehér esztétikumot ...

Két rendszer, egy megközelítés.



Kiindulási állapot



Különböző Initial Lustre Pastes NF lazúrpaszták és Gum Színek felvitele




Karakterizálás V-Színekkkel



Végeredmény



... élethű átmenettel, még cirkónium vázon is

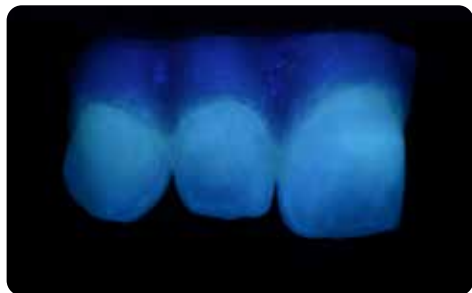

Az Lustre Pastes ONE optimális fluoreszcia szintje biztosítja a természetes megjelenést minden fény környezetben. Színező és individualizáló réteggént használva az Initial SQIN mikro-rétegző technikájával kombinálva.

Az cirkónium és CAD/CAM gyártású restaurációk egyre növekvő népszerűsége miatt, a GC megoldásokat kínál a magas esztétikai színvonal megtartására. A monolitikus pótlások természetesnek és vibrálóan fognak hatni az Initial Lustre Paste ONE és a NF GUM lazúrpaszták használatával. Egyedülálló összetételük kölcsönhatásban van az alatta elhelyezkedő kerámia réteggel, optikailag úgy működik mint egy kerámia por, restaurációjának 3D effektust biztosítva. Az egyszerűség gyönyörködtet!



Az Initial Spectrum Stains kiszélesíti a lehetőségeit

Az Initial Spectrum Stains olyan pigmenteket tartalmaz, amelyek a stabilitás és a reprodukálható, következetes eredmény elérése érdekében a földpát mátrixba lettek szinterelve. Variálhatja, és vég nélkül játszhat az Initial Spectrum Stains anyaggal. Használja külső és belső festésre egyaránt. Hozzá adagolható a kerámia masszához is, valamint az Initial Lustre Pastes NF lazúrpasztához, hogy még tovább növelje a lehetőségek tárházát!

Két konzisztencia, melyek megőrzik a textúrát


Az Initial Spectrum Stains a felhasználó által megkívánt konzisztenciában használható, paszta állagú, vagy hígabb változatban. A végeredmény ugyanaz lesz, konzisztenciától függetlenül: festés és fény nagy részletgazdagsággal, megtartva a restauráció felszíni textúráját, így ez az Initial Lustre Pastes ONE lazúrpaszták 2D-s párja.



Korona finom textúrával
glazúrozás előtt



Glazúrozás folyékony vagy paszta
állagú anyaggal

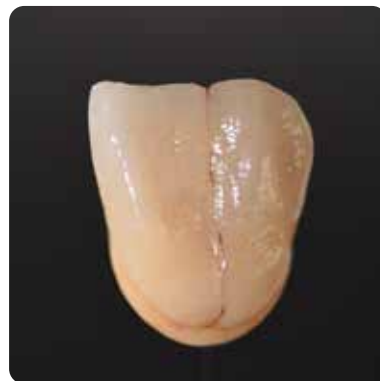

Égetés után, megfestve és glazúrozva, a
finom textúra megtartásával



Belső festés ...



... vagy külső festés



2D és 3D kerámia festék megoldások ... a GC-től

GC Initial Lustre Pastes ONE készlet- V-Színek

- 4 Test szín és 1 Neutral a V-színű restauráció legkönnyebb eléréséhez.
- 9 Effekt szín hogy kiteljesítse a művészi lehetőségeket és festhessen fehér pontokat, dekalifikációt, hajszálvonalakat és repedéseket.

A készletben található:

1x Neutral (4g)
1x Neutral Fluo (4g)
1x Value (4g)
4x Test színek (4x4g)
8x Zománc effekt színek (8x4g)
1x Hígító folyadék (8ml)
1x Frissítő folyadék (8ml)
1 Keverő edény
2 Ecset
Színskála
Technikai útmutató



GC Initial Lustre Pastes NF készlet- Gum Shades

- 5 használatra kész íny színű paszta ideális tixotróp tulajdonsággal, a könnyű és precíz applikációért.
- 4 keverhető Íny Modifikáló a határtalan kreativitás biztosítására, hogy a természetes ínyharmóniát leutánozza.

A készletben található:

5x Íny Szín (5x4g)
4x Stain Modifier LP NF (4x3g)
Hígító folyadék (8ml)
Frissítő folyadék (8ml)
1 keverő edény
2 ecset
Színskála
Használati útmutató



GC Initial Spectrum Stains

- 16 színező por az esztétika finomítására.
- Két konzisztencia a letisztult végeredményért, megtartva a textúrát és optimális fényt biztosítva.

A készletben található:

16x Initial Spectrum Stains SPS (16x3g)
1x Initial Spectrum Glaze por GL (10g)
1x Initial Spectrum Glaze folyadék (25ml)
1x Initial Spectrum Glaze Paszta folyadék (8g)
1x Initial Spectrum Stain Színskála
Színskála
Használati útmutató

Utántöltőként elérhető:

GC Initial Spectrum Glaze por GL-FLUO (10g)
GC Initial Spectrum Stains SPS-17 - SPS-20 (3g)



GC EUROPE N.V.

Head Office
Research Park
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32. 16. 74. 10. 00
Fax +32. 16. 40. 02.14
info.gce@gc.dental
<https://europe.gc.dental>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Hungary
Fazekas utca 29-31.
H - 1027 Budapest
Tel. +36.1:224.04.00
info.hungary@gc.dental
<https://europe.gc.dental/hu-HU>



Since 1921
100 years of Quality in Dental