

# Umetnost barvanja keramike.



*initial*<sup>TM</sup>  
Rešitve z barvanjem

Lustre Pastes ONE  
Spectrum Stains

**GC**

# Obarvajte vaše estetske izdelke z GC Initial™

GC ponuja uporabnikom Initial najbolj moderne in visoko estetske keramične rešitve z barvanjem. Odvisno od primera in željenih lastnosti sta dve liniji izdelkov Initial Lustre Pastes ONE in Initial Spectrum Stains, ki bosta zagotovili pričakovani izid. Primerni sta za širok CTE spekter kar dovoljuje, da uporabljate kompletno linijo GC Initial keramike in skoraj vse tipe drugih keramik.



**Initial Lustre Pastes ONE**, unikatna 3D keramika za barvanje iz GC, prinaša fluorescence, globino in avtentičnost k vsem vašim dragocenim delom ... samo z barvanjem. Ne potrebujete več kompleksnega plastenja ali dodatnih ciklov pečenja, da dosežete neprekosljivo vitalnost in naravni sijaj za vse vaše restavracije.

**Initial Lustre Pastes GUM** barve temeljijo na premišljenem izboru ne-fluorescentnih, rožnato obarvanih keramičnih delcev, ki popolnoma posnemajo videz naravne dlesni. Realističen prehod od roba krone do dlesni je tako zlahka dosežen.

**Initial Spectrum Stains** ponuja 2D učinek barvanja in se lahko uporabi tako za interno kot tudi za eksterno barvanje. Dosegli boste zelo uglajen končni rezultat s sijočo površino s tem, da se bo ohranila tekstura površine.

Oba izdelka sta komplementarna. V nekaterih primerih se lahko uporabita oba; na primer, Spectrum Stains se lahko doda k Lustre Pasti ONE ali k prahu za keramično nadgradnjo.

Kompatibilnost Lustre Past družine & Spectrum Stains  
z Initial keramično linijo

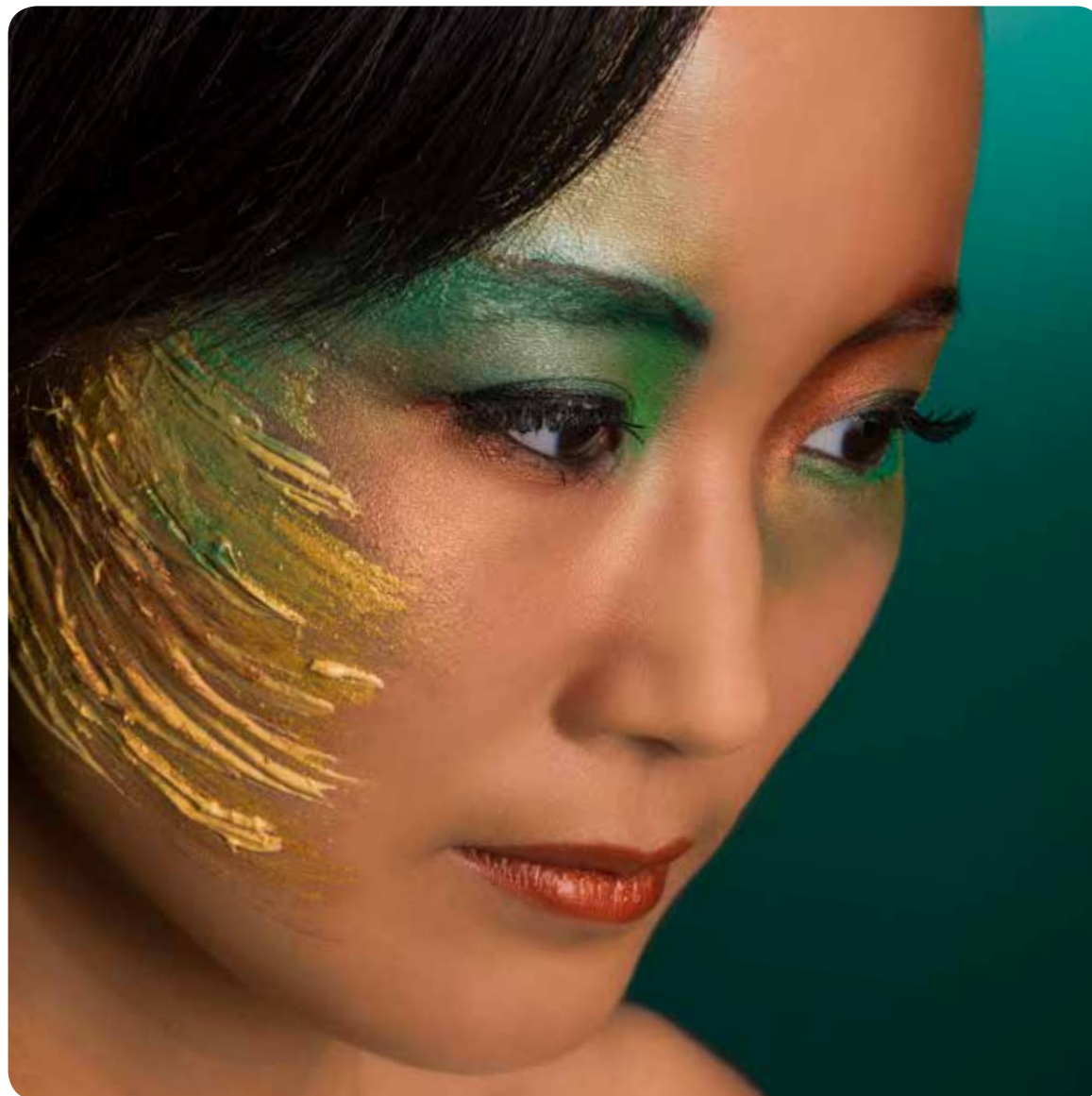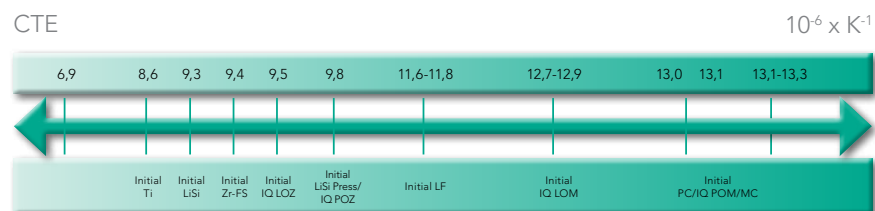


## V-barve Lustre Pastes ONE

Z »body A-D« barvami se lahko zelo enostavno in v kratkem času dosežejo vse željene V- barve. Z drugimi barvami, ki so na voljo lahko naprej karakterizirate restavracije za odlično ujemanje in asimilirani končni rezultat.



Optimalen nivo fluorescence.  
Nudi naraven izgled pod vsemi izvori svetlobe.

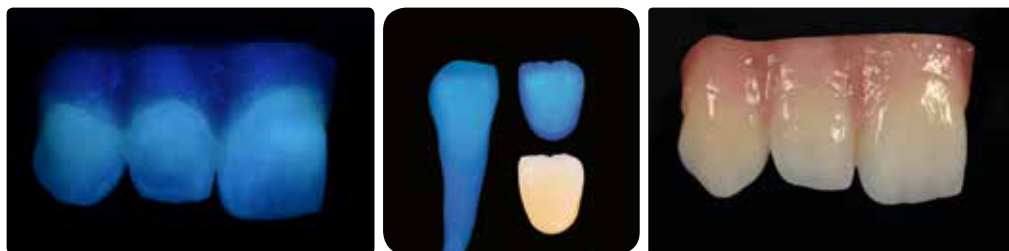

## Lustre Pastes NF barve dlesni


5 edinstvenih Luster past v barvi dlesni omogoča individualno prilagajanje, ujemanje z naravnimi odtenki v harmoniji. Uporabite lahko 4 modifikatorje dlesni, kateri omogočajo neomejeno ustvarjalnost in reprodukcijo najbolj zahtevnih primerov v dlesni brez problemov.



## Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains so stainsi v prahu na voljo v 20 barvah, kateri omogočajo dodatno estetiko vašim restavracijam.

Ne glede na način nanosa, bo površina imela zelo fino teksturo in optimalen sijaj.

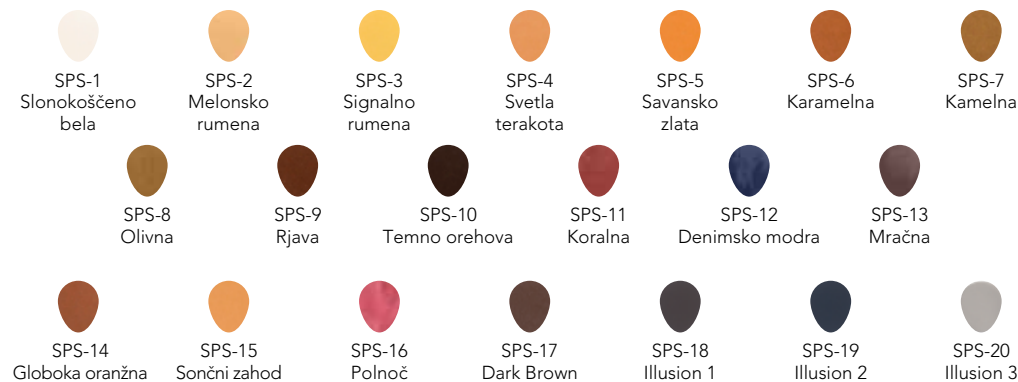

# Globoka lepota z Initial Lustre Pastes ONE

## Odličen zaključek vaših restavracij

Ne potrebujete več kompleksnega plastenja ali dodatnih ciklov pečenja, da dosežete neprekosljivo vitalnost in naravni izgled vseh vaših restavracij.

Z Initial Lustre Pasto ONE lahko dosežete globino barve in naravno translucenco ... prav tako kot pri barvanju.

Initial Lustre Pasta ONE je osnovana na posebni mešanici finih keramičnih delcev. Koraki, da dokončate vaše izdelke ostanejo identični, ne glede na tehniko, ki jo uporabljate, da ustvarite osnovo barvo.

Z uporabo razredčilne raztopine je optimalna konsistenca zadržana do konca.

Potrebna V-barva je ustvarjena z aplikacijo Lustre Paste ONE "Body A-D". Ta proces vključuje vse kar je potrebno, da ustvarite V-barvo v zelo kratkem času. Za poudarjeno karakterizacijo preprosto uporabite druge barve, ki so na voljo, da ustvarite visoko estetski rezultat.



Osnova



Aplikacija LP ONE Neutral Fluo



Aplikacija Body barve



Končna restavracija kaže barvo in sijaj

## Preprosta modifikacija

Z Initial Lustre Pasto ONE lahko preprosto modificirate vaše izdelke.

Spreminjanje svetlosti barve, spreminjanje zasičenosti - ali dodajanje površinskega sijaja ni bilo še nikoli tako preprosto!



Svetlost





Barva



Zasičenost

## Keramika, ki je lahko obarvana omogoči konkretno reprezentacijo najbolj subtilnih emocij

Luster Pastes ONE z izboljšano fluoroscenco so posebej razvite za povečanje fluoroscence vaših monolitnih restavracij in zagotovo za naraven videz zob v vseh svetlobnih okoliščinah.

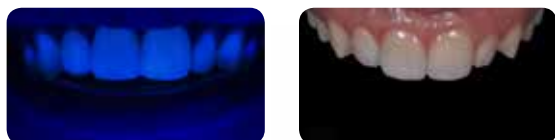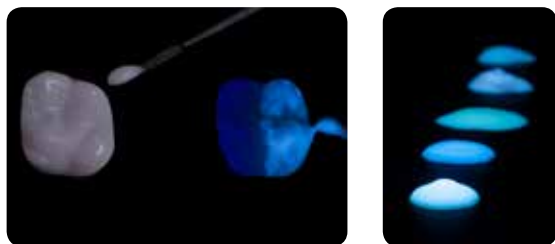

Lustre Enamel efekt - Opal  
Visoko opalescentna osnovna pasta za uporabo v incizalnih predelih.




# Dodajte karakter vašim izdelkom z enotno barvo...

Unikatna konsistenca zagotavlja homogeno modifikacijo in izgled. Zahtevana tekstura površine/gladkost plasti Lustre Pastes ONE se lahko pridobi z nežno vibracijo ali kondenzacijo restavracije. Brez obsežnih plasti ali dodatnih ciklov pečenja; je hitro, enostavno in varno. PASTE so pripravljene za uporabo z finimi tiksotropnimi lastnostmi, za enostavno in natančno aplikacijo.



Polno anatomsko ogrodje iz litijum disilikata kot je LiSi Press se lahko individualizira z Lustre Pastes ONE.

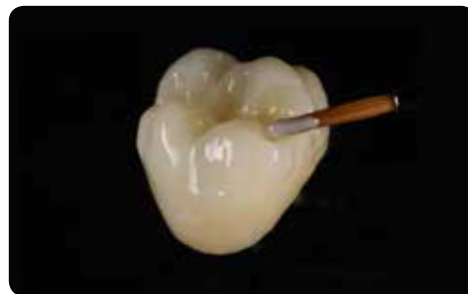

Iščete način dodajanja vitalnosti vašim CAD/CAM izdelanim monolitnim cirkonijevim izdelkom iz Initial Zirconia diskov? Lustre Pastes ONE je rešitev pri takšnih primerih.



...ali vtisnite v njihove plasti globino.



Cut back tehnika



Aplikacija Lustre Pastes ONE (+ pečenje)



Aplikacija Opal/ Incizalne mase (+ pečenje)



Končni rezultat

Dosežite najbolj izrazite estetske rezultate z uporabo Initial Lustre Pastes NF pri tehniki cut back pri vaših tlačeni ali slojevitih protetičnih izdelkih. Po barvanju z Initial Lustre Pastes ONE, so zaključne podrobnosti narejene s posebno GC Initial veneering keramiko: CL-F za visoko translucenco in Opal ter skleninske mase za incizalne učinke.



# Obarvajte vašo rdeče belo estetiko...

Dva kompleta, en pristop.



Začetno stanje



Aplikacija različnih Initial Lustre Pastes ONE barv dlesni



Karakterizacija z V-barvami




Končni rezultat





## ...z naravno tranzicijo, celo na ogrojdih iz cirkona.

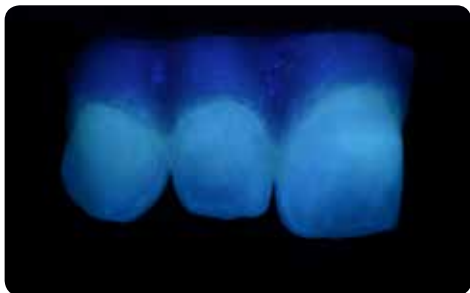

Luster Pastes ONE optimalna raven fluorescence zagotavlja naraven videz zob pod vsemi svetlobnimi okoliščinami in se uporablja kot barvni in individualni sloj v kombinaciji z Initial SQIN pri tehniki mikroslojevanja.

Z vse večjo popularnostjo cirkona in CAD/CAM restavracij, GC ponuja rešitve, da zadržimo visoke estetske standarde. Vaše monolitne restavracije bodo izgledale naravno in živo z Initial Lustre Pastes ONE. Njihova edinstvena sestava ponuja več interakcije s keramičnim materialom pod njimi in optično reagira kot nad-gradnja s keramičnim prahom ter povečuje 3D učinek vaših restavracij.

Enostavnost je lahko čudovita!



# Razširite vaše možnosti barvanja z Initial Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains vsebujejo pigmente, ki so sintrani v notranjosti feldspatske matrice za stabilnost in zagotavljajo ponovljive, konsistentne rezultate. Lahko jih različno uporabljate in se brezmejno igrate z Initial Spectrum Stains. Uporabite jih za notranje kot tudi za zunanje barvanje in madeže. Prav tako se lahko dodajajo keramičnim masam ali Initial Lustre Pastam ONE, da ustvarite še več možnosti!

## Dve konsistenci, obe z ohranjeno teksturo


Initial Spectrum Stains se lahko nanesejo v konsistenci, ki vam je najljubša, kot pasta ali bolj kot tekočina. Ne glede na uporabljen konsistenco, bo končni rezultat enak: obarvanje in sijaj z zelo fino definicijo, ki ohranja površinsko teksturo restavracije; so 2D dvojnik Initial Lustre Pastes ONE.



Prevleka s fino teksturo pripravljena na glazuro



Glaziranje s tekočinsko ali pastasto konsistenco

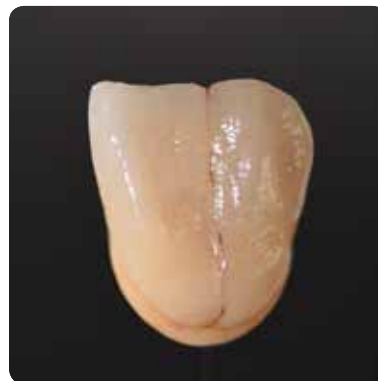

Po pečenju: obarvanje in glazura z ohranjeno fino teksturo



Obarvanje notranje...



...ali zunanje



# 2D in 3D keramične raztopine za obarvanje... iz GC

## GC Initial Lustre Pastes set ONE - V-barv

- 4 Body barve in 1 nevtralna za doseganje V barv restavracijna enostaven način.
- 9 barv z učinkom za sprostitev vaših umetniških potencialov in obarvanje belih madežev, dekalifikacij, lasnih črt in razpok.

### Set vsebuje:

1 x Nevtralna (4 g)  
1 x Neutral Fluo (4 g)  
1 x Value (4 g)  
4 x Body barve (4x 4 g)  
8 x barve skleninski učinek (8 x 4 g)  
1 x razredčilna raztopina (8 ml)  
1 x osvežilna raztopina (8 ml)  
1 mešalni disk  
2 barvasta čopiča  
Barvna lestvica  
Tehnični priročnik



## GC Initial Lustre Pastes set NF - barve dlesni

- 5 pripravljenih past za uporabo, obarvanih v barvah dlesni z idealno tiksotropnostjo za enostavno in natančno aplikacijo.
- 4 modifikatorji za mešanje (Gum Modifiers), ki omogočajo neomejeno kreativnost za kopiranje naravne gingivalne harmonije.

### Set vsebuje:

5 x Gum Shades (5 x 4 g)  
4 x Stain Modifier za LP NF (4 x 3 g)  
Razredčilna raztopina (8 ml)  
Osvežilna raztopina (8 ml)  
1 mešalni disk  
2 barvasta čopiča  
Barvna lestvica  
Tehnični priročnik



## GC Initial Spectrum Stains

- 16 prahov za obarvanje, ki izboljšujejo estetsko oplemenitenje.
- Dve konsistenci za novo definiranje končnega rezultata, ki ohranja teksturo in vrača optimalno stopnjo sijaja.

### Set vsebuje:

16 x Initial Spectrum Stains SPS-1 - SPS-16 (16 x 3 g)  
1 x Initial Spectrum Glaze Powder GL (10 g)  
1 x Initial Spectrum Glaze Liquid (25 ml)  
1 x Initial Spectrum Glaze Paste Liquid (8 ml)  
1 x Initial Spectrum Stains Shade Guide Colour Chart  
Technical Manual

### Na voljo kot refili:

GC Initial Spectrum Glaze Powder GL-FLUO (10 g)  
GC Initial Spectrum Stains SPS-17 - SPS-20 (3 g)



### GC EUROPE N.V.

Head Office  
Researchpark  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33  
B-3001 Leuven  
Tel. +32.16.74.10.00  
Fax. +32.16.40.48.32  
info.gce@gc.dental  
<https://europe.gc.dental>

### GC EUROPE N.V.

GCEEO Slovenia  
Ulica Talcev 1a  
SLO - 3310 Žalec  
Tel. +386.3.710.32.70  
Fax. +386.3.710.32.71  
info.slovenia@gc.dental  
<https://europe.gc.dental/sl-SI>

The logo for GC, featuring the letters 'GC' in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are white with a slight shadow effect, set against a dark teal background.