

Мистецтво розфарбовування кераміки



initial™

Рішення для
розфарбування

Lustre Pastes NF
Spectrum Stains

GC

Напишіть вашу естетику за допомогою Initial™ від GC

GC пропонує користувачам Initial найсучасніші та високоестетичні фарби для кераміки. В залежності від випадку та бажаних властивостей, дві продуктивні лінії, Initial Lustre Pastes NF та Initial Spectrum Stains, забезпечать очікуваний результат. Вони підходять для широкого спектру КТР, що дозволяє працювати з усією лінією кераміки GC Initial та майже з усіма типами інших керамік.

Initial Lustre Pastes NF, унікальні 3D-барвники для кераміки від GC, надають глибини та автентичності усім вашим висококласним роботам... лише завдяки фарбуванню. Вам більше не потрібне складне нашарування чи додаткові цикли спікання для отримання неперевершеної вітальності та природного блиску ваших реставрацій.

Initial Spectrum Stains пропонують 2D-ефект розфарбування та може використовуватися як для внутрішнього, так і для зовнішнього розфарбування. Вони забезпечать найвишуканіший кінцевий результат та блискучу поверхню зі збереженням текстури.

Обидва продукти доповнюють один одного. В деяких випадках вони використовуються разом, наприклад, Spectrum Stains можна додавати до Lustre Pastes NF чи до керамічних порошоків.



Сумісний з лінійкою кераміки Initial



Lustre Pastes NF V-Відтінки

Разом з відтінками "Body A-D" дуже легко і швидко можна отримати необхідні V-відтінки. З іншими доступними кольорами ви можете додатково характеризувати реставрації для ідеально асимільованого кінцевого результату.



Lustre Pastes NF Ясенні Відтінки

Ясенні Відтінки базуються на продуманому підборі нефлюоресцентних, забарвлених рожевим керамічних часток для ідеального імітування природного вигляду ясен. Можна легко досягти природного переходу від краю коронки до ясен.



Spectrum Stains

Барвники та глазури, розроблені для зовнішнього розфарбування та глазурування керамічних зубів та внутрішньої індивідуалізації кераміки. Сумісні з будь-яким спектром КТР, Initial Spectrum Stains ідеально адаптуються та відповідають майже будь-якому типу кераміки. Зокрема, вони адаптовані до естетичної концепції відтінків керамічної лінійки Initial.

Initial Spectrum Stains - це порошкові барвники, що доступні у 16 відтінках, які розширюють естетику ваших реставрацій.

Незалежно від способу нанесення, ви отримуєте дуже гарний кінцевий результат зі збереженням текстури поверхні та забезпеченням оптимального рівня блиску.



Глибока краса, нанесена зовні з Initial Lustre Pastes NF

Ідеальне завершення ваших реставрацій

Вам більше не потрібне складне нашарування чи додаткові цикли спікання для отримання неперевершеної вітальності та природнього блиску ваших реставрацій.

З Initial Lustre Pastes NF ви можете отримати глибокий колір та природню прозорість... лише завдяки розфарбуванню.

Initial Lustre Pastes NF базується на спеціальній суміші дрібних керамічних часточок. Незалежно від використаної техніки для створення конструкції, етапи завершення ваших робіт залишаються незмінними. При використанні рідини для розведення (Diluting liquid) ви зберігаєте оптимальну консистенцію до самого кінця.

Необхідні V-відтінки створюються нанесенням Lustre Pastes NF "Body A-D". Цей процес включає все необхідне для миттєвого створення V-відтінків.

Для подальшої характеристики просто використовуйте інші доступні кольори для досягнення високоестетичних результатів.



База



Нанесення LP Neutral



Нанесення Body Shades



Фінальна реставрація
демонструє колір та блиск

Легка модифікація

З Initial Lustre Pastes NF ви можете легко змінювати ваші роботи.

Зміна яскравості кольору, рівня сірого та додавання блиску поверхні ще ніколи не були такими легкими!



Яскравість



Колір



Рівень сірого



initial[™]

Рішення для
розфарбування

“Фарбування
кераміки
дозволяє яскраво
відобразити
найтонші емоції.”

Характеризуйте ваші монолітні реставрації...

Унікальна консистенція забезпечує гомогенну модифікацію та зовнішній вигляд. Бажану текстуру/гладкість поверхні Lustre Pastes NF можна отримати за допомогою м'якої вібрації чи конденсації реставрації. Не потрібне складне нашарування чи додаткові цикли спікання; це швидко, легко та безпечно. Паста готова до використання та має відмінну тиксотропність для легкого та точного нанесення.



Повноанатомічні каркаси з дисилікату літію, такого як LiSi Press, можна індивідуалізувати за допомогою Lustre Pastes NF.



Шукаєте спосіб додати додаткової вітальності вашим CAD/CAM реставраціям з циркону, такого як Initial Zirconia Disk? Lustre Pastes NF є рішенням у будь-якому випадку.



З системами GC Initial IQ - One Body, Press-over-Metal чи Press-over-Zircon можна характеризувати чи глазурувати яскраво за одне спікання.

...або використовуйте барвники між шарами для глибинних ефектів.



Cut back



Нанесення Lustr Pastes NF (+спікання)



Нанесення Опалових/Емалевих мас (+спікання)



Кінцевий результат

Досягніть найвидатніших естетичних результатів, використовуючи Initial Lustr Pastes NF із cut-back-технікою з вашими відпресованими чи змодельованими роботами. Після розфарбування за допомогою Lustr Pastes NF, фінальні штрихи зроблені за допомогою необхідних порошоків GC Initial: CL-F для високої прозорості та Опалових і Емалевих мас для ефектів ріжучого краю.



Намалюйте вашу червону та білу естетику...

Два набори, один підхід.



Початкова ситуація



Нанесення різних Initial Lustre Pastes NF Ясенні Відтінки



Характеризація V-відтінками



Кінцевий результат



...із природньою прозорістю,
навіть на цирконієвих каркасах.



Із зростанням популярності цирконієвих та CAD/CAM реставрацій, GC пропонує рішення для забезпечення однакових естетичних стандартів. Ваші монолітні роботи виглядатимуть природно та яскраво з Initial Lustre Paste NF. Їх унікальне поєднання пропонує більше варіантів взаємодії з керамікою та оптично виглядає як нанесена кераміка, підсилюючи 3D-ефект вашої реставрації. Простота може бути чарівною!



Розширюйте ваші можливості у фарбуванні з Initial Spectrum Stains

Initial Spectrum Stains містять пігменти, що спечені всередині польовошпатної матриці для стабільності та для відтворення послідовних результатів. Ви можете експериментувати з Initial Spectrum Stains. Використовуйте їх як для внутрішнього, так і зовнішнього розфарбування. Їх також можна додавати до керамічних порошків чи до Initial Lustre Pastes NF для збільшення можливостей матеріалу!

Дві консистенції, що зберігають свою текстуру


Initial Spectrum Stains можна наносити у бажаній консистенції: пастоподібну чи більш рідку. Незалежно від обраної консистенції, кінцевий результат буде однаковим: відтінок та рівень блиску точно визначені, зберігається текстура поверхні реставрації; Initial Spectrum Stains - це 2D-двійник Initial Lustre Pastes NF.



Коронки з тонкою текстурою, що готові до глазурування



Глазурування з рідкою чи пастоподібною консистенцією

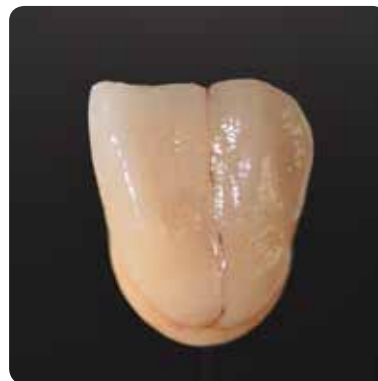

Після спікання: розфарбована та глазурована поверхня зі збереженням текстури



Фарбування внутрішнє...



...чи зовнішнє



2D та 3D керамічні фарби... від GC

GC Initial Lustre Pastes Set NF - V-відтінки

- 4 Відтінки Body та 1 Відтінок Neutral для отримання V-відтінкової реставрації у найлегший спосіб.
- 9 Ефект-Відтінків для вивільнення вашого естетичного потенціалу та створення білих плям, декальцинацій, тонких ліній та тріщин.

Склад набору:

1x Нейтральний (Neutral) (4 г)
1x Яскравість (Value) (4 г)
4x Body відтінків (4x 4 г)
8x Відтінки Емалевих Ефектів (8x 4 г)
1x Рідина для розведення (8 мл)
1x Рідина для відновлення (8 мл)
1 Палітра
2 Пензлики
Розколірка
Інструкція з використання



Lustre Емалеві Ефекти 9 (Глибокий Помаранчевий) та 10 (Сутінки) не входять до складу набору, але можуть замовлятися окремо.

GC Initial Lustre Pastes Set NF - Ясенні Відтінки

- 5 готових до використання пастоподібних ясенних відтінків з ідеальною тиксотропністю для легкого та точного нанесення.
- 4 ясенних модифікатора для змішування, що забезпечують необмежену креативність для відтворення природної ясенної гармонії.

Склад набору:

5x Ясенних відтінків (5x 4 г)
4x Модифікатора для LP NF (4x 3 г)
Рідина для розведення (8 мл)
Рідина для відновлення (8 мл)
1 Палітра
2 Пензлики
Розколірка
Інструкція з використання



GC Initial Spectrum Stains

- 16 порошкових барвників, що розширюють естетичне удосконалення.
- Дві консистенції з досконалим кінцевим результатом, що зберігають текстуру та створюють оптимальний рівень блиску.

Склад набору:

16x Initial Spectrum Stains SPS (16x 3 г)
1x Initial Spectrum Глазурний порошок GL (10 г)
1x Initial Spectrum Глазурна рідина (25 мл)
Initial Spectrum Глазурна пастоподібна рідина (8 г)
Initial Spectrum Stain Розколірка



GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.02.14
info.gce@gc.dental
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.

GCEEO Ukraine
04071, м. Київ,
вул. Костянтинівська 32, оф. 11
Тел.: (044) 463.62.66
info.ukraine@gc.dental
www.eeo.gceurope.com

Офіційний дистриб'ютор
компанії GC в Україні:
Група компаній "КРИСТАР"
04071, м. Київ,
вул. Межигірська 50, оф. 1
Тел/Факс: (044) 503-11-11
info@kristar.ua
www.kristar.ua

The logo for GC, featuring the letters 'GC' in a bold, italicized, sans-serif font. The letters are white with a slight shadow effect, set against a dark background. The 'G' and 'C' are connected at the top.