

initial™ IQ ONE SQIN

Рисуваща цвят и форма керамична система

Максимална естетика в един микрослой



Since 1921
100 years of Quality in Dental



90% от всички зъби се поръчват в основен цвят ...

От известно време е възможно да се правят постериорни възстановявания от един материал, като литиев дисиликат или цирконий, които са достатъчно естетични, без трудоемки техники на насляване. Монолитната работа е във възход.

С **GC Initial IQ ONE SQIN** - рисуващата цвят и форма керамична система - естетически привлекателни възстановявания, подходящи за фронталната област, могат да бъдат постигнати по същия опростен начин. Базирана на GC Initial „IQ философия“, системата се състои от различни керамични материали, които са перфектно адаптирани да се използват заедно, осигурявайки ефективно и естетически убедително финализиране на монолитни и букално редуцирани възстановявания.





Initial IQ Lustre Pastes ONE

Най-гъвкавата керамика за външно оцветяване, както и за вътрешна характеристика на подструктурите. Когато се използва със SQIN, тя служи и като свързващо изпичане.

- ✓ Готова за употреба консистенция
- ✓ Присъща флуоресценция
- ✓ 3D дълбочина на цвета

Initial IQ SQIN

Завършва окончателния контур на вашите възстановявания, предлагайки жизненост, текстура и естествен блясък.

- ✓ Лесна форма и текстура
- ✓ Ефект на самоглазиране
- ✓ 3D повърхностна структура



Initial Spectrum Stains

Фини прахообразни оцветители за допълнителни индивидуални ефекти.

- ✓ Безкрайни цветови нюанси
- ✓ Може да бъдат смесвани с Lustre Pastes ONE или SQIN

С GC Initial IQ ONE SQIN - рисуваща цвят и форма керамична система - можете бързо и лесно да постигнете високи естетични резултати, сравними с конвенционално наслоените възстановявания, но със значително спестено време.



Как работи? Ти избираш ...

Техника на микронаслояване (микро-букално редуцирани монолитни възстановявания)

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE се използват като оцветяващ и индивидуализиращ слой, осигуряващ перфектна връзка при изпичане преди нанасяне на праховете SQIN. В техниката на микронаслояване, SQIN се нанася лесно в дебелина на слоя от 0,1 - 0,6 mm върху оцветената с Luster Pastes ONE и изпечена повърхност. Благодарение на прецизната комбинация базирана на фелдшпатни стъклени частици, се създава естествен 3D ефект, който води до дълбочина на цветовете и естествена полупрозрачност.

Смесени с Form and Texture liquid, праховете SQIN се превръщат в изключително компактна и плътна керамична каша. Уникалните им свойства на приложение и моделиране ще улеснят индивидуалното текстуриране на повърхността, със свойства на самоглазиране след изпичане на керамиката.




... каквото нарисувате, това ще получите!

Техника на рисуване (монолитна)

Налична в готова за употреба консистенция, GC Initial IQ Lustre Pastes ONE базирана на фелдшпат 3D боя върху керамика, добавя дълбочина на цвета и естествена прозрачност с много естествена глазура към вашите монолитни възстановявания.

Пастите могат да се нанасят в по-дебел слой, гарантиращ ненадмината жизненост и много естествена глазура. С присъщата им флуоресценция, те са фино настроени да подсилят флуоресценцията на вашите монолитни възстановявания, особено когато използвате Luster Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

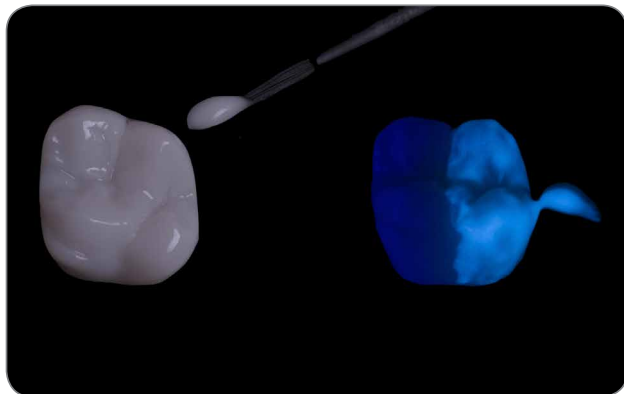



Естетика

Красота отвътре



Естествена флуоресценция



Червена и бяла естетика



Максимална естетика в микрослоя



Лесно и спестяващо време



Създайте форма и фина текстура в мокрия етап.
Няма промени след изпичане.




Initial IQ Luster Pastes ONE също служат като свързващо изпичане.



Самоглазиращи свойства.
Получете красив гланциран завършек с едно единствено изпичане.


Практично



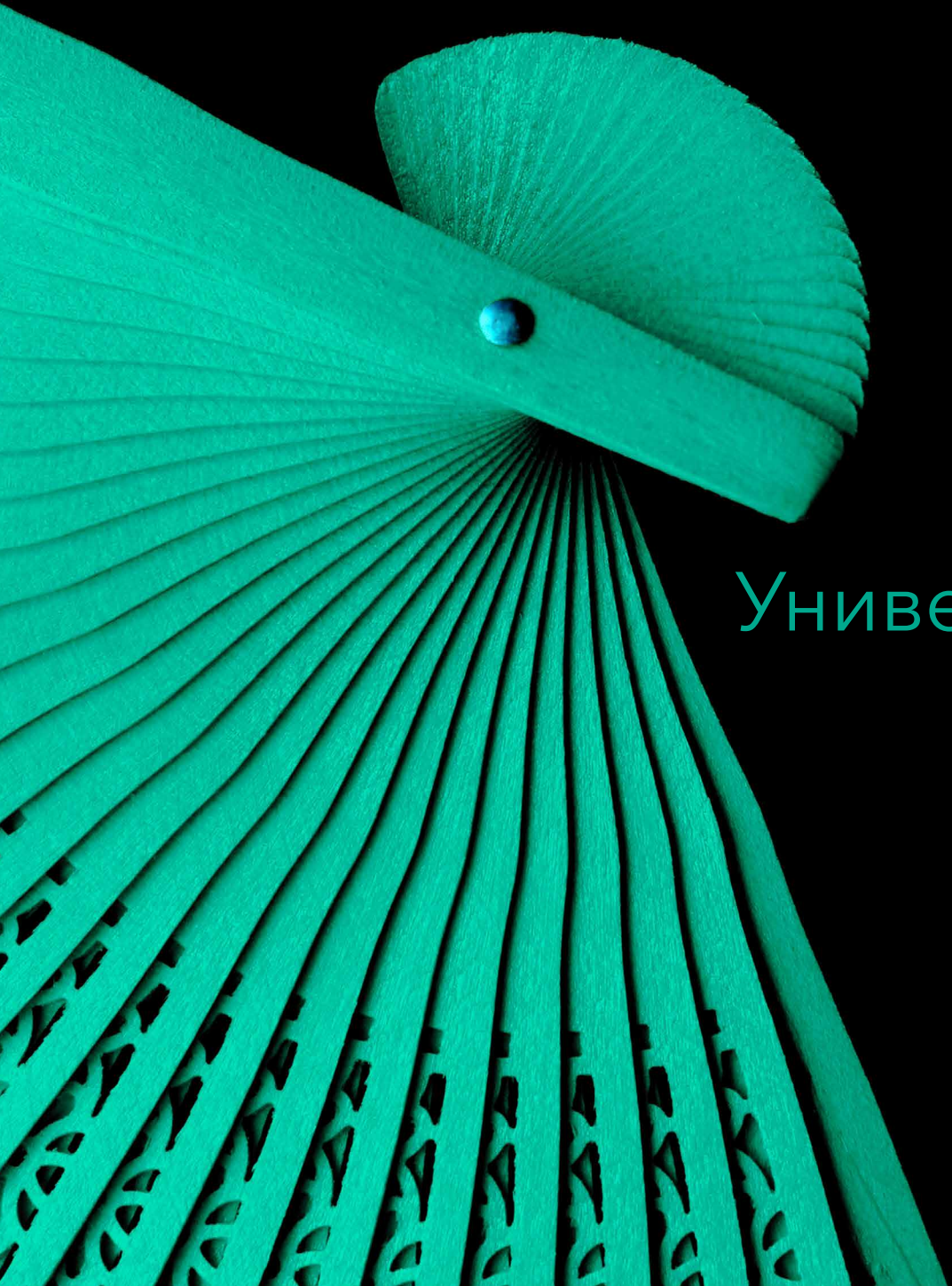

Универсално

Една система ...

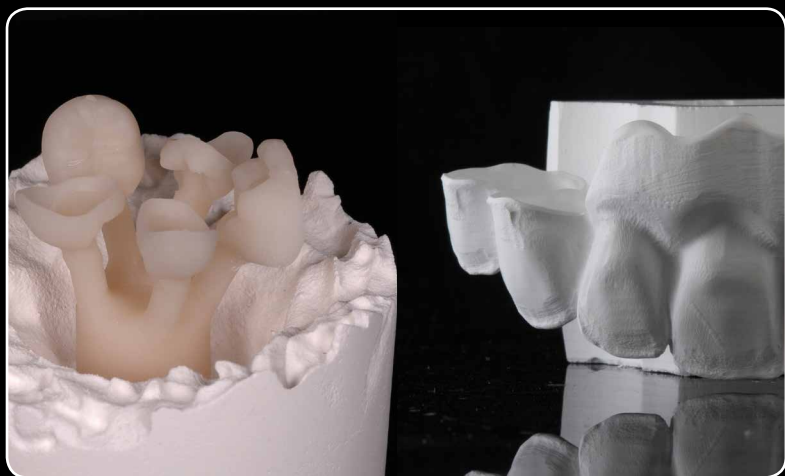


... за всички ваши Zr и LDS изцяло керамични възстановявания



... за микронанасяне, както и техники за рисуване



... за антериорни и постериорни възстановявания

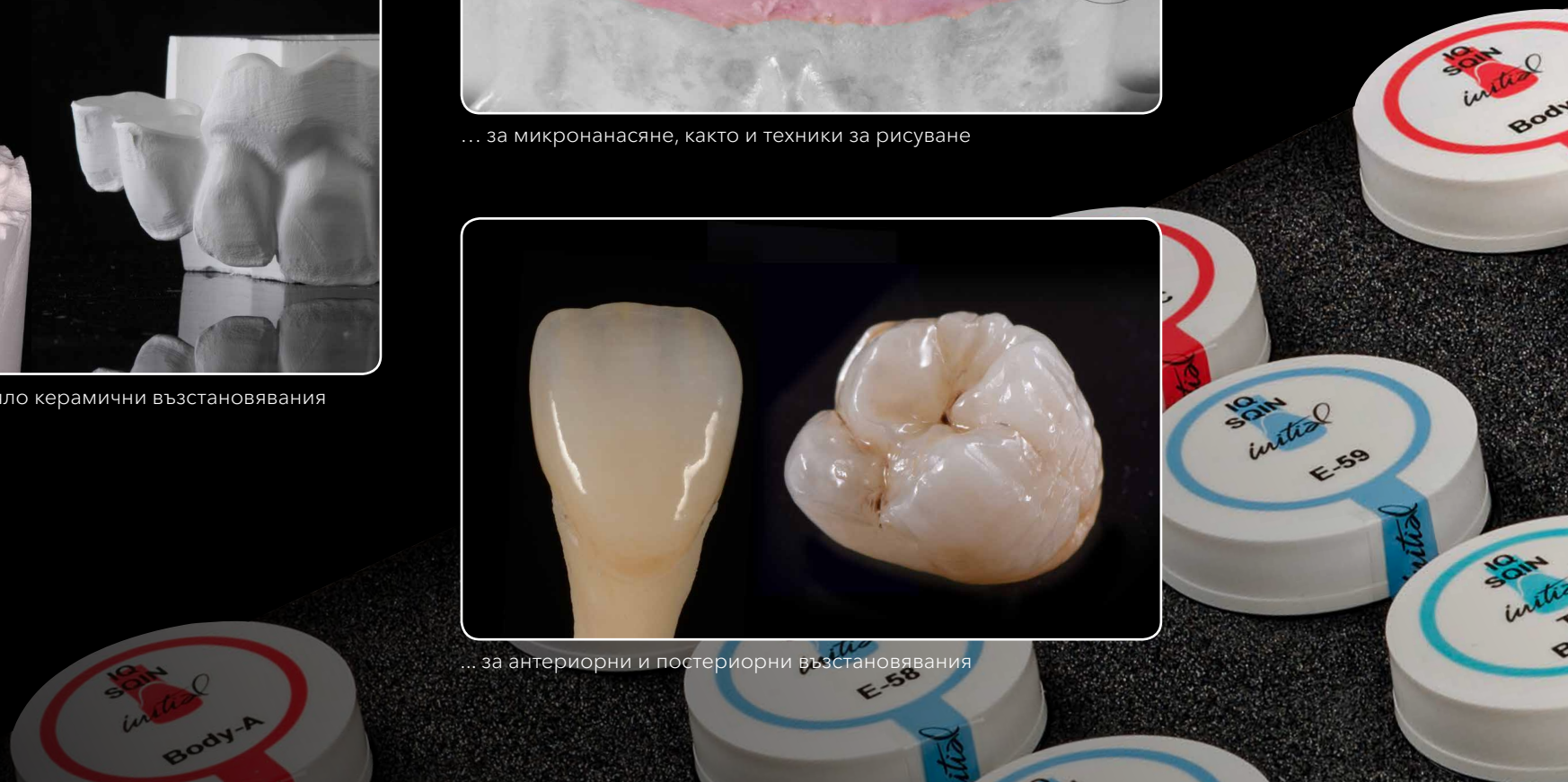



GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1x SPS Glaze Liquid, 25 ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Разреждаща течност, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing течност, 8 ml
- 5x IQ SQIN Прах дентин (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Прах емайл (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Прах Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Прах GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Течност, 25 ml
- 1x IQ LP ONE Съд за смесване
- 1x IQ LP ONE Четка 00
- 1x IQ LP ONE Четка 2
- 1x IQ LP ONE Пластмасов капак
- 1x IQ ONE SQIN Техническо ръководство
- 1x IQ LP ONE Графика с цветове
- 1x SPS Графика с цветове



GC Initial IQ SQIN SHADES SET

- 5x IQ SQIN Прах дентин (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Прах емайл (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Прах Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Прах GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture течност, 25 ml
- 1x IQ SQIN Техническо ръководство



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE V-SHADES SET

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Разреждаща течност, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing течност, 8 ml
- 1x IQ LP ONE Съд за смесване
- 1x IQ LP ONE Четка 00
- 1x IQ LP ONE Четка 2
- 1x IQ LP ONE Графика с цветове
- 1x IQ LP ONE Техническо ръководство

ONE SQIN техника - за всички ваши възстановявания от цирконий и литиев дисиликат

- ✓ Създайте форма и детайли с фина текстура на мокрия етап - Без промени след изпичане.
- ✓ Самоглазиращи свойства - Получете красив гланциран завършек с едно единствено изпичане.
- ✓ Оптимално ниво на флуоресценция - Осигурява естествено изглеждащи зъби при всякакви светлинни обстоятелства.
- ✓ Максимална естетика в микроскопа.



Снимките са предоставени:

Зъботехник Michael Brusch (Германия): страница 7 (средна и дясна снимка); страница 9 (средната дясна и долната дясна снимка); страница 13 (лявата страна на средно ляво, горе дясно и дясната страна на долната дясна снимка)

Зъболекар Leonardo Cavallo (Италия): страница 7 (лява снимка); страница 9 (горна лява снимка)

Зъботехник Patric Freudenthal (Швеция): страница 13 (дясна страна на средно лява снимка)

Зъботехник Stefan Roozen (Австрия): страница 6 и 10; страница 13 (лява страна на долна дясна снимка)

*initial*TM IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Bulgaria
BG - София 1202
ул. "Будапеща" 92, ап. 4-3
Тел. +359.2.983.30.30
Факс. +359.2.858.31.37
info.bulgaria@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/bg-BG>