

initial™ IQ ONE SQIN

Keramički sistem za bojenje i oblikovanje

Maksimalna estetika
unutar mikro sloja



90% svih zuba se naručuju u osnovnoj boji ...

Već je neko vrijeme moguće izraditi restauracije području stražnjih zuba iz jednog materijala, kao što je litij-disilikatna ili cirkonij-oksidna keramika, koji pružaju dovoljnu estetiku bez potrebe za dugotrajnim tehnikama slojevanja. U porastu su monolitne restauracije.

S **GC Initial IQ ONE SQIN** keramičkim sistemom za bojenje i oblikovanje na isti jednostavan način mogu se izraditi estetski privlačne restauracije za područje prednjih zuba. Baziran na GC Initial "IQ filozofiji", sistem se sastoji od različitih keramičkih materijala savršeno prilagođenih za zajedničku upotrebu, osiguravajući efikasnu i estetski uvjerljivu finalizaciju monolitnih i bukalno redukovanih restauracija.



Initial IQ ONE SQIN



Initial IQ Lustre Pastes ONE

Najraznovrsnija keramika za vanjsko bojenje, kao i za unutrašnju karakterizaciju substruktura. Ako se koriste sa sistemom SQIN, služe i za pečenje vezivnog sloja.

- ✓ Konzistencija spremna za upotrebu
- ✓ Inherentna fluorescencija
- ✓ 3D dubina boje

Initial IQ SQIN

Pružava završni oblik restauraciji, uz vitalnost, teksturu i prirodni sjaj.

- ✓ Lako oblikovanje i izrada teksture
- ✓ Efekt samoglaziranja
- ✓ 3D struktura površine



Initial Spectrum Stains

Fine boje u prahu za dodatne efekte individualizacije.

- ✓ Beskonačne nijanse boja
- ✓ Mogu se miješati s bojama Lustre Pastes ONE ili SQIN

Pomoću GC Initial IQ ONE SQIN keramičkog sistema za bojenje i oblikovanje mogu se brzo i lako postići visoko estetski rezultati, usporedivi s konvencionalno slojevanim restauracijama, uz još značajnu uštedu vremena.



Kako se koristi? Izbor je vaš ...

Tehnika mikro-slojevanja (mikro-bukalno redukovani monolit)

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE koriste se kao sloj za bojenje i individualizaciju, koji osigurava savršeno pečenje za spajanje prije nanošenja SQIN praha. U tehnici mikro-slojevanja SQIN se lako nanosi u debljini sloja od 0,1 - 0,6 mm na obojenu i pečenu površinu Lustre Pastes ONE. Zahvaljujući biranoj mješavini stakala na bazi glinične keramike, stvara se prirodni 3D efekt i dovodi do dubine boja i prirodne translucencije.

Pomiješan s tekućinom za oblikovanje i teksturu, SQIN prah postaje vrlo kompaktna i gusta keramička kaša. Njegove jedinstvene osobine primjene i modelovanja olakšavaju individualno teksturiranje površine, sa osobinama samoglaziranja nakon pečenja keramike.




... što obojiš, to dobijaš!

Tehnika bojenja (monolit)

Dostupna u konzistenciji spremnoj za upotrebu, 3D keramika za bojenje bazirana je na GC Initial IQ Lustre Pastes ONE gliničnoj keramici dodaje monolitnim restauracijama dubinu boje i prirodnu translucenciju s vrlo prirodnom glazurom.

Paste se mogu nanijeti u debljem sloju koji pruža izvrsnu vitalnost boje i vrlo prirodnu glazuru. Sa svojom prirodnom fluorescencijom, fino su prilagođene za povećanje fluorescencije monolitnih restauracija, posebno uz korištenje Lustre Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

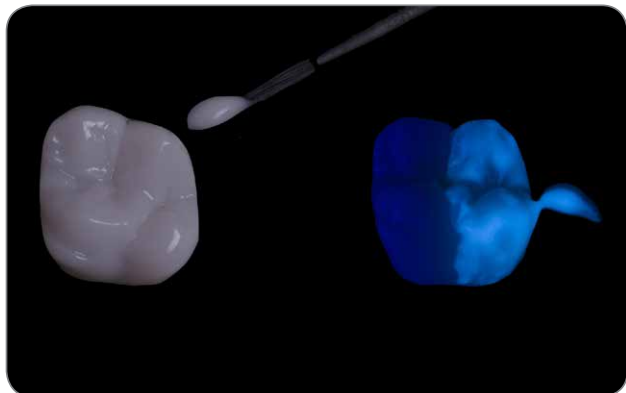



Estetika

Ljepota u



prirodnoj fluorescenciji



maksimalnoj estetici u mikro sloju



crveno-bijeloj estetici



Jednostavnost i ušteda vremena



Izrada oblika i fine teksture u mokrom stanju.
Bez promjene nakon pečenja.



Initial IQ Lustre Pastes ONE takođe služe za pečenje vezivnog sloja.



Osobine samoglaziranja.
Za lijepi glazirani završni izgled s jednim pečenjem.

Praktičnost





Raznovrsnost

Jedan sistem ...



... za sve vrste restauracija iz cirkonij-oksidne i litij-disilikatne potpune keramike



... za tehnike mikroslojevanja i bojanja



... za restauracije u prednjem i stražnjem području





GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10x SPS Stain (boje) (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20) (3 g)
- 1x SPS Glaze Fluo (za glaziranje) (GL-FLUO) (10 g)
- 1x SPS Glaze Liquid (tekućina za glaziranje) (25 ml)
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (neutralne boje) (L-N / L-NFL) (4 g)
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade ("Body" boje) (L-A / B / C / D) (4 g)
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (boje za efekt) (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP) (4 g)
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid (tekućina za razrjeđivanje) (8 ml)
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid (tekućina za osvježavanje) (8 ml)
- 5x IQ SQIN Powder Dentin (prah dentin) (Body A / B / C / D / BL-D) (10 g)
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (prah caklina) (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E) (10 g)
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (prah translucentni opal booster) (TO) (10 g)
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral) (prah gingiva - svijetli, tamni, neutralni) (10 g)
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid (tekućina za oblikovanje i teksturu) (25 ml)
- 1x IQ LP ONE posuda za miješanje
- 1x IQ LP ONE kist 00
- 1x IQ LP ONE kist 2
- 1x IQ LP ONE plastični poklopac
- 1x IQ ONE SQIN tehnički priručnik
- 1x IQ LP ONE ključ za boje
- 1x SPS ključ za boje



GC Initial IQ SQIN SHADES SET

- 5x IQ SQIN Powder Dentin (prah dentin) (Body A / B / C / D / BL-D) (10 g)
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (prah caklina) (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E) (10 g)
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (prah translucentni opal booster) (TO) (10 g)
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral) (prah gingiva - svijetli, tamni, neutralni) (10 g)
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid (tekućina za oblikovanje i teksturu) (25 ml)
- 1x IQ SQIN tehnički priručnik



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE V-SHADES SET

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (neutralne boje) (L-N / L-NFL) (4 g)
- 4x IO LP ONE Lustre Body Shade ("Body" boje) (L-A / B / C / D) (4 g)
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (caklinske boje za efekt) (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10) (4 g)
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (caklinske boje za efekt opal) (L-OP) (4 g)
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (caklinske boje za efekt "Value" (L-V) (4 g)
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid (tekućina za razrjeđivanje) (8 ml)
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid (tekućina za osvježavanje) (8 ml)
- 1x IQ LP ONE posuda za miješanje
- 1x IQ LP ONE kist 00
- 1x IQ LP ONE kist 2
- 1x IQ LP ONE ključ za boje

ONE SQIN tehnika – za sve restauracije iz cirkonij-oksidge i litij-disilikatne keramike

- ✓ Izrada detalja oblika i finih tekstura u mokrom stanju - bez promjena nakon pečenja.
- ✓ Svojstva samoglaziranja - prekrasni glazirani sjaj sa samo jednim pečenjem.
- ✓ Optimalan nivo fluorescencije - osigurava izgled prirodnih zuba u svim uslovima svjetla.
- ✓ Maksimalna estetika u mikro sloju.



Slike ustupili:

ZTM Michael Brusch (Njemačka): str. 7 (slika u sredini i desno); str. 9 (slika u sredini desno i dolje desno);

str. 13 (slika lijeva strana sredine lijevo, gore desno i desna strana dolje desno)

MDT Leonardo Cavallo (Italija): str. 7 (slika lijevo); str. 9 (slika gore lijevo)

MDT Patric Freudenthal (Švedska): str. 13 (slika desna strana sredine lijevo)

ZTM Stefan Roozen (Austrija): str. 6 i str. 10; str. 13 (slika lijeva strana dolje desno).

*initial*TM IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Bosnia and Herzegovina
Carice Milice 11
BA - 78000 Banja Luka
Tel. +387.51.470.736
Fax. +387.51.470.736
info.bosniaherzegovina@gc.dental
<https://europe.gc.dental/bs-BA>