

initial™ IQ ONE SQIN

Keramický systém s možností dobarvení

Maximální estetika v mikrovrstvě



90% všech zubů zhotovíte dle vita klíče ...

Již nějakou dobu je možné vyrábět postranní dostavby z jediného materiálu, jako je lithium disilikát nebo zirkon, které jsou dostatečně estetické bez složitých technik vrstvení. Monolitické práce jsou na vzestupu.

S **GC Initial IQ ONE SQIN** – keramický systém s možností dobarvení – lze dosáhnout esteticky přitažlivých dostaveb vhodných pro frontální úsek stejným jednoduchým způsobem. Na základě prvotní GC Initial „filozofie IQ“ se systém skládá z různých keramických materiálů, které jsou dokonale přizpůsobeny pro společné použití, což zajišťuje efektivní a esteticky dokonalé dokončení monolitických a bukálně redukovaných náhrad.



Initial IQ ONE SQIN



Initial IQ Lustre Pastes ONE

Nejuniverzálnější keramika s možností dobarvení pro vnější barvení i pro vnitřní charakterizaci konstrukcí. Tato při použití se SQIN slouží také pro lepší vazbu keramiky.

- ✓ Konzistence připravená rovnou k použití
- ✓ Vlastní fluorescence
- ✓ 3D hloubka barev

Initial IQ SQIN

Dokončuje konečný tvar vaší náhrady a nabízí vitalitu, texturu a přirozený lesk.

- ✓ Snadný tvar a struktura
- ✓ Samoglazovací efekt
- ✓ 3D povrchová struktura

Initial Spectrum Stains

Jemné práškové dobarvovače pro další individuální efekty.

- ✓ Nekonečné barevné možnosti
- ✓ Lze smíchat s Luster Pastes ONE nebo SQIN



S GC Initial IQ ONE SQIN - keramický systém s možností dobarvení - můžete rychle a snadno dosáhnout vysokých estetických výsledků, srovnatelných s konvenčně vrstvenou keramikou, ovšem se značnou časovou úsporou.



Jak to funguje? Vyberte si ...

Technika mikrovrstvení (mikro-bukálně redukovaná monolitika)

GC Initial IQ Luster Pastes ONE se používají jako barevná a individualizační vrstva zajišťující dokonalé spojení po vypálení před aplikací prášků SQIN. V technice mikrovrstvení se keramika SQIN snadno nanáší v tloušťce vrstvy 0,1 - 0,6 mm na nabarvený a vypálený povrch Luster Pastes ONE. Díky rafinované směsi sklokeramiky s přírodním živcem je zajištěn realistický 3D efekt, jehož výsledkem je hloubka barev a přirozená translucence. Smícháním s Form & Texture tekutinou se prášky SQIN stávají vysoce kompaktní a hustou keramickou směsí. Jejich jedinečné aplikační a modelovací vlastnosti usnadní vytvoření individuální povrchové textury se samoglazovacím efektem po vypálení keramiky.




... výsledek dobarvení je ve vašich rukách!

Technika dobarvení (monolitické práce)

GC Initial IQ Luster Pastes ONE, 3D keramika s možností dobarvení na bázi přírodního živce v konzistenci připravené k použití, dodá vašim monolitickým náhradám barevnou hloubku a přirozenou translucenci s velmi přirozenou glazurou monolitických prací.

Pasty lze nanášet v silnější vrstvě, která zaručí nepřekonatelnou vitalitu a velmi přirozenou glazuru. Díky své vlastní fluorescenci jsou jemně vyladěny, aby zvýšily fluorescenci vašich monolitických náhrad, zejména při použití Luster Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

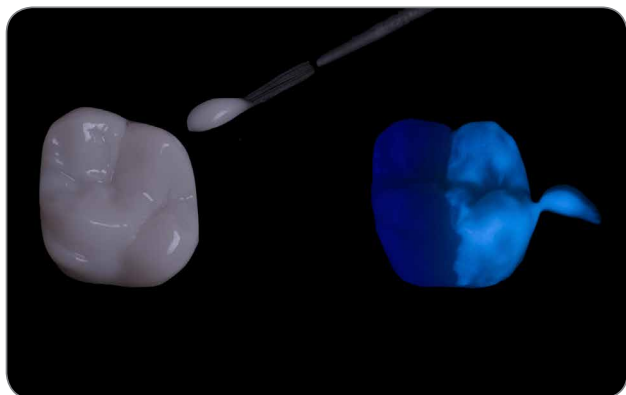



Estetický

Vnitřní krása



Přirozená fluorescence



Červená a bílá estetika



Maximální krása v tenké vrstvě



Snadné a časově nenáročné



Vytvořte tvar a jemnou strukturu v mokré fázi.
Žádné změny po vypálení.




Initial IQ Lustre Pastes ONE slouží také jako vazebné pálení.



Samoglazovací efekt.
Získejte krásný naglazovaný povrch v jednom jediném pálení.

Praktický



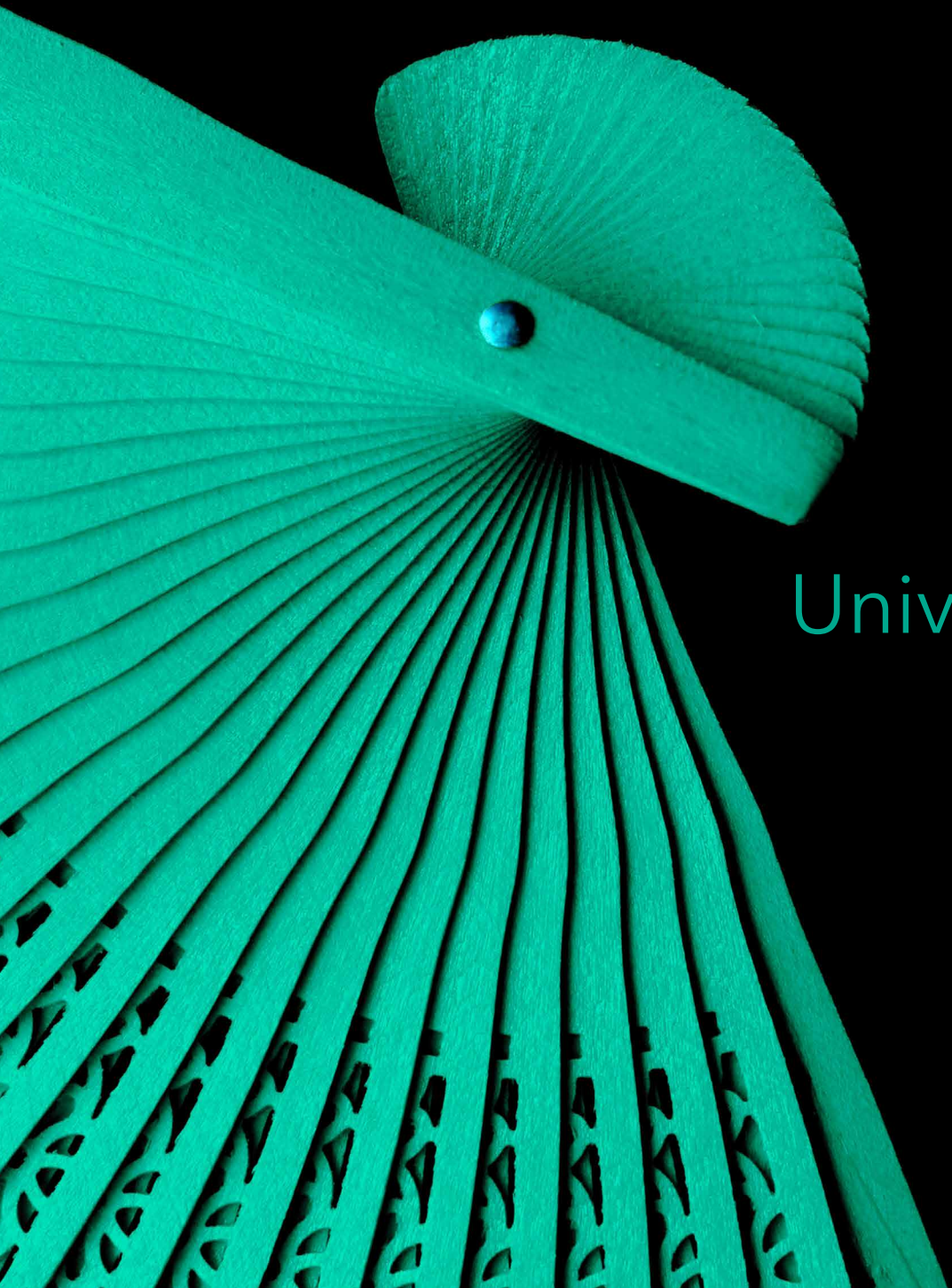

Univerzální

Jeden systém ...




... pro všechny vaše celokeramické dostavby ze Zr a LSD



... pro mikrovrstvení i dobarvovací techniku



... pro anteriorní a posteriorní náhrady

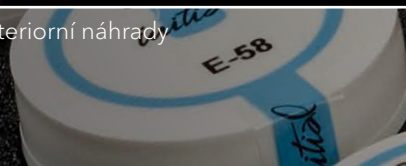



GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1x SPS Glaze Liquid, 25 ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1x IQ LP ONE Mixing Dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Plastic Cover
- 1x IQ ONE SQIN Technical Manual
- 1x IQ LP ONE Colour Chart
- 1x SPS Colour Chart



GC Initial IQ SQIN SHADES SET

- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1x IQ SQIN Technical Manual



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE V-SHADES SET

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE Mixing dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Colour Chart
- 1x IQ LP ONE Technical Manual

Tehnika ONE SQIN – pro všechny zirkonové a lithium disilikátové dostavby

- ✓ Vytvořte tvar a detaily jemné textury v mokré fázi modelace – Po vypálení žádné změny.
- ✓ Samoglazovací efekt – Získáte krásný glazovaný povrch v jednom jediném pálení.
- ✓ Optimální úroveň fluorescence – Zajišťuje vzhled přirozených zubů za všech světelných podmínek.
- ✓ Maximální estetika v tenké vrstvě.



Fotografie s laskavým svolením:

ZTM Michael Brüsck (Německo): p7 (střední a pravý obrázek); p9 (obrázek vpravo nahoře a vpravo dole);

p13 (levá strana prostředního levého, pravého horního a pravá strana pravého dolního obrázku)

MDT Leonardo Cavallo (Itálie): p7 (obrázek vlevo); p9 (obrázek vlevo nahoře)

MDT Patric Freudenthal (Švédsko): p13 (pravá strana levého prostředního obrázku)

ZTM Stefan Roozen (Rakousko): p6 a p10; p13 (levá strana obrázku vpravo dole)

*initial*TM IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax. +32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Czech Republic
V Olšínách 82
CZ - 100 00 Prague 10
Tel. +420.274.771.965
Fax. +420.274.771.965
info.czech@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/cs-CZ>