

initial™ IQ ONE SQIN

Festhető szín-és-forma kerámia rendszer

Maximális esztétika
egy mikro-rétegben



Since 1921
100 years of Quality in Dental



A pótlások 90%-át egy színben rendelik...

Egy ideje már van lehetőség arra, hogy egyetlen anyagból készítsünk poszterior restaurációt, mint például lítium-diszilikátból vagy cirkónium-dioxidból, melyek kellően esztétikusak, fáradtságos rétegzési technikák nélkül is. A monolitikus munkák száma egyre növekszik.

A **GC Initial IQ ONE SQIN** segítségével - ami egy festhető, szín-és-forma kerámia rendszer - az anterior régióknak megfelelő esztétikájú helyreállítások ugyanolyan egyszerű módon valósíthatók meg. A GC Initial "IQ philosophy" alapján, a rendszer különböző kerámia anyagokból áll, melyek tökéletesen illeszkednek egymáshoz a közös használatért, biztosítva a monolitikus és bukkálisan redukált restaurációk hatékony, és esztétikailag meggyőző véglegesítését.



Initial IQ ONE SQIN



Initial IQ Lustre Pastes ONE

A legsokoldalúbb festhető kerámia mely külső festésre éppúgy használható, mint a struktúrák belső karakterizálásához. SQIN anyaggal használva, mosóégetésre is használható.

- ✓ Használatra kész konzisztencia
- ✓ Belülről fakadó fluoreszcencia
- ✓ 3D szín mélység

Initial IQ SQIN

Megadja a helyreállítások végső kontúrját, vitalitást, textúrát, és természetes fényt nyújtva.

- ✓ Forma és textúra könnyedén
- ✓ Önfényező hatás
- ✓ 3D felületi struktúra



Initial Spectrum Stains

Finom por festék az extra individuális hatásokért.

- ✓ Végtelen nianoszok a színekben
- ✓ Keverhető Lustre Pastes ONE vagy SQIN anyaggal

A GC Initial IQ ONE SQIN anyaggal - ami egy festhető szín-és-forma kerámia rendszer - gyorsan és könnyedén érhet el magas esztétikájú végeredményt, ami összehasonlítható a hagyományos rétegtechnikával készületekkel, de jelentős időt takaríthat meg.



Hogyan működik? Ön választhat ...

Mikrorétegzési technika (bukkálisan redukált monolitikus)

A GC Initial IQ Lustre Pastes ONE anyag színező és individualizációs réteggént használható, a SQIN porok felvitele előtt a tökéletes kapcsolat biztosítására mosóégetésként. A mikrorétegzési technikánál, a SQIN könnyedén felvihető 0.1 – 0.6 mm rétegvastagságban, a festett és már kiégetett Lustre Pastes ONE felszínére. A földpát alapú üvegszemcsék finomított keverékének köszönhetően élethű 3D hatás jön létre, ami színmélységet és élethű áttetszőséget eredményez.

A Form and Texture folyadékkal keverve, a SQIN porok rendkívül kompakt és sűrű kerámia keverékké válnak. Egyedi applikálási és formázási tulajdonságuk individuális felületi textúrákat eredményeznek, az égetés után önfényező tulajdonsággal.




... azt kap, amit fest!

Festési technika (monolitikus)

A használatra kész konzisztenciában kapható, GC Initial IQ Lustre Pastes ONE egy földpát alapú 3D festhető kerámia mely színmélységet és élethű áttetszőséget ad rendkívül természetszerű fénnel a monolitikus restaurációinak.

A pasztákat vastagabb rétegben is lehet alkalmazni, ez garantálja a felülmúlhatatlan vitalitást és a természetes fényt. A bennük rejlő fluoreszcenciával ezek a porok finomhangoltak, ezáltal növelik a monolitikus restaurációk fluoreszcenciáját, különösképpen, amikor Lustre Pastes ONE Neutral FLUO (L-NFL)-el használjuk.

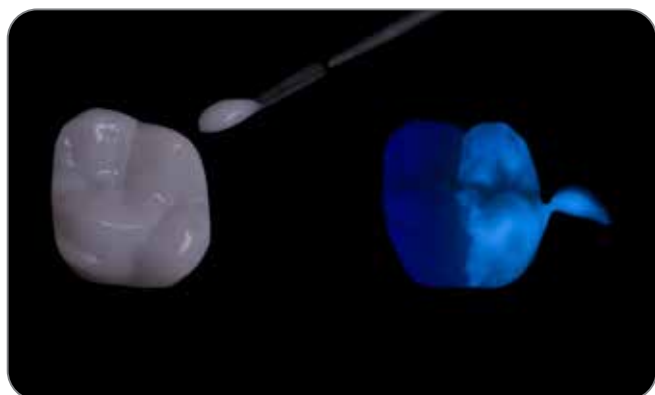



Esztétika

Szépség legbelül



Természetes fluoreszcencia



Maximális esztétika egy mikro rétegen belül



Vörös és fehér esztétika



Könnyű, és időtakarékos



Alakítsa ki a formát és a textúrát még nedves állapotban.
Égetés után sem változik meg.




Az Initial IQ Lustre Pastes ONE mosóégetéshez is használható.



Önfényező tulajdonságok.
Gyönyörű, fényes végeredmény érhető el, csupán egy égetés után.

Praktikus



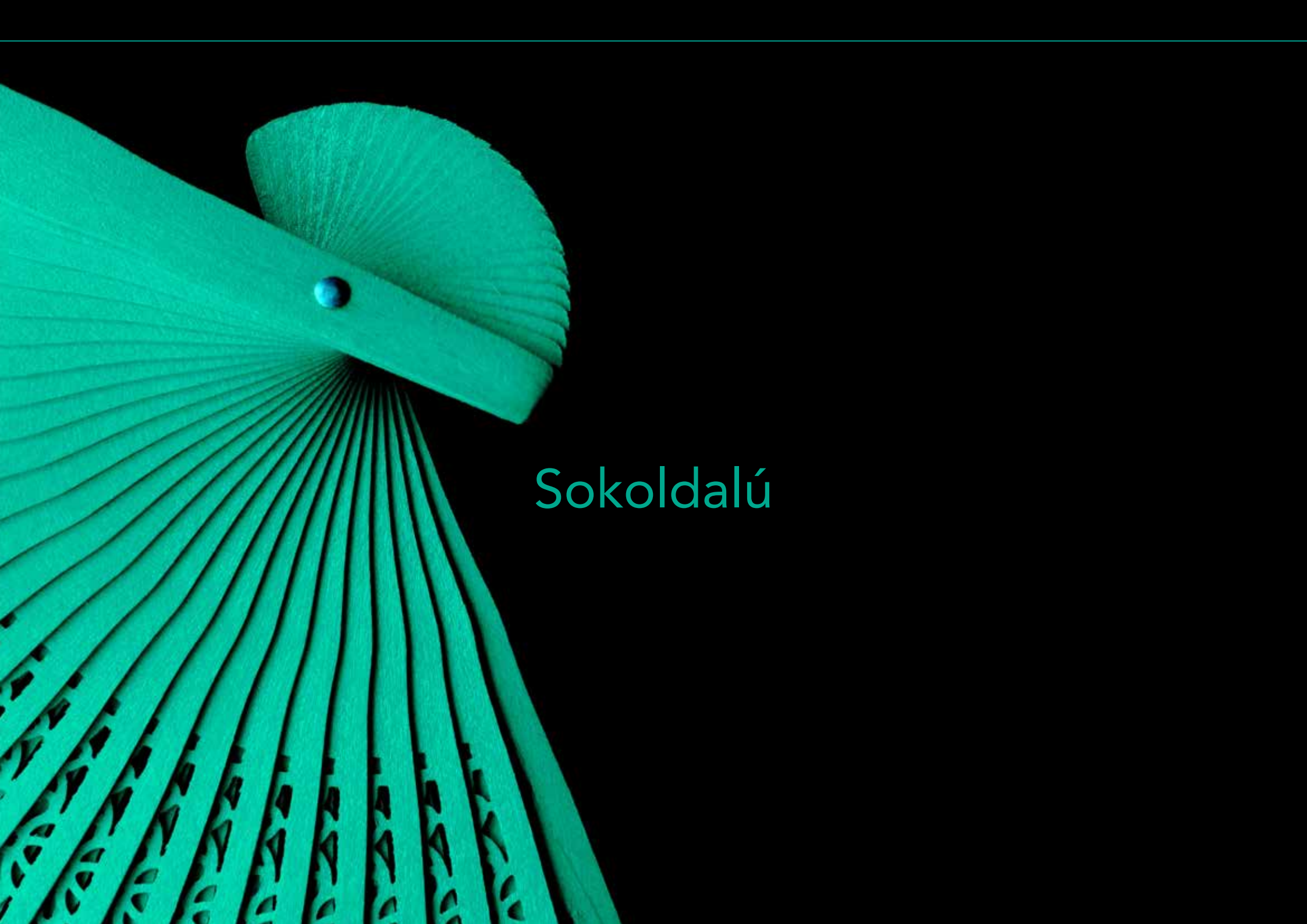

Sokoldalú

Egy rendszer ...




... minden Zr és LDS teljes kerámia megvalósításához



... mikro rétegzéshez éppúgy mint festési technikához



... anterior és poszterior restaurációkhoz egyaránt

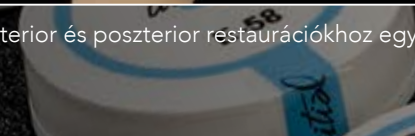



GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g
- 1x SPS Glaze folyadék, 25ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting folyadék, 8ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh folyadék, 8ml
- 5x IQ SQIN Por Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
- 5x IQ SQIN Por Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
- 1x IQ SQIN Por Translucent Opal Booster (TO), 10g
- 3x IQ SQIN Por GUM (light, dark, neutral), 10g
- 1x IQ SQIN Form & Texture folyadék, 25ml
- 1x IQ LP ONE Keverőtál
- 1x IQ LP ONE Ecset 00
- 1x IQ LP ONE Ecset 2
- 1x IQ LP ONE Fényvédő fedő
- 1x IQ ONE SQIN Technikai Leírás
- 1x IQ LP ONE Színtáblázat
- 1x SPS Színtáblázat



GC Initial IQ SQIN SHADES SET

- 5x IQ SQIN Por Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
- 5x IQ SQIN Por Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
- 1x IQ SQIN Por Translucent Opal Booster (TO), 10g
- 3x IQ SQIN Por GUM (light, dark, neutral), 10g
- 1x IQ SQIN Form & Texture folyadék, 25ml
- 1x IQ SQIN Technikai Leírás



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE V-SHADES SET

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
- 4x IO LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting folyadék, 8ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing folyadék, 8ml
- 1x IQ LP ONE Keverőtál
- 1x IQ LP ONE Ecset 00
- 1x IQ LP ONE Ecset 2
- 1x IQ LP ONE Színtáblázat
- 1x IQ LP ONE Technikai Leírás

ONE SQIN technika - az összes cirkónium-dioxid és lítium-diszilikát restaurációhoz

- ✓ Alakítsa ki a formát és a finom textúrát nedves állapotban - égetés után sem változik meg.
- ✓ Önfényező tulajdonság - gyönyörű, fényes végeredmény, csupán egyetlen égetéssel.
- ✓ Optimális fluoreszcencia - minden fény alatt biztosítja a természetes fogak megjelenését.
- ✓ Maximális esztétika egy mikrorétegen belül.



Fényképek:

ZTM Michael Brüschi (Németország): 7. oldal (középső és jobb oldali kép); 9. oldal (jobb oldali középső és jobb alsó kép); 13. oldal (bal oldali montázs bal oldali kép, jobb felső és jobb oldali alsó montázs jobb oldali kép)
MDT Leonardo Cavallo (Olaszország): 7. oldal (bal oldali kép); 9. oldal (bal oldali felső kép)
MDT Patric Freudenthal (Svédország): 13. oldal (bal oldali montázs jobb oldali kép)
ZTM Stefan Roozen (Ausztria): 6. és 10. oldal; 13. oldal (jobb oldali alsó montázs bal oldali kép)

*initial*TM IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC EUROPE N.V.

GCEEO Hungary
Fazekas utca 29-31.
HU - 1027 Budapest
Tel. +36.1.224.04.00
info.hungary@gc.dental
<https://europe.gc.dental/hu-HU>