

initial™ IQ ONE SQIN

Dažomoji spalvos ir formos keramikos sistema

Maksimaliai estetiškas rezultatas
pasiekiamas minimaliais
sluoksniais



90% visų dantų restauracijų užsakoma atspalvio, atitinkančio spalvų raktą

Visai neseniai atsirado galimybė pagaminti krūminių dantų restauraciją naudojant tik vieną medžiagą, tokią kaip ličio disilikatas ar cirkonis, kurie ir be laboratorijoje atliekamų sluoksniavimo technologijų yra pakankamai estetiški. Monolitiniai darbai labai paklausūs.

Su dažymui ir modeliavimui skirta keramikos sistema **GC Initial IQ ONE SQIN** – estetiškai atrodančios restauracijos gali būti pasiekiamos tokiu pat paprastu būdu. GC Initial "IQ philosophy" pagrindu sukurta sistema susideda iš skirtingų keramikos medžiagų, kurios idealiai dera tarpusavyje, todėl užtikrina efektyvų bei estetišką monolitinių ir bukaliai redukuotų restauracijų užbaigimą.



Initial IQ ONE SQIN



Initial IQ Lustre Pastes ONE

Pati universaliausia dažoma keramika išoriniam apipavidalinimui, bei vidiniam substruktūrų charakterizavimui. Naudojant su SQIN taip pat tarnauja kaip jungtis medžiagos degimo metu.

- ✓ Naudojimui paruošta konsistencija
- ✓ Pasižyminti fluorescencija
- ✓ Gilus 3D spalvos efektas

Initial IQ SQIN

Užbaigia galutinį restauracijos kontūrą, suteikiantį gyvybingumo, tekstūros ir natūralaus blizgesio efektą.

- ✓ Lengva formuoti ir kurti tekstūrą
- ✓ 9 Savaiminio blizgesio efektas
- ✓ 9 3D paviršiaus struktūra

Initial Spectrum Stains

Milteliniai dažai papildomam individualizacijos efektui išgauti.

- ✓ Begalė spalvinių niuansų ir jų variacijų
- ✓ 9 Gali būti maišoma su Lustre Pastes ONE ar SQIN



Dažymui ir modeliavimui skirta keramikos sistema GC Initial IQ ONE SQIN - lyginant su įprastine sluoksniavimo metodika - leidžia greičiau ir lengviau, mažesnėmis laiko sąnaudomis sukurti estetišką restauraciją.



Kaip tai veikia? Renkatės Jūs...

Mikro sluoksniavimo technika (minimaliai bukaliai redukuotas monolitas)

GC Initial IQ Lustre Pastes ONE medžiagą galima naudoti kaip spalvinį ir restauraciją individualizuojantį sluoksnį, prieš SQIN miltelių aplikaciją degimo metu užtikrinant puikią jungtį. Mikro sluoksniavimo metodu SQIN lengvai aplikuojama ant padažyto ir išdegto Lustre Pastes ONE paviršiaus plonu 0.1 – 0.6 mm sluoksniu.

Ypatingo lauko špato pagrindu sukurto stiklo mišinio dėka, išgaunamas spalvos gilumą bei tikrovišką skaidrumą pabrėžiantis trimatis efektas. Sumaišyti su „Form and Texture“ skysčiu SQIN milteliai tampa kompaktiška ir tankia keramikos suspensija.

Jų uniklaliios aplikavimo ir modeliavimo savybės palengvina individualų paviršiaus tekstūravimą ir blizgesio išlaikymą ir po keramikos degimo proceso.




... gaunate tai, ką nupiešiate!

Dažymo technika (monolitinė)

Iškart naudojimui pritaikytos konsistencijos GC Initial IQ Lustre Pastes ONE lauko špato pagrindu sukurta 3D dažoma keramika Jūsų monolitinėms restauracijoms suteikia spalvos gilumo, tikroviško skaidrumo bei itin natūralaus blizgesio. Pastos gali būti aplikuojamos ir storesniu sluoksniu garantuojančiu ilgaamžiškumą ir natūralų blizgesį.

Su turima vidine fluorescencija, jos suderintos pagerinti Jūsų monolitinių restauracijų fluorescenciją, ypač kartu naudojant Lustre Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

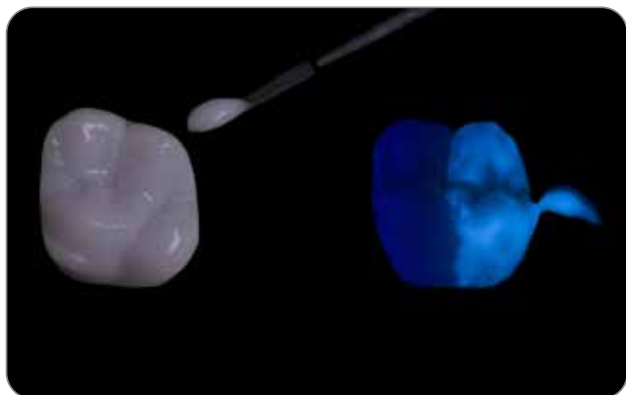



Estetiškās

Grožis viduje



Natūrali fluorescencija



Rausva ir balta estetika



Maksimali estetika dengiant net ir ploniausiu sluoksniu



Paprasta ir taupanti laiką



Kurkite formą ir tekstūrą drėgnoje būsenoje. Jokių pokyčių po degimo proceso.



Initial IQ Lustre Pastes ONE taip pat tarnauja kaip jungtis degimo metu.



vaiminio blizgesio savybės. Išgaukite gražų blizgesį vieno degimo metu.

Praktiškās





Dargialypis

Viena sistema ...



... visų Zr ir LDS pilnos keramikos atvejų realizavimui



mikrosluoksniavimui, taip pat ir dažymo metodams



... priekinių ir krūminių dantų restauracijoms





GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM RINKINYS

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10g
- 1x SPS Glaze Liquid, 25ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8ml
- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml
- 1x IQ LP ONE Maišymo indelis
- 1x IQ LP ONE Šepetėlis 00
- 1x IQ LP ONE Šepetėlis 2
- 1x IQ LP ONE Plasmasinis dangtelis
- 1x IQ ONE SQIN Instrukcijų vadovas
- 1x IQ LP ONE Spalvų lentelė
- 1x SPS Spalvų lentelė



GC Initial IQ SQIN SPALVŲ RINKINYS

- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25ml
- 1x IQ SQIN Instrukcijų vadovas



GC Initial IQ Lustre Pastes ONE V-SPALVŲ RINKINYS

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8ml
- 1x IQ LP ONE Maišymo indelis
- 1x IQ LP ONE Šepetėlis 00
- 1x IQ LP ONE Šepetėlis 2
- 1x IQ LP ONE Spalvų lentelė
- 1x IQ LP ONE Technical Manual

Lyginant su įprastiniu būdu sluoksniuotomis restauracijomis, naudojant **ONE SQIN System Set** rinkinį geri estetiški rezultatai pasiekiami lengviau ir mažesnėmis laiko sąnaudomis net ir renkantis didžiąją dalį pagrindinių keramikos komponentų.

ONE SQIN technika - visoms cirkonio ir ličio disilikato restauracijoms

- ✓ Kurkite formą ir tekstūrą drėgnoje būsenoje. Jokių pokyčių po degimo proceso.
- ✓ 9 Savaiminio blizgesio savybės. Išgaukite gražų blizgesį vieno degimo metu.
- ✓ 9 Optimalus fluorescenciškumo lygis - užtikrinantis natūralią dantų išvaizdą esant bet kokioms apšvietimo sąlygoms.
- ✓ 9 Maksimalus estetiškumas net ir vienu mikrosluoksniu.



Nuotraukos:

ZTM Michael Brüschi (Vokietija): p7 (vidurinė ir dešinią esanti nuotrauka) p9 (vidurinis dešinysis ir viršutinis dešinysis paveikslas);

p13 (kairės pusės vidurinė kairė, viršutinė dešinė ir dešinės pusės viršutinė dešinė nuotrauka)

MDT Leonardo Cavallo (Italija): p7 (kairė nuotrauka); p9 (viršutinė kairė nuotrauka)

MDT Patric Freudenthal (Švedija): p13 (dešinės pusės vidurinė kairė nuotrauka)

ZTM Stefan Roozen (Austrija): p6 ir p10; p13 (kairės pusės apatinė dešinė nuotrauka)

*initial*TM IQ ONE SQIN

GC EUROPE N.V.

Head Office
Researchpark,
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven
Tel. +32 16 74 10 00
Fax.+32 16 40 48 32
info.gce@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe>

GC NORDIC

GC atstovas Lietuvoje
Kęstutis Noreika
Mob.tel.: +370 640 40960
El.paštas: kestutis.noreika@gc.dental
<https://www.gc.dental/europe/lt-LT>