

# initial™ IQ ONE SQIN

Sistem ceramic pentru personalizarea culorii și formei

Estetică maximă  
într-un micro-strat



# 90% dintre dinți sunt realizați într-o singură nuanță standard...

De ceva timp, restaurările posterioare s-au putut realiza dintr-un singur material, precum disilicat de litiu sau zirconia, fiind suficient de estetice, fără a fi necesare tehnici de stratificare laborioase. Utilizarea restaurărilor monolitice este în continuă creștere.

Cu **GC Initial IQ ONE SQIN** – Sistemul ceramic pentru personalizarea culorii și formei – restaurările estetice dedicate zonei anterioare pot fi obținute într-un mod la fel de simplu. Având la bază „Filozofia IQ” GC Initial, sistemul constă în diferite materiale ceramice care sunt perfect adaptate pentru a fi utilizate împreună. În acest fel se poate obține un rezultat final cu maximum de eficiență și estetică a restaurărilor monolitice cât și a celor reduse pe fața vestibulară.



Initial IQ ONE SQIN



## Initial IQ Lustre Pastes ONE

Cea mai versatilă ceramică pentru colorarea externă precum și pentru caracterizarea internă a substructurilor. Lustre Pastes ONE are funcție de strat de legătură, când este utilizat în combinație cu SQIN.

- ✓ Consistență ideală pentru utilizare imediată
- ✓ Fluorescență inerentă
- ✓ Profunzime 3D a culorii

## Initial IQ SQIN

Completează conturul final al restaurării dumneavoastră oferind vitalitate, textură și luciu natural.

- ✓ Forme și textură ușor de obținut
- ✓ Efect de auto-glazurare
- ✓ Structură 3D a suprafeței

## Initial Spectrum Stains

Pulbere fină pentru colorare cu efect de extra-individualizare

- ✓ Nuanțe infinite de culoare
- ✓ Poate fi amestecat cu Lustre Pastes ONE sau SQIN



Cu GC Initial IQ ONE SQIN - Sistemul ceramic pentru personalizarea culorii și formei - se pot obține rapid și simplu rezultate estetice ridicate, comparabile cu restaurările stratificate convențional, dar cu reducerea semnificativă a timpului de lucru.



# Cum funcționează? Îți poți alege...

## Tehnica de micro-stratificare (monolitic redus micro-vestibular)

GC Initial IQ Luster Pastes ONE sunt folosite ca strat de culoare și individualizare, oferind un suport de legatură perfect înainte de aplicarea pulberilor SQIN. În tehnica de micro-stratificare, SQIN se aplică cu ușurință într-o grosime de 0,1 - 0,6 mm peste stratul ars de Lustre Pastes ONE. Datorită amestecului rafinat pe bază de feldspat, se creează un efect 3D, rezultatul fiind profunzimea culorii și transluciditatea realistă.

Amestecate cu lichidul Form and Texture, pulberile SQIN devin o pastă ceramică foarte compactă și densă. Proprietățile lor unice de aplicare și modelare vor facilita crearea unei texturi individuale a suprafeței, cu proprietăți de auto-glazurare după arderea ceramicii.






# ...ce pictezi este ceea ce primești!

## Tehnica de colorare (monolitic)

Disponibil într-o consistență ideală pentru utilizare imediată, GC Initial IQ Luster Pastes ONE este o ceramică de personalizare 3D pe bază de feldspat. Aceasta permite realizarea restaurărilor monolitice cu un plus de profunzime a culorii, o transluciditate realistă și o glazură foarte naturală.

Pastele pot fi aplicate într-un strat mai gros, garantând o vitalitate de neegalat și o glazură foarte naturală. Cu o fluorescență inerentă sunt perfecte pentru a crește fluorescența restaurărilor monolitice, în special când este folosit Luster Paste ONE Neutral FLUO (L-NFL).

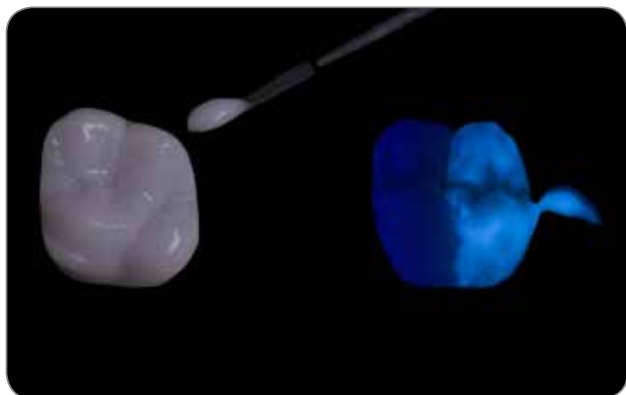



Estetic



# Frumusețe din interior



Fluorescență naturală



Estetică albă și roz



Estetică maximă într-un micro-strat



# Utilizare facilă și reducerea timpului de lucru



Crearea formei și texturii fine în stadiul umed.  
Nu există modificări după ardere.



Initial IQ Luster Pastes ONE are și funcție de strat de legătură.




Proprietăți de auto-glazurare.  
Obținerea unei suprafețe perfect glazurate într-o singură ardere.

Practic





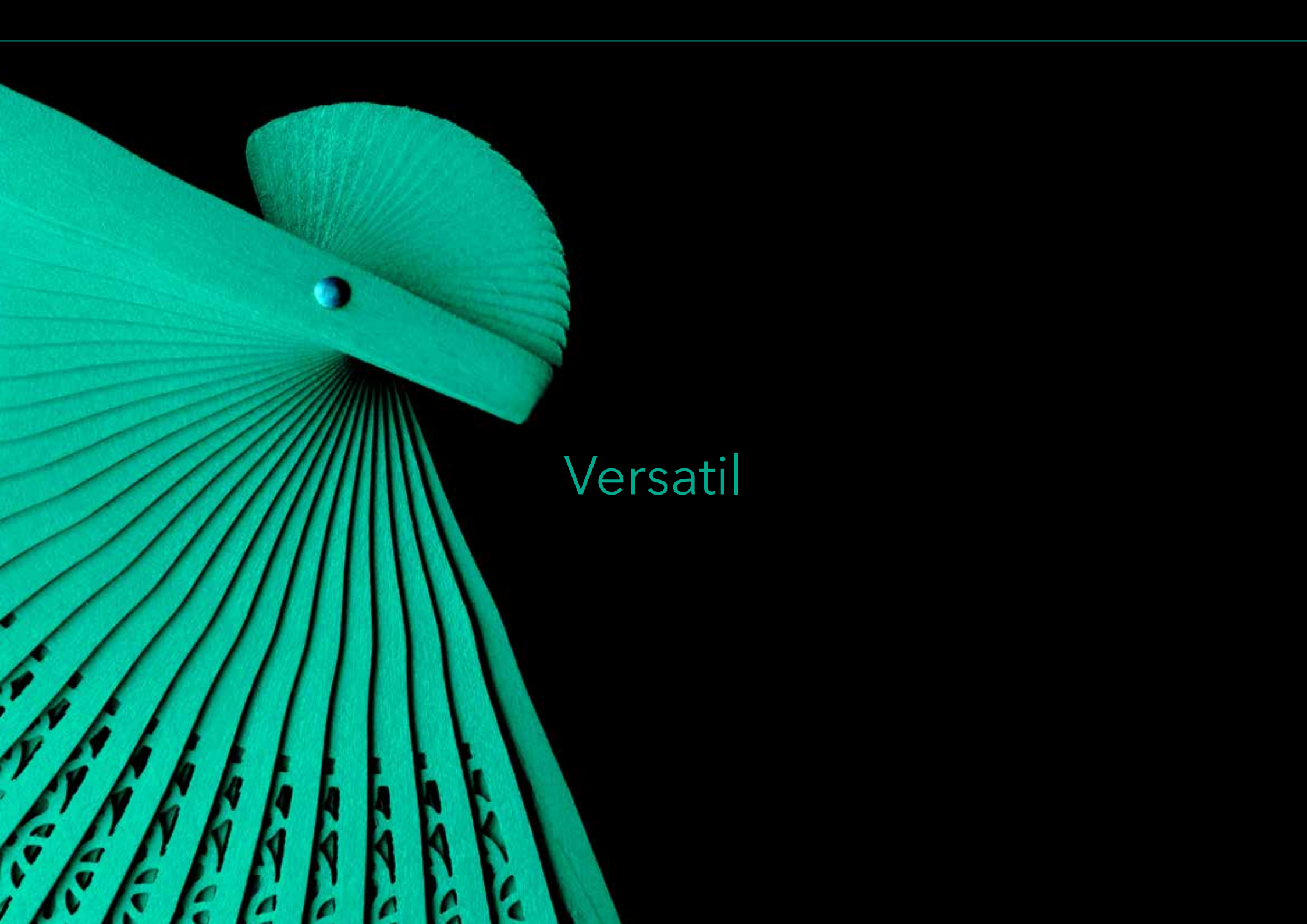

Versatil

# Un singur sistem...



... pentru toate realizările integral ceramice din Zr și LDS



... pentru micro-stratificare și tehnici de colorare



... pentru restaurări anterioare și posterioare





## GC Initial IQ ONE SQIN SYSTEM SET

- 10x SPS Stain (SPS-1 / 2 / 7 / 8 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20), 3 g
- 1x SPS Glaze Fluo (GL-FLUO), 10 g
- 1x SPS Glaze Liquid, 25 ml
- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 6x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-3 / 6 / 8 / 9 / 10 / OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refresh Liquid, 8 ml
- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1x IQ LP ONE Mixing Dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Plastic Cover
- 1x IQ ONE SQIN Technical Manual
- 1x IQ LP ONE Colour Chart
- 1x SPS Colour Chart



## GC Initial IQ SQIN SHADES SET

- 5x IQ SQIN Powder Dentin (Body A / B / C / D / BL-D), 10 g
- 5x IQ SQIN Powder Enamel (E-57 / 58 / 59 / 60 / BL-E), 10 g
- 1x IQ SQIN Powder Translucent Opal Booster (TO), 10 g
- 3x IQ SQIN Powder GUM (light, dark, neutral), 10 g
- 1x IQ SQIN Form & Texture Liquid, 25 ml
- 1x IQ SQIN Technical Manual



## GC Initial IQ Lustre Pastes ONE V-SHADES SET

- 2x IQ LP ONE Lustre Paste Neutral (L-N / L-NFL), 4 g
- 4x IQ LP ONE Lustre Body Shade (L-A / B / C / D), 4 g
- 10x IQ LP ONE Enamel Effect Shade (L-1 / L-2 / L-3 / L-4 / L-5 / L-6 / L-7 / L-8 / L-9 / L-10), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Opal (L-OP), 4 g
- 1x IQ LP ONE Enamel Effect Value (L-V), 4 g
- 1x IQ LP ONE/NF Diluting Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE/NF Refreshing Liquid, 8 ml
- 1x IQ LP ONE Mixing dish
- 1x IQ LP ONE Brush 00
- 1x IQ LP ONE Brush 2
- 1x IQ LP ONE Colour Chart

**ONE SQIN System Set** conține o selecție de componente ceramice importante pentru a obține ușor rezultate de o estetică ridicată, comparabile cu cele stratificate convențional, dar cu economie semnificativă de timp.

# Tehnica ONE SQIN - pentru toate restaurările din zirconiu și disilicat de litiu

- ✓ Crearea detaliilor de formă și textură fină în stadiul umed - Nu există modificări după ardere.
- ✓ Proprietăți de auto-glazurare - Obținerea unei suprafețe perfect glazurate într-o singură ardere.
- ✓ Nivel optim de fluorescență - Asigură aspectul natural al dinților în toate condițiile de iluminare.
- ✓ Maximum de estetică într-un singur micro-strat.



Foto prin amabilitatea:

ZTM Michael Brüsck (Germania): p7 (imagini din mijloc și din dreapta); p9 (imagini din mijloc dreapta și din dreapta jos); p13

(imagini din partea stângă din mijloc stânga, dreapta sus și partea dreapta din dreapta jos)

MDT Leonardo Cavallo (Italia): p7 (imaginea din stânga); p9 (imagine stânga în partea de sus)

MDT Patric Freudenthal (Suedia): p13 (imagine partea dreapta din mijloc stânga)

ZTM Stefan Roozen (Austria): p6 și p10; p13 (imagine partea stângă din partea dreaptă jos)



*initial*<sup>TM</sup> IQ ONE SQIN

**GC EUROPE N.V.**

Head Office  
Researchpark,  
Haasrode-Leuven 1240  
Interleuvenlaan 33, B-3001 Leuven  
Tel. +32 16 74 10 00  
Fax.+32 16 40 48 32  
info.gce@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe>

**GC EUROPE N.V.**

GCEEO Romania  
Str. Carol Davila 21A,  
etaj 2, ap.17, sector 5  
RO - 050451 București  
Tel: +40.31.425.75.27  
info.romania@gc.dental  
<https://www.gc.dental/europe/ro-RO>